


Dimaxis Pro/Classic

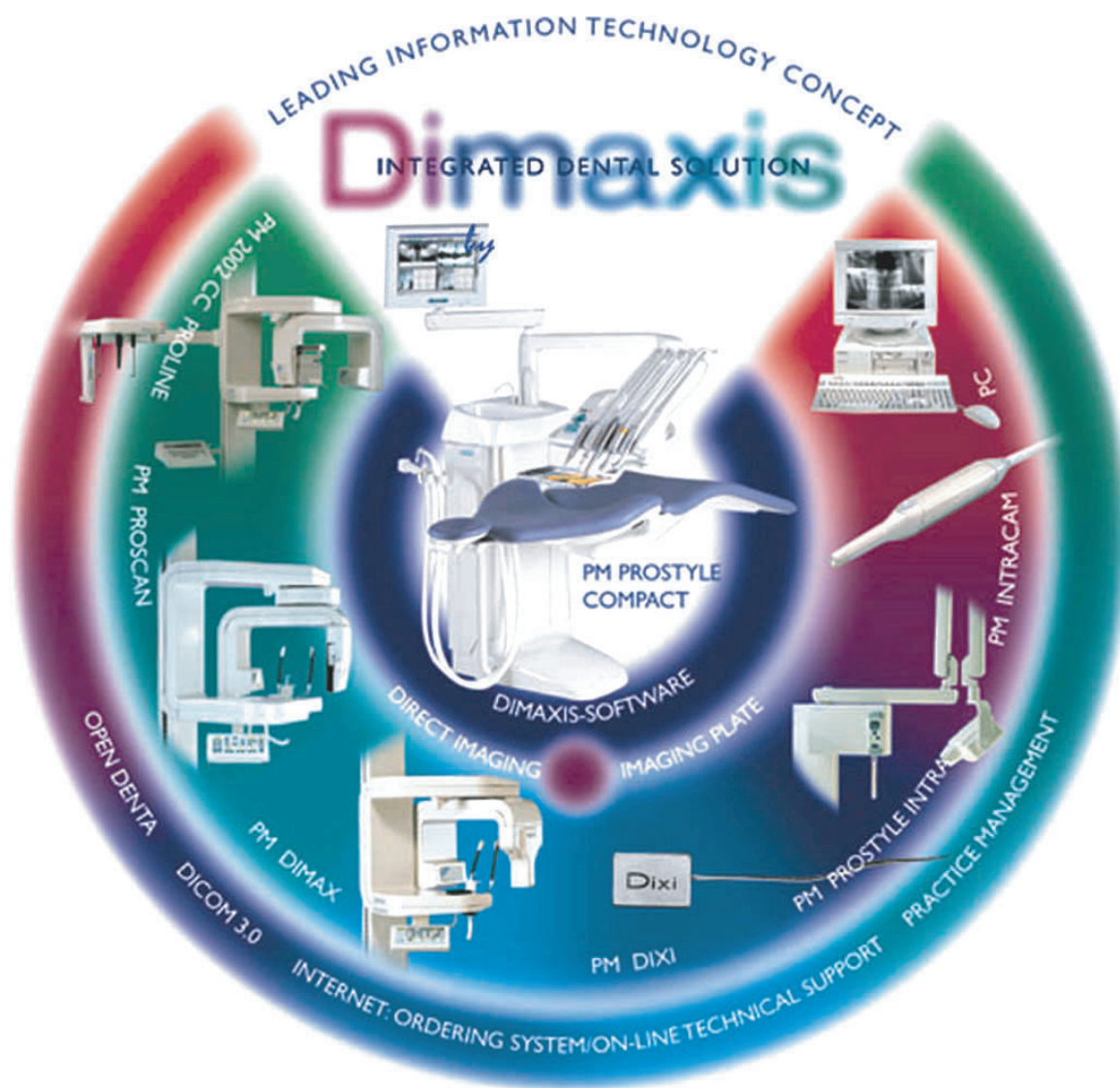

MANUEL D'UTILISATION

Numéro de publication 10009371 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Version 5

Publiée 2006-01

Fr ☐

1	INTRODUCTION	1
1.1	Brève introduction à l'imagerie numérique	1
1.2	Sauvegarde des données d'image	2
1.3	Saisie	3
1.4	Paramètres	3
1.5	Archivage	3
1.6	Archivage à long terme	4
1.7	Modèles d'examens (Optionnel aux Etats-Unis uniquement)	5
1.8	Traitement	5
1.9	Mesures	5
1.10	Annotation	6
1.11	DICOM	6
1.12	VDDS	6
1.13	Impression	6
1.14	Format de date	6
1.15	Clause de non-responsabilité	6
1.16	Licence Dimaxis	6
2	DÉMARRAGE	7
2.1	Connexion	7
2.2	Sélection du patient	7
3	BARRES D'OUTILS	12
3.1	Barre d'outils alors qu'aucun patient n'est sélectionné	12
3.2	Barre d'outils alors qu'aucune image n'est ouverte pour le patient sélectionné	12
3.3	Barres d'outils alors qu'une ou plusieurs images sont ouvertes pour le patient sélectionné	13
4	RECHERCHE ET AFFICHAGE D'IMAGES	16
4.1	Sélection d'un patient	16
4.2	Sélection d'une image	17
4.2.1	Sélectionner l'image/onglet Examen (Optionnel aux Etats-Unis uniquement)	19
4.2.2	Sélectionner l'image/onglet Panoramique	33
4.2.3	Sélectionner l'image/onglet Céphalométrique	34
4.2.4	Sélectionner l'image/onglet Intrabuccal	35
4.2.5	Sélectionner l'image/onglet Intracam	36
4.3	Sélection selon schéma dentaire	37
4.4	Navigateur	38
5	PRISE D'UN CLICHÉ	40
5.1	Prise d'un cliché céphalométrique	40
5.2	Prise d'un cliché panoramique	46
5.3	Prise d'un image intrabuccale	51
5.4	Saisie d'images Intracam	56
5.5	Saisie d'images Endocam	58
5.6	Interface TWAIN	60
5.7	Scanner d'image radiographique (CR) (version Pro uniquement)	62
6	IMPRESSION DES IMAGES	68
6.1	Impression d'images individuelles	68
6.2	Impression de plusieurs images (sur la même page)	69
6.3	Impression d'images radiographiques	69
6.4	Impression d'images Intracam	70
6.5	Imprimer tout (version Pro uniquement)	71

7	DICOM	72
7.1	Impression DICOM (version Pro uniquement)	72
7.2	Stockage DICOM (version Pro uniquement)	74
7.3	Menu déroulant DICOM (aucune image ouverte) (version Pro uniquement)	76
7.3.1	Lecture d'un support DICOM (version Pro uniquement)	77
7.3.2	Importation d'un fichier image DICOM (version Pro uniquement)	77
7.3.3	Modalité Liste de travail (version Pro uniquement)	77
7.3.4	Liste de travail du jour (version Pro uniquement)	78
7.3.5	Archivage à long terme DICOM (version Pro uniquement)	79
7.3.6	Demande/récupération (version Pro uniquement)	80
7.4	Menu déroulant DICOM (une ou plusieurs images ouvertes) (version Pro uniquement)	83
7.4.1	Stockage DICOM (version Pro uniquement)	83
7.4.2	Impression DICOM (version Pro uniquement)	83
7.4.3	DICOM Imprimer tout (version Pro uniquement)	83
7.4.4	Stockage sur support DICOM (version Pro uniquement)	84
8	MENUS DÉROULANTS	85
8.1	Menu déroulant Patient	85
8.2	Menu déroulant Image (aucune images ouverte)	90
8.3	Menu déroulant Saisie	94
8.4	Menu déroulant Examen	94
8.5	Menu déroulant Administration	94
8.6	Menu déroulant Affichage	96
8.7	Menu déroulant Aide	96
8.8	Menu déroulant Image (une ou plusieurs images ouvertes)	97
8.9	Menu déroulant Editer	103
8.10	Menu déroulant Affichage	104
8.10.1	Barre d'outils supérieure	104
8.10.2	Barre d'outils à droite	104
8.10.3	Barre d'outils de mesure	105
8.10.4	Barre d'outils de traitement de l'image	110
8.10.5	Barre d'outils d'affichage	113
8.10.6	Barre d'outils d'orientation	116
8.10.7	Mode Zoom avant	116
8.10.8	Agrandissement	116
8.10.9	Mode Zoom arrière	116
8.10.10	Réduction	116
8.10.11	Zoom à 100%	117
8.10.12	Paramètres d'image	117
8.11	Menu déroulant Dessin	117
8.12	Menu déroulant Mesure	119
8.13	Menu déroulant Traitement	120
8.14	Menu déroulant Fenêtre	125
9	PARAMÈTRES	127
9.1	Paramètres généraux	128
9.1.1	Patient	128
9.1.2	Image	130
9.1.3	Fenêtre	132
9.1.4	Image panoramique	133
9.1.5	Céphalométrie	134
9.1.6	Intrabuccal	135

9.1.7	Examen (Optionnel aux Etats-Unis uniquement)	136
9.2	Paramètres généraux et utilisateur	137
9.2.1	Imprimante	137
9.2.2	Utilisateur	139
9.2.3	Intrabuccal	140
9.2.4	Intra/Endocam	141
9.2.5	Scanner RC (CR) (version Pro uniquement)	145
9.2.6	Répertoires	146
9.2.7	Icônes (version Pro uniquement)	148
9.2.8	Exporter	149
9.2.9	TWAIN	150
9.2.10	Soustraire	151
9.3	Paramètres DICOM (version Pro uniquement)	152
9.3.1	Applications	152
9.3.2	Dispositifs	155
9.3.3	Informations de contact	156
10	DÉPLACEMENT D'IMAGES VERS L'ARCHIVE À LONG TERME	157
11	MODÈLES D'EXAMENS (Optionnel aux Etats-Unis uniquement)	161
11.1	Création/Édition de modèles d'examens	161
11.1.1	Ajout de miniatures des images	163
11.1.2	Suppression des miniatures des images	165
11.1.3	Alignement d'images	165
11.1.4	Modification de la description	166
11.1.5	Sélection de l'ordre de prise des clichés	166
11.1.6	Sélection de séries d'images DICOM	166
11.1.7	Modification de l'ordre d'envoi DICOM	168
11.1.8	Modification des paramètres des miniatures d'images	169
11.2	Suppression d'un modèle d'examen	171

Le fabricant, l'assembleur et l'importateur sont responsables de la sécurité, de la fiabilité et des performances de l'appareil uniquement si:

- l'installation, le calibrage, la modification et les réparations ont été effectuées par des membres du personnel qualifiés et agréés;
- les installations électriques sont conformes aux exigences correspondantes, notamment à la norme CEI364;
- cet équipement est utilisé conformément à son mode d'emploi.

Planmeca adopte une politique de développement permanent de ses produits. Bien qu'il consente un maximum d'efforts pour fournir une documentation à jour relative à ses produits, cette publication ne doit pas être considérée comme un guide infaillible tenant compte des spécifications actuelles. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans notification préalable.

COPYRIGHT PLANMECA 2006-01
NUMÉRO DE PUBLICATION 10009371 Version 5

Original English language publication:
 Dimaxis Pro/Classic - User's Manual
 Publication part number 10006120 Revision 8

1 INTRODUCTION

Ce manuel décrit l'utilisation des logiciels d'imagerie Planmeca Dimaxis Pro et Dimaxis Classic, qui ont été développés en vue d'être utilisés avec les appareils d'imagerie numérique Planmeca et la caméra vidéo intraorale Intracam. Certaines fonctions ne sont disponibles qu'avec la version Dimaxis Pro. Prière de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le système.

REMARQUE *Il existe pour les appareils de radiographie numérique et la caméra Intracam des manuels distincts, lesquels doivent être utilisés conjointement avec le présent manuel.*

REMARQUE *Ce manuel est valable avec les versions suivantes du logiciel:*

Planmeca Dimaxis Pro/Classic 4.1.0

Logiciel Planmeca Proline version PK 5.08 / PG 5.08 ou ultérieure (version 5.13 ou ultérieure recommandée)

Logiciel ProMax version 1.05 ou ultérieure (version 1.19.1 ou ultérieure recommandée)

Logiciel Planmeca Intra version 1.20 ou ultérieure (version 3.03 ou ultérieure requise pour pouvoir utiliser le panneau de commande Intra control du logiciel Dimaxis).

REMARQUE *Le logiciel Dimaxis Pro/Classic est compatible avec les systèmes d'exploitation Microsoft Windows XP, Windows 2003 Server ou Windows 2000. Il est important de connaître les bases de Windows avant d'utiliser le logiciel Dimaxis Pro/Classic.*



Le logiciel d'imagerie Dimaxis Pro/Classic répond aux exigences de la directive 93/42/CEE.

Dimaxis Pro/Classic est un logiciel de traitement et d'archivage d'images. Outre le fait qu'il offre la possibilité d'afficher, de manipuler et d'archiver des images, ce programme peut également être utilisé pour la saisie d'images au moyen de tous les appareils d'imagerie numérique Planmeca présents ou futurs. Dimaxis Pro/Classic prend en charge toutes les fonctions de base nécessaires à l'affichage, à la manipulation et à l'impression d'images et il est entièrement compatible avec le partage par plusieurs utilisateurs d'une archive d'images commune pouvant être installée sur un serveur réseau.

Une attention toute particulière a été consacrée à rendre le fonctionnement du système Dimaxis Pro/Classic aussi simple que possible. Il faut toutefois se rendre compte qu'aucun système informatique ne peut fonctionner en permanence et sans problème sans un support logiciel et matériel compétent. En particulier dans le cadre d'applications vitales pour l'exercice professionnel comme l'archivage des images provenant des patients, il est indispensable, avant de commencer à utiliser le système, de prendre les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement continu de celui-ci. Ces mesures comprennent notamment le fait de s'assurer de la disponibilité d'un support logiciel et matériel, l'organisation d'un service d'assistance téléphonique et de la formation des utilisateurs et la mise au point d'un système de sauvegarde des données concernant les patients. Il est conseillé de confier cette tâche à un service d'intégration de systèmes compétent.

1.1 Brève introduction à l'imagerie numérique

L'imagerie numérique se distingue de l'imagerie traditionnelle utilisant des films par deux aspects:

Tout d'abord, les images numériques sont constituées d'une multitude de petits points appelés pixels, un peu à la manière des photos imprimées dans un journal. La taille de chaque pixel impose une limite supérieure absolue à ce que l'on peut voir sur l'image. Se reporter au tableau ci-dessous pour la taille des pixels et la résolution maximale théorique correspondante. On notera que, en raison de l'agrandissement inhérent à toutes les techniques de radiographie par projection, la résolution théorique au niveau de l'objet est légèrement supérieure.

Appareil Résolution de	Taille des pixels	Résolution du capteur	
l'image			
DIMAX2/3 en mode résolution normale pl/mm (5,5*)	132 µm	3,8 pl/mm	4,5
DIMAX2/3 en mode résolution optimale pl/mm (7,3*)	99 µm	5,0 pl/mm	6,0
DIMAX2/3 en mode haute résolution (pan) pl/mm (11,0*)	66 µm	7,6 pl/mm	9,0
*En mode découpage transversal			
DIXI2/3 en mode résolution normale pl/mm	38 µm	13,2 pl/mm	13,2
DIXI2/3 en mode haute résolution pl/mm	19 µm	26,3 pl/mm	26,3

Ensuite, chaque pixel est représenté par une valeur numérique dans la mémoire de l'ordinateur. En raison du caractère numérique (non physique) de l'image, la luminosité et le contraste de celle-ci peuvent être modifiés et il est possible d'effectuer diverses opérations d'optimisation de l'image qui ne sont normalement pas réalisables avec des images sur film. Il s'agit de l'un des principaux avantages de l'imagerie numérique, mais cela implique également de comprendre et de garder à l'esprit cette propriété lors de l'utilisation d'images manipulées à des fins diagnostiques. Le caractère numérique de l'image repousse également la limite de détectabilité des différences de contraste (différences de transparence de l'image radiographique) sur les images numériques. Cette résolution de contraste s'exprime en termes de nombre de bits utilisés pour la saisie et le stockage de l'image ou de nombre de niveaux de gris que le système est capable d'enregistrer. Se reporter au tableau ci-dessous pour les valeurs des équipements Planmeca:

Appareil	Nombre de bits	Niveaux de gris
DIMAX (tous les modes)	12	4096

On notera que, même si la majorité des écrans d'ordinateur ne permettent d'afficher qu'un maximum de 256 niveaux de gris (8 bits) et bien qu'il ait été démontré que l'œil humain a du mal à différencier des différences de contraste de l'ordre de 1/32 - 1/64 (5/6 bits), l'œil humain s'adapte automatiquement aux conditions d'éclairage et cette caractéristique, associée à une utilisation judicieuse du bac à lumière, permet de détecter des variations de contraste plus ténues au niveau du film. Il est par conséquent nécessaire de saisir et d'enregistrer les images avec une résolution de contraste supérieure à 256 niveaux de gris (8 bits). Une plus grande latitude en matière de contraste permet également de faire varier davantage les paramètres d'exposition (kV/mA).

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LA SÉCURITÉ!

Le traitement de l'image peut altérer de manière importante la visibilité des structures de grande ou de petite dimension (par exemple perte osseuse et caries), ce qui risque d'aboutir, si l'on ne s'y montre pas suffisamment attentif, à un nombre excessif d'observations faussement positives ou faussement négatives.

1.2 Sauvegarde des données d'image

Le logiciel Dimaxis utilise le logiciel de gestion de base de données Solid Flow Engine pour stocker les informations concernant les images. La base de données Solid Flow Engine dispose d'une fonction de sauvegarde qui effectue une copie de sauvegarde de la base de données active. Le moment et la fréquence de réalisation de cette copie de sauvegarde doivent être configurés depuis le programme de commande à distance PM. Cette fonction de sauvegarde effectue chaque copie de sauvegarde au même emplacement spécifié et remplace (par recouvrement) la sauvegarde précédente. C'est la raison pour laquelle l'utilisateur final est responsable de la réalisation de copies

de sécurité supplémentaires au départ du répertoire de sauvegarde de la base de données Solid Flow Engine afin de garantir la sécurité de ses données. Il est conseillé à l'utilisateur de conserver au minimum des sauvegardes quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles, rangées en lieu sûr, afin de garantir la sécurité des données. On notera que Planmeca décline toute responsabilité en ce qui concerne la sécurité des données des utilisateurs finaux, ainsi que pour tout dysfonctionnement du système informatique entraînant une perte de données.

1.3 Saisie

Le système est conçu pour automatiser la saisie d'images avec un minimum d'intervention de l'utilisateur. Dès le moment où l'utilisateur a sélectionné le patient voulu dans le logiciel Dimaxis, la saisie (prise d'un cliché) et l'archivage de l'image se déroulent exactement de la même manière qu'avec un système d'imagerie conventionnel utilisant des films, si ce n'est que l'archivage est entièrement automatisé et que l'étape de développement du film n'est plus nécessaire. La technique d'exposition utilisée pour la prise du cliché est automatiquement enregistrée en même temps que l'image.

1.4 Paramètres

Dimaxis propose différents paramètres parmi lesquels l'utilisateur peut faire son choix. On peut définir une série de paramètres et d'autres options permettant de contrôler les principales procédures. Les paramètres par défaut ont été sélectionnés pour un environnement Dimaxis classique. En cas de besoin, on peut aisément les modifier en sélectionnant l'une des commandes **Paramètres généraux**, **Paramètres locaux** ou **Paramètres DICOM** dans le menu déroulant **Administration**. Pour connaître les paramètres disponibles, se reporter au chapitre 9 "PARAMÈTRES" à la page 127.

Dans les premières versions du logiciel Dimaxis, tous les paramètres étaient enregistrés sur un poste de travail local. Depuis la version 2.4.1 de Dimaxis, les paramètres sont enregistrés dans la base de données. La plupart des paramètres sont communs à tous les postes de travail et à tous les utilisateurs. Se reporter à la section 9 "PARAMÈTRES" à la page 127 pour plus d'informations.

1.5 Archivage

L'archivage d'images dans Dimaxis est organisé par nom de patient. Les données d'image, la technique d'exposition et les données de base concernant le patient sont enregistrées dans une base de données. Plusieurs utilisateurs peuvent enregistrer et récupérer simultanément des images (différentes) dans la base de données (le prix de base du système comprend une licence utilisateur n'autorisant qu'un seul utilisateur à la fois; contacter son revendeur pour une offre de prix pour l'ajout d'utilisateurs supplémentaires).

Espace disque nécessaire

Le tableau ci-dessous indique l'espace disque approximatif nécessaire pour différents formats d'image:

Format	Sans compression	Avec compression JPEG ¹
DIMAX résolution normale	4,1 Mo	1,7 Mo
DIMAX résolution optimale ²	7,4 Mo	3 Mo

1. Les valeurs réelles varient selon les images.

2. En raison de l'importance de l'espace disque nécessaire et de la dose d'irradiation supplémentaire requise pour obtenir le même (faible) niveau de bruit (marbrures), l'utilisateur doit évaluer soigneusement les avantages de l'utilisation des modes résolution optimale/haute résolution.

DIMAX2/3 résolution normale, mode panoramique	5,0 Mo	0,8 Mo
DIMAX2/3 résolution normale, mode céphalométrique	7,0 Mo	0,95 Mo
DIMAX2/3 résolution optimale ² , mode panoramique	8,9 Mo	1,1 Mo
DIMAX2/3 résolution optimale ² , mode céphalométrique	12,5 Mo	1,9 Mo
DIMAX2/3 haute résolution ² , mode panoramique	20 Mo	2,2 Mo
Dixi A0	200 Ko	50 Ko
Dixi A1	430 Ko	100 Ko
Dixi A2	560 Ko	140 Ko
Dixi2/3 B0 résolution normale	560 Ko	180 Ko
Dixi2/3 B1 résolution normale	940 Ko	310 Ko
Dixi2/3 B2 résolution normale	1,3 Mo	430 Ko
Dixi2 B0 haute résolution ²	2,2 Mo	720 Ko
Dixi2/3 B1 haute résolution ²	3,8 Mo	1,2 Mo
Dixi2/3 B2 haute résolution ²	5,2 Mo	1,7 Mo

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LA SÉCURITÉ!

La conversion JPEG est une compression dite avec perte de données, c'est-à-dire que son utilisation peut entraîner la perte de certains détails de l'image et qu'il n'est pas possible de garantir que la valeur diagnostique de l'image compressée sera équivalente à celle de l'image originale. Bien que plusieurs études (voir notamment IADNFR/CMI 97 *Advances in Maxillofacial Imaging: The loss of image quality in panoramic radiography using image compression*, C.G.H Sanderink et al.) indiquent que la perte de données pourrait être négligeable, Planmeca ne peut pas garantir qu'il est parfaitement sûr d'utiliser des données provenant d'image compressées à des fins diagnostiques.

1.6 Archivage à long terme

A mesure que l'on saisit et archive un nombre croissant d'images, l'archive se remplit progressivement jusqu'à atteindre sa capacité maximale, après quoi il n'est plus possible d'enregistrer des images supplémentaires. Cependant, au sein d'un cabinet dentaire, la plupart des images ont un cycle de vie au cours duquel, après une période initiale d'utilisation fréquente, l'image n'est plus qu'exceptionnellement consultée (déménagement du patient, etc.). Par conséquent, la majorité des images contenues dans une archive de grande taille ne sont pas réellement utilisées et représentent une perte d'espace. Mais, dans la mesure où elles représentent des données diagnostiques précieuses, on ne peut pas supprimer ces images, car il est possible que l'on ait besoin de s'y référer ultérieurement. En outre, dans de nombreux pays, il existe des lois régissant le stockage d'images. C'est pourquoi le logiciel Dimaxis offre la possibilité de transférer les images qui n'ont pas été consultées depuis un certain temps vers un système de stockage secondaire, par exemple un disque amovible. Pour cela, il est conseillé d'équiper le système d'un lecteur DVD car ce type de lecteur offre une grande capacité de stockage avec un faible rapport coût/capacité. Le même dispositif peut également servir à la sauvegarde de l'archive, voir la remarque ci-dessous.

Certaines images d'un patient peuvent se trouver dans l'archive à long terme alors que d'autres sont dans la base de données active. On peut prendre de nouvelles images même lorsque certaines des images se trouvent dans l'archive à long terme. On peut restaurer les images une à une. (Avec les versions du logiciel Dimaxis antérieures à la version 4.0.0, toutes les images devaient se trouver soit dans l'archive à long terme soit dans la base de données active.)

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LA SÉCURITÉ!

On notera que l'archive d'image contient des données précieuses et confidentielles concernant les patients. La perte de ces données est susceptible de compromettre la sécurité des patients dans la mesure où les images devront éventuellement être prises à nouveau, ce qui exposerait le patient à une dose de radiations inutile. Pour réduire le risque de perte de données, le système d'archivage maintient un journal de bord dans lequel toutes les données (d'images) sont copiées lors de leur enregistrement dans l'archive. Ce double stockage offre la garantie que, en cas de défaillance (logicielle ou matérielle) de l'archive, celle-ci pourra être restaurée avec une perte minimale de données de valeur concernant les patients. En outre, des sauvegarde régulières de l'archive d'images doivent être organisées par une personne compétente. Pour un maximum de sécurité, il est conseillé d'utiliser pour l'archivage des systèmes de type RAID. Pour la sauvegarde de l'archive, se reporter aux manuels Solid Flow Engine.

1.7 Modèles d'examens (Optionnel aux Etats-Unis uniquement)

Un examen est une série d'images liées entre elles provenant du même patient. Un examen est toujours basé sur un modèle d'examen. Outre la définition de la position des images au sein de l'examen, le modèle contient également des informations sur le mode de saisie des images: ordre de prise des clichés, position d'impression des images, orientation du capteur intraoral dans la bouche du patient, dents à radiographier sur une image donnée. Cette fonction permet par exemple de prendre une série de clichés correspondant à un bilan complet de l'ensemble de la bouche avec un minimum d'interaction entre l'ordinateur et l'utilisateur: lorsqu'il a sélectionné le modèle voulu, il suffit à l'utilisateur de suivre ce modèle pour prendre tous les clichés de la série sans plus devoir toucher ni au clavier, ni à la souris, tout en enregistrant automatiquement, pour chaque image, son orientation et son contenu.

Brevet américain n° 5.179.579

1.8 Traitement

On notera que certaines opérations de traitement d'image modifient radicalement l'aspect de l'image et peuvent, par conséquent, en altérer la valeur diagnostique. Il est cependant toujours possible de restaurer l'image dans son état original ou d'annuler les modifications une à une.

1.9 Mesures

Les outils de mesure permettent d'effectuer à la fois des mesures géométriques et des mesures d'intensité relative (par exemple de radiotransparence ou de luminosité/contraste).

Lors de la réalisation de mesures géométriques, on notera que les opérations de traitement d'image (même s'il ne s'agit que d'un réglage de la luminosité/du contraste) peuvent modifier la géométrie apparente des objets au sein de l'image. Par ailleurs, en raison des distorsions (en particulier lorsque l'on fait varier l'agrandissement) habituellement associées à l'imagerie radiographique normale par projection, les mesures doivent être basées sur des objets de référence connus au sein de l'image. Un outil d'étalonnage est prévu à cet effet dans le logiciel Dimaxis.

Lorsque l'on effectue des mesures d'intensité, il faut garder en mémoire que, suite à certaines opérations de traitement d'image, les intensités relatives des objets sont susceptibles d'être affectées par les objets voisins, ce qui peut compromettre, par exemple, la fiabilité des mesures de densité osseuse effectuée à l'aide d'un coin sensitométrique d'étalonnage. Les seules opérations de traitement d'image dont il est garanti qu'elles NE MODIFIENT PAS les intensités relatives, de telle sorte que les mesures sont indépendantes de la position de mesure, sont les opérations de réglage de la luminosité/du contraste et du niveau. Aucune garantie ne peut être accordée en ce qui concerne des mesures d'intensités en provenance de deux images différentes.

1.10 Annotation

Les images peuvent être annotées au moyen de repères et de texte. Ces annotations apparaissent en superposition sur l'image et peuvent donc être affichées ou masquées à volonté, elles ne modifient pas l'image proprement dite. Outre les annotations, le logiciel Dimaxis offre à l'utilisateur la possibilité de dactylographier et d'enregistrer un bref commentaire (diagnostic) avec chaque image.

1.11 DICOM

La compatibilité DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) a été implémentée dans le logiciel Dimaxis au moyen de l'ensemble d'outils MergeCom-3 de Merge Technologies Inc. Il est nécessaire d'acquérir une licence distincte pour activer les fonctions DICOM. Les fonctionnalités DICOM Storage Service Class SCU, DICOM Print SCU, DICOM Modality Worklist SCU, DICOM Query/Retrieve SCU, DICOM Storage Commitment et DICOM Media Storage ont été implémentées dans le logiciel Dimaxis.

Pour plus de détails sur la compatibilité DICOM, se reporter à la Déclaration de conformité DICOM de Planmeca.

1.12 VDDS

La passerelle VDDS Bridge permet l'intégration avec la plupart des logiciels de gestion de clientèle allemands. L'application d'interface VDDS Bridge est disponible sur les CD d'installation Planmeca Dimaxis Pro.

1.13 Impression

Dimaxis prend en charge l'impression sur n'importe quelle imprimante standard compatible Windows. Se reporter au chapitre 9.2.1 "Imprimante" à la page 137 pour plus d'information sur l'impression avec le système d'exploitation Microsoft Windows ME.

Il est également possible de réaliser l'impression sur une imprimante compatible DICOM. Il faut toutefois pour cela disposer d'une licence DICOM distincte. Pour plus de détails sur la compatibilité DICOM, se reporter à la Déclaration de conformité DICOM de Planmeca.

1.14 Format de date

Dimaxis utilise pour les dates le format d'affichage de l'écran Paramètres régionaux qui a été défini par l'intermédiaire du Panneau de configuration.

1.15 Clause de non-responsabilité

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LA SÉCURITÉ!

On notera que Planmeca décline toute responsabilité en ce qui concerne la sécurité des données des utilisateurs finaux, ainsi que pour tout dysfonctionnement du système informatique entraînant une perte de données.

Comme le traitement de l'image peut altérer de manière importante la visibilité des structures de grande ou de petite dimension (par exemple perte osseuse et caries), ce qui risque d'aboutir à un nombre excessif d'observations faussement positives ou faussement négatives, Planmeca rejette toute responsabilité en ce qui concerne l'utilisation du logiciel, les actes ou les diagnostics posés par l'utilisateur.

1.16 Licence Dimaxis


Depuis la version 3.1.0, Dimaxis Pro nécessite une licence. Si cette licence n'est pas installée, Dimaxis fonctionne en mode Démo. Voir le manuel d'installation Dimaxis pour plus de détails.

Si la licence n'inclut pas certaines fonctions comme la compatibilité DICOM, la soustraction ou le scanner d'image radiographique (CR), les icônes correspondantes n'apparaissent pas dans la barre d'outils.


2 DÉMARRAGE

2.1 Connexion

Pour démarrer le logiciel Dimaxis, cliquer deux fois sur l'icône *Dimaxis* ou sélectionner Dimaxis dans le menu Démarrer/Programme.

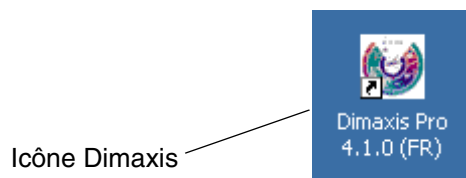


Introduire son nom d'utilisateur et son mot de passe pour accéder à la base de données, puis cliquer sur *OK*.

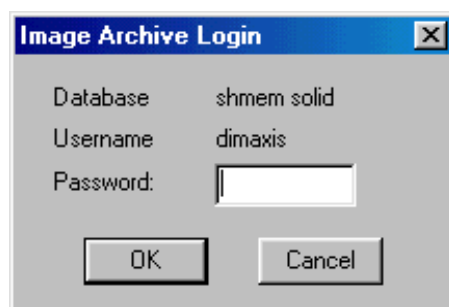

REMARQUE Le mot de passe est "dixi", sauf si ce mot de passe a été modifié par l'administrateur du système.

2.2 Sélection du patient

On peut soit sélectionner un patient existant, soit ajouter un nouveau patient dans le système.

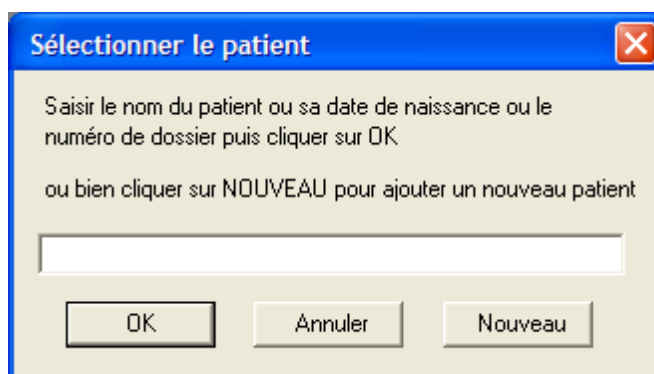

Il est possible de rechercher rapidement un patient en utilisant un raccourci d'identification patient comprenant l'initiale du nom du patient suivie des quatre derniers chiffres de son code d'identification ou de son numéro de sécurité sociale (par exemple "R1234"). Se reporter à la section 9.1.1 "Patient" à la page 128 pour plus d'informations.


Pour ajouter les informations concernant un nouveau patient, cliquer sur le bouton *Nouveau* dans la fenêtre **Sélectionner le patient** ou sélectionner la commande **Nouveau** dans le menu déroulant **Patient**. La fenêtre **Nouveau patient** s'affiche. Introduire les informations demandées dans les champs correspondants et cliquer sur *OK*.

Si l'on a activé la numérotation automatique des patients et qu'on laisse le champ Numéro du patient vierge, Dimaxis attribue automatiquement le prochain numéro de patient disponible au nouveau patient. L'enregistrement de la date de naissance du patient, la vérification de son numéro de sécurité sociale et l'activation de la numérotation automatique des patients sont décrits à la section 9.1.1 "Patient" à la page 128.

Sélectionner l'option *Patiente enceinte* si la patiente était enceinte lors de la prise du cliché. Cette information est enregistrée pour chaque image et est affichée dans les boîtes de dialogue d'exposition et dans le Journal des radiographies.

La fenêtre **Nouveau patient** propose une liste de sélection du dentiste, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de taper à chaque fois le nom du dentiste. Cette liste de sélection reprend tous les noms précédemment enregistrés.

Il est également possible d'indiquer des commentaires dans le champ *Commentaires*.

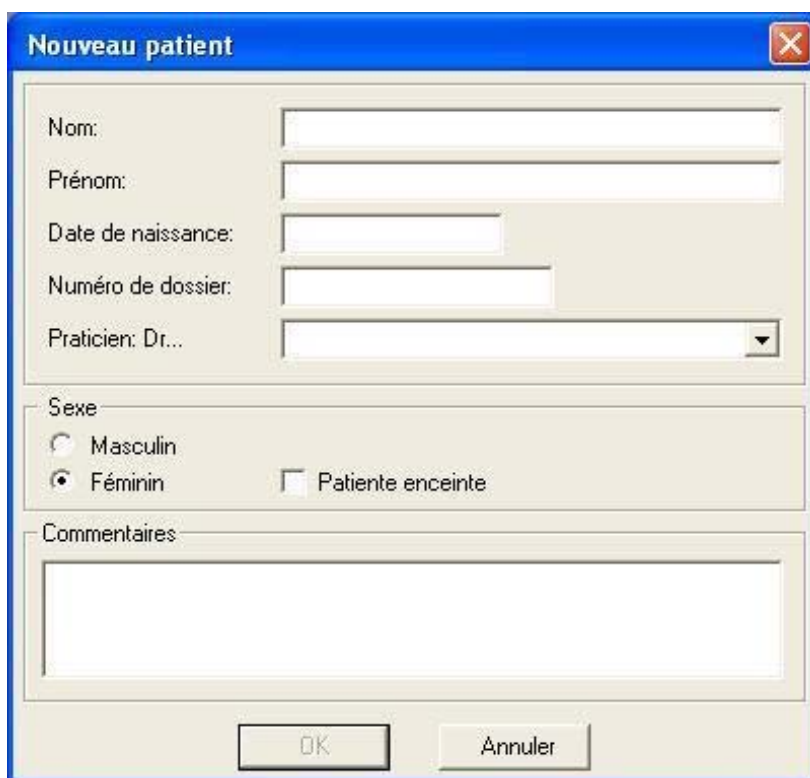


The image shows a Windows-style dialog box titled "Nouveau patient". It has a blue title bar with a close button (X) in the top right corner. The main area is light gray and contains several input fields and controls. At the top, there are five rows of labels and input fields: "Nom:" followed by a text box, "Prénom:" followed by a text box, "Date de naissance:" followed by a date picker, "Numéro de dossier:" followed by a text box, and "Praticien: Dr..." followed by a dropdown menu. Below these, there is a section for "Sexe" with two radio buttons: "Masculin" and "Féminin", where "Féminin" is selected. To the right of the "Féminin" radio button is a checkbox labeled "Patiente enceinte". At the bottom of the dialog is a large text area labeled "Commentaires". Below the text area are two buttons: "OK" and "Annuler".


REMARQUE La licence *Démo* ne permet pas l'ajout de nouveaux patients.

Dimaxis contrôle que le code d'identification du patient ne contient pas les caractères non autorisés / , \ , * , ? , " , < , > , | , ' (voir fenêtre ci-dessous).

L'utilisation de ces caractères empêcherait l'archivage à long terme et le recours à la fonction *Exporter tout*.

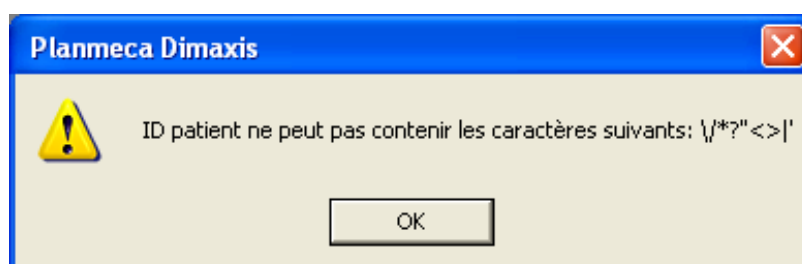


Si le patient a été correctement introduit dans la base de données, le message ci-dessous s'affiche.

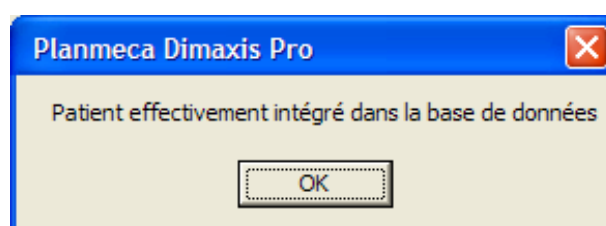

Pour sélectionner un patient, introduire son nom (nom de famille, prénom), sa date de naissance, son numéro de patient ou un raccourci d'identification patient, puis cliquer sur *OK*.


Voir le chapitre 9.1.1 "Patient" à la page 128 pour plus de détails sur le raccourci d'identification patient.

On peut également introduire les premières lettres de son nom et appuyer sur la touche *Entrée* pour afficher la liste des patients répondant à ce critère de sélection. Introduire un critère de sélection pour retrouver le patient recherché.

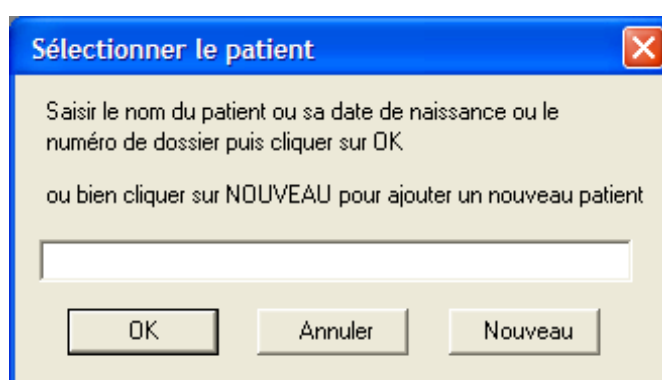


DÉMARRAGE

Si le patient recherché est introuvable, le message ci-dessous s'affiche. Pour revenir à la fenêtre **Sélectionner le patient**, cliquer sur **OK**.

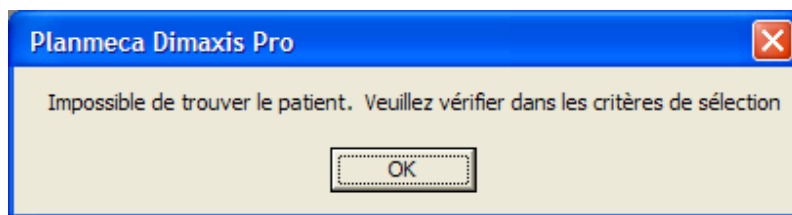


Tous les patients répondant au critère de sélection spécifié s'affichent dans la boîte de dialogue **Liste des patients**. Sélectionner le patient souhaité dans la liste et cliquer sur **OK**.

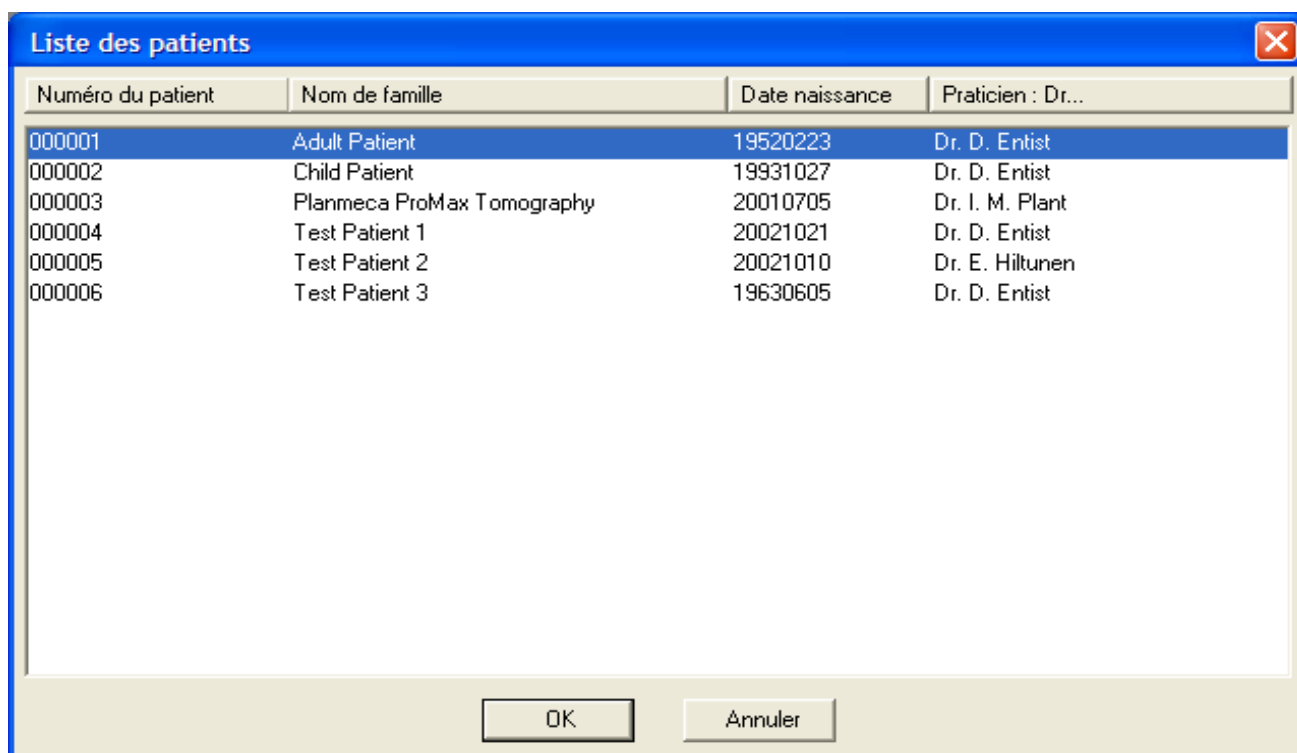

Restauration d'images depuis l'archive à long terme


Les informations figurant dans ce chapitre concernent l'archivage à long terme effectué avant le logiciel Dimaxis version 4.0.0. Pour des informations sur l'archivage dans la version 4.0.0 de Dimaxis, se reporter à la section 4.2 "Sélection d'une image" à la page 17.

Si les images du patient sélectionné ont été transférées dans l'archive à long terme, le message ci-dessous s'affiche. Si l'archive à long terme se trouve sur un support amovible, par exemple un DVD, insérer le support (portant le numéro d'ID archive indiqué dans la fenêtre de message) dans le lecteur et cliquer sur **OK** pour restaurer les images du patient sélectionné.

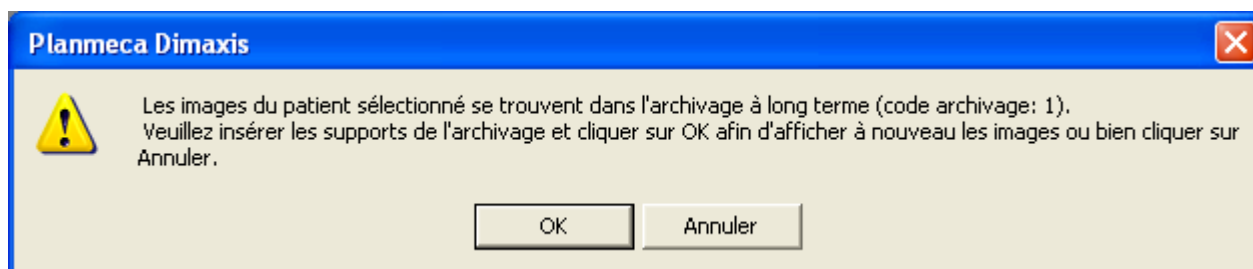

Après avoir sélectionné un patient, on peut sélectionner une image existante pour l'afficher, se reporter à la section 4.2 "Sélection d'une image" à la page 17. La prise de nouveaux clichés est décrite aux sections 5.1 "Prise d'un cliché céphalométrique" à la page 40, 5.2 "Prise d'un cliché panoramique" à la page 46 et 5.3 "Prise d'un image intrabuccale" à la page 51.

La saisie d'images Intracam est décrite à la section 5.4 "Saisie d'images Intracam" à la page 56.

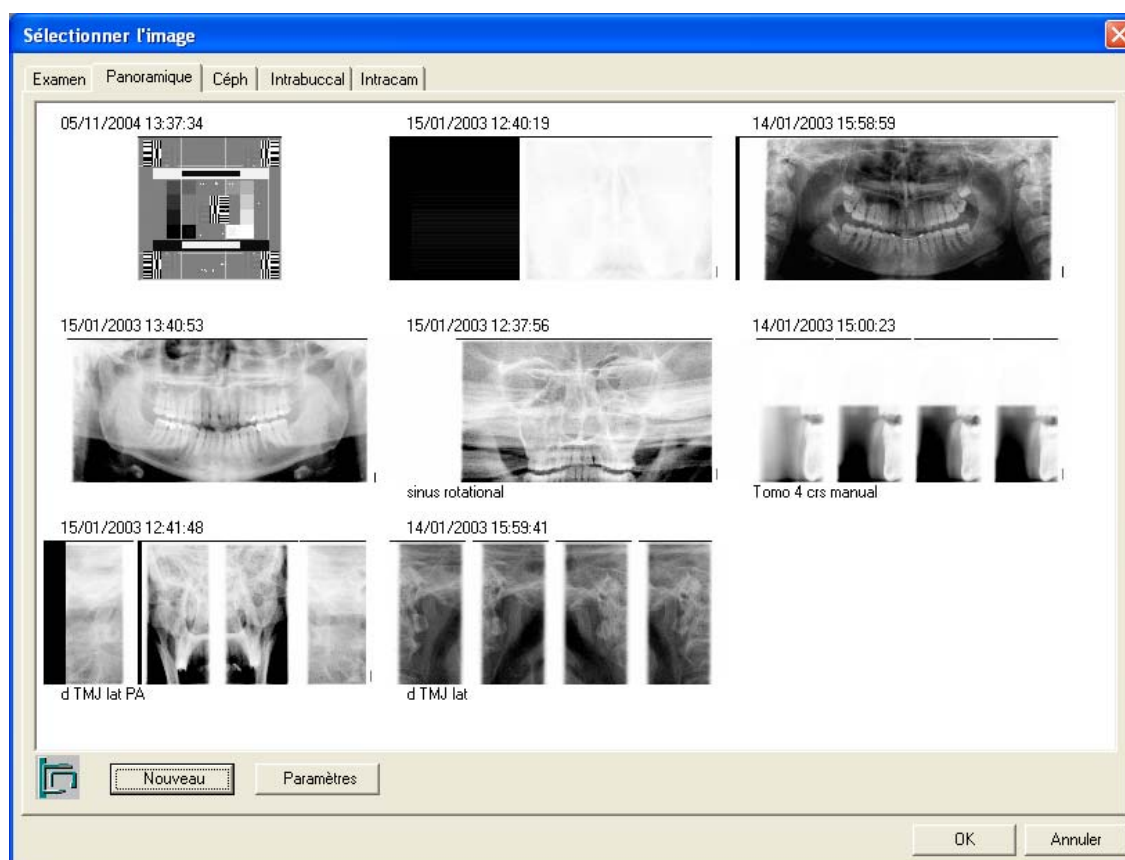


3 BARRES D'OUTILS

REMARQUE Le contenu de la barre d'outils varie selon qu'un patient est ou non sélectionné et que des images sont ou non ouvertes.

3.1 Barre d'outils alors qu'aucun patient n'est sélectionné

Le bouton de sélection d'un patient se trouve sur la barre d'outils en haut de l'écran. La même fonction est également accessible depuis le menu déroulant **Patient**.

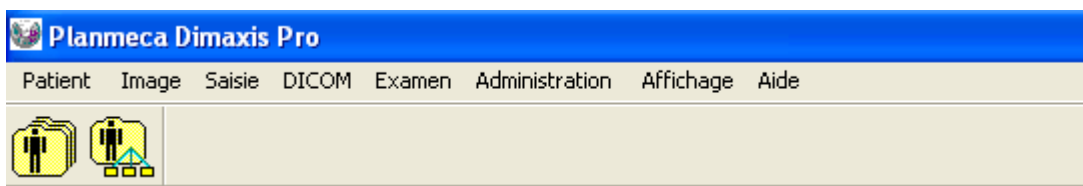

3.2 Barre d'outils alors qu'aucune image n'est ouverte pour le patient sélectionné


Les boutons de sélection d'un patient, d'affichage d'images et de prise d'un cliché se trouvent sur la barre d'outils en haut de l'écran. Les mêmes fonctions sont également accessibles depuis les menus déroulants.




3.3 Barres d'outils alors qu'une ou plusieurs images sont ouvertes pour le patient sélectionné

Les boutons de sélection d'un patient, d'affichage d'images, de prise d'un cliché et d'impression, ainsi que ceux concernant le traitement d'image, se trouvent sur les barres d'outils en haut et du côté droit de l'image ouverte (voir page suivante). Les mêmes fonctions sont également accessibles depuis les menus déroulants (voir 8 "MENUS DÉROULANTS" à la page 85).

On peut masquer certains boutons des barres d'outils. Se reporter à la section 9.2.7 "Icônes (version Pro uniquement)" à la page 148 pour plus d'informations.

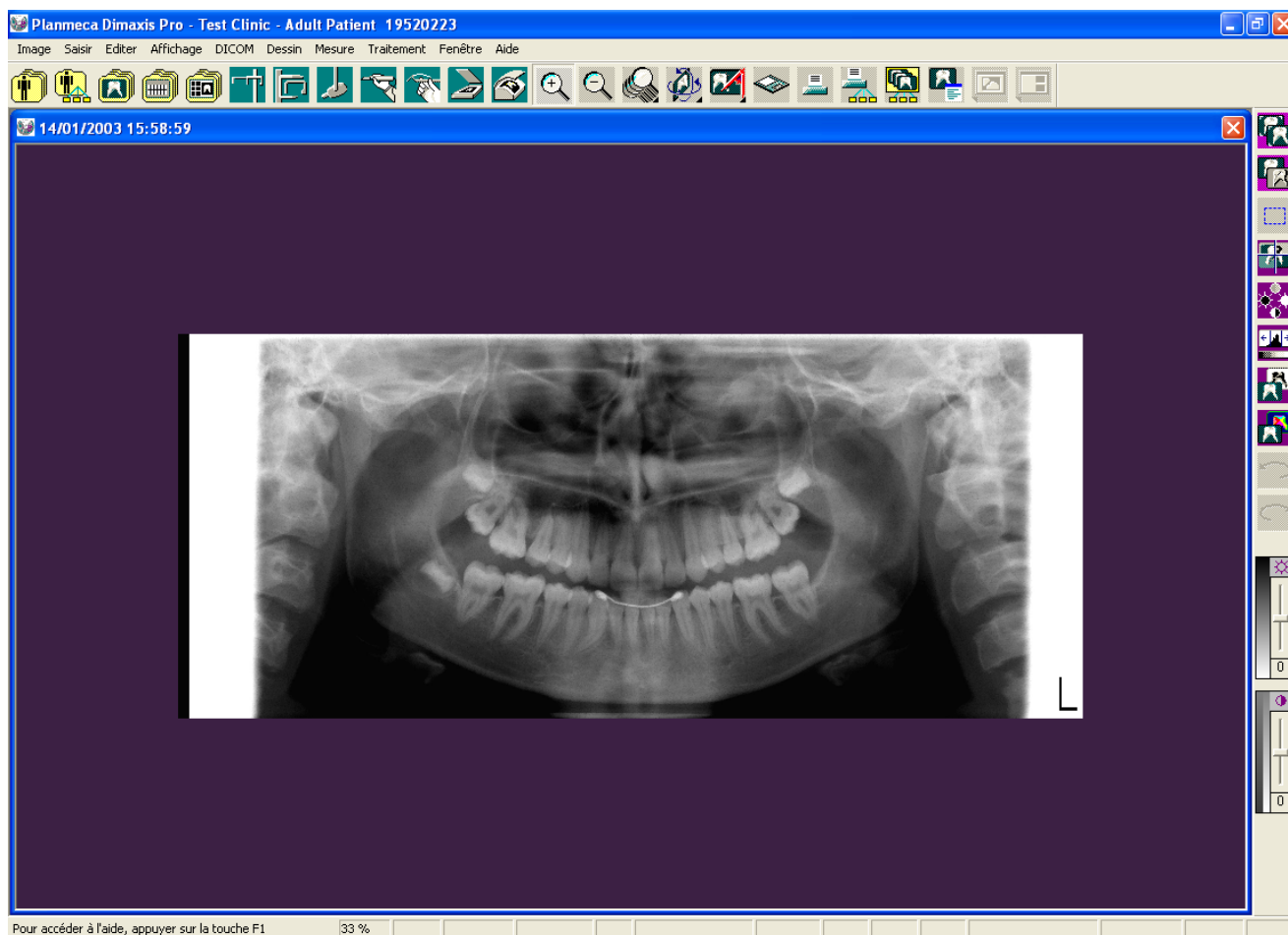

Barre d'outils supérieure

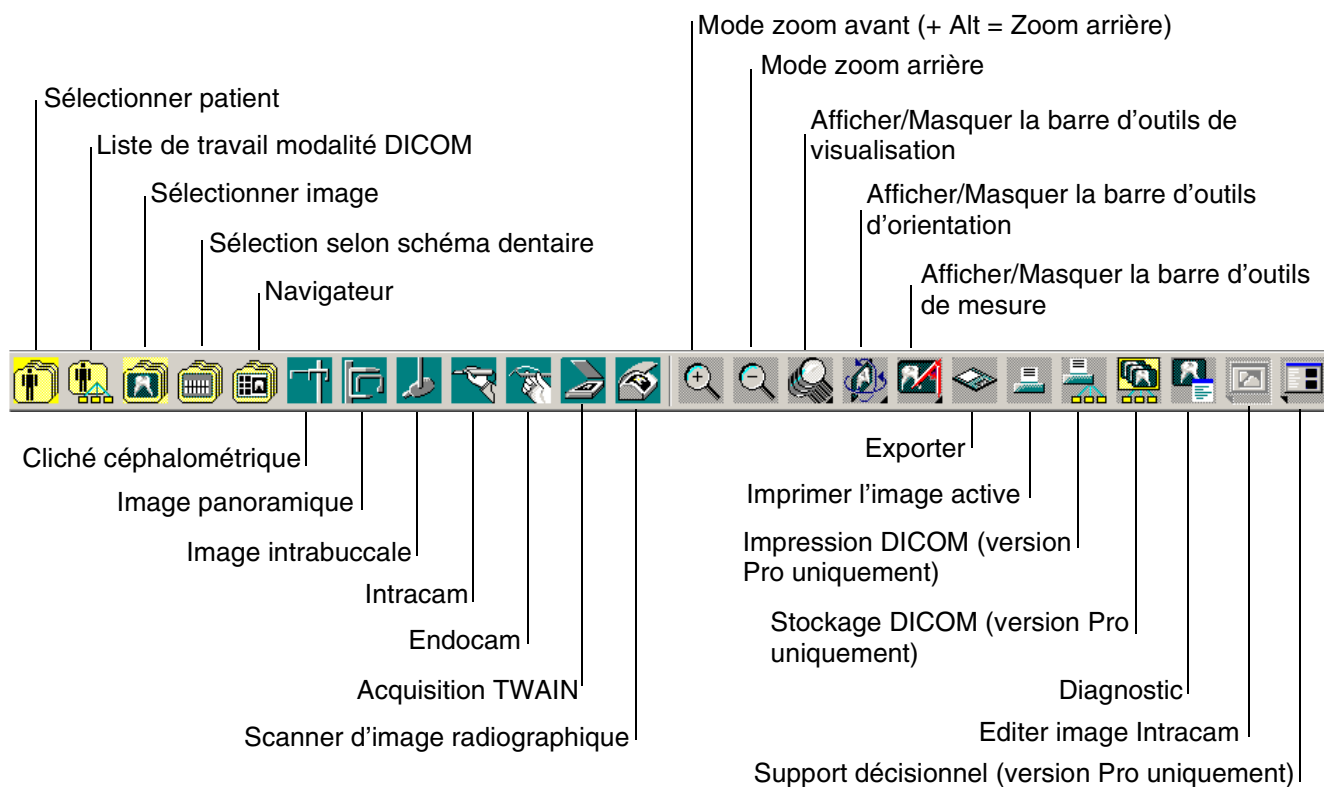

Barre d'outils de droite



4 RECHERCHE ET AFFICHAGE D'IMAGES


L'archivage d'images au sein du système Dimaxis est organisé par nom de patient, c'est-à-dire que l'on doit commencer par sélectionner un patient. Les images sont enregistrées sur base du 1) type d'exposition et 2) de la date d'exposition (les plus récentes en premier lieu). On peut sélectionner les images et examens du patient pour les afficher dans la fenêtre **Sélectionner l'image**, se reporter à la section 4.2 "Sélection d'une image" à la page 17. On peut également sélectionner des images intrabuccales en utilisant la sélection selon schéma dentaire ou le navigateur d'images, se reporter aux sections 4.3 "Sélection selon schéma dentaire" à la page 37 et 4.4 "Navigateur" à la page 38.

4.1 Sélection d'un patient

Cliquer sur le bouton *Sélectionner un patient* de la barre d'outils supérieure ou choisir la commande **Sélectionner** dans le menu déroulant **Patient** pour afficher la fenêtre **Sélectionner un patient**. Se reporter à la section 2.2 "Sélection du patient" à la page 7 pour une description détaillée des fonctions de sélection d'un patient.



Bouton
*Sélectionner
le patient*

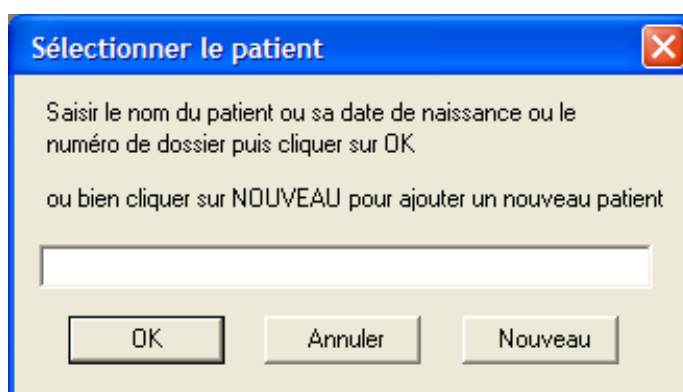


4.2 Sélection d'une image

Cliquer sur le bouton *Sélectionner une image* de la barre d'outils supérieure ou choisir la commande **Sélectionner** du menu déroulant **Image** pour afficher la fenêtre **Sélectionner l'image**. Sélectionner un type d'image ou la fenêtre Examen en utilisant les onglets de la partie supérieure de la fenêtre.

Il est possible de sélectionner des images sur les différentes pages à onglet, puis, en cliquant sur **OK**, d'ouvrir simultanément toutes les images sélectionnées.




Bouton
Sélectionner une image

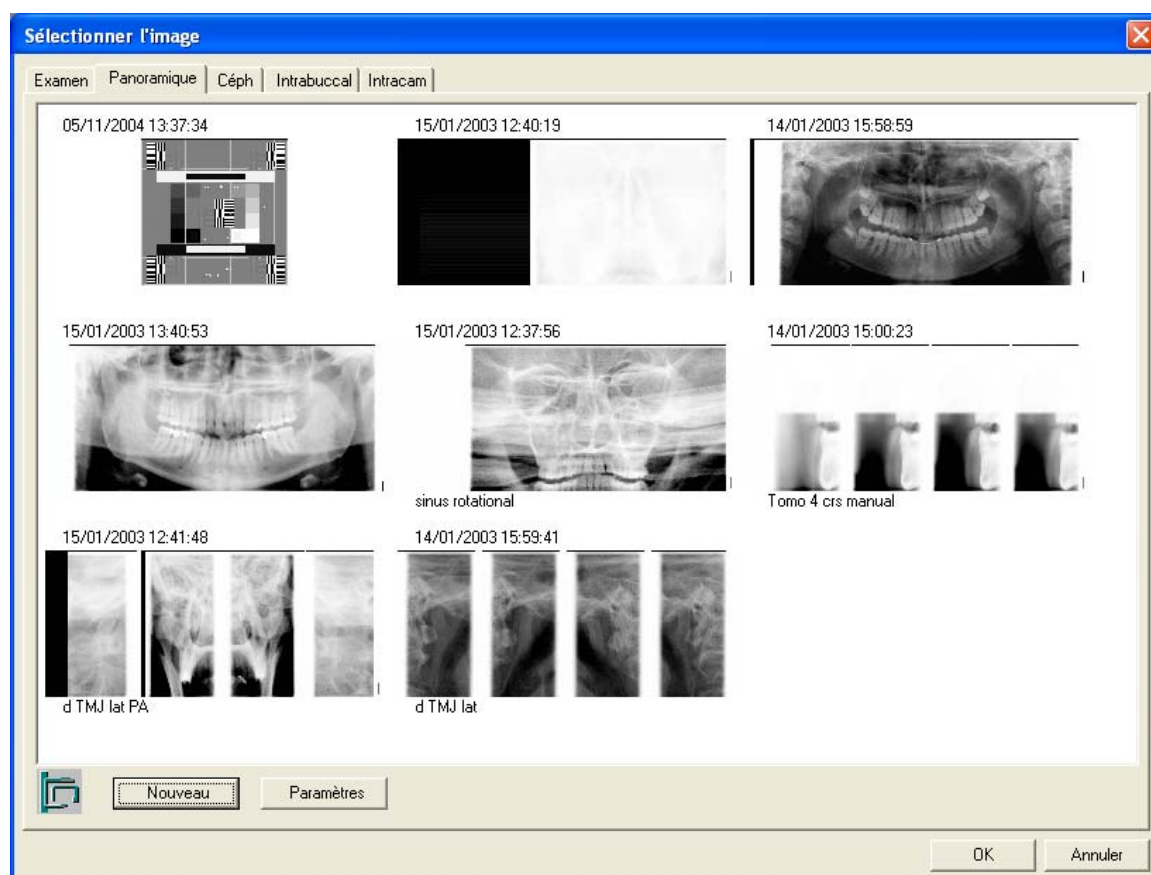


RECHERCHE ET AFFICHAGE D'IMAGES

A partir de la version 4.0.0 du logiciel Dimaxis, une seule image peut se trouver dans l'archive à long terme. Dans ce cas, un rectangle s'affiche au lieu de la prévisualisation de l'image. On peut restaurer les images une à une à condition que l'ordinateur ait accès à l'archive à long terme. Certaines images d'un patient peuvent se trouver dans l'archive à long terme alors que d'autres sont dans la base de données active. Avec les versions précédentes, toutes les images devaient se trouver soit dans l'archive à long terme soit dans la base de données active. On peut prendre de nouvelles images même lorsque certaines des images se trouvent dans l'archive à long terme.

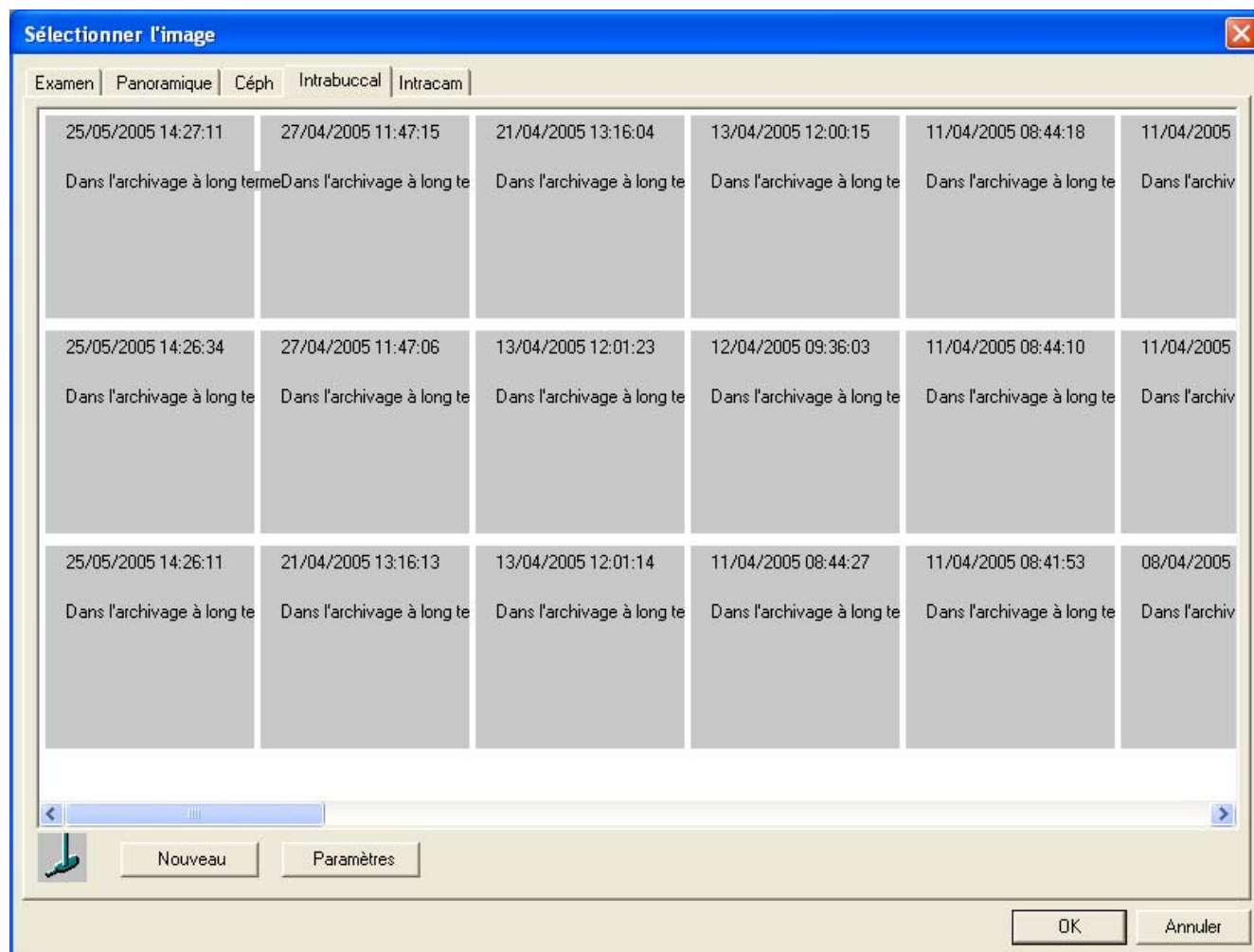


4.2.1 Sélectionner l'image/onglet Examen (Optionnel aux Etats-Unis uniquement)

La page à onglet **Examen** propose la liste des examens réalisés pour le patient sélectionné. Elle permet d'ouvrir ou de supprimer un examen existant ou d'ajouter un nouvel examen.

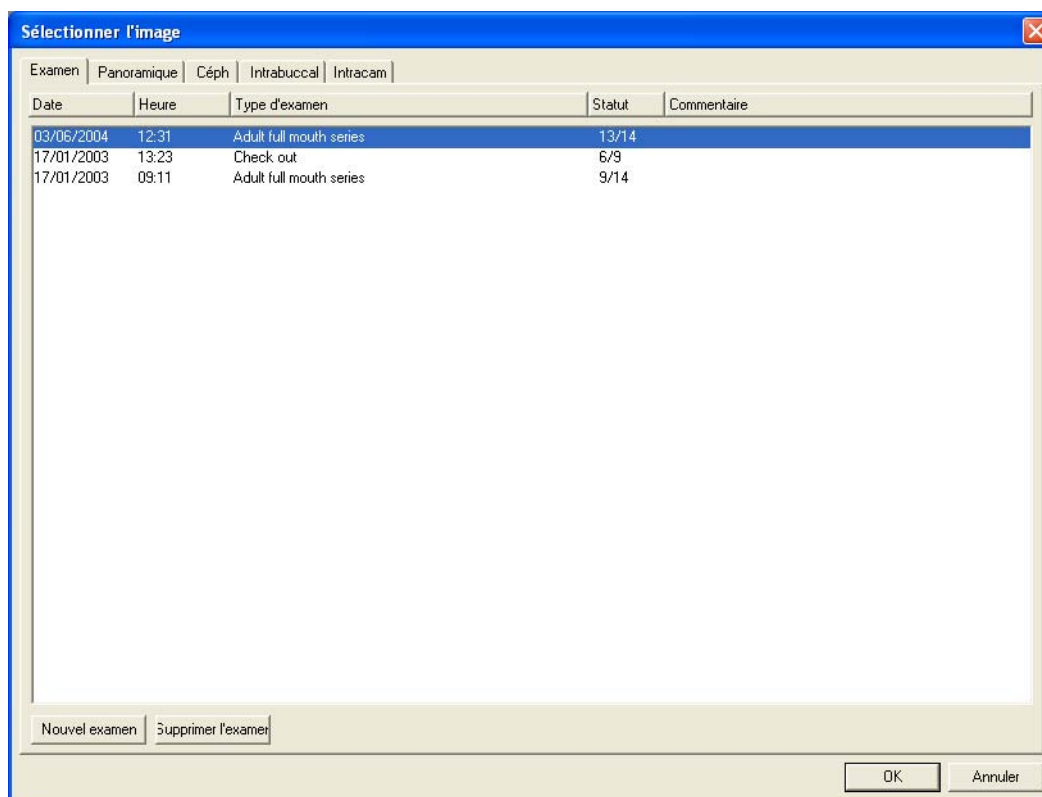


Ajout d'un nouvel examen

Pour ajouter un nouvel examen, cliquer sur le bouton *Nouvel examen*. La fenêtre **Sélectionner un modèle d'examen** s'affiche. Sélectionner un modèle et cliquer sur *OK*.

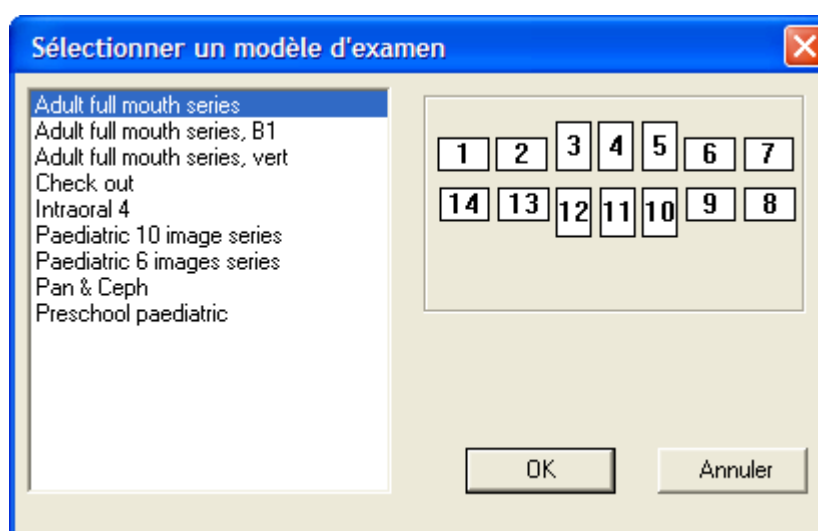


La fenêtre **Notes destinées à l'examen** s'affiche. Introduire un commentaire et un numéro d'accèsion et cliquer sur *OK* ou cliquer sur *Annuler* pour revenir à la fenêtre **Sélectionner l'image/Examen** sans ajouter d'examen. Le champ *Numéro d'accèsion* n'est utile que si l'examen doit être transféré vers une application DICOM. Le champ *Extrait examen UID* (identificateur unique de l'examen) n'est utilisé que si le patient actif a été sélectionné depuis une liste de travail d'une modalité DICOM.

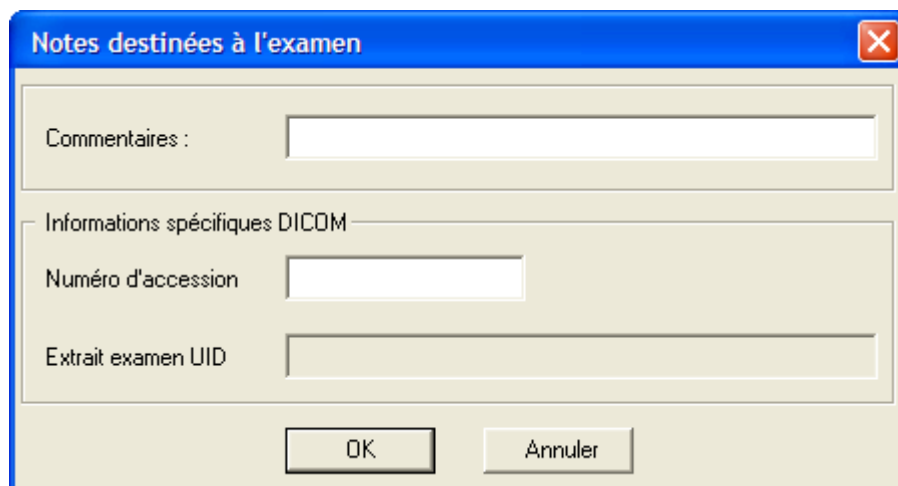

The dialog box titled "Notes destinées à l'examen" has a blue header bar with a close button (X). It contains a text input field for "Commentaires :". Below this is a section titled "Informations spécifiques DICOM" which contains two more text input fields: "Numéro d'accèsion" and "Extrait examen UID". At the bottom are two buttons: "OK" and "Annuler".

Suppression d'un examen

Pour supprimer un examen, sélectionner cet examen et cliquer sur le bouton *Supprimer l'examen*. Le message ci-dessous s'affiche. Cliquer sur *Oui* pour supprimer l'examen ou sur *Non* pour revenir à la fenêtre **Sélectionner l'image**.

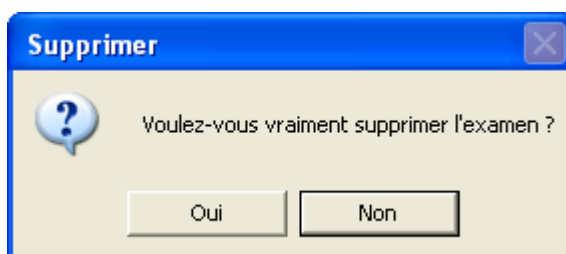


Si l'examen que l'on veut supprimer contient des images, le message ci-dessous s'affiche. Cliquer sur *OK*. Supprimer les images de l'examen comme décrit à la section "Ouverture d'un examen" à la page 21, puis supprimer l'examen.



Ouverture d'un examen

Pour ouvrir un examen, sélectionner l'examen de son choix et cliquer sur **OK** dans la fenêtre **Sélectionner l'image/Examen** ou ouvrir cet examen en cliquant deux fois dessus. La fenêtre **Examen** s'affiche. Cliquer sur une image pour la sélectionner. On peut sélectionner plusieurs images en maintenant la touche **Ctrl** ou **Maj** enfoncée et en cliquant à l'aide du bouton gauche de la souris ou en cliquant simplement à l'aide du bouton droit de la souris. Les paramètres d'exposition de l'image sélectionnés sont affichés à la partie supérieure de la fenêtre **Examen**.

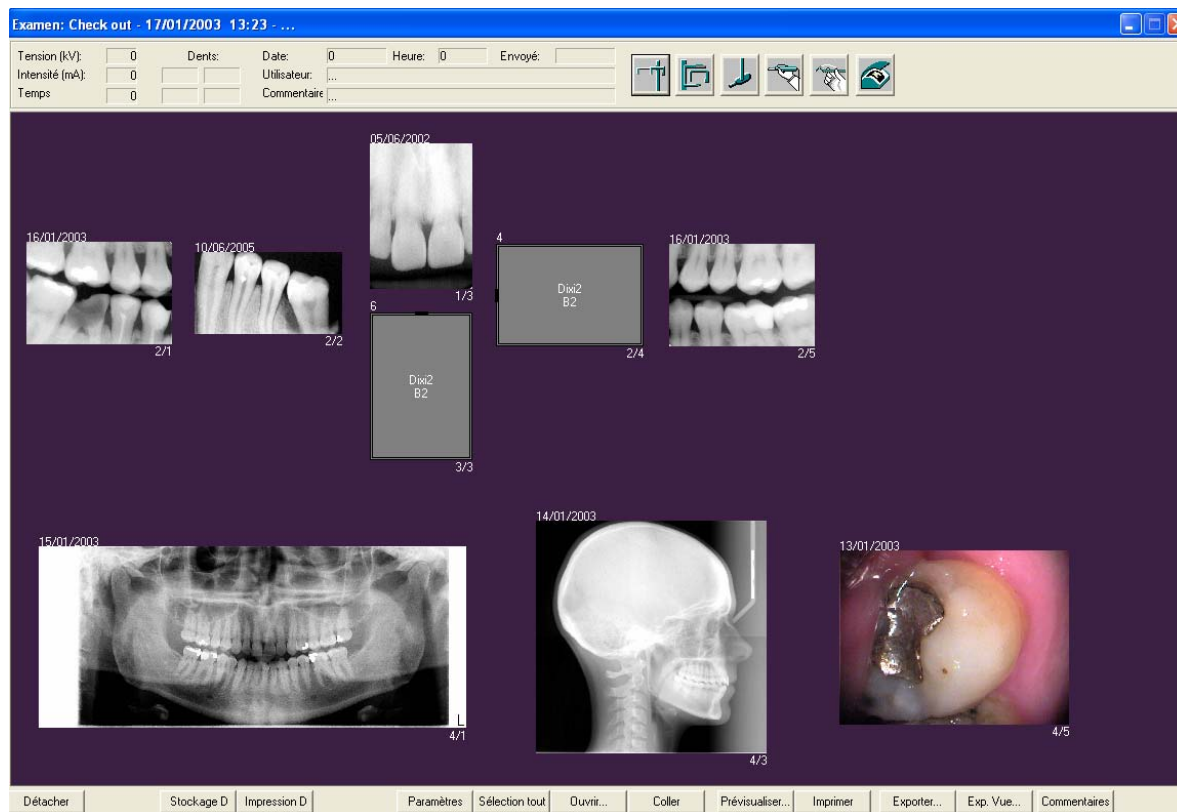

Stockage/DICOM

Impression/DICOM

Si aucune image n'a été sélectionnée dans la fenêtre **Examen** et que l'on clique sur un des boutons à la partie inférieure de la fenêtre, la plupart des fonctions sont appliquées à toutes les images.

Prise d'un cliché

On peut prendre un cliché en cliquant sur l'un des boutons *Prise d'un cliché*. On notera que le type de cliché sera celui de la prochaine image sélectionnée dans l'examen, sauf si l'on a sélectionné une image avant de cliquer sur ce bouton.



Scanner d'images radiographiques


La numérisation d'images est décrite à la section 5.7 "Scanner d'image radiographique (CR) (version Pro uniquement)" à la page 62.



Bouton *Scanner*
d'image radiographique (CR)


Détacher

On peut détacher une image d'un examen en cliquant sur le bouton *Détacher* de la fenêtre **Examen**. On notera que l'image n'est pas supprimée de la base de données. Pour supprimer une image de la base de données, ouvrir cette image et sélectionner la commande **Supprimer** dans le menu déroulant **Image**.

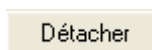


Bouton *Détacher*

Pour détacher l'image de l'examen, cliquer sur *Oui*. Pour revenir à la fenêtre **Examen**, cliquer sur *Non*.

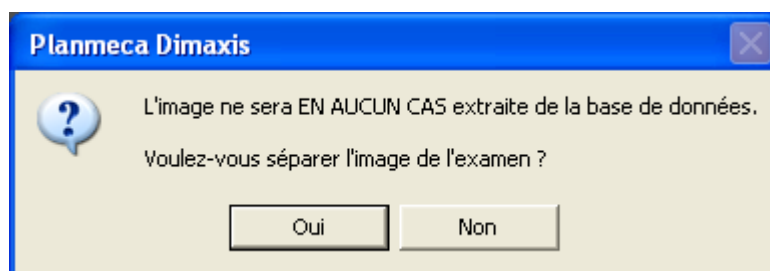


Stockage DICOM (version Pro uniquement)

On peut transférer les images d'un examen vers une application DICOM en cliquant sur le bouton *D/Stockage*.

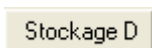

Bouton *DICOM/Stockage*

La fenêtre **Envoyer l'examen au DICOM AE** s'affiche.

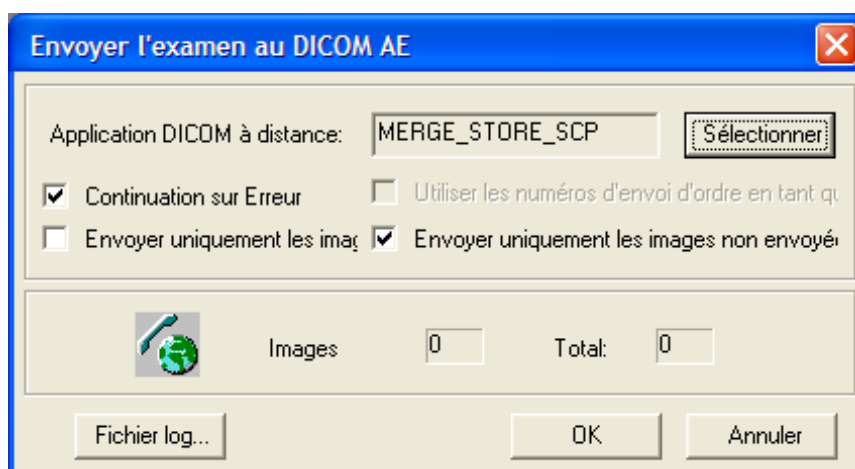

Lors du transfert des images de l'examen, des erreurs spécifiques peuvent survenir au niveau du réseau. Si l'on souhaite recommencer l'envoi des images en cas d'erreur du réseau, cocher l'option *Continuation sur Erreur*.

Si l'on souhaite envoyer seulement certaines images de l'examen, sélectionner ces images avant d'ouvrir cette boîte de dialogue et cocher l'option *Envoyer uniquement les images sélectionnées*.



Les images enregistrées dans la base de données Dimaxis sont numérotées par ordre de saisie. Si l'on veut remplacer ces numéros par les numéros d'ordre d'envoi, cocher l'option *Utiliser les numéros d'ordre d'envoi en tant que numéros d'images*. On notera que cette option est désactivée si l'on n'a pas modifié l'ordre d'envoi, se reporter à la section 11.1.7 "Modification de l'ordre d'envoi DICOM" à la page 168.

Si l'on souhaite envoyer uniquement les images qui n'ont pas encore été transmises à l'application DICOM, cocher l'option *Envoyer uniquement les images non envoyées*.

Si le transfert des images s'est correctement déroulé, le message ci-dessous s'affiche.




Si l'envoi des images a échoué, s'assurer que l'application DICOM de destination est en cours d'exécution et que le réseau fonctionne correctement. Réessayer l'envoi. En cas de nouvel échec, ouvrir le fichier journal en cliquant sur le bouton *Fichier log...*, imprimer ce fichier et le transmettre par télécopie ou par courrier au service d'assistance local.

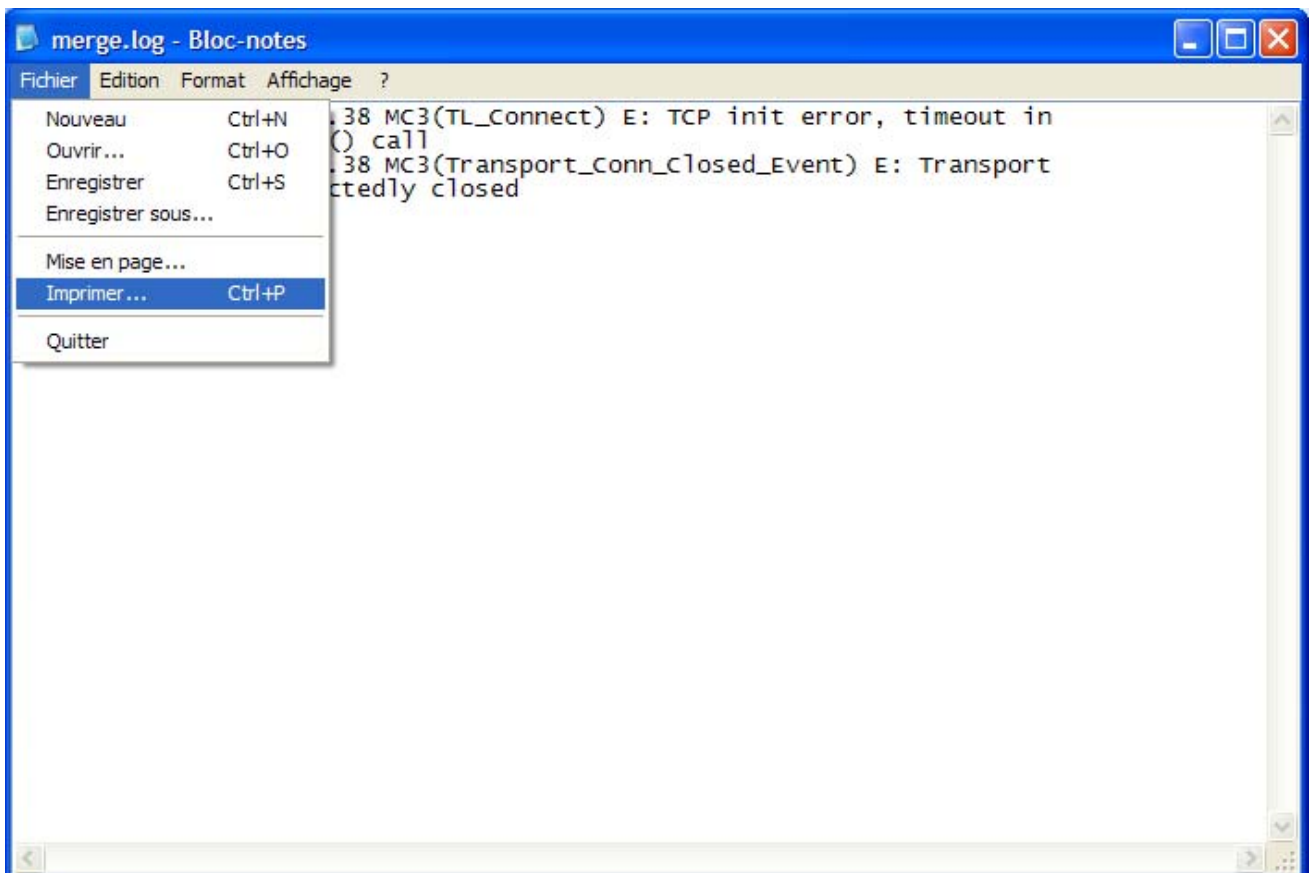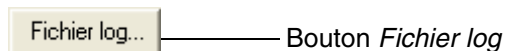

Impression DICOM (version Pro uniquement)

On peut imprimer les images d'un examen sur une imprimante compatible DICOM en cliquant sur le bouton *D/Impression*.

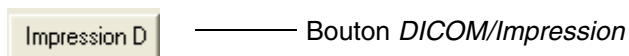


La fenêtre **Impression DICOM de l'examen** s'affiche.

Si l'on souhaite imprimer seulement certaines images de l'examen, sélectionner ces images avant d'ouvrir cette boîte de dialogue et cocher l'option *Imprimer uniquement les images sélectionnées*.

Le champ *Etiquette de session* identifie la session du film. Ce champ peut être laissé vierge si les tâches d'impression ne sont pas contrôlées par un autre système.

Sélectionner le *Nombre de copies* et imprimer les images en cliquant sur *OK*.

Se reporter à la section 7 "DICOM" à la page 72 pour plus d'informations sur l'impression DICOM.

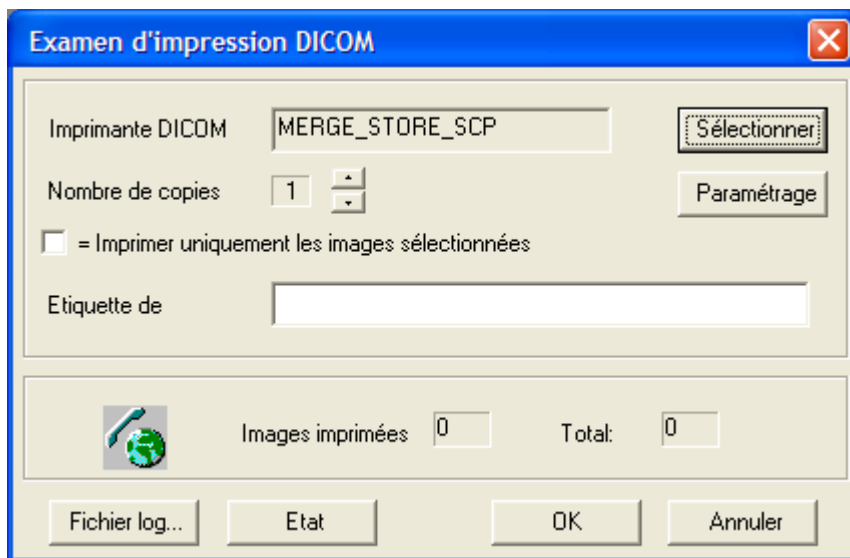

Paramètres

Si l'on a sélectionné une image céphalométrique, les paramètres d'image sont affichés dans la fenêtre **Paramètres des images céphalométriques** qui s'affiche lorsque l'on clique sur le bouton *Paramètres*.

Paramètres

Bouton *Paramètres*

Cette fenêtre permet d'introduire le nom de l'utilisateur et un commentaire. On peut également modifier la date d'exposition si le réglage de date de l'ordinateur était incorrect au moment de la prise du cliché.

The main dialog box, titled "Paramètres d'image céphalométrique", contains the following fields and controls:

- Utilisateur: [Empty text box]
- Praticien: [Text box containing "Test Clini"]
- Date du cliché: [Text box containing "12/09/2005"] with a "Modifier" button next to it.
- ☐ La patiente était enceinte lors de la prise du cli
- Voltage (kV): [Text box containing "0"]
- Courant (mA): [Text box containing "0"]
- Temps d'exposition (s): [Text box containing "0.0"]
- DAP (mGy*cm2): [Text box containing "0.0"]
- Résolution: [Text box containing "Normale"]
- Programme: [Text box containing "Ceph"]
- Numéro de série du capteur: [Empty text box]
- Nom de l'appareil: [Empty text box]
- Version SW de l'appareil: [Empty text box]
- Largeur (pixels): [Empty text box]
- Bits Par Pixel: [Empty text box]
- Hauteur (pixels): [Empty text box]
- Format d'image: [Text box containing "TIF"]
- Buttons: "OK" and "Annuler" at the bottom.

An arrow points from the "Modifier" button to a secondary dialog box titled "Date de prise du cliché". This sub-dialog box contains:

- Day (Jour): [Dropdown menu showing "5"]
- Month (Mois): [Dropdown menu showing "2"]
- Year (Année): [Text box containing "2005"]
- Buttons: "OK" and "Annuler" at the bottom.

Si l'on a sélectionné une image panoramique, les paramètres d'image sont affichés dans la fenêtre **Paramètres d'image panoramique** qui s'affiche lorsque l'on clique sur le bouton *Paramètres*. Cette fenêtre permet d'introduire le nom de l'utilisateur et un commentaire. On peut également modifier la date d'exposition si le réglage de date de l'ordinateur était incorrect au moment de la prise du cliché.

Paramètres d'image panoramique

Utilisateur:

Praticien : Dr...

Date de prise du 24.3.2005

☐ La patiente était enceinte lors de la prise du cliché

Résolution: Programme:

Numéro de série:

Voltage: kV Intensité: mA

Temps s

Position: mm Angle gauche: degrés

Règle PA: mm Angle droit: degrés

Mode pédiatrique: Taille de mâchoire:

Forme de

Largeur: pixels Bits par pixel:

Hauteur: pixels Format d'image:

Si l'image n'a pas été importée, la fenêtre **Paramètres d'image panoramique** illustrée ci-dessous s'affiche lorsque l'on clique sur le bouton *Paramètres*.

Cette fenêtre permet d'introduire le nom de l'utilisateur et un commentaire. On peut également modifier la date d'exposition si le réglage de date de l'ordinateur était incorrect au moment de la prise du cliché.

Paramètres d'image panoramique

Utilisateur:	<input type="text"/>	Date du cliché:	12/09/2005	<input type="button" value="Modifier"/>
Praticien:	Test Clini	<input type="checkbox"/> La patiente était enceinte lors de la prise du cliché		
Vue : <input type="text" value="1"/> sur : <input type="text" value="1"/>				
Programme:	<input type="text"/>	Nom du programme	<input type="text"/>	
Voltage (kV):	<input type="text"/>	Courant (mA):	<input type="text"/>	Temps d'exposition <input type="text" value="0.000"/> Nb Total d'expositions: <input type="text" value="0.000"/>
DAP (mGy*cm2):	<input type="text" value="0.0"/>			
Mode Enfant:	<input type="text" value="Non"/>	Taille Mâchoire:	<input type="text" value="Normale"/>	Forme Mâchoire: <input type="text" value="Normale"/> Agrandissement: <input type="text" value="0.0"/>
Position Plan de	<input type="text" value="0"/>	Segment masqué	<input type="text" value="12345"/>	Segment masqué <input type="text" value="123"/>
Angle ATM	<input type="text"/>	Pos ATM gauche	<input type="text"/>	Angle ATM droit: <input type="text"/> Pos ATM droit (mm): <input type="text"/>
Type Tomo:	<input type="text"/>	Côté Tomo:	<input type="text"/>	Taille Tomo: <input type="text"/> Cible Tomo: <input type="text"/>
Tomo x:	<input type="text"/>	Tomo y:	<input type="text"/>	Distance Tomo(mm): <input type="text"/> Epaisseur Coupe (mm): <input type="text"/>
Angle Tomo:	<input type="text"/>			
Nom de l'appareil:	<input type="text"/>	Version SW de	<input type="text"/>	
Numéro de série du	<input type="text"/>			
Largeur (pixels):	<input type="text"/>	Hauteur (pixels):	<input type="text"/>	Bits Par Pixel: <input type="text"/>
Format d'image:	<input type="text" value="TIF"/>	Résolution:	<input type="text" value="Normale"/>	
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annuler"/>				

Si l'on a sélectionné une image intrabuccale, les paramètres d'image sont affichés dans la fenêtre **Paramètres image intrabuccale** qui s'affiche lorsque l'on clique sur le bouton *Paramètres*. Cette fenêtre permet d'introduire le nom de l'utilisateur et un commentaire, de modifier le schéma dentaire, de modifier l'orientation du capteur, d'indiquer les paramètres d'exposition, de modifier la date d'exposition (si le réglage de date de l'ordinateur était incorrect) et de spécifier le décalage par rapport au centre de la dent d'extrême gauche (la dent d'extrême droite pour le patient) sur l'image à l'aide des flèches de décalage qui se trouvent dans le coin inférieur gauche de la fenêtre. Le décalage s'utilise avec la fonction Navigateur, se reporter à la section 4.4 "Navigateur" à la page 38.

Paramètres image intrabuccale

Image Notes
 User:
 Doctor:
 Comments:
☐ La patiente était enceinte lors de la prise du cliché

Image Parameters

Sensor Orientation

Dents

11 21

Date du cliché

05/06/2002

Voltage (kV):
 Intensité (mA):
 Temps d'exposition:
 DAP (mGy*cm2):
 Taille des pixels:
 Largeur (pixels):
 Hauteur (pixels):
 Bits par pixel:
 Format d'image:

Sensor Type:
 Serial Number:

Capteur et Nom de l'appareil:
 Version SW de

OK Annuler

Décalage par rapport au centre de la dent d'extrême gauche sur l'image

Dents


18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

OK Annuler


Selection tout

On peut traiter plusieurs images simultanément en cliquant sur le bouton *Sélection tout* de la fenêtre **Examen**.

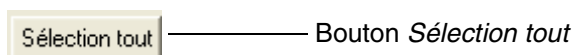


Ouvrir

On ouvre la ou les images sélectionnées en cliquant sur le bouton *Ouvrir* de la fenêtre **Examen**.

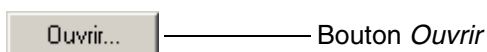


Coller

On peut insérer une image existante dans un examen en ouvrant l'image et en sélectionnant **Copier** (ou **Ctrl+C**) dans le menu déroulant **Editer**, en sélectionnant la miniature de l'image et en cliquant sur **Coller** (ou **Ctrl+V**).

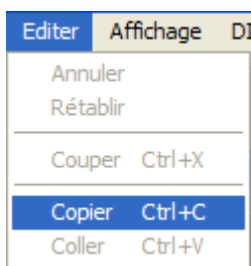

Prévisualiser

On peut voir un aperçu avant impression des images sélectionnées dans l'examen en cliquant sur le bouton *Prévisualiser*.

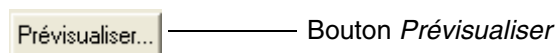

Impression

La sélection des positions d'impression des images se fait lors de la création/modification des modèles d'examens, se reporter à la section 11.1.1 "Ajout de miniatures des images" à la page 163. La position d'impression prédéfinie est indiquée par les numéros de rangée/ colonne figurant dans le coin inférieur droit de l'image. On notera que l'ordre d'impression sélectionné n'est utilisé que si la position d'impression a été spécifiée pour toutes les images à imprimer.


Les images d'un examen s'impriment par ordre d'exposition si les positions d'impression des images n'ont pas été spécifiées.

Si toutes les images ont été prises le même jour, la date d'exposition s'imprimera dans le texte de pied de page.

Si le texte de la licence est exactement identique au nom du dentiste, ce texte ne sera pas imprimé. Si le texte de la licence est imprimé, il apparaît au-dessus du texte de pied de page spécifié par l'utilisateur (le texte de pied de page est généralement l'adresse du cabinet dentaire).

Se reporter à la section 6 "IMPRESSION DES IMAGES" à la page 68 pour plus d'informations sur l'impression d'images.


Cliquer sur le bouton *Imprimer* de la fenêtre **Examen**.

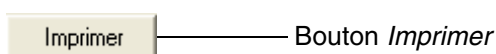

La fenêtre **Imprimer** s'affiche.

Si l'on ne veut imprimer que certaines images de l'examen, sélectionner ces images avant de cliquer sur le bouton *Imprimer* et s'assurer que la plage d'impression est réglée sur *Sélection*.

Spécifier le *Nombre de copies* et imprimer les images en cliquant sur *OK*.

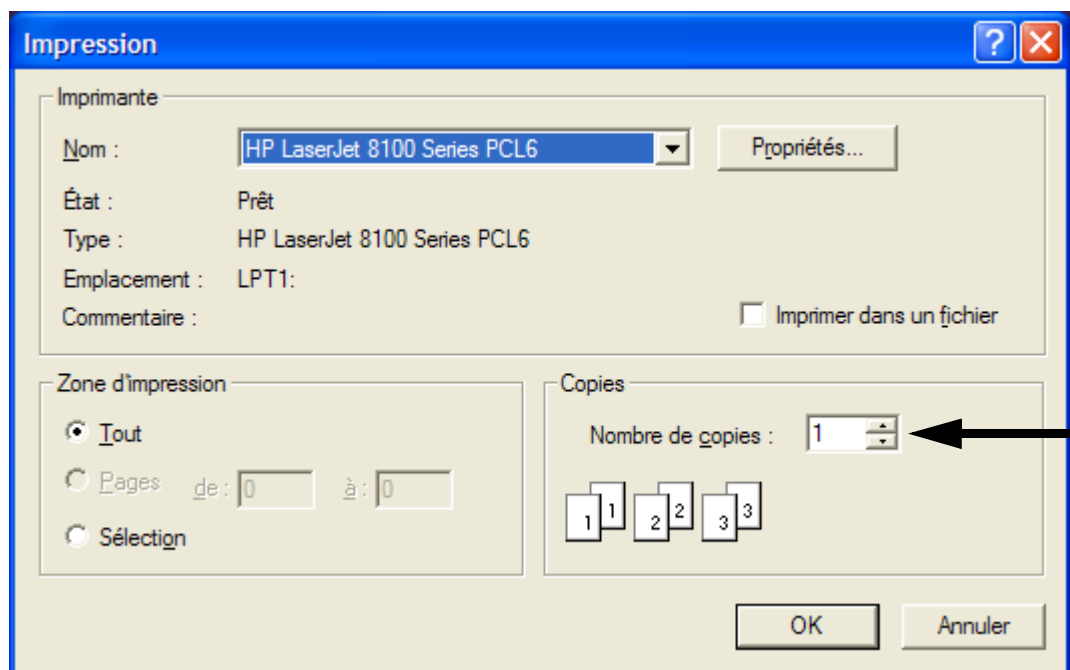


Exporter


Si l'on clique sur le bouton *Exporter*, la fenêtre ci-dessous s'affiche: elle permet de définir les paramètres d'exportation.

Si aucune image n'a été sélectionnée, toutes les images de l'examen seront exportées.

La commande *Exporter* exporte les images en tant qu'images individuelles dans des fichiers distincts.

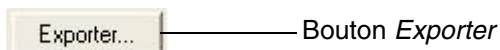

Bouton *Exporter*

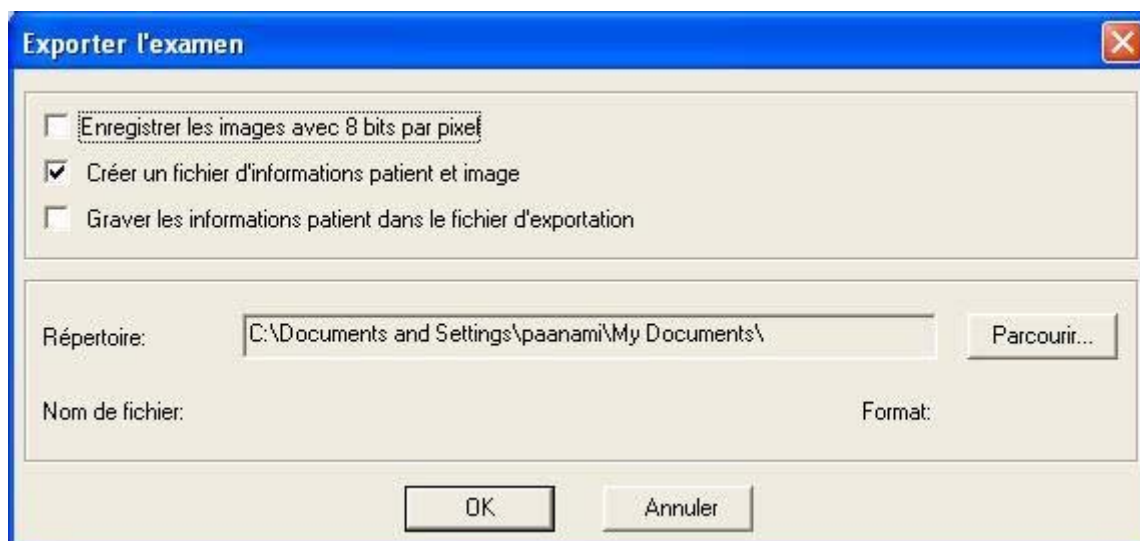


Exporter la vue Examen comme une image


Si l'on clique sur le bouton *Exporter Vue*, la fenêtre ci-dessous s'affiche.

Si aucune image n'a été sélectionnée, toutes les images de l'examen seront exportées.

La commande *Exporter Vue* exporte l'ensemble de la vue dans un fichier unique.

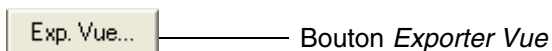


Bouton *Exporter Vue*

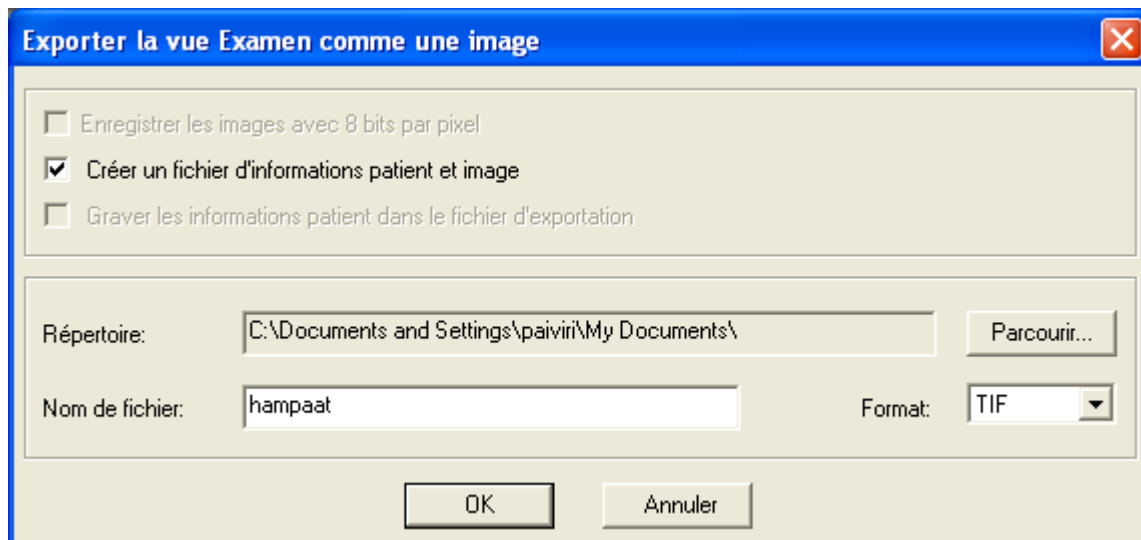


Commentaire

On peut modifier le commentaire relatif à l'examen affiché dans la fenêtre **Examen**. Cliquer sur le bouton *Commentaire* pour afficher la fenêtre **Notes destinées à l'examen**.

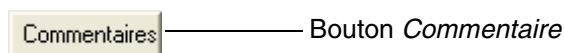


Taper le texte du commentaire (et le numéro d'accension) et cliquer sur *OK*.

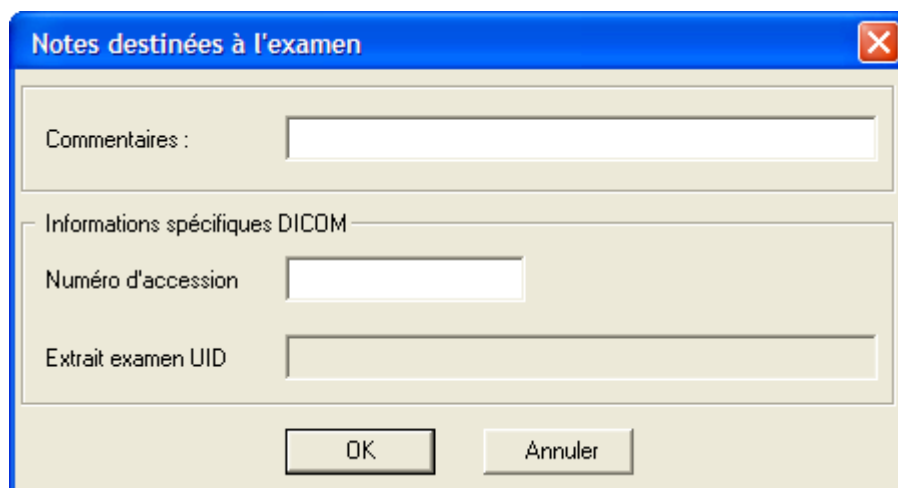

4.2.2 Sélectionner l'image/onglet Panoramique

La page à onglet **Panoramique** affiche les images panoramiques du patient sélectionné. Cliquer une seule fois sur l'image de son choix pour la sélectionner. L'image est désélectionnée lorsque l'on clique sur une autre image. Pour sélectionner plusieurs images, maintenir enfoncée la touche **Ctrl** ou **Maj** puis cliquer sur ces images. Les images sélectionnées sont signalées par une bordure grise. Cliquer sur **OK** pour ouvrir la ou les images sélectionnées. On peut également ouvrir une image en cliquant deux fois sur cette image.


Les paramètres de l'image sélectionnée s'affichent dans la fenêtre qui apparaît lorsque l'on clique sur le bouton *Paramètres*.

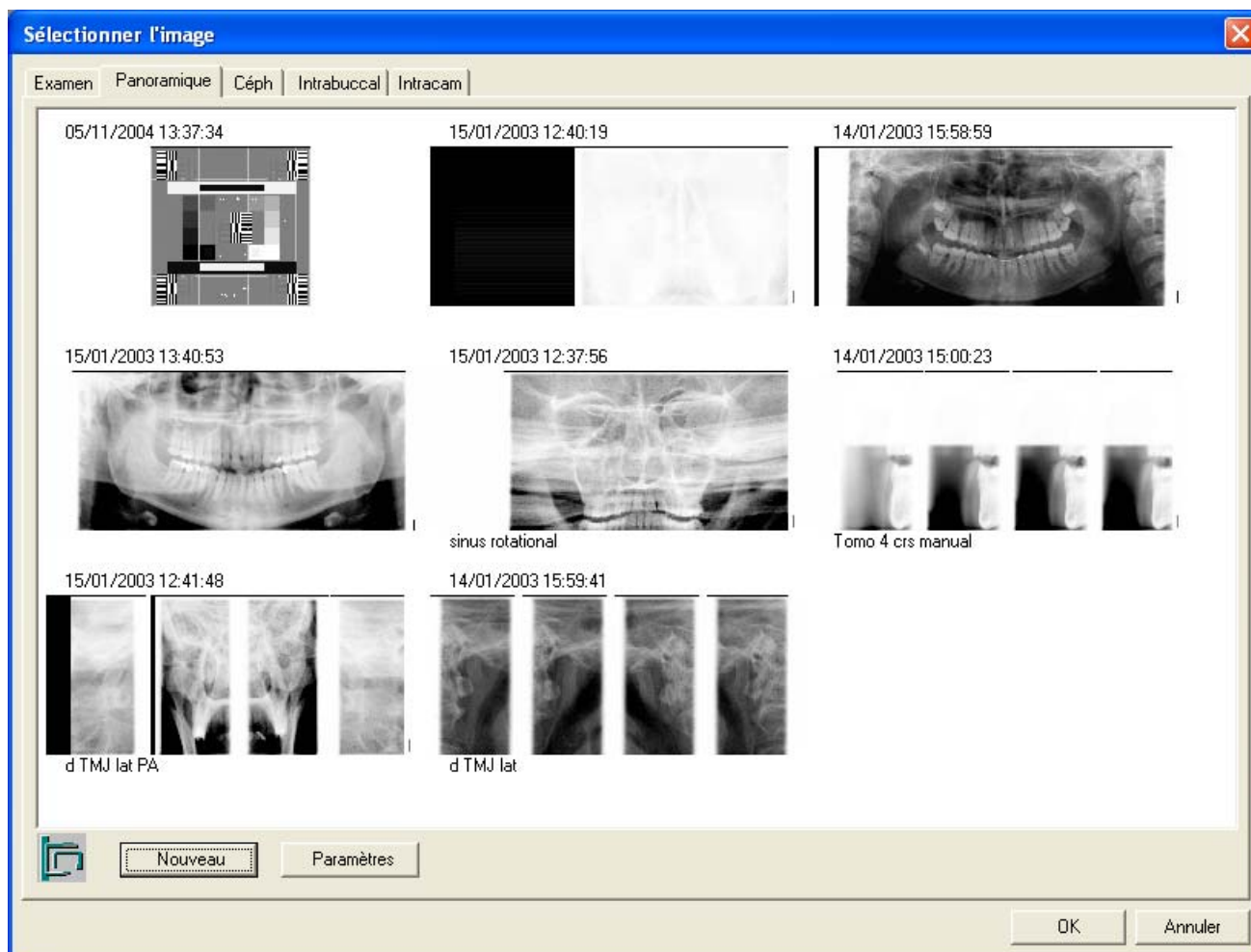

4.2.3 Sélectionner l'image/onglet Céphalométrique

La page à onglet **Céphalométrique** affiche les images céphalométriques du patient sélectionné. Cliquer une seule fois sur l'image de son choix pour la sélectionner. L'image est désélectionnée lorsque l'on clique sur une autre image. Pour sélectionner plusieurs images, maintenir enfoncée la touche **Ctrl** ou **Maj**, puis cliquer sur ces images. Les images sélectionnées sont signalées par une bordure grise. Cliquer sur **OK** pour ouvrir la ou les images sélectionnées. On peut également ouvrir une image en cliquant deux fois sur cette image.


Les paramètres de l'image sélectionnée s'affichent dans la fenêtre qui apparaît lorsque l'on clique sur le bouton *Paramètres*.

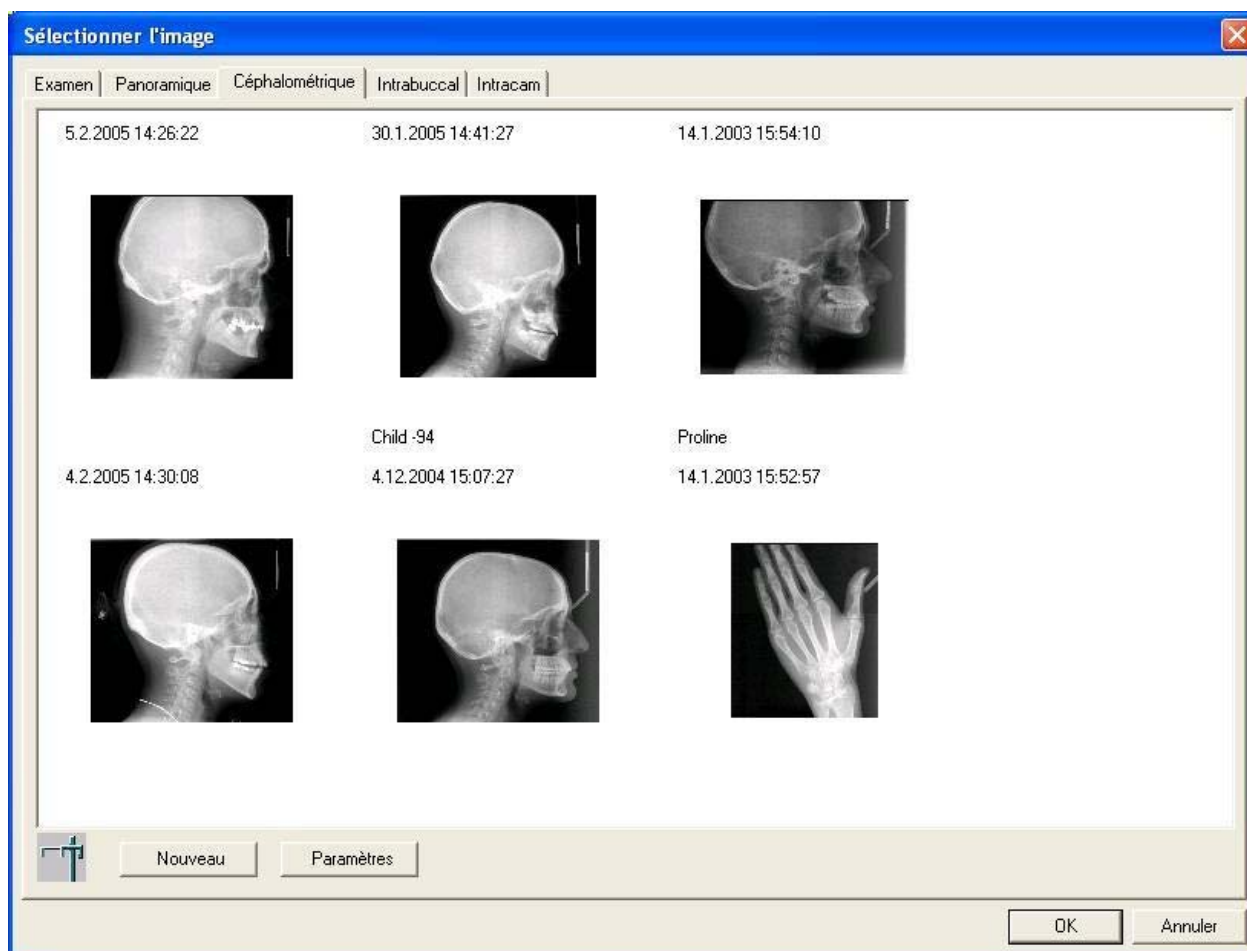

4.2.4 Sélectionner l'image/onglet Intrabuccal


La page à onglet **Intrabuccal** affiche les images intrabuccales du patient sélectionné. Cliquer une seule fois sur l'image de son choix pour la sélectionner. L'image est désélectionnée lorsque l'on clique sur une autre image. Pour sélectionner plusieurs images, maintenir enfoncée la touche **Ctrl** ou **Maj**, puis cliquer sur ces images. Les images sélectionnées sont signalées par une bordure grise. Cliquer sur **OK** pour ouvrir la ou les images sélectionnées. On peut également ouvrir une image en cliquant deux fois sur cette image.

Les paramètres de l'image sélectionnée s'affichent dans la fenêtre qui apparaît lorsque l'on clique sur le bouton *Paramètres*.

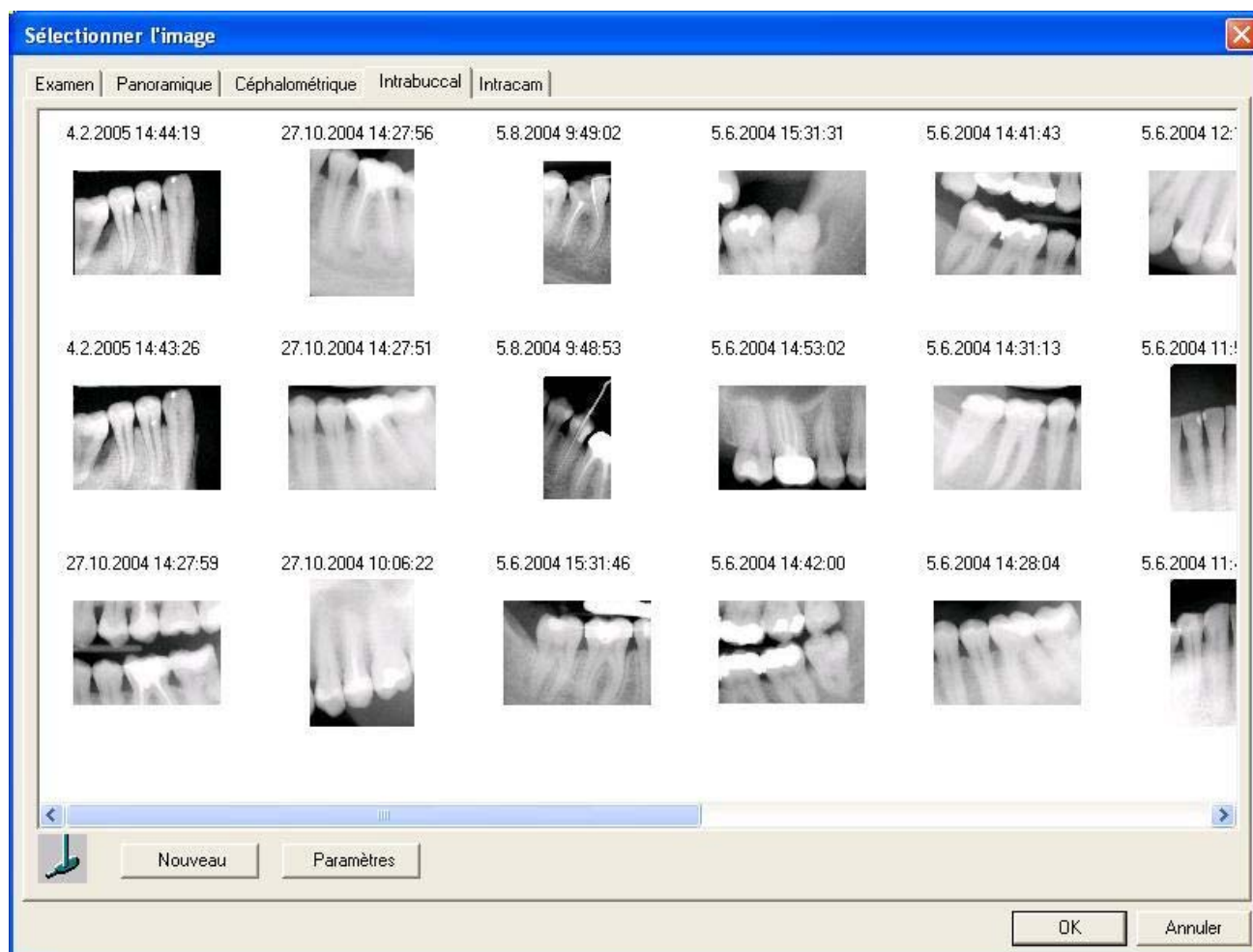

4.2.5 Sélectionner l'image/onglet Intracam

La page à onglet **Intracam** affiche les images Intracam du patient sélectionné. Cliquer une seule fois sur l'image de son choix pour la sélectionner. L'image est désélectionnée lorsque l'on clique sur une autre image. Pour sélectionner plusieurs images, maintenir enfoncée la touche **Ctrl** ou **Maj**, puis cliquer sur ces images. Les images sélectionnées sont signalées par une bordure grise. Cliquer sur **OK** pour ouvrir la ou les images sélectionnées. On peut également ouvrir une image en cliquant deux fois sur cette image.

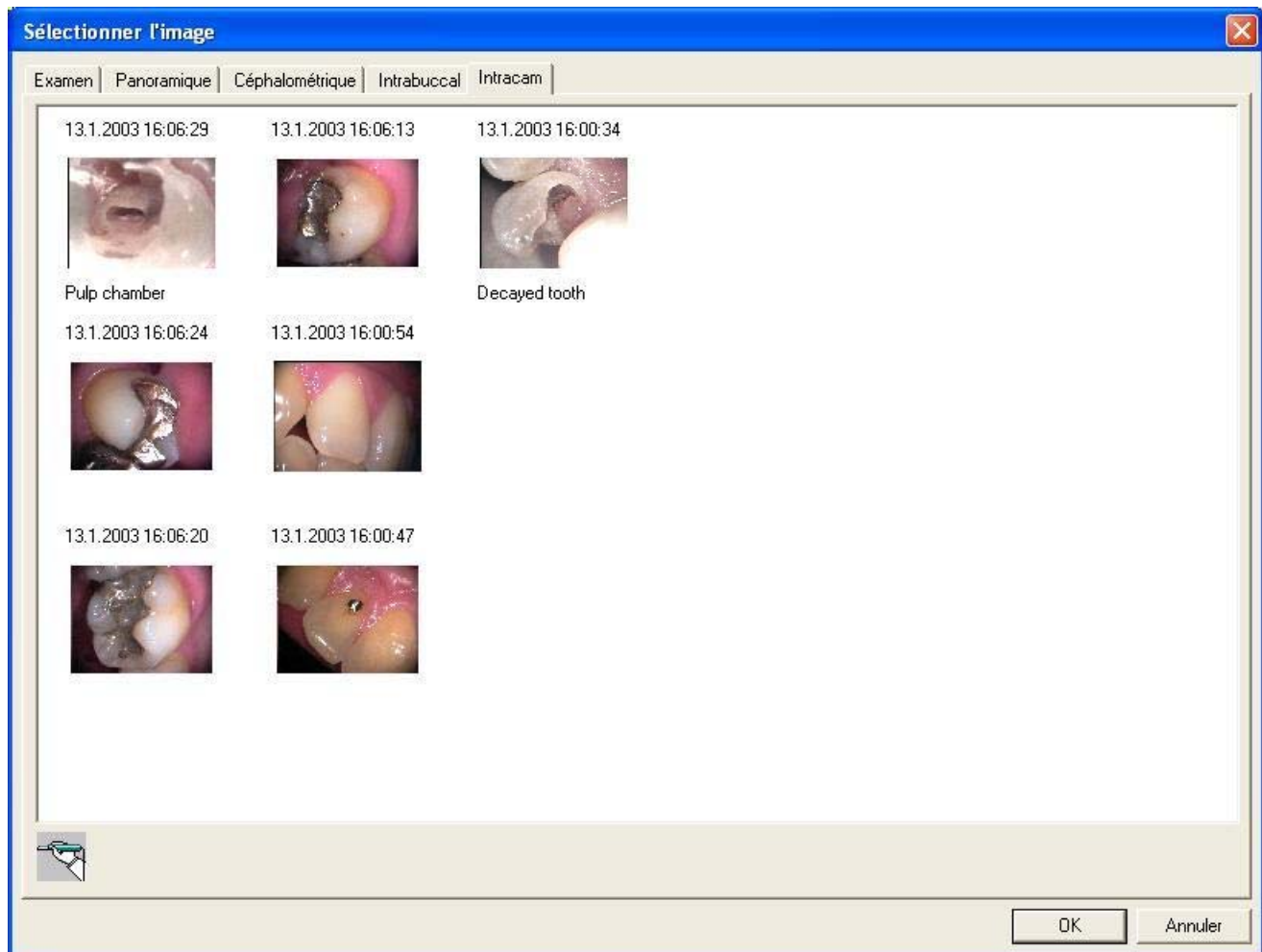

4.3 Sélection selon schéma dentaire

On peut sélectionner les images intrabuccales du patient à l'aide d'un navigateur dentaire. La sélection du système d'identification dentaire se fait depuis la page à onglet **Paramètres généraux/Intrabuccal**, se reporter à la section 9.1.6 "Intrabuccal" à la page 135. Dans le système FDI/ISO, les dents sont identifiées par un code à deux chiffres: le premier chiffre identifie le quadrant et le second chiffre identifie la dent. Dans le système ADA, les dents sont identifiées par des numéros consécutifs.

Cliquer sur le bouton *Sélectionner selon schéma dentaire* de la barre d'outils supérieure ou choisir la commande **Sélectionner selon schéma dentaire** dans le menu déroulant **Image** pour afficher la fenêtre **Dents**.




Bouton
Sélectionner selon
schéma dentaire


Nombre d'images contenant cette dent

Numéro de la dent

Système FDI/ISO

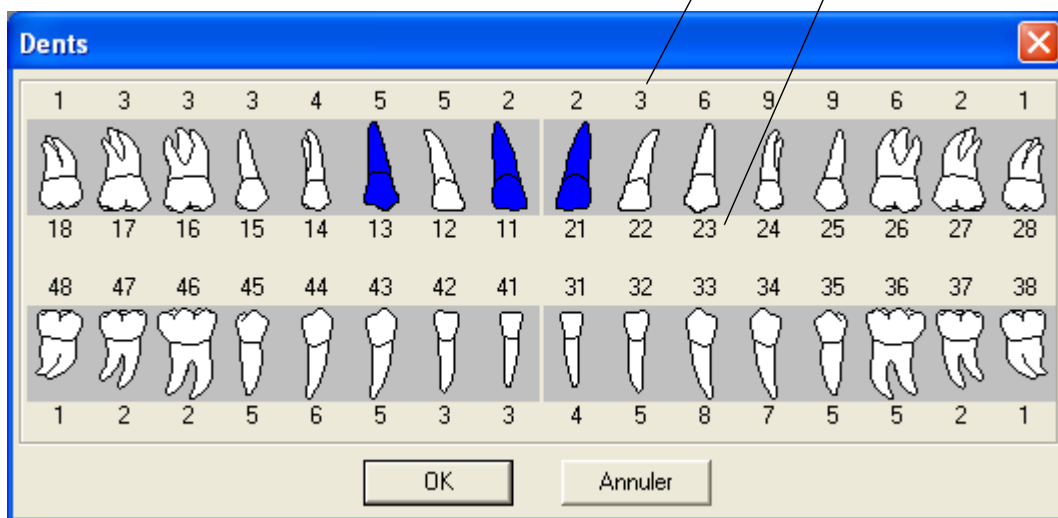

Système ADA

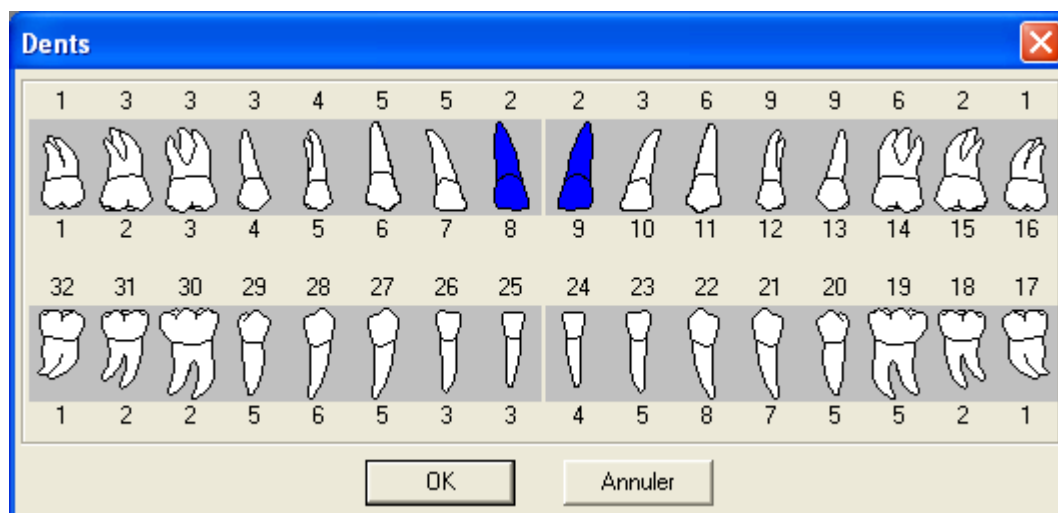


Sélectionner les dents souhaitées en cliquant sur les images de ces dents dans la fenêtre **Dents**. Les dents sélectionnées apparaissent colorées en bleu. Le numéro figurant au-dessus de la dent indique le nombre d'images contenant cette dent.

Cliquer sur **OK** pour afficher la fenêtre **Sélectionner l'image/Intrabuccal** avec uniquement les images des dents sélectionnées.

4.4 Navigateur

On peut sélectionner les images panoramiques, céphalométriques, intrabuccales et Intracam du patient à l'aide du Navigateur. La sélection du système d'identification dentaire se fait depuis la page à onglet **Paramètres généraux/Intrabuccal**, se reporter à la section 9.1.6 "Intrabuccal" à la page 135. Dans le système FDI/ISO, les dents sont identifiées par un code à deux chiffres: le premier chiffre identifie le quadrant et le second chiffre identifie la dent. Dans le système ADA, les dents sont identifiées par des numéros consécutifs.

Cliquer sur le bouton *Navigateur* de la barre d'outils supérieure ou sélectionner la commande **Navigateur** dans le menu déroulant **Image** pour afficher la fenêtre **Navigateur**. Les positions des images intrabuccales du côté droit de la fenêtre sont définies dans l'une des fenêtres **Cliché intrabuccal** ou **Paramètres image intrabuccale** à l'aide des flèches de spécification du décalage de la dent d'extrême gauche dans le coin inférieur gauche de la fenêtre. Les flèches de décalage permettent d'indiquer la position de la dent d'extrême gauche dans la fenêtre **Navigateur**. Cette fonction permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble des images disponibles.

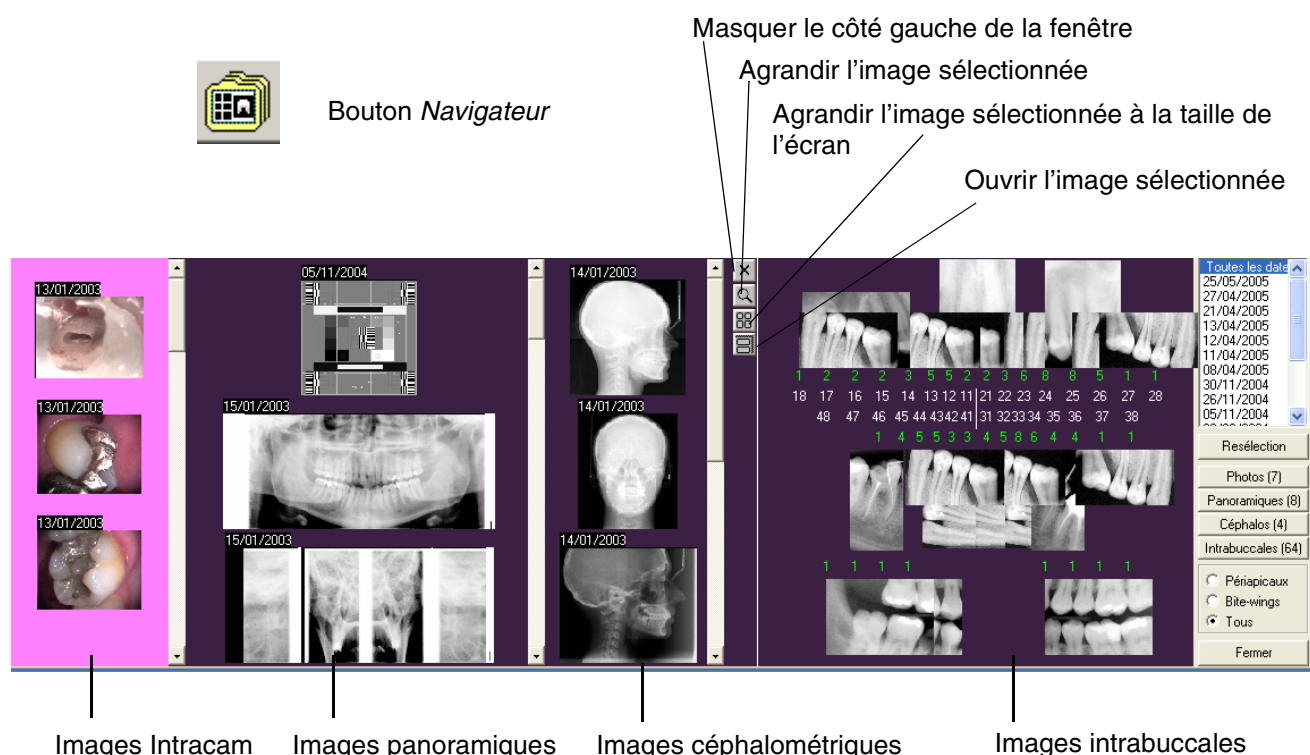

Il est conseillé d'utiliser la couleur de fond par défaut, le violet, dans la fenêtre **Navigateur**. La sélection de la couleur de fond se fait depuis la page à onglet **Paramètres généraux/Fenêtre**, se reporter à la section 9.1.3 "Fenêtre" à la page 132.


Sélectionner les images à afficher dans la fenêtre **Navigateur** dans la liste qui se trouve dans le coin supérieur droit de cette fenêtre: *Toutes les dates* affiche toutes les images intrabuccales du patient et les séries d'images correspondant à un examen complet de l'ensemble de la bouche s'affichent lorsque l'on sélectionne la date correspondante.


Sélectionner les images à afficher dans la liste du côté droit de la fenêtre: *Photographies* affiche les images Intracam, *Panoramiques* les images panoramiques, *Céphalométriques* les images céphalométriques et *Intrabuccales* les images intrabuccales.

Sélectionner *Périapicaux*, *Bite-wings* ou *Tous* dans la liste du coin inférieur droit de la fenêtre selon que l'on souhaite visualiser les images des mâchoires supérieure et inférieure, les images interproximales ou les deux.


Sélectionner les dents de son choix en cliquant sur les numéros de ces dents dans la partie droite de la fenêtre **Navigateur**. Les dents sélectionnées apparaissent en vert et la ou les images de ces dents s'affichent dans la partie gauche de la fenêtre. Les numéros figurant au-dessus ou en dessous du numéro de la dent indiquent le nombre d'images contenant cette dent. Les images de la mâchoire supérieure sont affichées au-dessus des numéros des dents et les images de la mâchoire inférieure en dessous de ces numéros.


Pour sélectionner une nouvelle série d'images, cliquer sur le bouton *Réselection* du côté droit de la fenêtre.

Pour masquer le volet gauche, cliquer sur . Si l'on n'a pas sélectionné un type d'images du côté droit de la fenêtre (*Photographies*, *Panoramiques*, *Céphalométriques* ou *Intrabuccales*), le volet de gauche demeure également masqué.

Cliquer sur l'image à agrandir, puis cliquer sur le bouton *Zoom avant* . Si l'on clique sur le bouton *Zoom avant* avant d'avoir sélectionné l'image à agrandir, le message ci-dessous s'affiche. Cliquer sur *OK* et commencer par sélectionner l'image à agrandir.



Cliquer sur l'image à agrandir, puis cliquer sur le bouton *Zoom plein écran* . Si l'on clique sur le bouton *Zoom plein écran* avant d'avoir sélectionné l'image à agrandir, le message ci-dessous s'affiche. Cliquer sur *OK* et commencer par sélectionner l'image à agrandir. Fermer la fenêtre Zoom plein écran en cliquant sur *Fermer*.

Cliquer sur l'image à ouvrir, puis cliquer sur le bouton *Ouvrir l'image sélectionnée* . Si l'on clique sur le bouton *Ouvrir l'image sélectionnée* avant d'avoir sélectionné l'image à ouvrir, le message ci-dessous s'affiche. Cliquer sur *OK* et commencer par sélectionner l'image à ouvrir.

Cliquer deux fois sur les images du côté gauche de la fenêtre pour les ouvrir. Fermer la fenêtre **Navigateur** en cliquant une nouvelle fois sur le bouton **Navigateur** de la barre d'outils supérieure, en sélectionnant à nouveau la commande **Navigateur** dans le menu déroulant **Image** ou en cliquant sur le bouton *Fermer* en bas à droite de la fenêtre **Navigateur**.

5 PRISE D'UN CLICHÉ

5.1 Prise d'un cliché céphalométrique


Sélectionner un patient comme décrit à la section 2.2 "Sélection du patient" à la page 7.

Cliquer sur le bouton *Cliché céphalométrique* ou, dans la fenêtre **Sélectionner l'image**, sélectionner l'onglet *Céphalométrique*.



Cliché céphalométrique


Dans la fenêtre **Sélectionner l'image**, cliquer sur le bouton *Nouveau*.

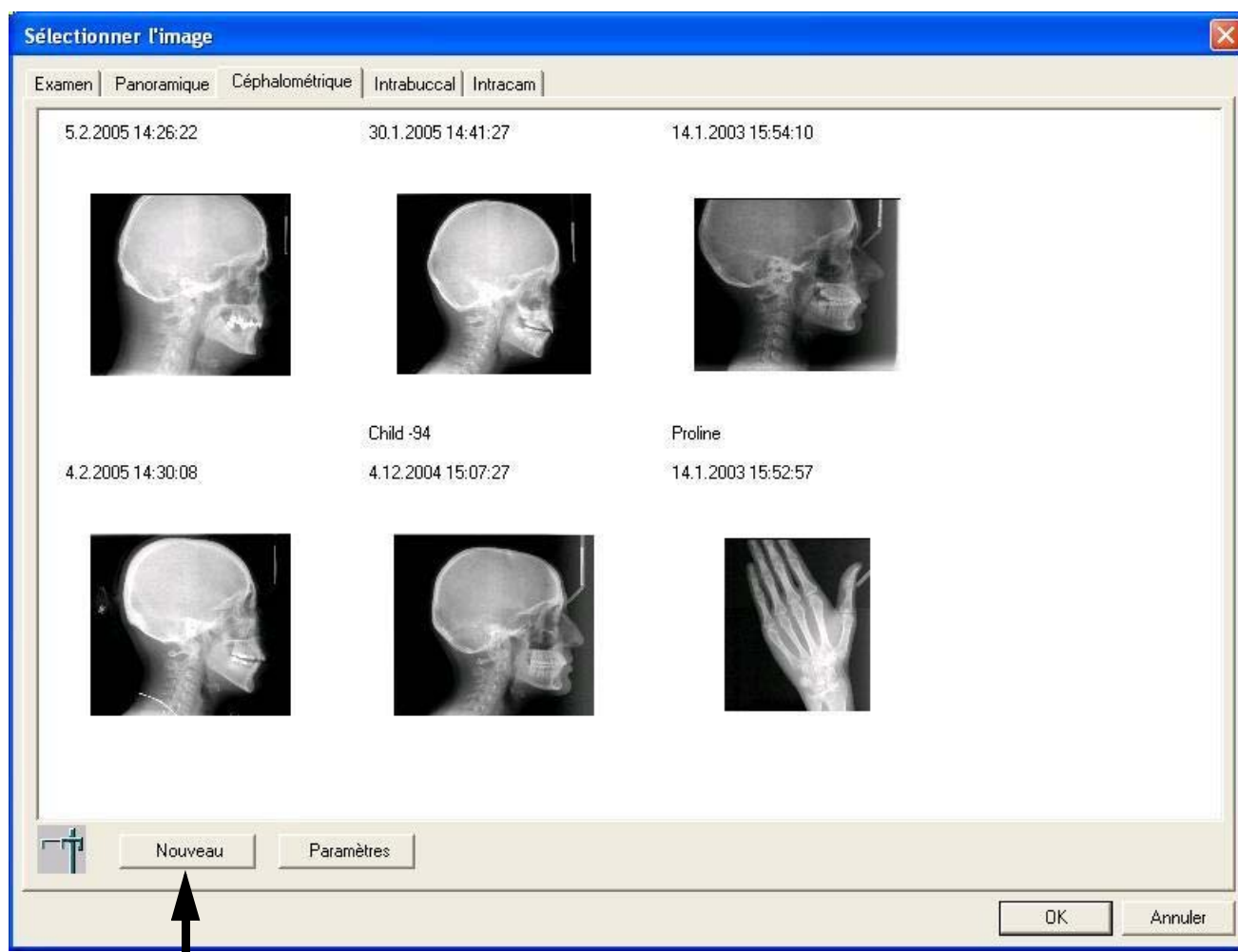

La fenêtre **Cliché céphalométrique** s'affiche avec le message *Prêt*. Préparer le patient en vue de l'exposition, amener le céphalostat en position Prêt et sélectionner les paramètres d'exposition. Se référer au manuel d'utilisation du logiciel Dimax3.


La fenêtre **Cliché céphalométrique** permet de sélectionner un *Utilisateur* dans la liste de sélection correspondante (voir ci-dessous).

La liste de sélection de l'utilisateur est également disponible dans les fenêtres **Cliché panoramique** et **Cliché intrabuccal** (se reporter aux sections 5.2 "Prise d'un cliché panoramique" à la page 46 et 5.3 "Prise d'un image intrabuccale" à la page 51).

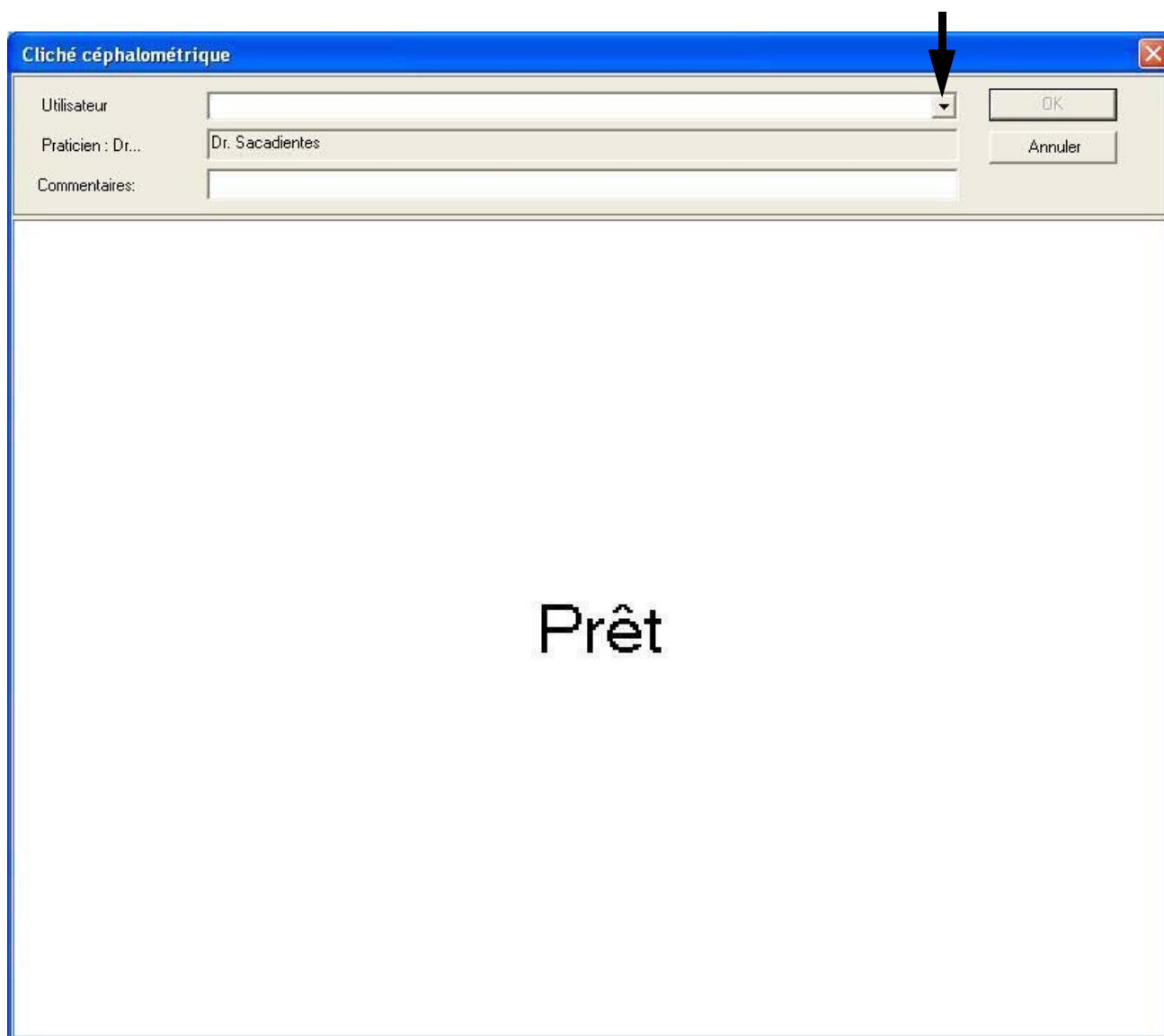


PRISE D'UN CLICHÉ

Lorsque le céphalostat se trouve en position Prêt, le message suivant s'affiche. On peut alors prendre le cliché.

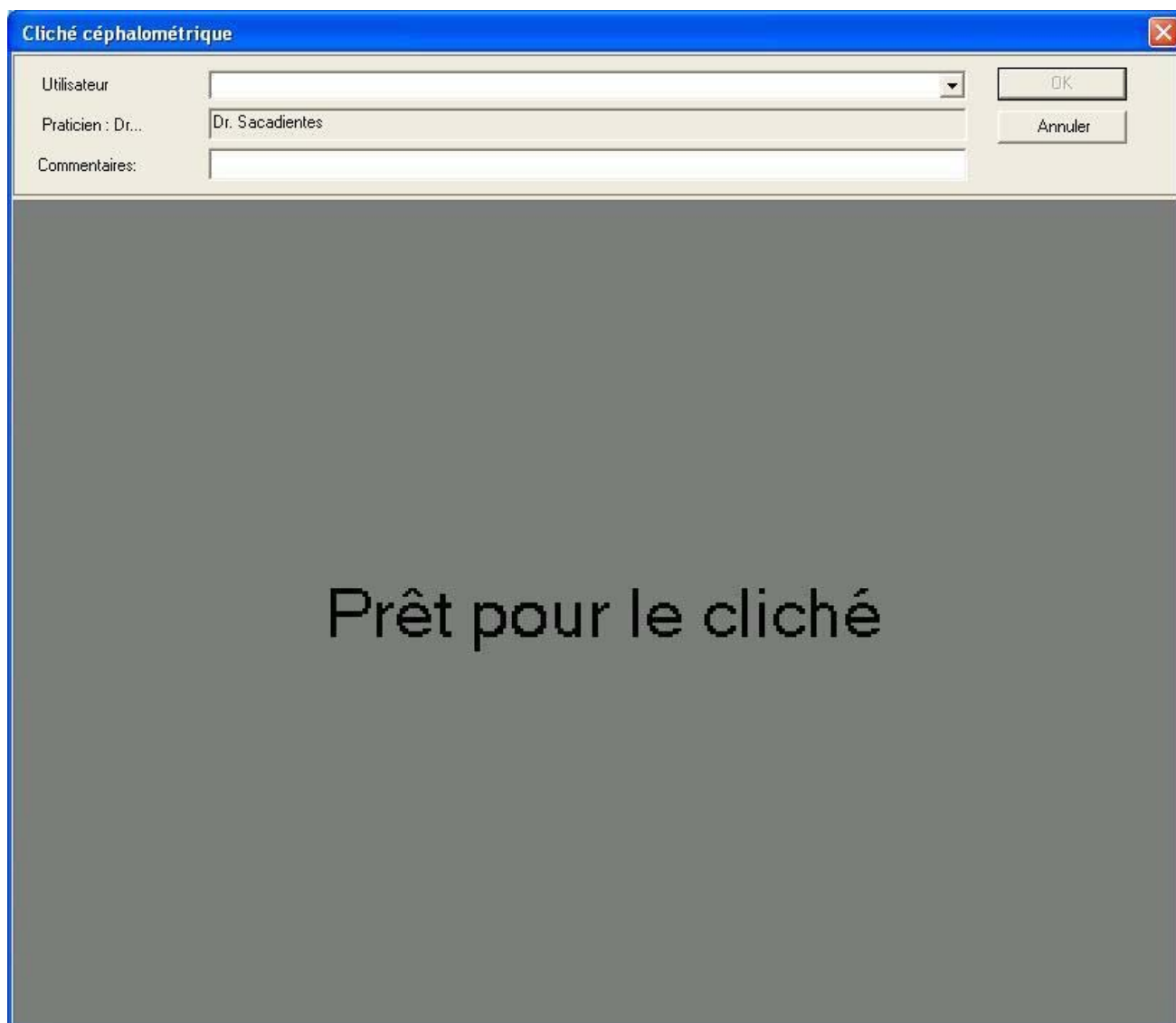


Pour interrompre la procédure d'exposition après que la fenêtre **Cliché céphalométrique** soit apparue à l'écran, appuyer sur la touche **ESC**. Le message ci-dessous s'affiche. Si l'on ne veut pas interrompre la procédure, cliquer sur *Non*.

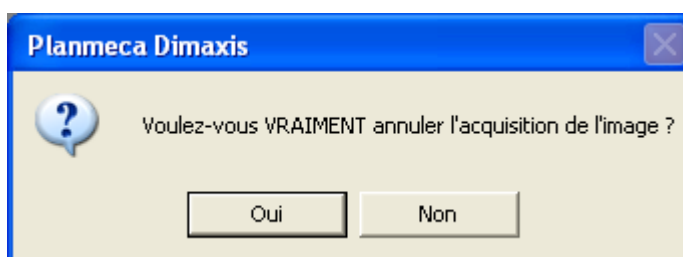


A la section 9.1.4 "Image panoramique" à la page 133, on peut configurer le système de telle sorte qu'il soit impossible de rejeter des images pendant l'exposition. Dans ce cas, le bouton *Annuler* de la fenêtre **Cliché céphalométrique** est inactivé.

Si l'on clique sur *Oui*, on peut fermer la fenêtre **Cliché céphalométrique** en cliquant sur le bouton *Annuler*. Le message ci-dessous s'affiche. Cliquer sur *Oui* pour fermer la fenêtre **Cliché céphalométrique** ou sur *Non* pour revenir à cette fenêtre.

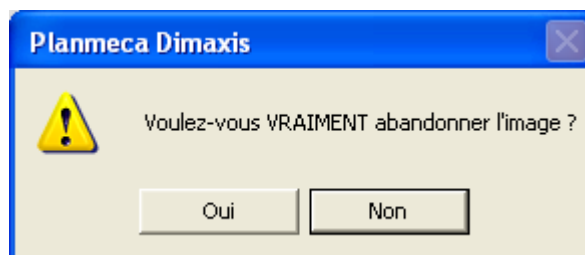


Après la prise du cliché, l'image s'affiche dans la fenêtre **Cliché céphalométrique**. Introduire les informations nécessaires et accepter l'image en cliquant sur *OK*. **Garder en mémoire que seules les images acceptées seront enregistrées dans la base de données.**

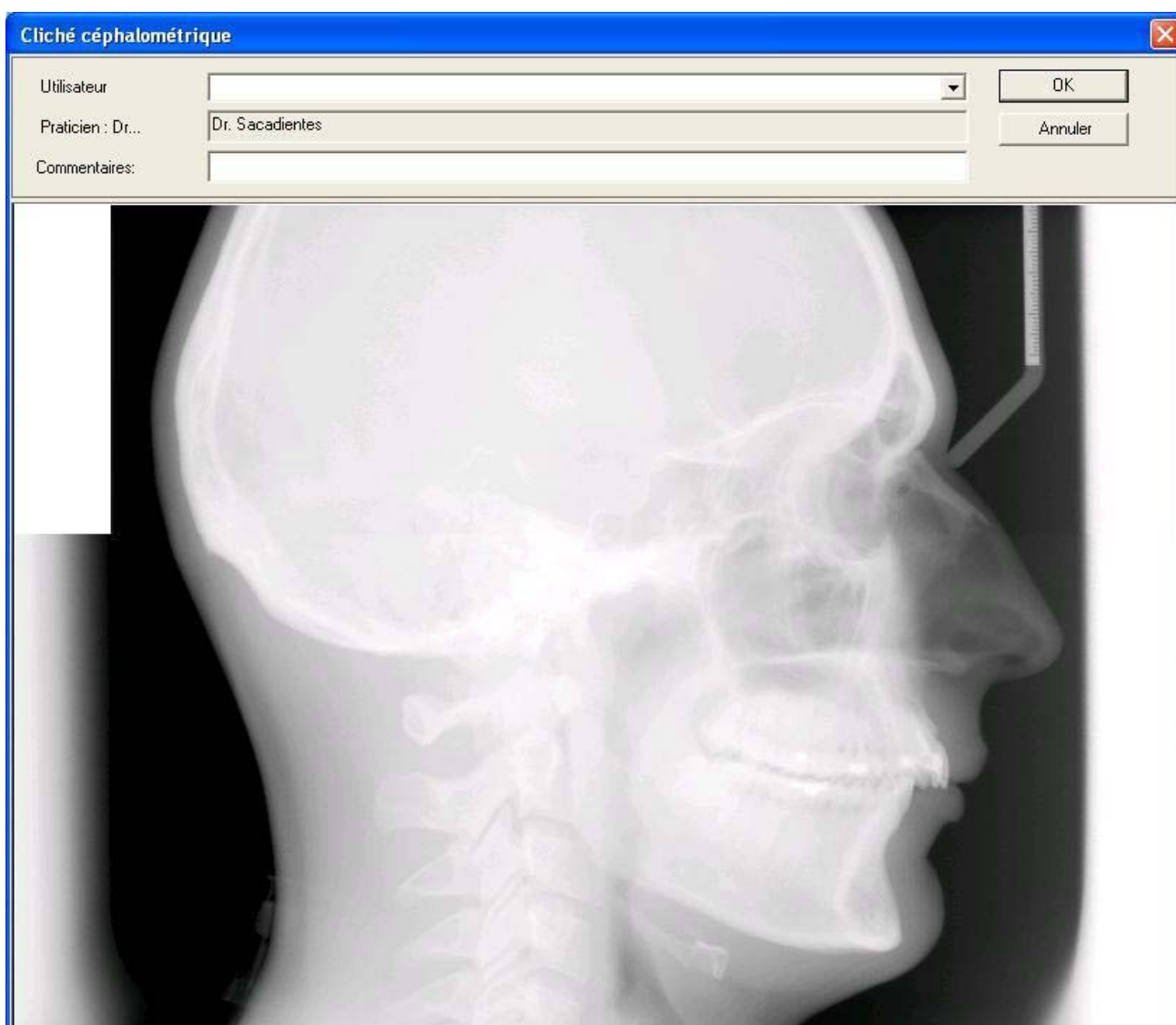


PRISE D'UN CLICHÉ

Les paramètres d'exposition sont affichés dans la fenêtre **Paramètres d'image céphalométrique** qui apparaît lorsque l'on clique sur le bouton *Paramètres* de la fenêtre **Sélectionner l'image**.

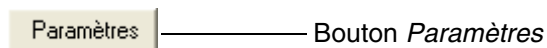

On peut également ouvrir la fenêtre **Paramètres d'image céphalométrique** en sélectionnant la commande **Paramètres d'image** dans le menu déroulant **Affichage**, qui devient disponible lorsqu'une image est ouverte. Les boîtes de dialogue affichées varient selon que l'on a pris un cliché ou importé une image (voir également page suivante).

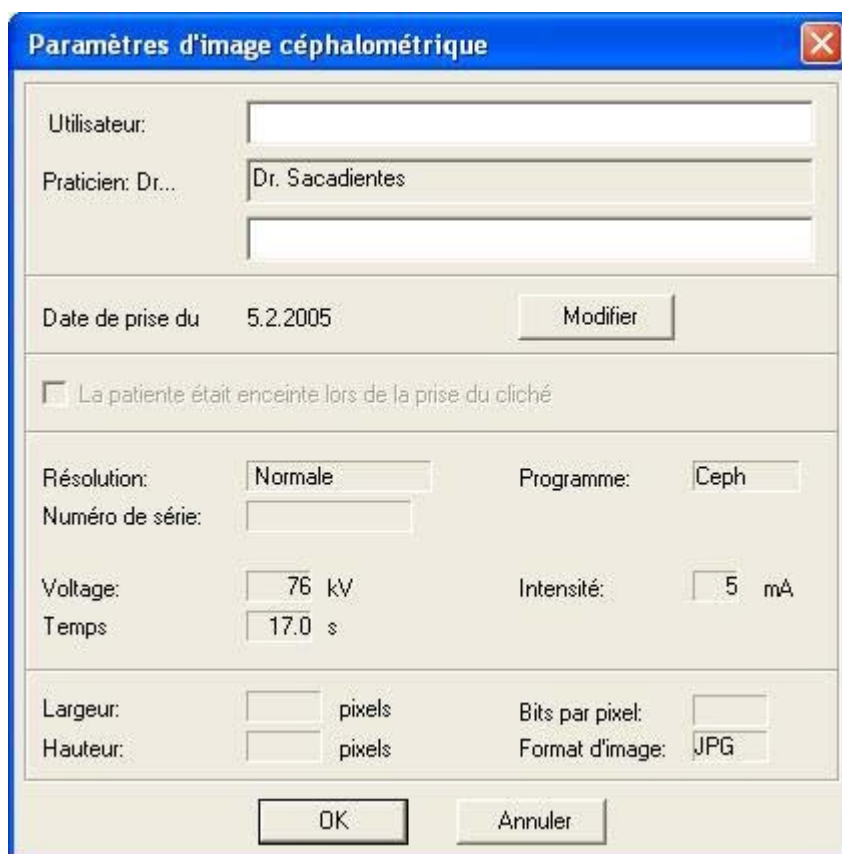

Paramètres d'image [X]

Notes concernant l'image


Utilisateur:

Praticien:

Commentaires:

Type d'image

☐ Panoramique ☒ Céphalométrique ☐ Intrabuccale ☐ Vidéo figée



Dents

Date du cliché

14/01/2003

Rotation:

Taille des pixels:

Agrandissement:

Voltage (kV):

Intensité (mA):

Temps d'exposition:

Largeur (pixels):

Hauteur (pixels):

Bits par pixel:

Format d'image:

Modalité:

OK Annuler

5.2 Prise d'un cliché panoramique


Sélectionner un patient comme décrit à la section 2.2 "Sélection du patient" à la page 7.

Cliquer sur le bouton *Cliché panoramique* ou, dans la fenêtre **Sélectionner l'image**, choisir l'onglet *Panoramique*.




Cliché panoramique

Dans la fenêtre **Sélectionner l'image**, cliquer sur le bouton *Nouveau*.

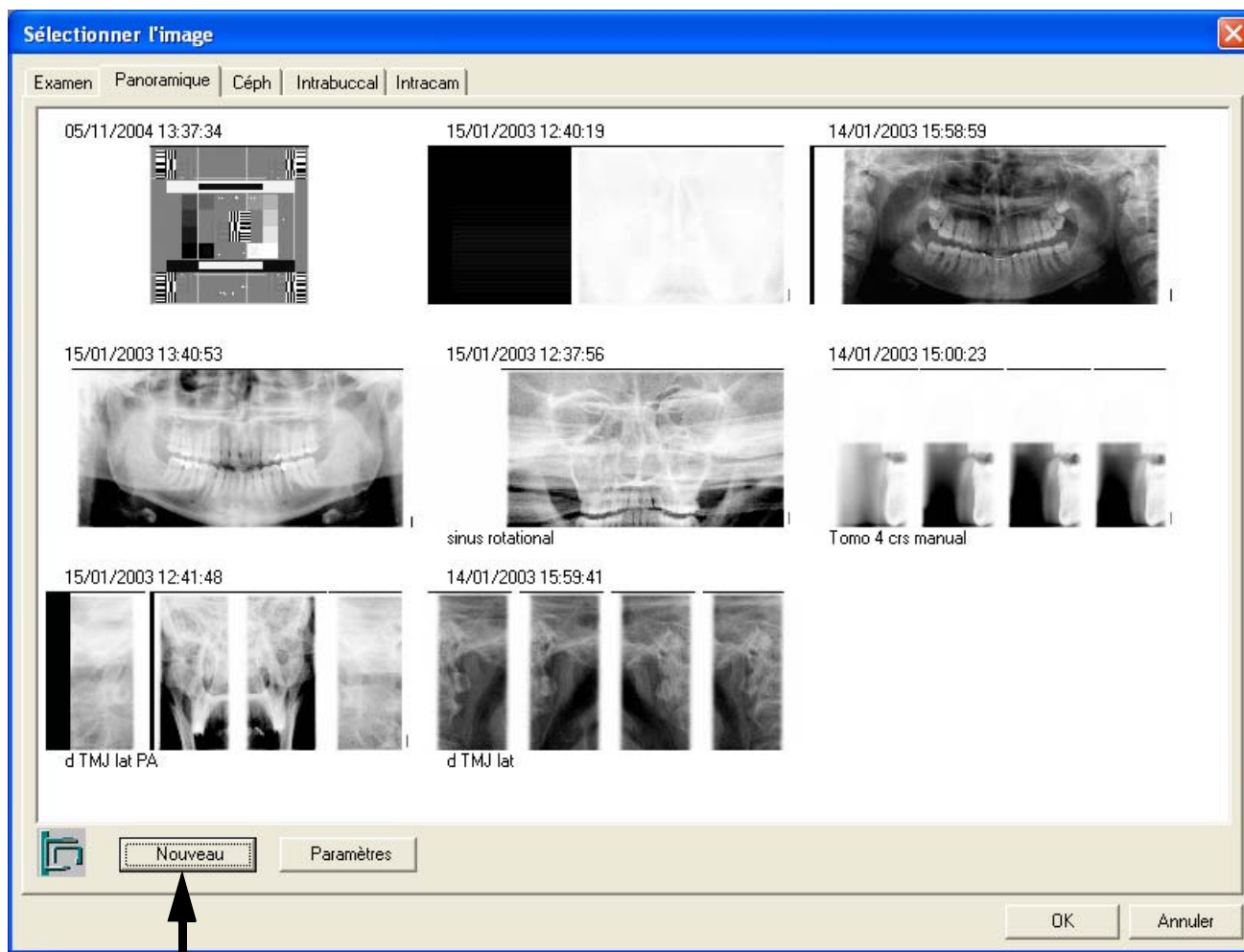


La fenêtre **Image panoramique** s'affiche avec le message *Prêt*. Préparer le patient en vue de l'exposition, sélectionner les paramètres d'exposition et amener l'appareil à rayons X en position Prêt. Se référer au manuel d'utilisation de l'appareil à rayons X panoramique.

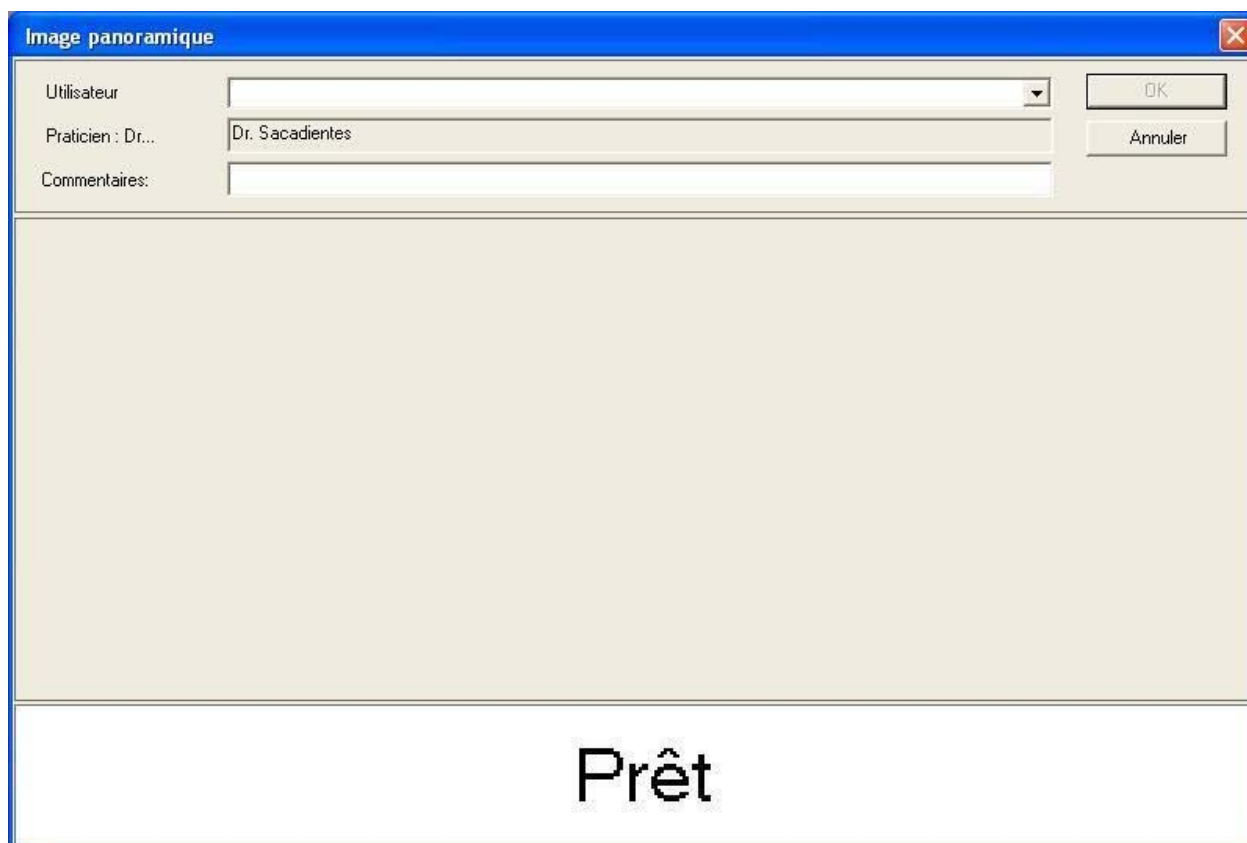

The screenshot shows a software window titled "Image panoramique" with a blue header bar. Inside the window, there is a form with three input fields: "Utilisateur" (a dropdown menu), "Praticien : Dr..." (a text field containing "Dr. Sacadientes"), and "Commentaires:" (a text field). To the right of these fields are two buttons: "OK" and "Annuler". Below the form is a large, empty rectangular area. At the bottom of the window, there is a white rectangular box containing the word "Prêt" in a large, bold, black font.


Lorsque l'appareil panoramique se trouve en position Prêt, le message suivant s'affiche. On peut alors prendre le cliché.




This screenshot is identical to the one above, showing the "Image panoramique" window with the same form fields and buttons. However, the large rectangular area in the center is now filled with a solid gray color. At the bottom of the window, the white box has been replaced by a gray box containing the text "Prêt pour le cliché" in a large, bold, black font.

PRISE D'UN CLICHÉ


Pour interrompre la procédure d'exposition après que la fenêtre **Image panoramique** soit apparue à l'écran, appuyer sur la touche **ESC**. Le message ci-dessous s'affiche. Si l'on ne veut pas interrompre la procédure, cliquer sur **Non**.

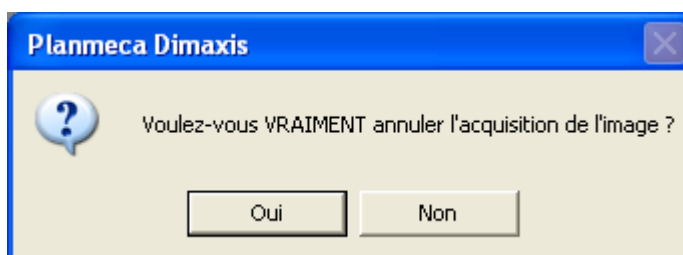

Si l'on clique sur **Oui**, on peut fermer la fenêtre **Image panoramique** en cliquant sur le bouton **Annuler**. Le message ci-dessous s'affiche. Cliquer sur **Oui** pour fermer la fenêtre **Image panoramique** ou sur **Non** pour revenir à cette fenêtre.

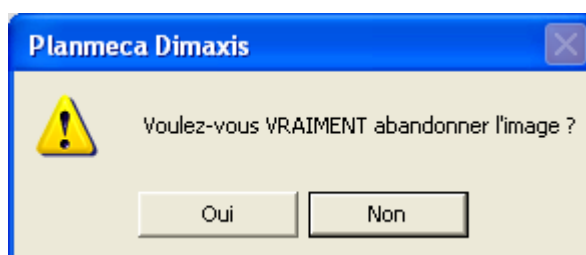

Après la prise du cliché, l'image s'affiche dans la fenêtre **Image panoramique**. Introduire les informations nécessaires et accepter l'image en cliquant sur **OK**. **Garder en mémoire que seules les images acceptées seront enregistrées dans la base de données.**

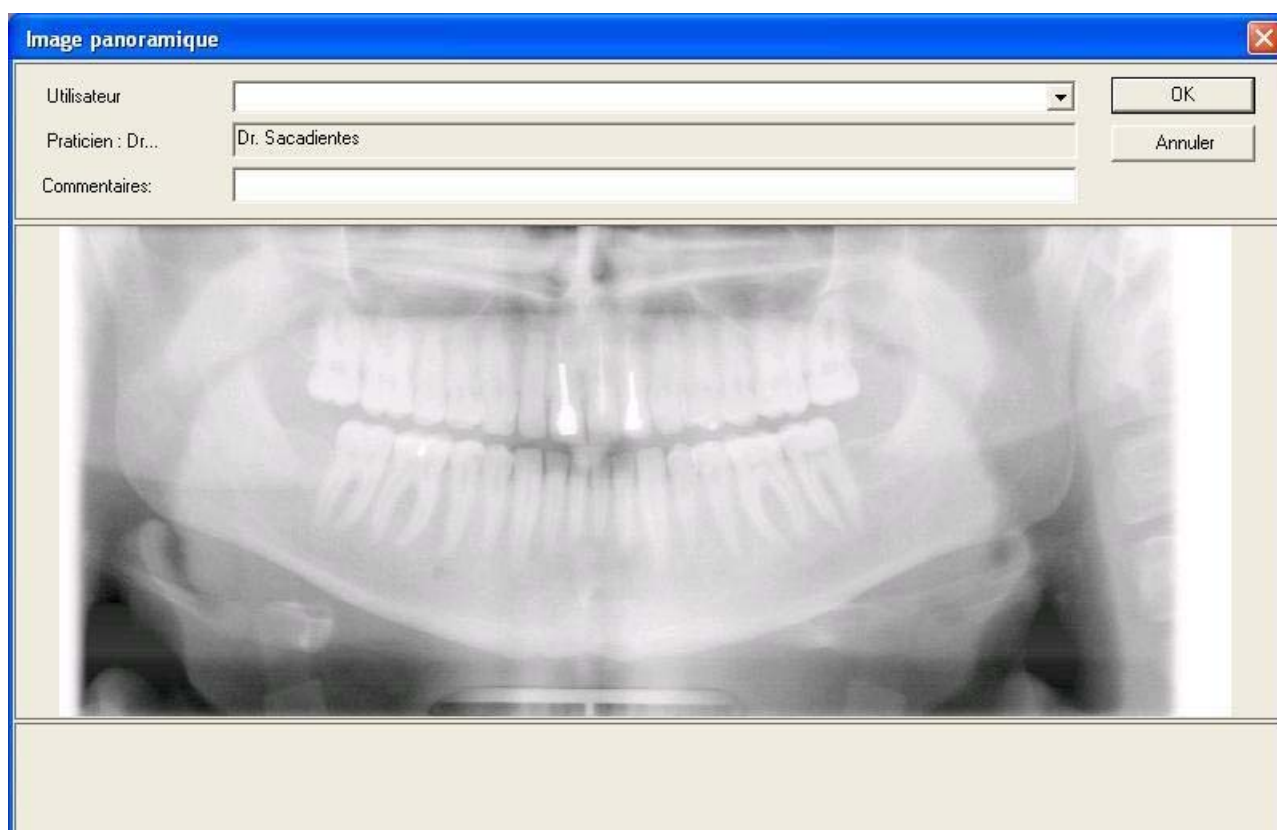

REMARQUE On notera que si l'on a utilisé l'un des programmes spéciaux de l'appareil panoramique (Double ATM, ATM de profil, Système de découpage transversal), on peut prendre plusieurs clichés dans une même image. Entre les clichés, les messages **Prêt** et **Prêt pour le cliché** s'affichent.

Les paramètres d'exposition sont affichés dans la fenêtre **Paramètres des images panoramiques** qui apparaît lorsque l'on clique sur le bouton *Paramètres* de la fenêtre **Sélectionner l'image**.

Paramètres

Bouton Paramètres

On peut également ouvrir la fenêtre **Paramètres d'image panoramique** en sélectionnant la commande **Paramètres d'image** dans le menu déroulant **Affichage**, qui devient disponible lorsqu'une image est ouverte. Les boîtes de dialogue affichées varient selon que l'on a pris un cliché ou importé une image (voir également page suivante).

Paramètres d'image panoramique [X]

Utilisateur:				Date du cliché:	12/09/2005	Modifier
Praticien:	Test Clini			<input type="checkbox"/> La patiente était enceinte lors de la prise du cliché		
Vue : 1 sur 1						
Programme:		Nom du programme		Nom du programme		
Voltage (kV):		Courant (mA):		Temps d'exposition	0.000	Nb Total d'expositions: 0.000
DAP (mGy*cm2):	0.0					
Mode Enfant:	Non	Taille Mâchoire:	Normale	Forme Mâchoire:	Normale	Agrandissement: 0.0
Position Plan de	0	Segment masqué	12345	Segment masqué	123	
Angle ATM		Pos ATM gauche		Angle ATM droit:		Pos ATM droit (mm):
Type Tomo:		Côté Tomo:		Taille Tomo:		Cible Tomo:
Tomo x:		Tomo y:		Distance Tomo(mm):		Epaisseur Coupe (mm):
Angle Tomo:						
Nom de l'appareil:				Version SW de		
Numéro de série du						
Largeur (pixels):		Hauteur (pixels):		Bits Par Pixel:		
Format d'image:	TIF	Résolution:	Normale			
OK Annuler						

Paramètres d'image

Notes concernant l'image


Utilisateur:

Praticien:

Commentaires:

Type d'image

☒ Panoramique ☐ Céphalométrique ☐ Intrabuccale ☐ Vidéo figée



Dents

Date du cliché

14/01/2003

Rotation:

Taille des pixels

Agrandissement:

Voltage (kV):

Intensité (mA):

Temps d'exposition

Largeur (pixels):

Hauteur (pixels):

Bits par pixel:

Format d'image:

Modalité:

OK

Annuler

5.3 Prise d'un image intrabuccale

Sélectionner un patient comme décrit à la section 2.2 "Sélection du patient" à la page 7.


Cliquer sur le bouton *Image intrabuccale* de la barre d'outils supérieure.



Image intrabuccale

On peut spécifier si l'on souhaite utiliser des examens pour les clichés intraoraux. Se reporter à la section 9.1.7 "Examen (Optionnel aux Etats-Unis uniquement)" à la page 136.

La fenêtre **Sélectionner un examen** s'affiche (*Optionnel aux Etats-Unis uniquement*). On a le choix entre ouvrir un nouvel examen ou poursuivre un examen partiellement complété. Sélectionner l'examen de son choix et cliquer sur **OK**.

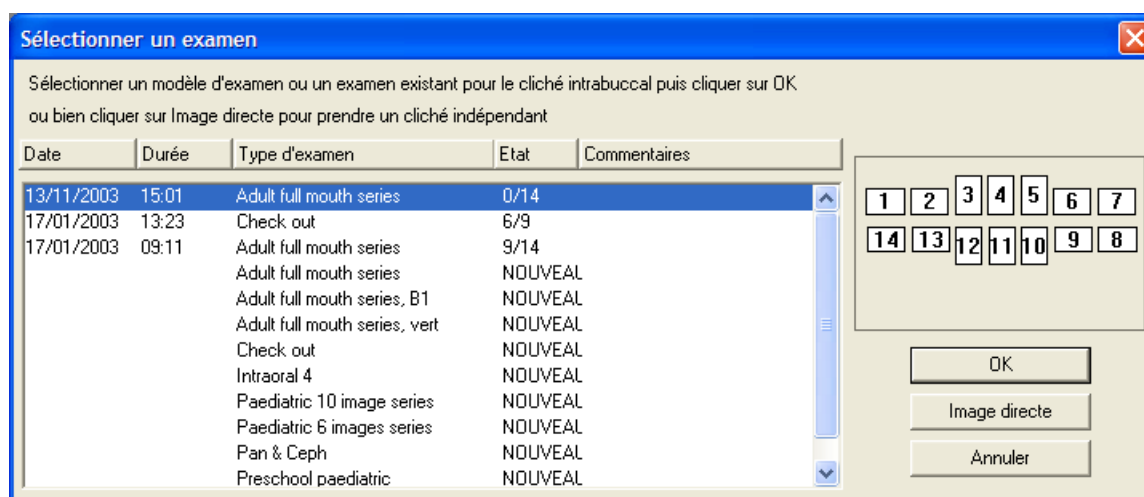


REMARQUE Pour prendre un image intrabuccale sans utiliser un modèle d'examen, cliquer sur le bouton *Image directe* de la fenêtre *Sélectionner un examen*.

PRISE D'UN CLICHÉ

On peut également prendre un image intrabuccale **unique** sans utiliser un modèle d'examen en sélectionnant l'onglet *Intrabuccal* de la fenêtre **Sélectionner l'image** et en cliquant sur le bouton *Nouveau*.

Il est aussi possible de prendre un image intrabuccale unique sans utiliser un modèle d'examen en inactivant l'option *Utiliser les examens pour les images intrabuccales* dans la fenêtre **Paramètres généraux** (voir 9.1.7 "Examen (Optionnel aux Etats-Unis uniquement)" à la page 136).

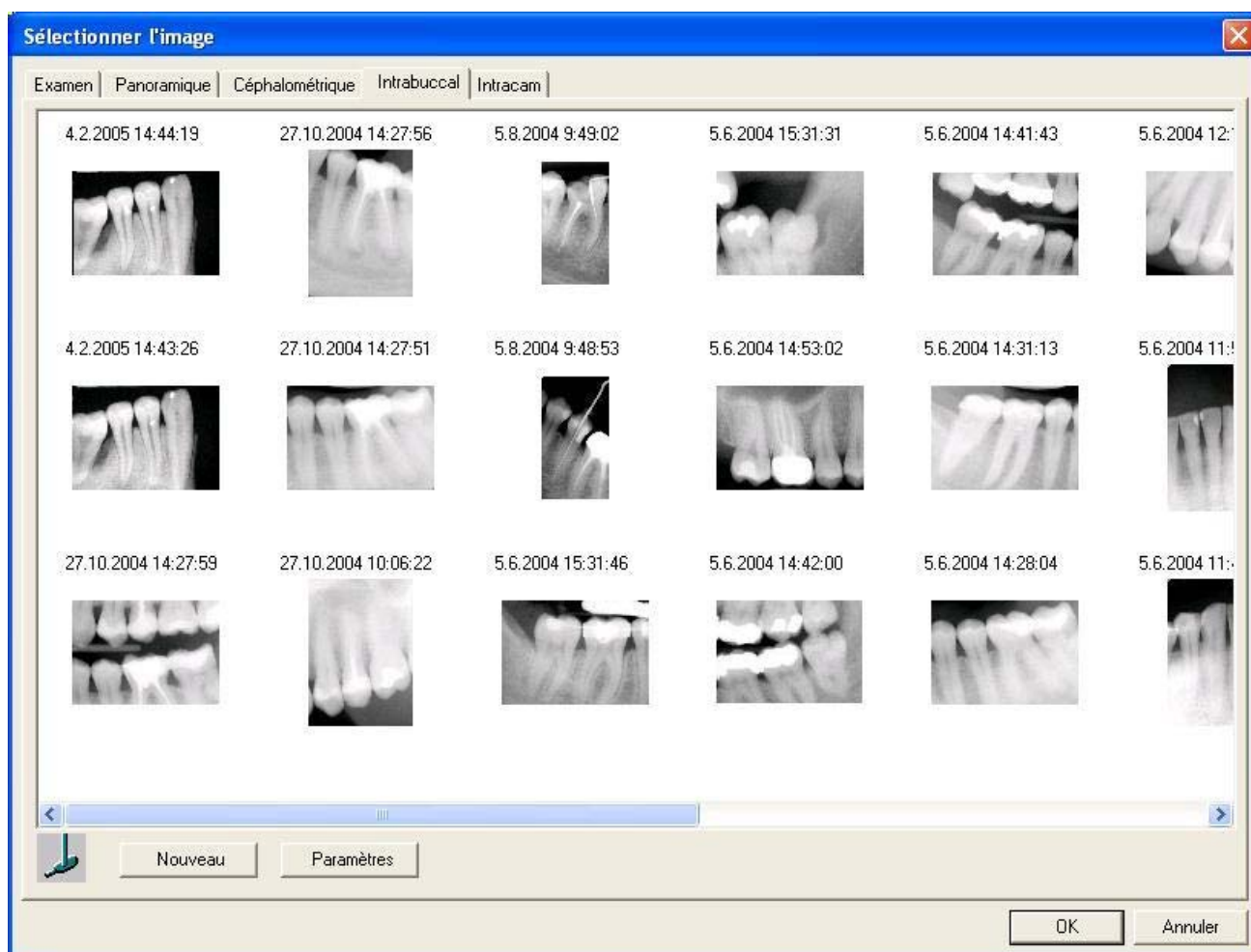


Si l'on prend un nouveau cliché en choisissant le type de cliché dans le menu déroulant ou en cliquant sur l'icône correspondante de la barre d'outils supérieure et que l'on a sélectionné l'option *Navigateur* comme méthode de sélection d'image par défaut dans la fenêtre **Paramètres généraux** (voir 9.1.2 "Image" à la page 130), la fenêtre **Navigateur** s'ouvre après la prise du cliché.

La fenêtre **Cliché intrabuccal** s'affiche. Lorsque l'appareil à rayons X est prêt, le message *Prêt pour le cliché* s'affiche dans le coin inférieur droit de la fenêtre. Préparer le patient en vue de l'exposition et sélectionner les paramètres d'exposition, se référer au manuel d'utilisation de l'appareil à rayons X Planmeca Intra. On peut alors prendre le cliché.

Dans la fenêtre **Cliché intrabuccal**, on peut contrôler les réglages de l'appareil à rayons X Planmeca Intra à l'aide du panneau de commande Intra. On peut régler les paramètres d'exposition depuis cette fenêtre à condition d'utiliser l'appareil Planmeca Intra avec la nouvelle version 3.0.3 du logiciel. La logique du panneau de commande est identique à celle de la commande à distance Planmeca Intra.

Pour que le panneau de commande Intra fonctionne, le câble de synchronisation de l'appareil Intra doit être connecté.

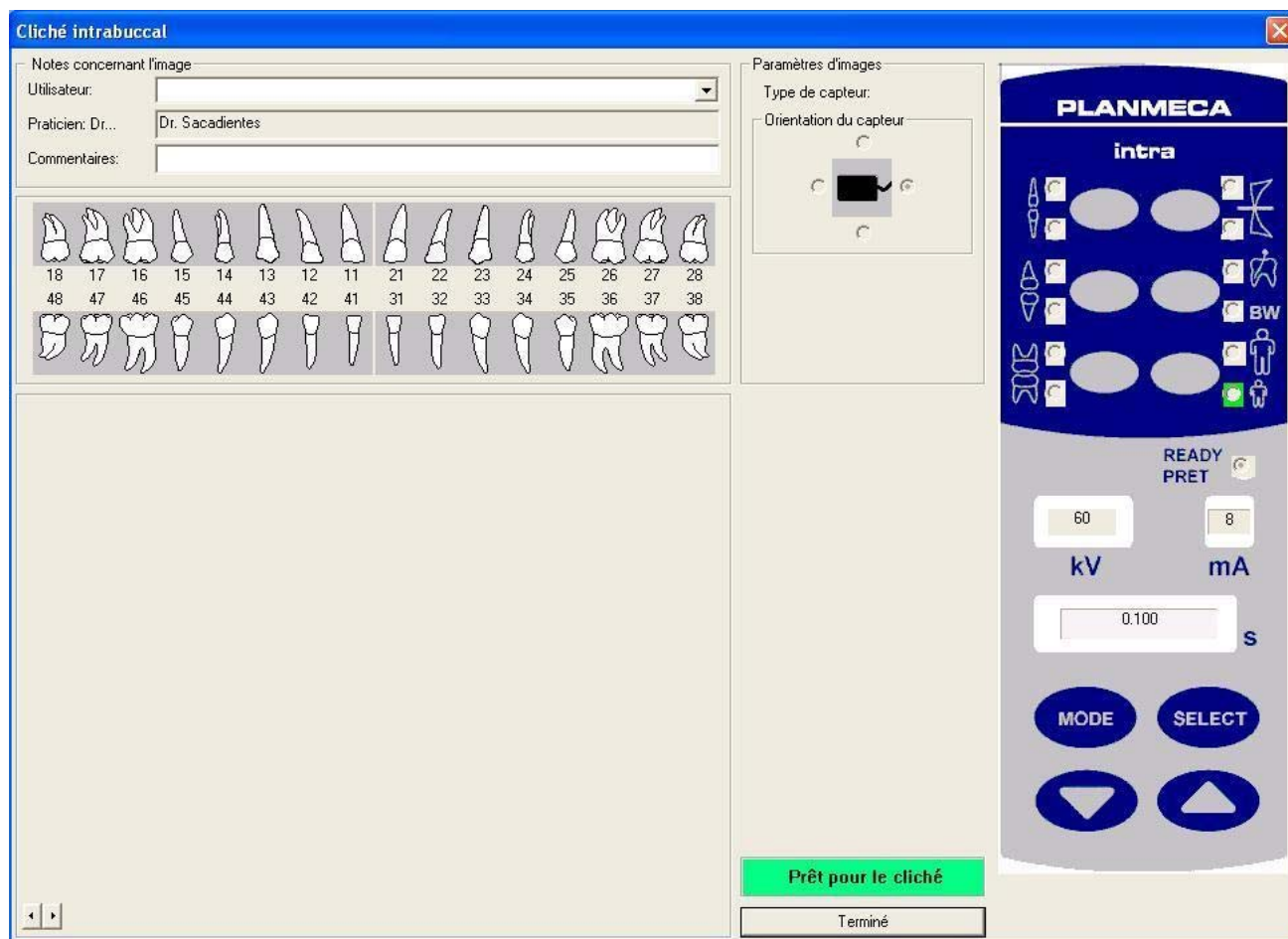

PRISE D'UN CLICHÉ

Après la prise du cliché, le message *Enregistrement de l'image* s'affiche dans le coin inférieur droit de la fenêtre pour indiquer que l'image est **automatiquement enregistrée dans la base de données**.

Cliché intrabuccal

Notes concernant l'image:

Utilisateur:

Praticien: Dr...

Commentaires:

Paramètres d'images:

Type de capteur: 0

Orientation du capteur:

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

READY
PRET

kV mA


s

MODE SELECT

Enregistrement de l'image

Terminé

Lorsque l'on utilise un modèle d'examen, le message *Prêt pour le cliché* s'affiche à nouveau et on peut prendre le cliché suivant.

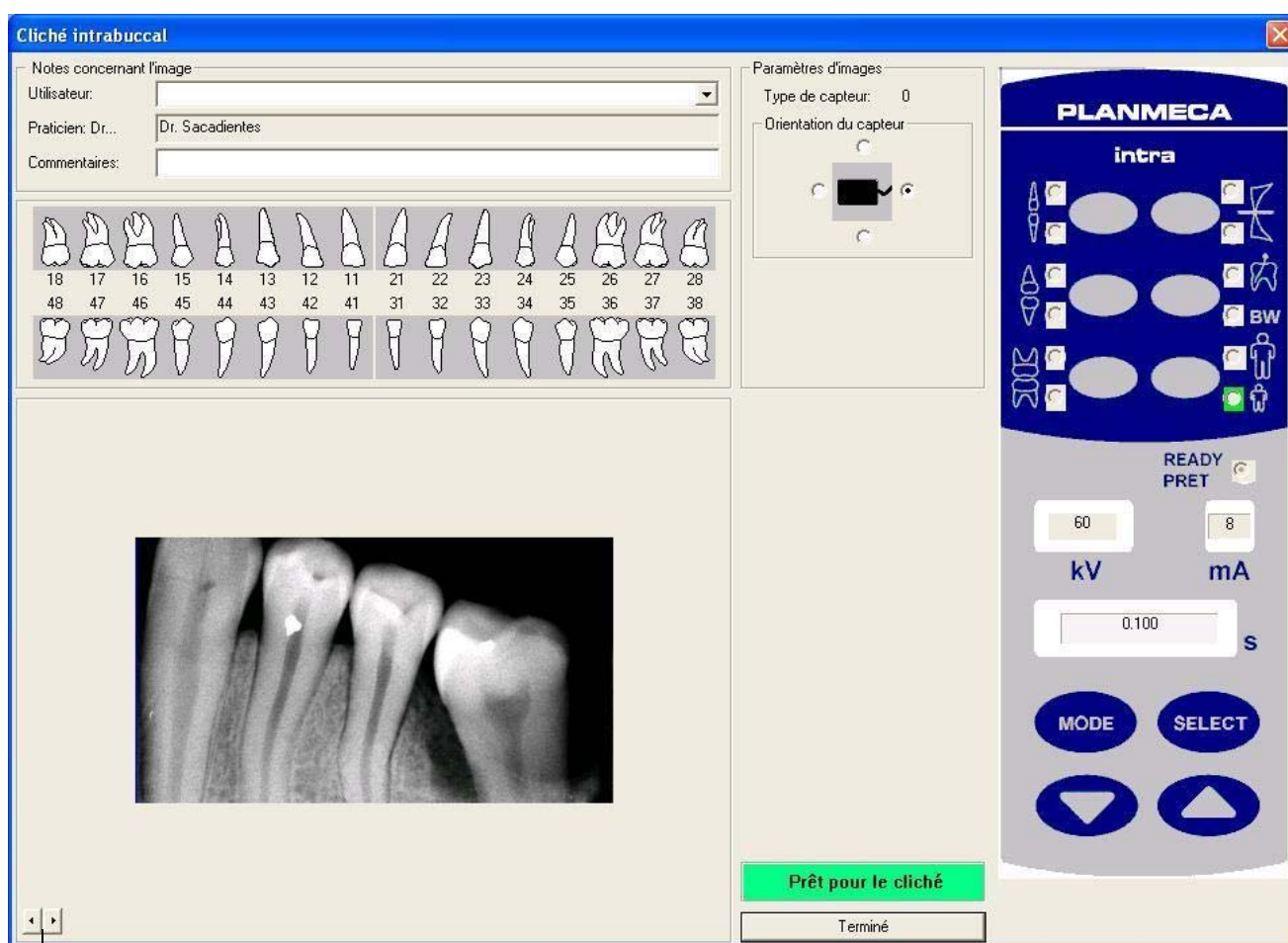

Décalage par rapport au centre de la dent d'extrême gauche sur l'image

Lorsque l'on utilise un modèle d'examen, la fenêtre **Cliché intrabuccal** affiche l'image précédente pendant l'exposition, de sorte que l'utilisateur peut voir si ce cliché doit être recommencé. On a la possibilité de modifier les paramètres suivants de l'image précédente: orientation du capteur et décalage par rapport au centre de la dent d'extrême gauche (la dent d'extrême droite pour le patient) sur l'image. Le décalage s'utilise avec la fonction **Navigateur**, se reporter à la section 4.4 "Navigateur" à la page 38.

REMARQUE Si l'on a poursuivi un précédent examen partiellement complété, les paramètres de l'image prise au cours de la précédente procédure d'exposition ne peuvent plus être modifiés dans cette fenêtre.

Lorsque l'on a pris les clichés voulus, cliquer sur *Terminé*.

Si on a utilisé un modèle d'examen, la fenêtre **Examen** s'affiche. Cliquer sur l'image de son choix, puis sur **OK** pour ouvrir une image. Pour ouvrir plusieurs image, maintenir la touche **Maj** enfoncée pendant que l'on clique sur les images. Pour plus d'informations sur la fenêtre **Examen**, se reporter à la section 4.2 "Sélection d'une image" à la page 17.

REMARQUE On peut interrompre la procédure d'exposition avant que tous les clichés n'aient été pris et terminer l'examen ultérieurement.


Si l'on prend un image intrabuccale unique sans utiliser un modèle d'examen, on peut afficher les paramètres d'exposition en cliquant sur le bouton *Paramètres* de la fenêtre **Sélectionner l'image**. On peut également ouvrir la fenêtre **Paramètres image intrabuccale** en sélectionnant la commande **Paramètres d'image** dans le menu déroulant **Affichage**, qui devient disponible lorsqu'une image est ouverte.

5.4 Saisie d'images Intracam


Sélectionner un patient comme décrit à la section 2.2 "Sélection du patient" à la page 7.

La fenêtre **Saisie d'image Intracam** s'ouvre automatiquement lors de l'activation de la caméra Intracam et se ferme lorsque la caméra est remise en place. Cette fonction utilise l'interface de port série de l'appareil Planmeca Compact pour transmettre les informations en provenance de la caméra. Si une fenêtre modale est ouverte dans le logiciel Dimaxis (p.ex. la fenêtre Sélectionner l'image), il est impossible d'activer automatiquement la fonction.

Activer la caméra Intracam et cliquer sur le bouton *Intracam* de la barre d'outils supérieure ou sélectionner la commande **Intracam** dans le menu déroulant **Saisie**.

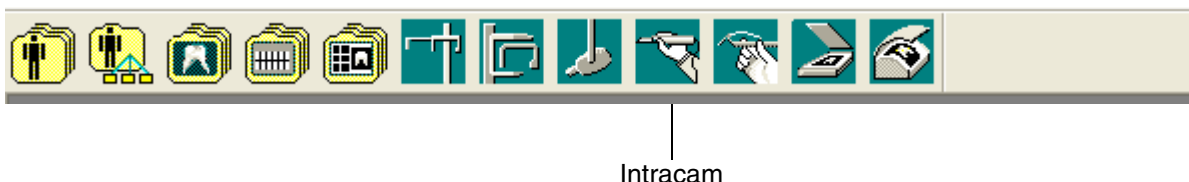


Si le pilote de carte vidéo n'est pas correctement installé, le message ci-dessous s'affiche. Cliquer sur *OK*. Réinstaller le pilote de carte vidéo.

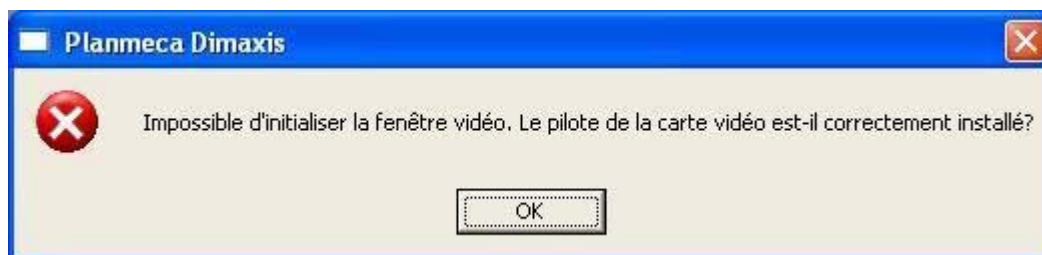

La fenêtre **Gel image Intracam** s'affiche. L'image Intracam s'affiche dans la grande fenêtre. On peut geler l'image à l'aide du bouton *Geler* et l'enregistrer à l'aide du bouton *Sauvegarder*. Dégeler l'image à l'aide du bouton *Résumé*. Les images enregistrées sont affichées sous forme de miniatures du côté droit de la grande fenêtre.

REMARQUE Les images seront enregistrées dans la base de données uniquement si on a sélectionné l'option "Save the still images permanently to the database" à la partie supérieure de la fenêtre. Sinon, les images Intracam ne seront enregistrées que temporairement et elles seront supprimées lors de la fermeture de la fenêtre d'image.

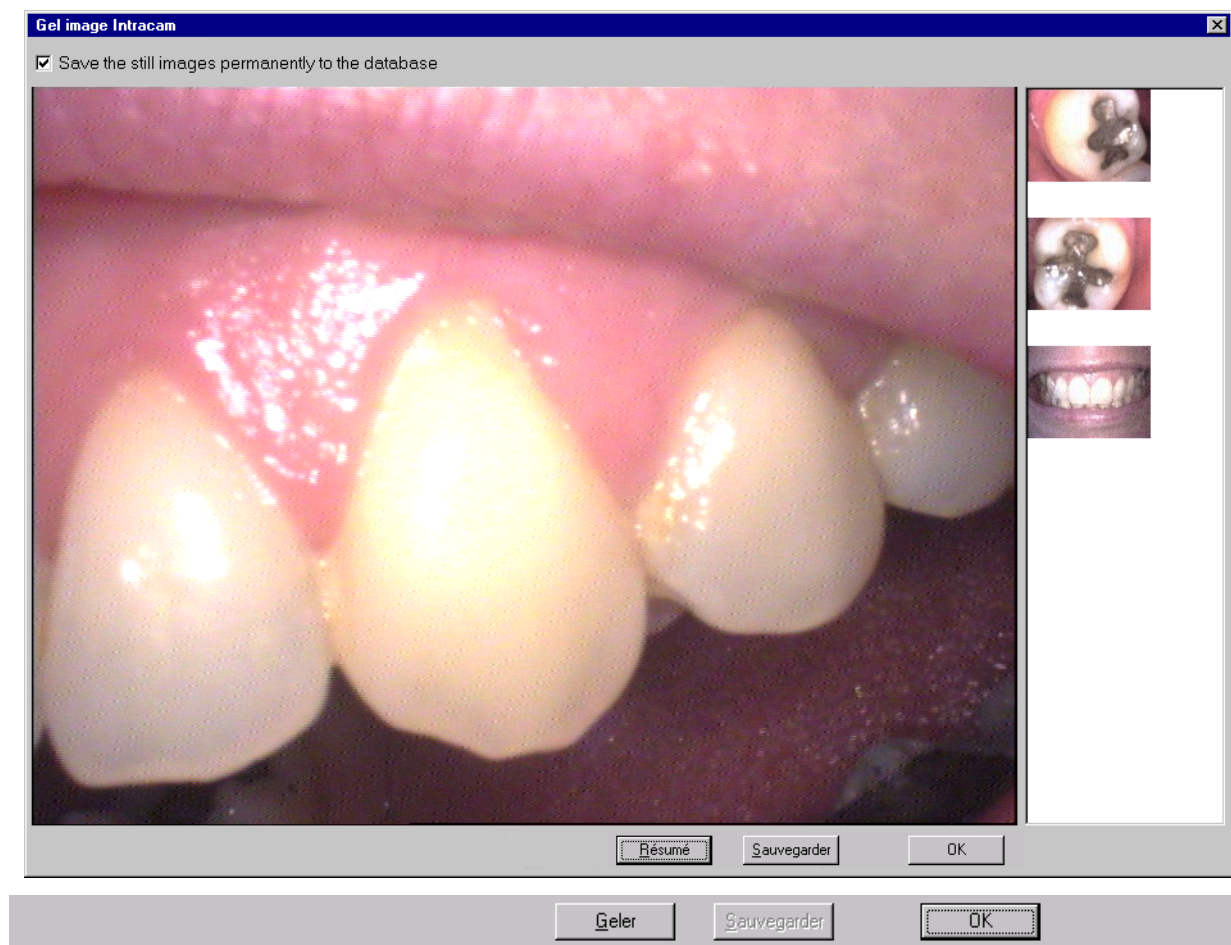

REMARQUE On peut également geler et enregistrer les images à l'aide de la pédale de commande de l'appareil dentaire *Plameca Compact*. Se référer au manuel d'utilisation de la caméra vidéo intraorale *Intracam*.

5.5 Saisie d'images Endocam

Sélectionner un patient comme décrit à la section 2.2 "Sélection du patient" à la page 7.


La fenêtre **Saisie d'images Endocam** s'ouvre automatiquement lors de l'activation de la caméra Endocam (= ENDOScope CAMera) et se ferme lorsque la caméra est remise en place. Cette fonction utilise l'interface de port série de l'appareil Planmeca Compact pour transmettre les informations en provenance de la caméra. Si une fenêtre modale est ouverte dans le logiciel Dimaxis (p.ex. la fenêtre Sélectionner l'image), il est impossible d'activer automatiquement la fonction.

Activer la caméra Endocam et cliquer sur le bouton *Endocam* de la barre d'outils supérieure ou sélectionner la commande **Endocam** dans le menu déroulant **Saisie**.



Endocam


Si le pilote de carte vidéo n'est pas correctement installé, le message ci-dessous s'affiche. Cliquer sur OK. Réinstaller le pilote de carte vidéo.

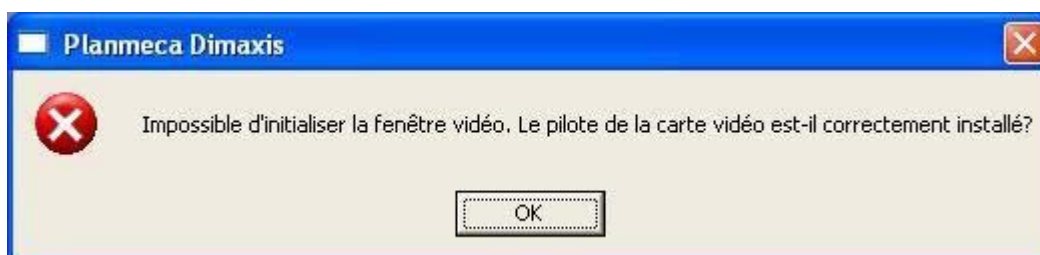

La fenêtre **Saisie d'images Endocam** s'affiche. L'image Intracam s'affiche dans la grande fenêtre. On peut geler l'image à l'aide du bouton *Geler* et l'enregistrer à l'aide du bouton *Sauvegarder*. Dégeler l'image à l'aide du bouton *Résumé*. Les images enregistrées sont affichées sous forme de miniatures du côté droit de la grande fenêtre.

La fenêtre **Saisie d'images Endocam** permet de sélectionner l'un des modes *Gingival* ou *Root Canal* (Canal radiculaire).

REMARQUE Les images seront enregistrées dans la base de données uniquement si on a sélectionné l'option "Enregistrer les images figées de manière permanente dans la base de données" à la partie supérieure de la fenêtre. Sinon, les images Endocam ne seront enregistrées que temporairement et elles seront supprimées lors de la fermeture de la fenêtre d'image.

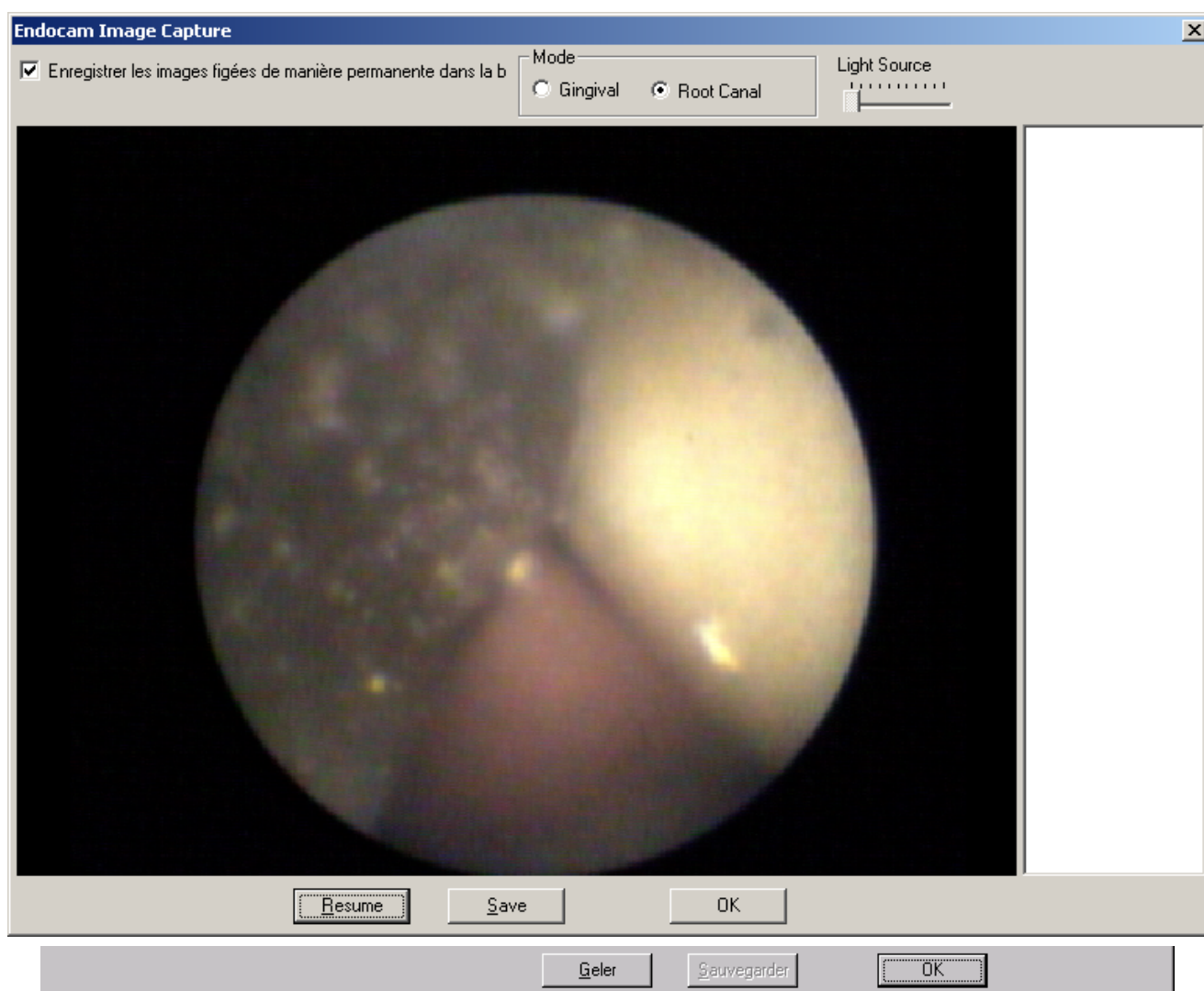

REMARQUE On peut également geler et enregistrer les images à l'aide de la pédale de commande de l'appareil dentaire Planmeca Compact. Se référer au manuel d'utilisation de l'endoscope DentalView.

5.6 Interface TWAIN


TWAIN est une interface multiplate-forme d'acquisition d'images saisies au moyen de scanners, de caméras numériques ou de capteurs de page-écran. Le fabricant du périphérique TWAIN doit fournir un gestionnaire de source et une source de données TWAIN pour permettre à ce périphérique de fonctionner avec le logiciel Dimaxis.

Dimaxis est compatible avec la norme actuelle TWAIN_32 pour la numérisation. Se reporter à la documentation du fabricant de l'appareil pour plus d'informations sur la disponibilité de modules source TWAIN_32.


Acquisition d'une image via l'interface TWAIN

Sélectionner un patient comme décrit à la section 2.2 "Sélection du patient" à la page 7.

Si l'on utilise pour la première fois le périphérique TWAIN, sélectionner la commande **Sélection de la source TWAIN** dans le menu déroulant **Saisie**.

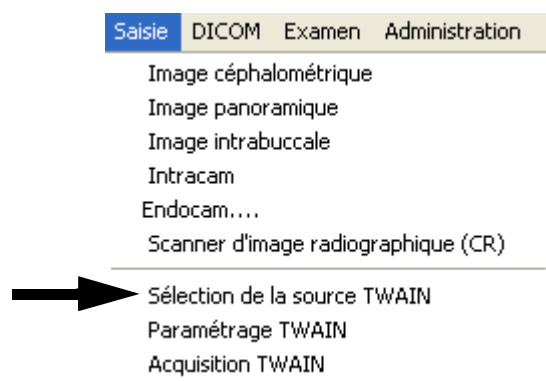


La fenêtre **Sélectionner une source** s'affiche. Sélectionner l'accessoire que l'on s'apprête à utiliser et cliquer sur le bouton *Sélectionner*. Les sources proposées dans la liste dépendent des périphériques compatibles TWAIN installés sur l'ordinateur.

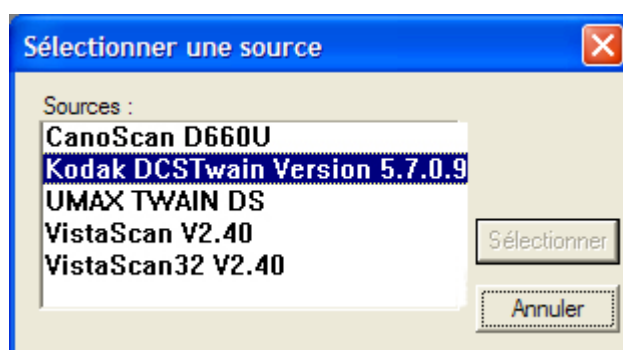


REMARQUE Cette fenêtre permet également de changer de périphérique si plusieurs périphériques TWAIN sont installés au sein du système.

Pour acquérir une image, cliquer sur le bouton *Acquisition TWAIN* de la barre d'outils supérieure ou sélectionner la commande **Acquisition TWAIN** dans le menu déroulant **Saisie**. Se reporter au mode d'emploi du scanner ou de la caméra pour des informations sur la manière d'utiliser le périphérique choisi.

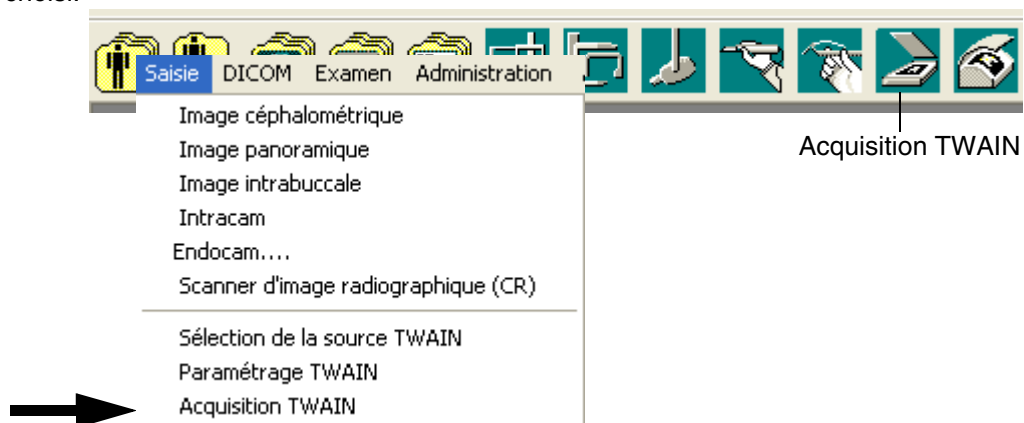

Utiliser la commande **Paramétrage TWAIN** du menu déroulant **Saisie** pour contrôler ou modifier les paramètres du scanner ou de la caméra. Si le système ne parvient pas à ouvrir la source TWAIN, c'est que l'on a omis de sélectionner une source ou qu'aucun périphérique compatible TWAIN n'est disponible.

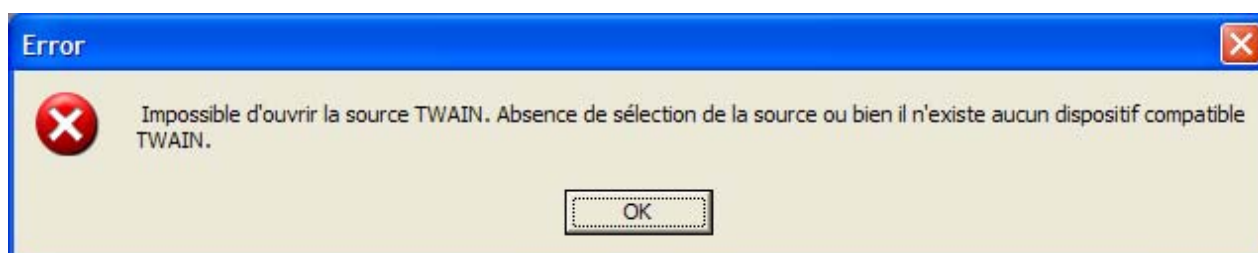

5.7 Scanner d'image radiographique (CR) (version Pro uniquement)

Le logiciel Dimaxis permet de saisir des images à l'aide des scanners d'image radiographique CombiX et VistaScan.

REMARQUE *Se reporter au mode d'emploi du scanner pour plus d'informations sur la numérisation d'images.*

REMARQUE *Cette fonction fait l'objet d'une licence distincte.*


CombiX Scanner (USB)

Sélectionner un patient comme décrit à la section 2.2 "Sélection du patient" à la page 7.

Cliquer sur le bouton *Scanner d'image radiographique* de la barre d'outils supérieure ou sélectionner la commande **Scanner d'image radiographique (CR)** dans le menu déroulant **Saisie** pour numériser une image. La fenêtre ci-dessous s'affiche. Préparer le scanner conformément aux instructions figurant dans le mode d'emploi.

Si nécessaire, sélectionner le type de support de plaque radiographique dans la liste *Holders* ("Supports"). Cliquer sur le bouton *Scan* ("Numériser") pour démarrer la numérisation. L'image s'affiche dans la fenêtre. Pour interrompre la numérisation, cliquer sur le bouton *Abort* ("Abandon"). Pour effacer les traces de l'image des plaques d'imagerie, cliquer sur le bouton *Erase* ("Effacer"). Utiliser le bouton *Setup* ("Configuration") pour contrôler ou modifier les paramètres du scanner (se reporter au mode d'emploi du scanner).


REMARQUE *Ne pas modifier les paramètres spécifiques de format d'image.*

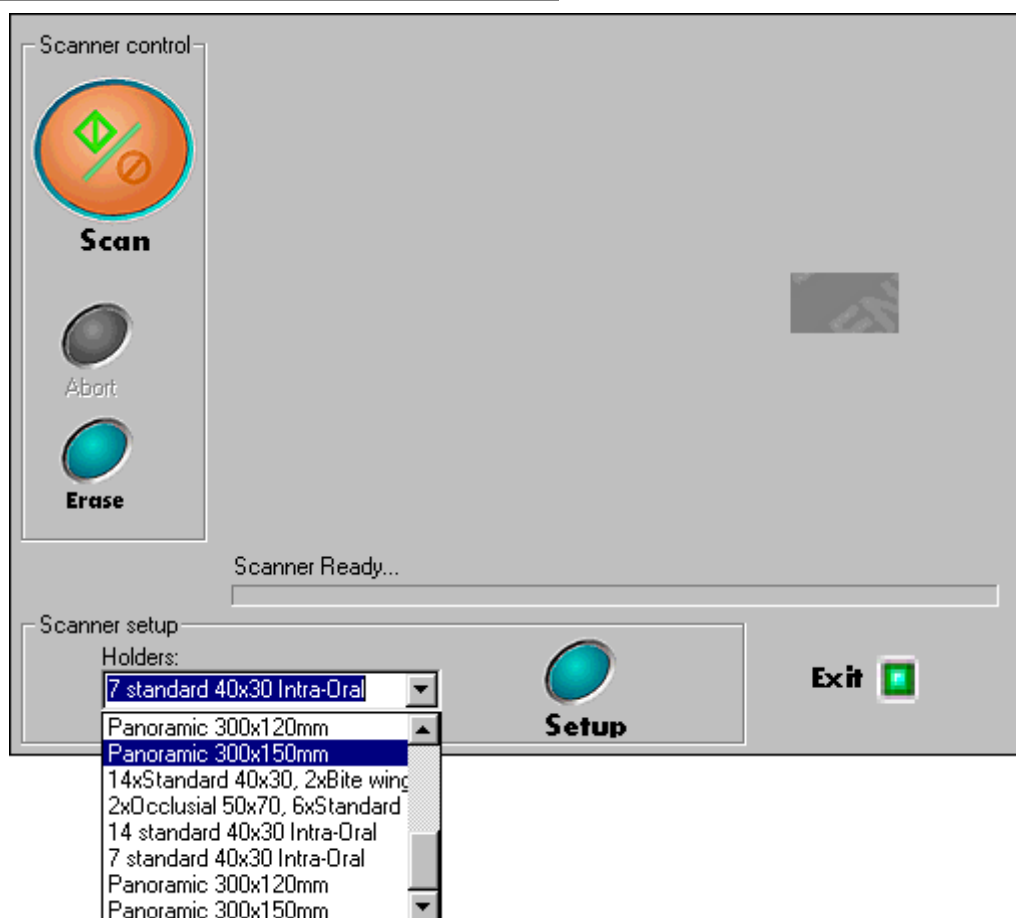


VistaScan

Sélectionner un patient comme décrit à la section 2.2 “Sélection du patient” à la page 7.

Sélectionner l'option *VistaScan* dans le volet **Scanner RC (CR)** de la fenêtre **Paramètres généraux et utilisateur** du logiciel Dimaxis. Cette sélection ne doit avoir lieu qu'une seule fois.

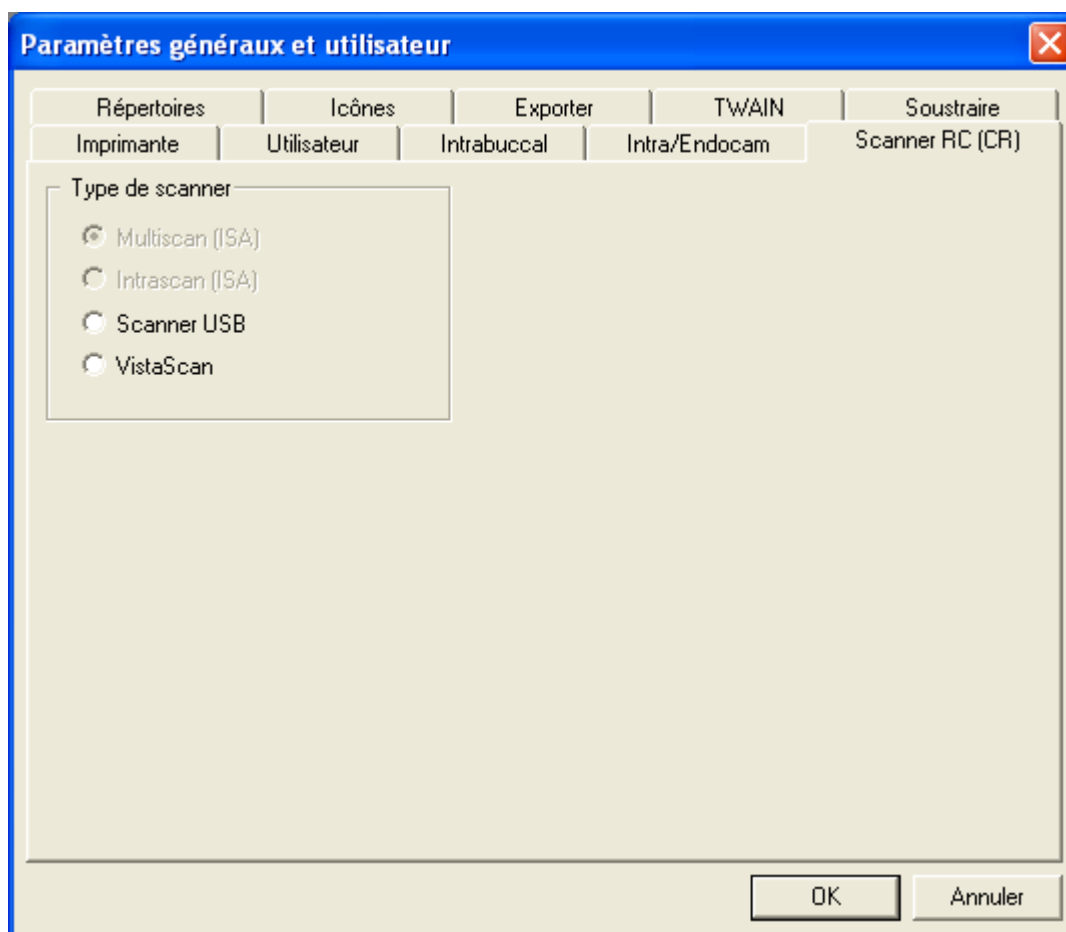


La fenêtre de prévisualisation de la numérisation s'affiche.

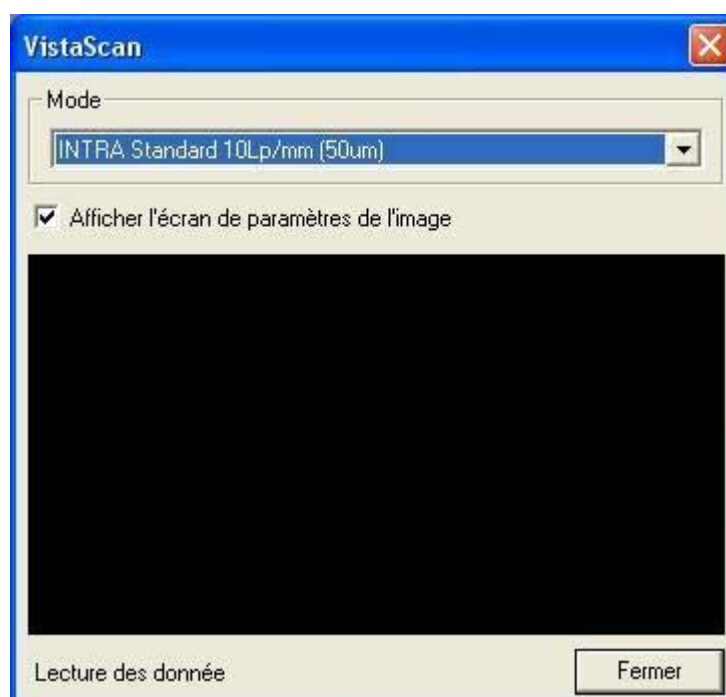


PRISE D'UN CLICHÉ

Dans la fenêtre de prévisualisation de la numérisation, on peut sélectionner le format d'image dans le menu déroulant (voir ci-dessous).

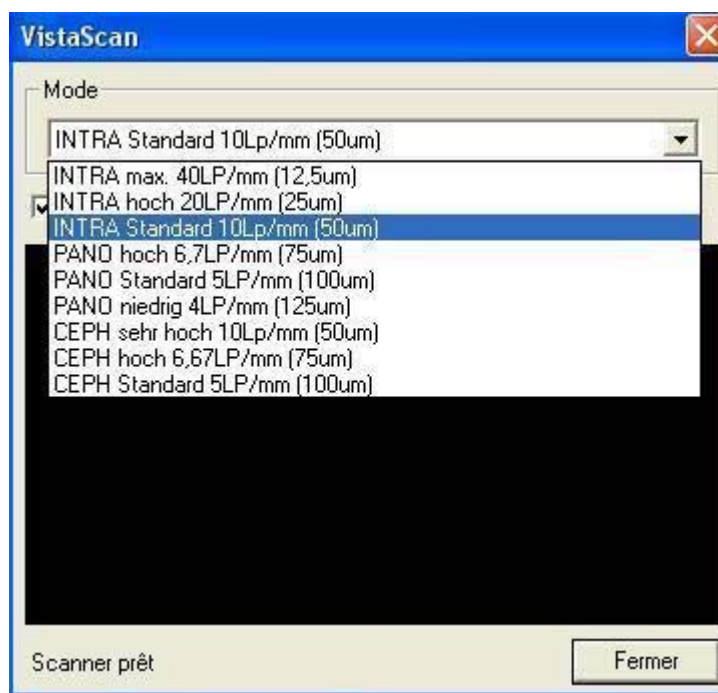

Lorsque la numérisation de l'image est terminée, la fenêtre de prévisualisation ci-dessous s'affiche.

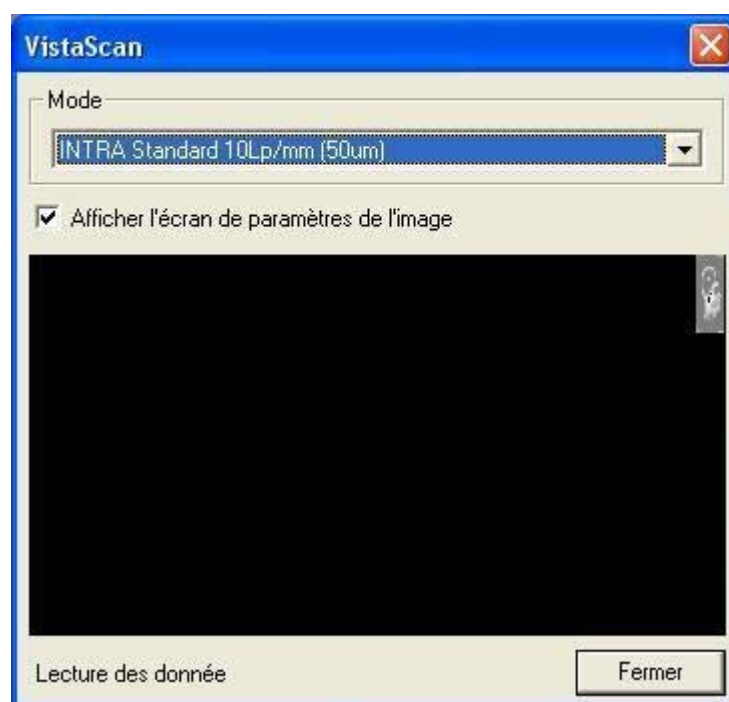

Dans la fenêtre **Paramètres d'image**, on peut ajouter un commentaire et définir le schéma dentaire et les paramètres d'images.

Paramètres d'image

Notes concernant l'image

Utilisateur:

Praticien:

Commentaires:

Type d'image

☐ Panoramique ☐ Céphalométrique ☒ Intrabuccale ☐ Vidéo figée

Schéma dentaire

Date de prise du cliché: 25.5.2005

Rotation: 0

Taille des pixels: 50

Agrandissement:

Voltage (kV): 0

Intensité (mA): 0

Temps d'exposition: 0.000

Largeur (pixels): 248

Hauteur (pixels): 617

Bits par pixel: 16


Format d'image: TIF

Modalité:

OK Annuler

PRISE D'UN CLICHÉ

L'image numérisisée dans Dimaxis est illustrée ci-dessous.

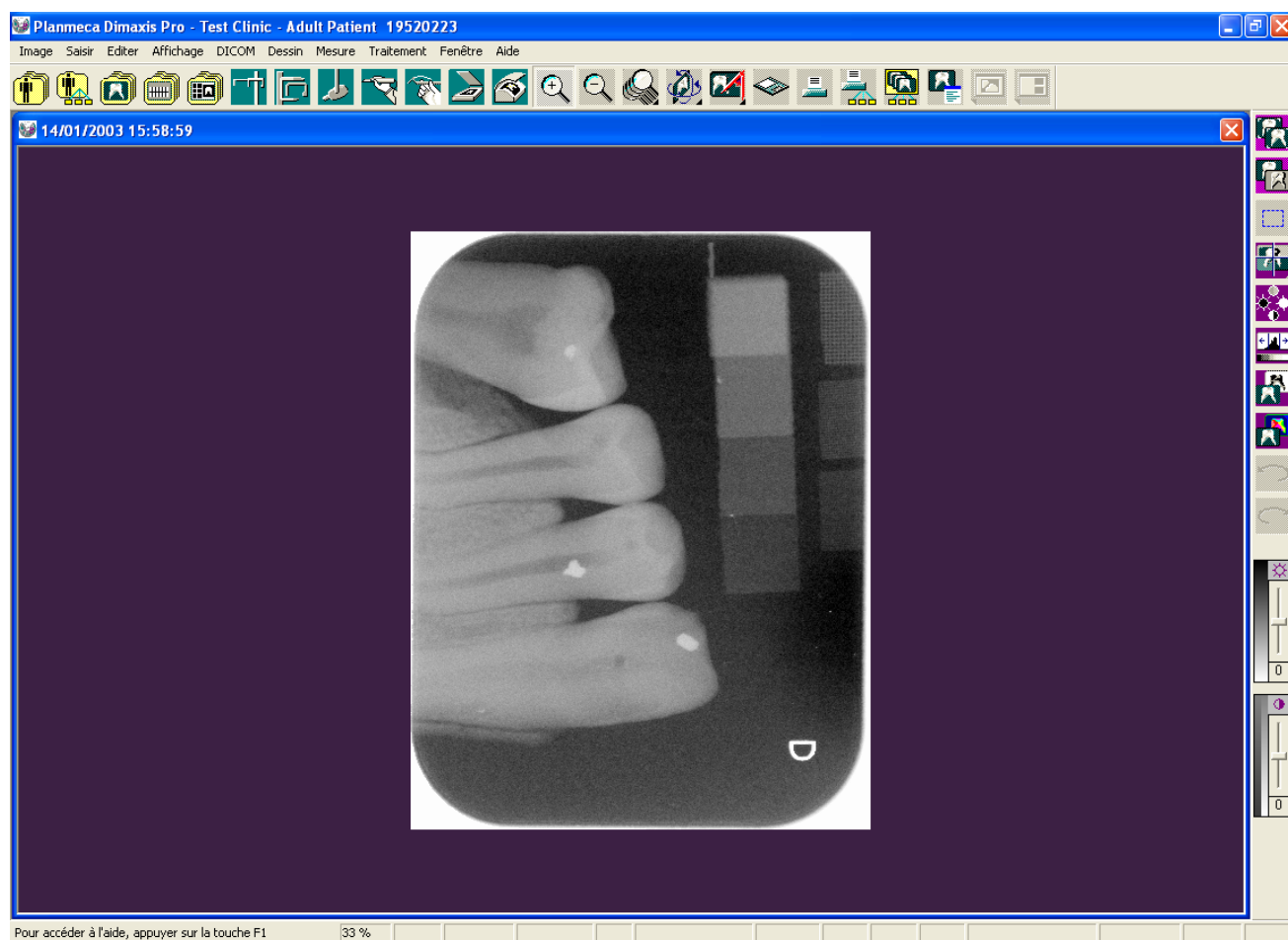

6 IMPRESSION DES IMAGES


6.1 Impression d'images individuelles

Ouvrir l'image et cliquer sur le bouton *Imprimer* ou sélectionner la commande **Impression** dans le menu déroulant **Image** ou appuyer sur les touches **Ctrl+P**.



Bouton *Imprimer*

On notera que l'on peut prévisualiser l'image telle qu'elle sera imprimée sélectionnant la commande **Aperçu avant impression** dans le menu déroulant **Image**.

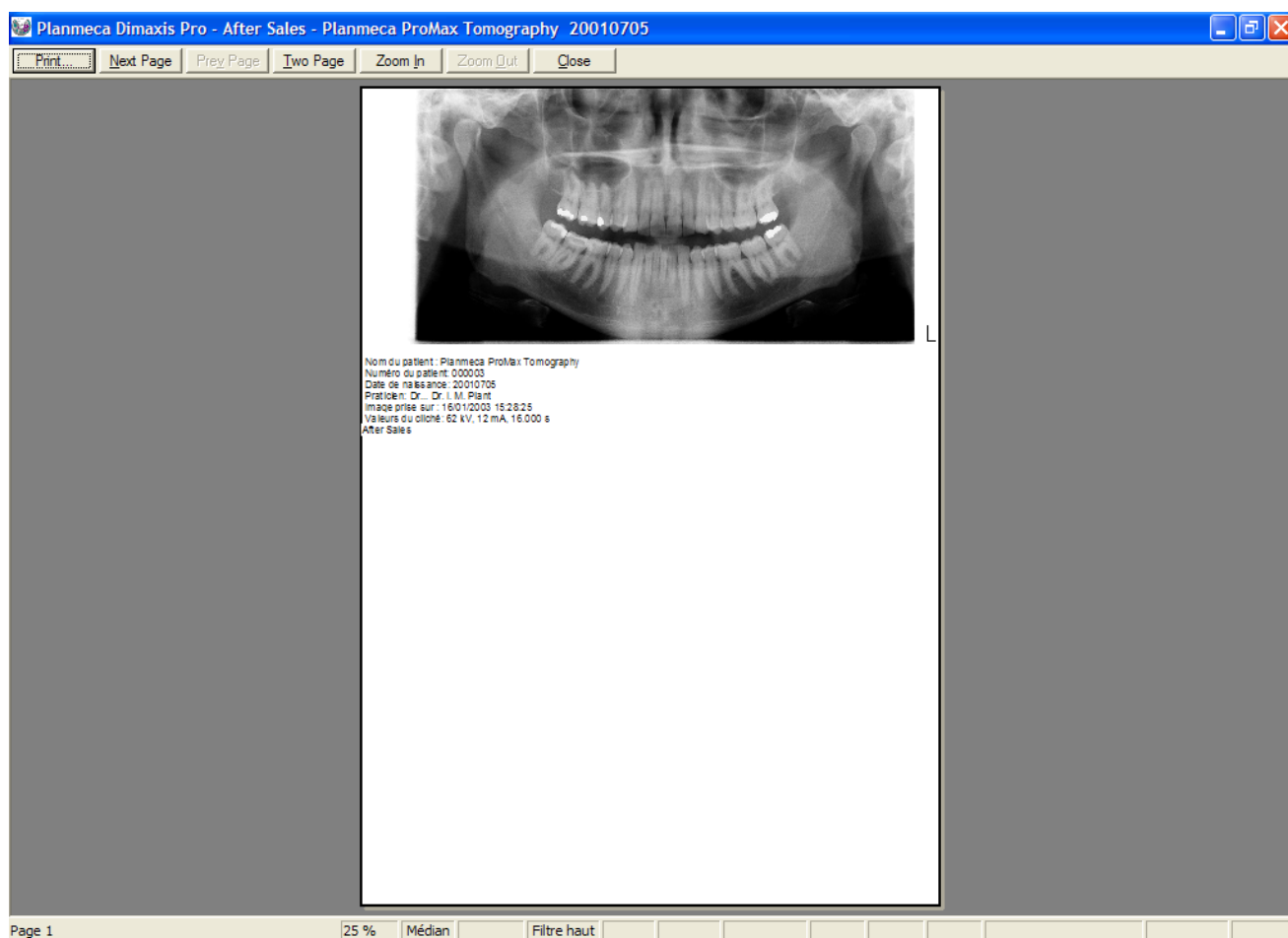

Pour plus de détails sur l'échelle ou la taille de l'image imprimée sur une page, se reporter aux sections 6.3 "Impression d'images radiographiques" à la page 69 et 6.4 "Impression d'images Intracam" à la page 70.

6.2 Impression de plusieurs images (sur la même page)

Pour pouvoir imprimer plusieurs images sur la même page, ces images doivent faire partie d'un même examen. Pour imprimer toutes les images d'un examen, ouvrir cet examen et cliquer sur le bouton *Imprimer*. Pour imprimer seulement certaines images, commencer par sélectionner les images à imprimer, puis cliquer sur le bouton *Imprimer*. Se reporter à la section 4.2.1 "Sélectionner l'image/onglet Examen (Optionnel aux Etats-Unis uniquement)" à la page 19 pour plus d'informations sur l'impression des images d'un examen.

Plusieurs images s'impriment sur la même page sous la forme d'une grille rectangulaire. Pour chaque image, le modèle d'examen définit dans quelle case de la grille sera imprimée cette image. La taille de la grille (nombre de rangées et de colonnes) est définie par la plus petite taille de grille pouvant être utilisée pour imprimer les images dans les positions (rangée/colonne) correspondant au format sélectionné. On notera que si les positions d'impression de toutes les images à imprimer ne sont pas spécifiées, les images s'imprimeront selon l'ordre de prise des clichés.

Pour définir les positions d'impression, se reporter à la section 11.1.8 "Modification des paramètres des miniatures d'images" à la page 169.

Echelle, qualité et zone d'impression des images imprimées

La taille et l'échelle des images sur le papier ou le film dépendent de plusieurs paramètres tels que le type d'image, l'imprimante utilisée et le fait que l'image soit ou non imprimée en tant que partie d'un examen. Pour une description détaillée, se reporter aux sections 6.3 "Impression d'images radiographiques" à la page 69 et 6.4 "Impression d'images Intracam" à la page 70.

REMARQUE *En raison de la multiplicité des échelles possibles, il incombe à l'utilisateur de vérifier l'échelle des images imprimées avant de réaliser des mesures au départ de la copie imprimée. Lorsque l'on effectue des mesures sur l'image imprimée, il est conseillé d'utiliser un objet de référence pour déterminer l'échelle, par exemple un fantôme à sphères ou une échelle exposée sur l'image.*

REMARQUE *En fonction de l'imprimante utilisée, l'impression des images engendre très fréquemment une perte de résolution d'image et de détails en raison de la résolution limitée de l'imprimante. Pour avoir la garantie que la qualité de l'image imprimée est satisfaisante, il faut effectuer un cliché de test d'un fantôme incluant à la fois des objets réalistes (c'est-à-dire des dents) et des modèles de résolution, puis comparer l'image imprimée à l'image à l'écran.*

6.3 Impression d'images radiographiques

Lors de l'impression d'images, l'échelle est déterminée par le paramètre Echelle d'impression des images radiographiques. Pour modifier ce paramètre, se reporter à la section 9.2.1 "Imprimante" à la page 137. Une échelle de 100% signifie que l'image s'imprimera de telle sorte que la taille de l'image imprimée soit égale à la surface active réelle du capteur. Une échelle de 200% agrandira les images imprimées au double de cette taille et une échelle de 50% imprimera les images à la moitié de cette taille. On notera que si l'image est plus grande que la zone d'impression disponible, elle sera réduite pour la ramener à ce format. Cela signifie qu'avec un facteur d'échelle de 100%, les images intrabuccales sont imprimées en taille réelle. Par conséquent, si la projection de l'agrandissement de l'image (qui est habituellement négligeable) est connue, il est possible de réaliser des mesures directes sur l'image imprimée, à condition que le format de page de l'imprimante soit suffisant pour permettre l'impression à cette échelle.

6.4 Impression d'images Intracam

Lors de l'impression d'images vidéo intrabuccales, l'échelle est déterminée par le paramètre Echelle d'impression des images vidéo intrabuccales. Pour modifier ce paramètre, se reporter à la section 9.2.1 "Imprimante" à la page 137. Une échelle de 100% signifie que l'image sera réduite de telle sorte que, en moyenne, trois images seront imprimées côte à côte sur une page imprimée au format A4. Une échelle de 200% agrandira les images imprimées au double de cette taille et une échelle de 50% imprimera les images à la moitié de cette taille. On notera que si l'image est plus grande que la zone d'impression disponible, elle sera réduite pour la ramener à ce format. L'échelle réelle de l'image dépend de la carte vidéo utilisée et n'a de toute manière que peu d'importance parce que l'agrandissement des images vidéo intrabuccales dépend de la distance entre la caméra et la dent et varie donc fortement d'une image à l'autre.

6.5 Imprimer tout (version Pro uniquement)


Sélectionner la commande **Imprimer tout** dans le menu déroulant **Image** pour imprimer toutes les images ouvertes telles qu'elles sont affichées à l'écran. On peut ouvrir simultanément plusieurs copies de la même image avec différentes modifications.

Si l'on a sélectionné une région d'intérêt sur l'image ouverte, seule la région sélectionnée s'imprimera.

Si toutes les images ont été prises le même jour, la date d'exposition s'imprimera dans le texte de pied de page.

Une prévisualisation s'affiche toujours avant l'impression (voir ci-dessous). On peut déplacer (repositionner) les images à l'aide de la souris sur l'écran de prévisualisation.

On peut sélectionner le format d'impression des images: *Grille Symétrique*, *Images par lignes* ou *Images par colonnes*. Spécifier éventuellement le *Nombres de copies* et imprimer les images en cliquant sur *OK*.

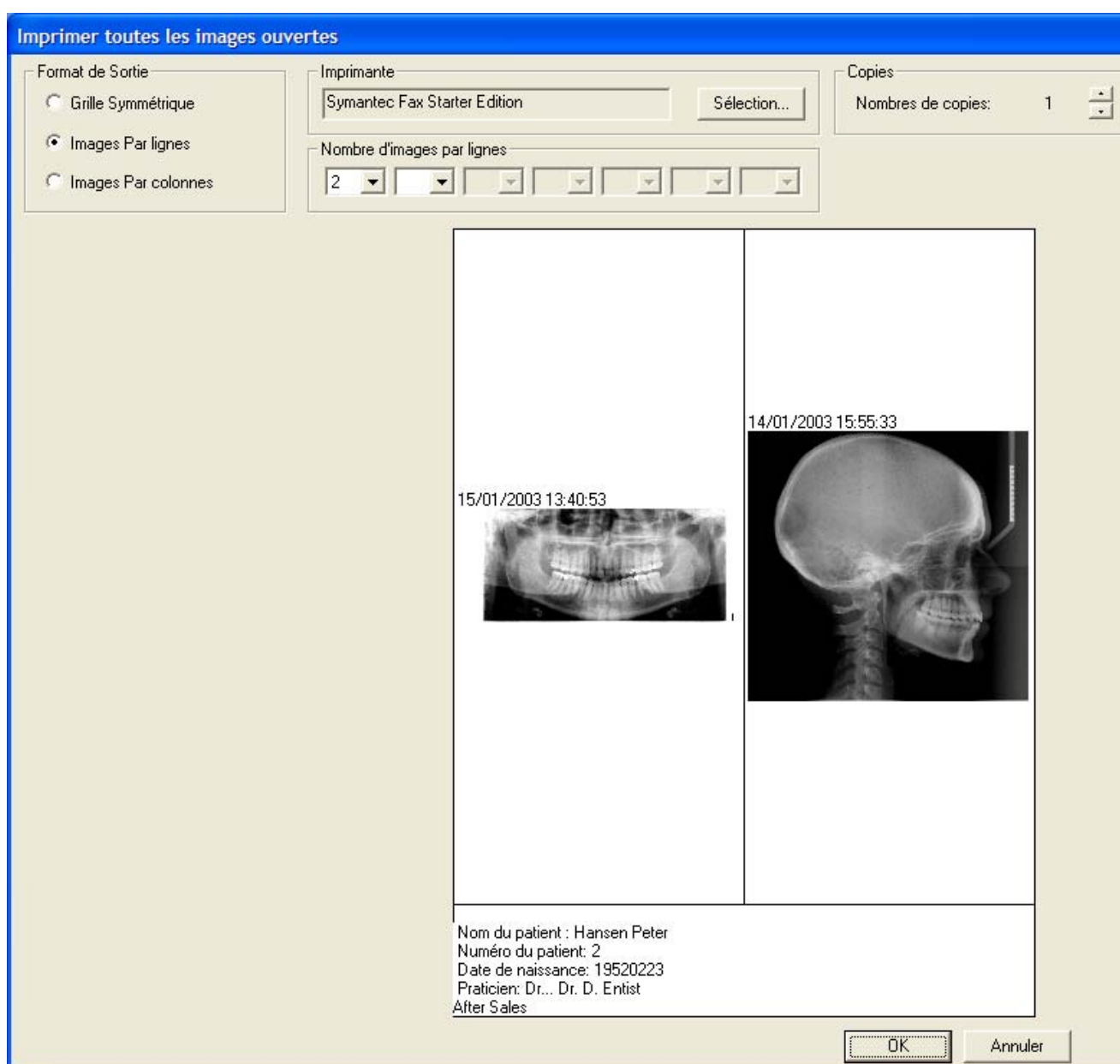

7 DICOM

7.1 Impression DICOM (version Pro uniquement)


On peut imprimer l'image ouverte sur une imprimante compatible DICOM en cliquant sur le bouton *Impression DICOM* de la barre d'outils supérieure ou en sélectionnant la commande **Impression DICOM** dans le menu déroulant **DICOM**.




Bouton *Impression DICOM*

La fenêtre **Impression DICOM** s'affiche. Spécifier le nombre de copies et imprimer l'image en cliquant sur **OK**.

Etiquette de session identifie la session du film. Ce champ peut être laissé vierge si les tâches d'impression ne sont pas contrôlées par un autre système.

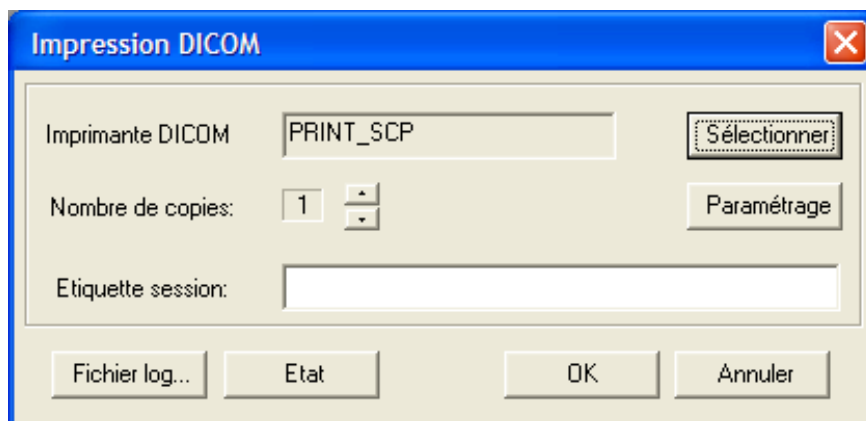

On peut sélectionner une imprimante DICOM par défaut en cliquant sur le bouton *Sélectionner*. La fenêtre **Sélectionner DICOM AE distant** s'affiche. Sélectionner l'application d'impression et cliquer sur **OK**.

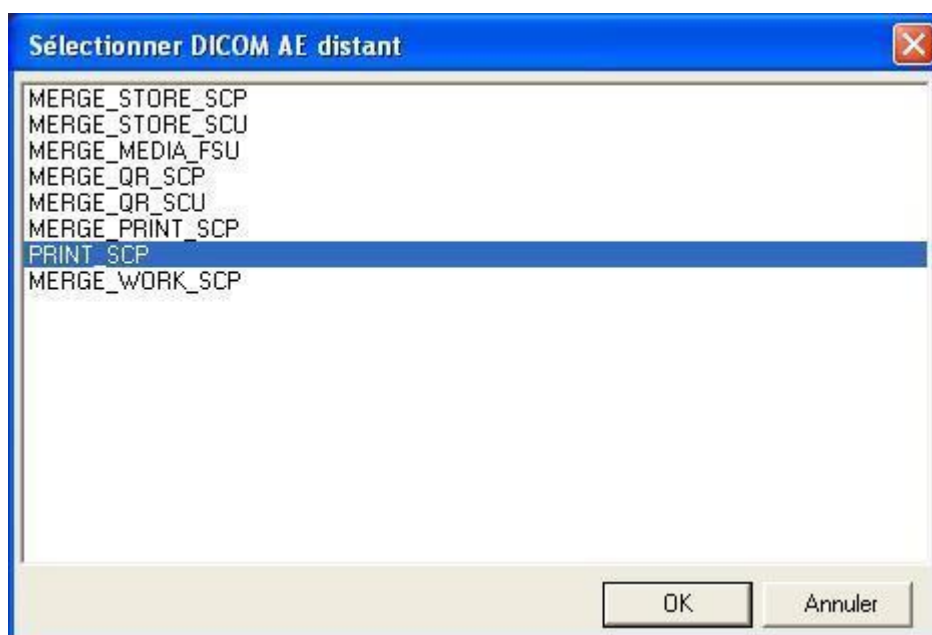

La fenêtre **Configuration imprimante DICOM** s'affiche lorsque l'on clique sur le bouton *Paramétrage*. Cette fenêtre permet de définir les paramètres spécifiques à la norme DICOM dans les groupes *Session de film* et *Boîtier du film*. *Orientation du film* (portrait/paysage) est un champ que l'on est fréquemment amené à modifier.

En spécifiant la taille des images, on modifie éventuellement l'échelle d'impression des images.

Dans le groupe *Niveau impression*, on peut sélectionner le niveau d'impression. On a le choix entre *Session de film* ou *Boîtier de film*, en fonction de l'imprimante DICOM utilisée (voir la Déclaration de conformité DICOM de l'imprimante pour plus d'informations).

Dans le groupe *Autres caractéristiques*, on peut sélectionner ou désélectionner la prise en charge des travaux d'impression ou spécifier que seules les images 8 bits seront imprimées. Dans ce cas, les images seront cartographiées au format 8 bits avant d'être transmises à l'imprimante.

REMARQUE Voir la *Déclaration de conformité DICOM de l'imprimante pour des informations sur les capacités de l'imprimante*.

Configuration imprimante DICOM

Imprimante: PRINT_SCP

Session de film

Priorité: HIGH Type de support: DEFAULT

Destination du film: DEFAULT

Boîtier du film

Orientation du film : PORTRAIT Dimension du film: DEFAULT

Type: DEFAULT Type d'atténuation:

Densité bordure: BLACK Densité image vide: BLACK

Informations:

Dimensions choisies pour l'image (Pixels)

	Largeur:	Hauteur:
Image panoramique	0	0
Image	0	0
Image intrabuccale	1000	1000

Préciser ces valeurs seulement si l'imprimante ne supporte pas l'étiquette 2020, 0030 "Dimension de l'image requise"

Niveau impression

☒ Session de film ☐ Boîtier de film

Autres caractéristiques

☐ Supports TRAVAUX D'IMPRESSION

☐ Impression uniquement images 8 bits

OK Annuler

La fenêtre **Informations imprimante DICOM** s'affiche lorsque l'on clique sur le bouton *Etat* de la fenêtre **Impression DICOM**.

Informations imprimante DICOM

Imprimante AE: PRINT_SCP

Nom de l'imprimante: Codonics Print-SCP (np1660)

Fabricant: Codonics

Nom du modèle: NP1660MD

Versions de logiciel: 2.4.1

Calibré: 25/11/1998 09:12:00

Etat: NORMAL

Informations état: STANDARD

OK

7.2 Stockage DICOM (version Pro uniquement)

Le bouton *Stockage DICOM* se trouve dans la barre d'outils supérieure. On peut envoyer l'image sélectionnée vers une application DICOM distante en cliquant sur ce bouton ou en sélectionnant la commande **Stockage DICOM** dans le menu déroulant **DICOM**.



Bouton *Stockage DICOM*

La fenêtre **Envoyer l'image au DICOM AE** s'affiche. Compléter les champs spécifiques à DICOM: *Numéro d'examen*, etc. si l'application de destination les exige. Cliquer sur **OK**.

Envoyer l'image au DICOM AE

Application DICOM à distance: MERGE_STORE_SCP Sélectionner

Numéro d'examen Paramétrage

Description de l'examen:

Numéro de série:

Description de la série:

Numéro d'accession:

Fichier log... OK Annuler


En cas d'échec de la transmission de l'image, le message ci-dessous s'affiche. Contrôler que l'application DICOM de destination est en cours d'exécution et que le réseau fonctionne correctement. Réessayer l'envoi. En cas de nouvel échec, ouvrir le fichier journal en cliquant sur le bouton *Fichier log* de la fenêtre **Envoyer l'image au DICOM AE**, imprimer ce fichier et le transmettre par télécopie ou par courrier au service d'assistance local.




Si les images ont été correctement transmises, le message ci-dessous s'affiche.



On peut sélectionner l'application DICOM destinataire en cliquant sur le bouton *Sélectionner*. La fenêtre **Sélectionner DICOM AE distant** s'affiche. Sélectionner l'application et cliquer sur *OK*.

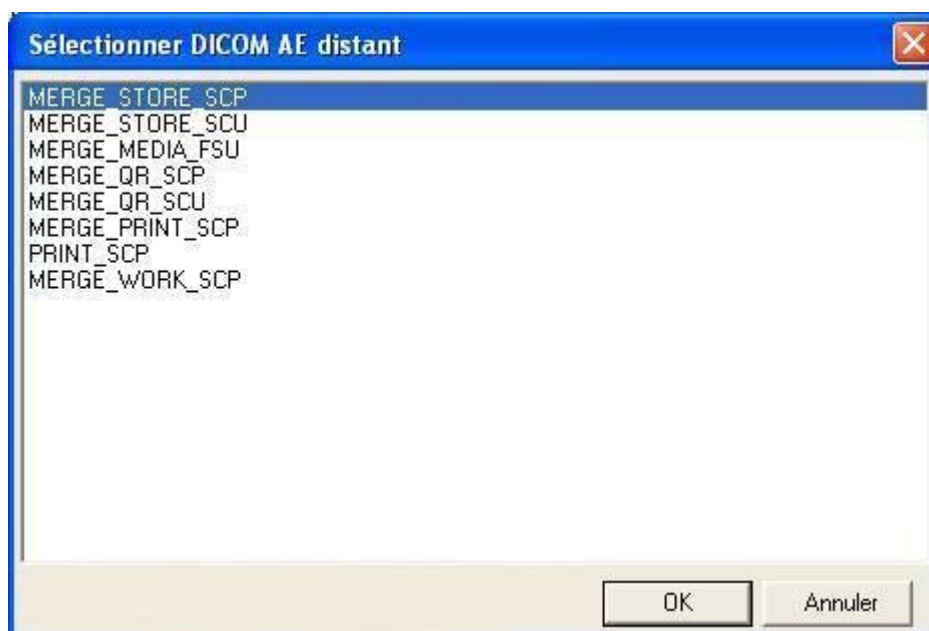


La fenêtre **Paramétrage stockage DICOM** s'affiche lorsque l'on clique sur le bouton *Paramétrage*. Pour plus d'informations se reporter à la section 9.3.1 "Applications" à la page 152.

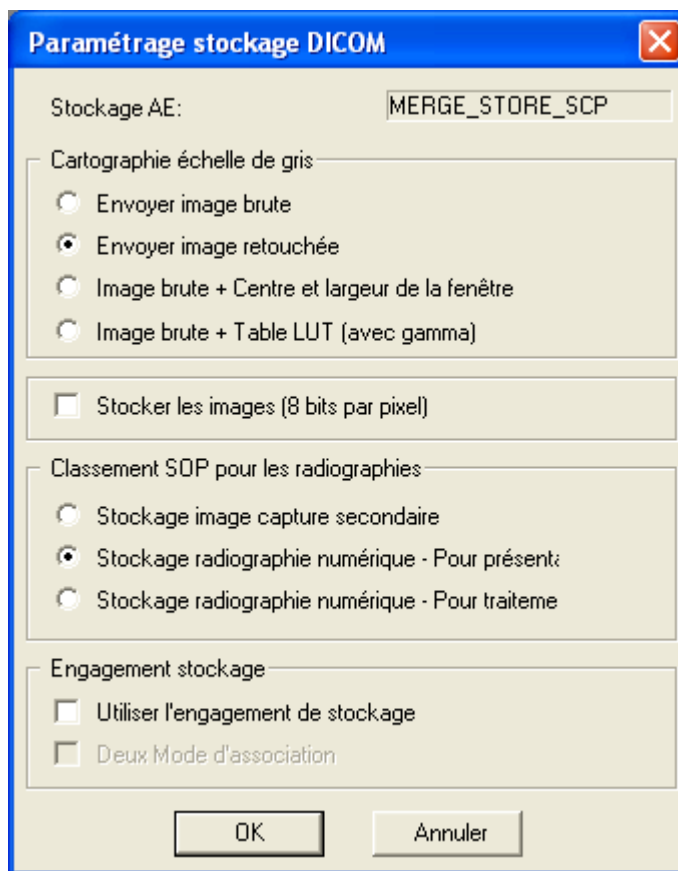

7.3 Menu déroulant DICOM (aucune image ouverte) (version Pro uniquement)


Ce menu déroulant **DICOM** est visible lorsqu'aucune image n'est ouverte.

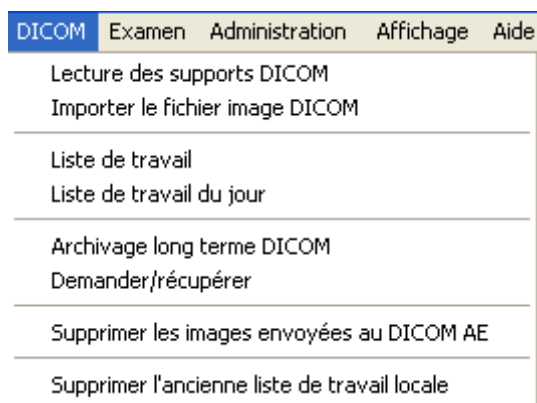

7.3.1 Lecture d'un support DICOM (version Pro uniquement)

Un support DICOM contient un fichier spécial **DICOMDIR** et un ou plusieurs fichiers images DICOM. Voir la norme DICOM pour plus de détails.

Si l'option *Montrer l'écran des paramètres de l'image* n'est pas sélectionnée dans la fenêtre **Lecture supports DICOM**, la boîte de dialogue Paramètres pour les nouvelles images ne s'affiche pas.

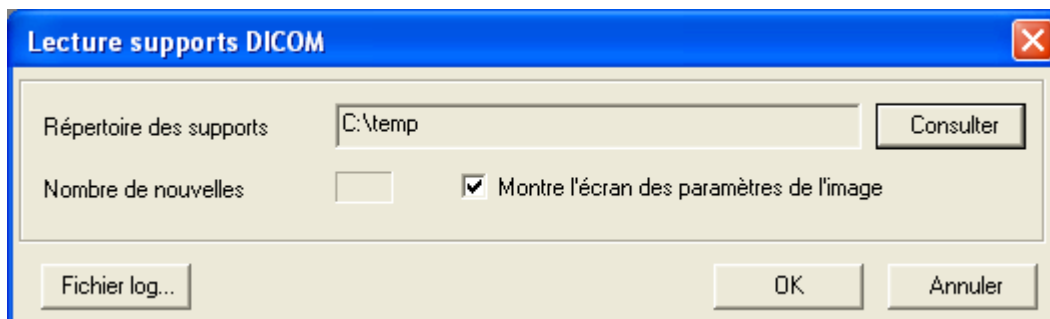


7.3.2 Importation d'un fichier image DICOM (version Pro uniquement)

Il est également possible d'importer un fichier image DICOM sans fichier DICOMDIR. La norme suppose un fichier DICOMDIR, mais certains autres programmes ne le génèrent pas.

7.3.3 Modalité Liste de travail (version Pro uniquement)

Une liste de travail est la structure de présentation des informations en rapport avec un ensemble particulier de tâches. Elle spécifie des détails particuliers pour chaque tâche. Les informations prennent en charge tout d'abord la sélection de la tâche à exécuter et ensuite la réalisation de cette tâche. Voir la norme DICOM pour plus de détails.

Il est également possible d'utiliser la fonction Liste de travail même si la compatibilité DICOM n'a pas été installée sur le poste de travail. Dans ce cas, les entrées de la liste de travail seront récupérées depuis la base de données Dimaxis. Dans ces conditions, l'application DICOM Gateway doit être exécutée sur un autre ordinateur au sein du réseau.

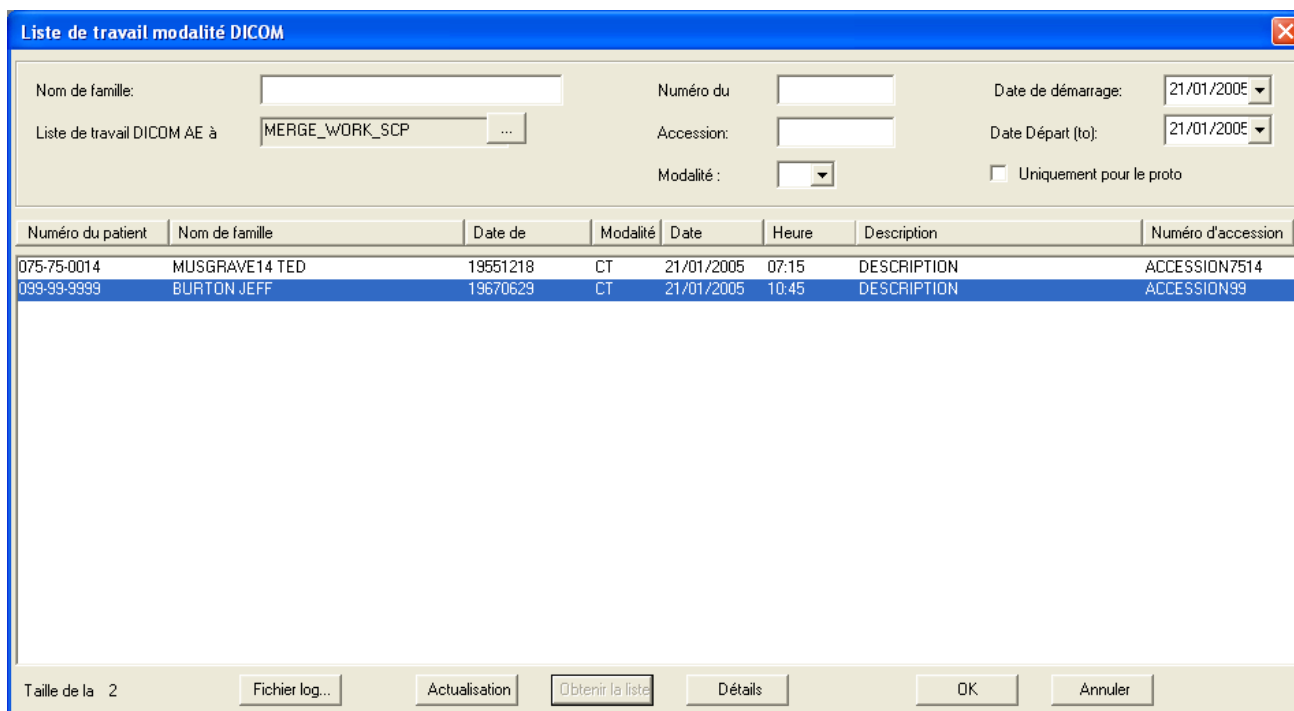

S'il n'a pas été possible d'obtenir la liste de travail, le message ci-dessous s'affiche. Contrôler que le logiciel de gestion est en cours d'exécution et que le réseau fonctionne correctement. Réessayer. En cas de nouvel échec, ouvrir le fichier journal en cliquant sur le bouton *Fichier log*, imprimer ce fichier et le transmettre par télécopie ou par courrier au service d'assistance local.



La demande d'une liste de travail en provenance du système de gestion peut prendre un certain temps. Par conséquent, lorsque l'on récupère la liste de travail est pour la première fois de la journée, une copie de cette liste de travail est enregistrée dans la base de données Dimaxis. Ensuite, c'est la liste de travail locale qui est utilisée. Cliquer sur "Rafraîchir" pour mettre la liste à jour depuis le serveur.

7.3.4 Liste de travail du jour (version Pro uniquement)

Sélectionner la commande **Liste de travail du jour** dans le menu déroulant **DICOM** pour afficher la liste de travail reprenant les patients ayant un rendez-vous au cours de la journée.

Si la base de données ne contient qu'une seule entrée, ce patient est automatiquement sélectionné.

Numéro du patient	Nom de famille	Date de	Modalité	Date	Heure	Description	Numéro d'accession
075-75-0014	MUSGRAVE14 TED	19551218	CT	20020306	0715	DESCRIPTION	ACCESSION7514
099-99-9999	BURTON JEFF	19670629	CT	20020306	1045	DESCRIPTION	ACCESSION99

Taille de la 0

Fichier log... Actualisation Détails OK Annuler


7.3.5 Archivage à long terme DICOM (version Pro uniquement)

Cette fonction est identique à la fonction **Transférer vers archive à long terme** mais, au lieu de déplacer les images vers un support amovible ou vers un disque local, on les transfère vers le système d'archivage DICOM. On peut récupérer les images dans la base de données Dimaxis base de données depuis l'archive DICOM en utilisant la fonction **Demander/récupérer**.

Pour plus de détails sur la fonction Transférer vers archive à long terme, se reporter à la section 10 "DÉPLACEMENT D'IMAGES VERS L'ARCHIVE À LONG TERME" à la page 157 et pour plus de détails sur la fonction Demander/récupérer, se reporter à la section 7.3.6 "Demande/récupération (version Pro uniquement)" à la page 80.

Certaines images d'un patient peuvent se trouver dans l'archive à long terme alors que d'autres sont dans la base de données active. On peut prendre de nouvelles images même lorsque certaines des images se trouvent dans l'archive à long terme. On peut restaurer les images une à une. (Avec les versions du logiciel Dimaxis antérieures à la version 4.0.0, toutes les images devaient se trouver soit dans l'archive à long terme soit dans la base de données active.)

Archivage à long terme DICOM

Destination
DICOM AE à distance: 

☒ Déplacer toutes les images réalisées avant la date indiquée

Année Mois Jour

☐ Déplacer uniquement les images du patient en cours

Envoyé

Patients	0	Images	0	Megaoctets	0
----------	---	--------	---	------------	---


Fichier journal..

7.3.6 Demande/récupération (version Pro uniquement)

Sélectionner la commande **Demander/récupérer** dans le menu déroulant **DICOM**. La fonction *Demander/récupérer* permet de récupérer des images depuis un serveur DICOM. Sélectionner le *DICOM AE à distance* s'il n'a pas encore été spécifié. Cliquer sur le bouton *Demande (Q)*.

Si le *DICOM AE à distance* n'a pas été spécifié, utiliser Paramètres DICOM/Applications (voir 9.3.1 "Applications" à la page 152) pour spécifier l'application Q/R par défaut.

Sélectionner la commande **Désélectionner** dans le menu déroulant **Patient** avant de démarrer la requête ou vider le champ *Numéro de* pour sélectionner une liste de plusieurs patients.

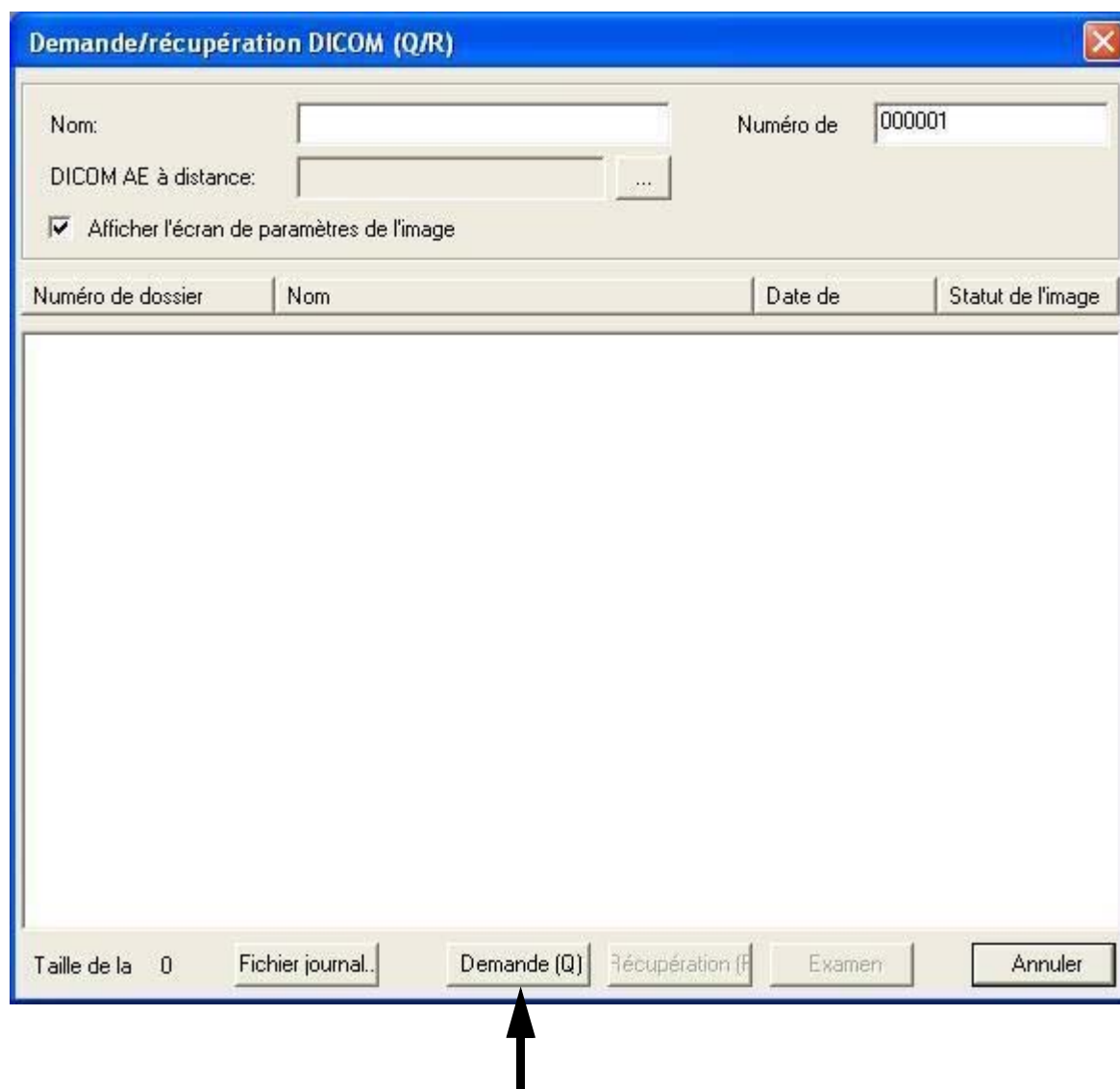

Choisir un patient dans la fenêtre **Demande/récupération DICOM (Q/R)**. Choisir ensuite *Récupération (R)* ou *Examen*, selon que l'on souhaite récupérer des images au niveau d'un patient (*Récupérer*) ou des images faisant partie d'un examen spécifique (*Examen*).

Demande/récupération DICOM (Q/R)

Nom: Numéro de:

DICOM AE à distance:

☒ Afficher l'écran de paramètres de l'image

Numéro de dossier	Nom	Date de	Statut de l'image
999-99-9999	WAGNER R	9.9.1999	Disponible
888-88-8888	RAN S	8.8.1988	Disponible
777-77-7777	BARTOK B	7.7.1977	Disponible
666-66-6666	VIVALDI A	6.6.1966	Disponible
555-55-5555	RESPIGHI O	5.5.1955	Disponible
444-44-4444	SHOSTAKOVICH D	4.4.1944	Disponible
333-33-3333	BARTOK B	3.3.1933	Disponible
222-22-2222	MOZART WA	2.2.1922	Disponible
111-11-1111	BACH JS	1.1.1911	Disponible
000-00-0000	BEETHOVEN L	1.1.1911	Disponible

Taille de la 9

En cas d'échec de la requête, le message ci-dessous s'affiche. Cela indique soit que l'application DICOM distante ne fonctionne pas, soit qu'il y a une erreur de configuration.



Si l'on clique sur *Examen* dans la fenêtre **Demande/récupération DICOM**, la fenêtre **Sélection de l'examen** s'affiche. Ce choix permet de récupérer des images faisant partie d'un examen particulier.

Date	Heure	Numéro d'accèsion
19.2.2004	0:13	123456789

Suppression des images envoyées à une application DICOM AE

Lorsqu'une image est transmise à une application DICOM, la date de transmission de cette image est enregistrée dans la base de données. Il est possible de supprimer les images transmises de la base de données Dimaxis locale.

Sélectionner la commande **Supprimer les images envoyées au DICOM AE** dans le menu déroulant **DICOM**. Indiquer la date de son choix dans la boîte de dialogue qui s'affiche et cliquer sur **Supprimer**.

Masque pour la suppression des images envoyées. Le mois et le jour sont facultatifs

Année Mois Jour

2004 02

Supprimer Fermer

Si le programme ne trouve aucune image, le message ci-dessous s'affiche. Pour revenir à la fenêtre **Supprimer les images réceptionnées par le DICOM AE**, cliquer sur **OK**.


Planmeca Dimaxis

Aucune image envoyée à supprimer

OK


Suppression de l'ancienne liste de travail locale

Les anciennes entrées de la copie locale de la liste de travail enregistrée dans la base de données Dimaxis ne sont pas automatiquement supprimées. On peut les supprimer en cliquant sur *Oui* dans la fenêtre de message ci-dessous.

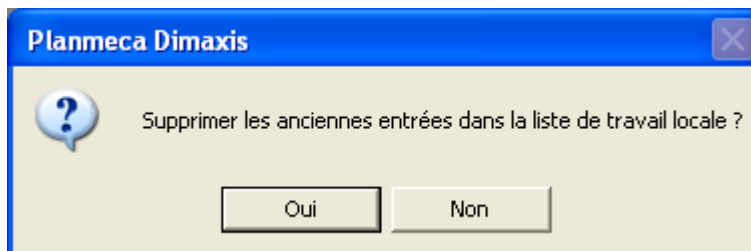

7.4 Menu déroulant DICOM (une ou plusieurs images ouvertes) (version Pro uniquement)

Ce menu déroulant **DICOM** est visible lorsqu'une image est ouverte.

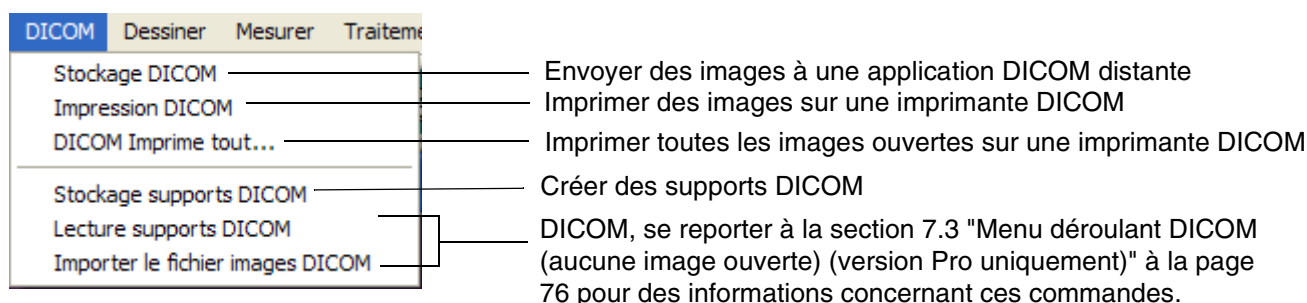

7.4.1 Stockage DICOM (version Pro uniquement)

Cette fonction est identique à celle du bouton *Stockage DICOM*, se reporter à la section 7.2 "Stockage DICOM (version Pro uniquement)" à la page 74.

7.4.2 Impression DICOM (version Pro uniquement)


Cette fonction est identique à celle du bouton *Impression DICOM*, se reporter à la section 7 "DICOM" à la page 72.

7.4.3 DICOM Imprimer tout (version Pro uniquement)

La commande **DICOM Imprimer tout** fonctionne presque exactement de la même manière que la commande **Imprimer tout** (se reporter à la section 6.5 "Imprimer tout (version Pro uniquement)" à la page 71). La fonction **Imprimer tout** propose une prévisualisation exacte du document imprimé, tandis que la fonction **DICOM Print All** propose seulement une approximation grossière.

7.4.4 Stockage sur support DICOM (version Pro uniquement)

Sélectionner la commande **Stockage supports DICOM** dans le menu déroulant **DICOM** pour créer des supports DICOM. Introduire les informations nécessaires.

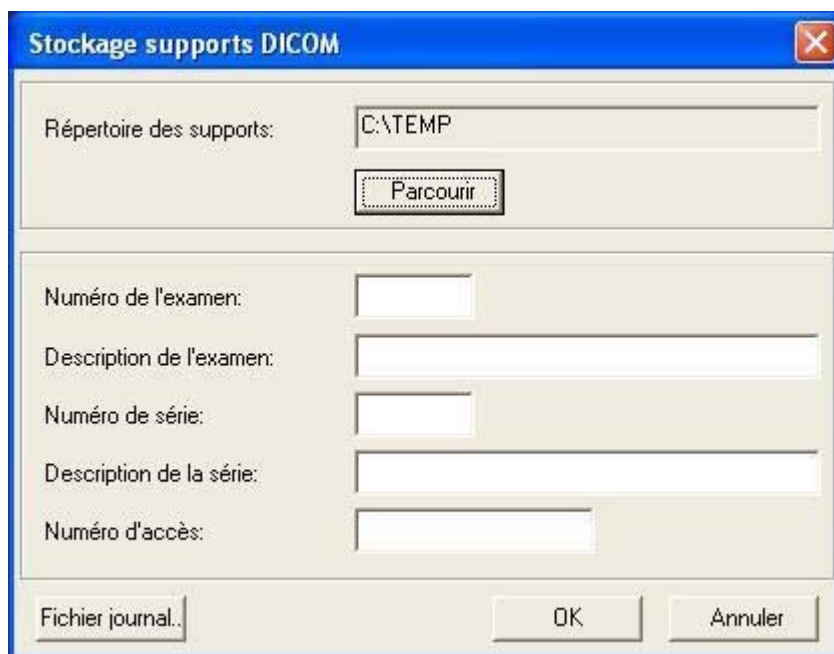

Stockage supports DICOM

Répertoire des supports: C:\TEMP

Parcourir

Numéro de l'examen:

Description de l'examen:

Numéro de série:

Description de la série:

Numéro d'accès:

Fichier journal..

OK Annuler

8 MENUS DÉROULANTS


REMARQUE Les menus déroulants permettent d'activer la totalité des fonctions du programme. Les boutons des barres d'outils ne permettent d'accéder qu'aux principales fonctions du programme.

REMARQUE Les menus déroulants diffèrent selon qu'une image est ou non ouverte.

REMARQUE Lorsque trois points de suspension suivent une commande dans le menu déroulant ou dans la boîte de dialogue ouverte, cela signifie que si l'on clique sur cette commande, il apparaît d'autres options parmi lesquelles on peut faire son choix. Si la commande du menu déroulant ou de la boîte de dialogue n'est pas suivie de trois points de suspension, il n'existe pas d'options supplémentaires.

8.1 Menu déroulant Patient

Le menu déroulant **Patient** est visible lorsqu'aucune image n'est ouverte.

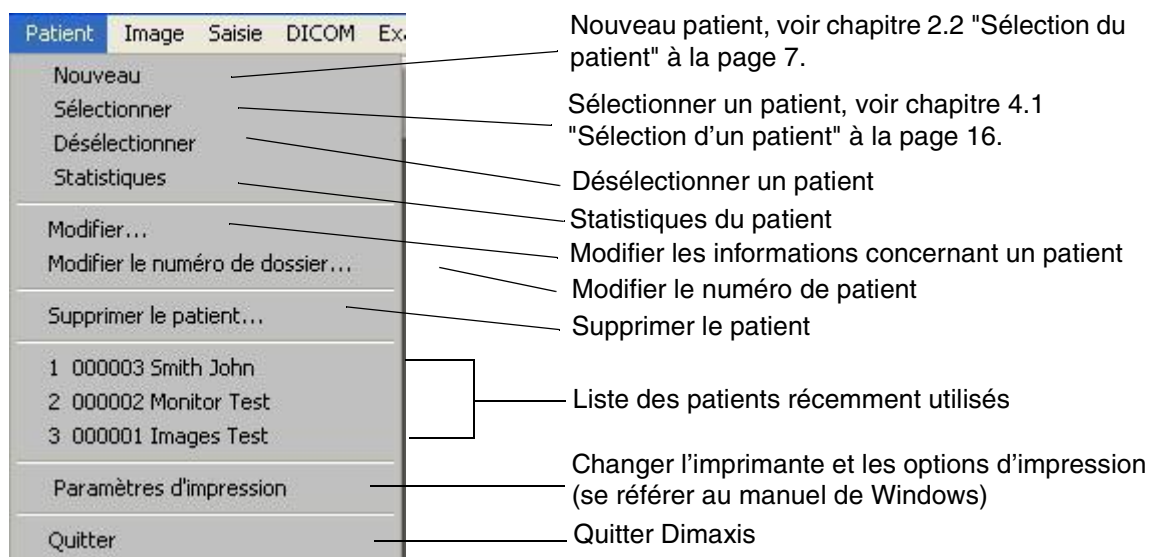


Annuler

Lorsque l'on a terminé d'utiliser les images d'un patient et que l'on ne souhaite pas quitter le programme Dimaxis, on peut désélectionner ce patient en choisissant la commande **Annuler** dans le menu déroulant **Patient**.

Statistiques

Sélectionner la commande **Statistiques** dans le menu déroulant **Patient** pour afficher les statistiques du patient.

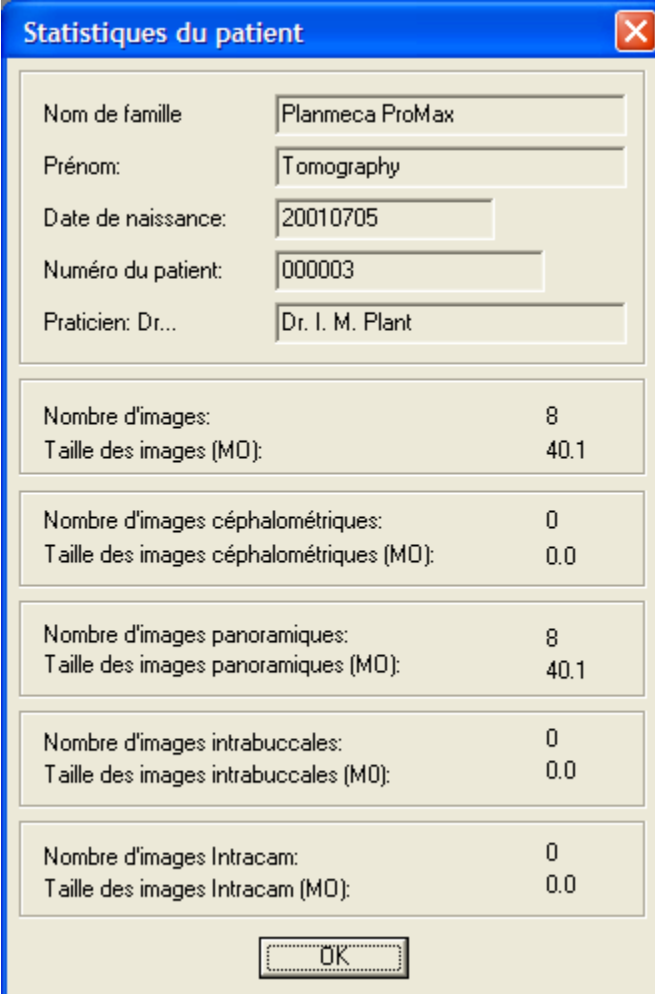


The image shows a software dialog box titled "Statistiques du patient" with a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into several sections. The first section contains input fields for patient information: "Nom de famille" (Planmeca ProMax), "Prénom:" (Tomography), "Date de naissance:" (20010705), "Numéro du patient:" (000003), and "Praticien: Dr..." (Dr. I. M. Plant). The subsequent sections display image statistics in a two-column format. The first statistics section shows "Nombre d'images:" (8) and "Taille des images (MO):" (40.1). The second section shows "Nombre d'images céphalométriques:" (0) and "Taille des images céphalométriques (MO):" (0.0). The third section shows "Nombre d'images panoramiques:" (8) and "Taille des images panoramiques (MO):" (40.1). The fourth section shows "Nombre d'images intrabuccales:" (0) and "Taille des images intrabuccales (MO):" (0.0). The fifth section shows "Nombre d'images Intracam:" (0) and "Taille des images Intracam (MO):" (0.0). At the bottom center of the dialog is an "OK" button.

Statistiques du patient	
Nom de famille	Planmeca ProMax
Prénom:	Tomography
Date de naissance:	20010705
Numéro du patient:	000003
Praticien: Dr...	Dr. I. M. Plant
<hr/>	
Nombre d'images:	8
Taille des images (MO):	40.1
<hr/>	
Nombre d'images céphalométriques:	0
Taille des images céphalométriques (MO):	0.0
<hr/>	
Nombre d'images panoramiques:	8
Taille des images panoramiques (MO):	40.1
<hr/>	
Nombre d'images intrabuccales:	0
Taille des images intrabuccales (MO):	0.0
<hr/>	
Nombre d'images Intracam:	0
Taille des images Intracam (MO):	0.0
<hr/>	
OK	

Modifier

Sélectionner la commande **Modifier** dans le menu déroulant **Patient** pour modifier les informations concernant le patient sélectionné.



The 'Modifier patient' dialog box contains the following fields and controls:

- Nom: Smith
- Prénom: Mary
- Date de naissance: 19800101
- Numéro de dossier: 000007
- Praticien : Dr...: (empty field)
- Sexe:
 - ☐ Masculin
 - ☒ Féminin
 - ☐ Patiente enceinte
- Commentaires: (empty text area)
- Buttons: Modifier, Annuler

Si l'on a modifié les informations concernant le patient sélectionné dans la fenêtre **Modifier patient** et que l'on clique sur le bouton **Modifier**, le message ci-dessous s'affiche. Pour accepter la modification, cliquer sur *Oui*; pour annuler l'action, cliquer sur *Non*.



The 'Modifier patient' dialog box is shown with a confirmation message overlay from Planmeca Dimaxis:

Planmeca Dimaxis

? Voulez-vous vraiment modifier le patient?

Oui Non

The background dialog box shows the same patient information as the first screenshot.

Si l'on clique sur *Oui*, le message ci-dessous s'affiche.




Si l'on a modifié ou supprimé les informations concernant le patient sélectionné dans la fenêtre **Modifier patient** et que l'on clique sur le bouton *Annuler* pour annuler la modification, le message ci-dessous s'affiche. Pour ignorer les modifications, cliquer sur *Oui*; pour accepter les modifications, cliquer sur *Non*.



REMARQUE Si l'on veut supprimer une image, mais non toutes les informations concernant le patient, sélectionner la commande *Supprimer* dans le menu déroulant *Image*, se reporter à la section 8.8 "Menu déroulant *Image* (une ou plusieurs images ouvertes)" à la page 97.

Modifier le numéro d'identification du patient

Sélectionner la commande **Modifier le numéro du patient** dans le menu déroulant **Patient** pour modifier le numéro d'identification du patient. Cette fonction doit être utilisée si le patient a été initialement enregistré dans la base de données avec un numéro d'identification de patient incorrect.

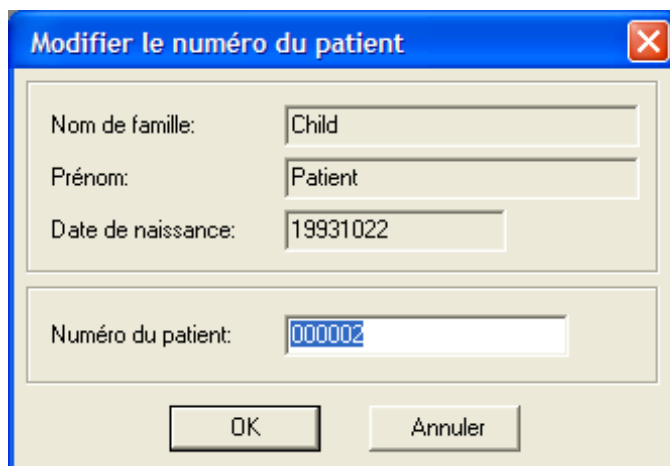

Supprimer le patient

Lorsque l'on sélectionne la commande **Supprimer le patient** dans le menu **Patient**, le message ci-dessous s'affiche. Pour accepter la suppression, cliquer sur *Oui*; pour annuler l'action, cliquer sur *Non*.



Si l'on clique sur *Oui*, le message ci-dessous s'affiche.



REMARQUE Si des images de ce patient se trouvent dans l'archive d'images, ces images seront supprimées également. Dans ce cas, le message ci-dessous s'affiche. Pour accepter la modification, cliquer sur **Oui**; pour annuler l'action, cliquer sur **Non**.



Liste des patients récemment utilisés


Dimaxis conserve en mémoire les dix derniers patients sélectionnés par chaque utilisateur.

Sortir

Sélectionner la commande **Sortir** dans le menu déroulant **Patient** pour quitter le programme Dimaxis.


8.2 Menu déroulant Image (aucune image ouverte)

Ce menu déroulant **Image** est visible lorsqu'aucune image n'est ouverte.

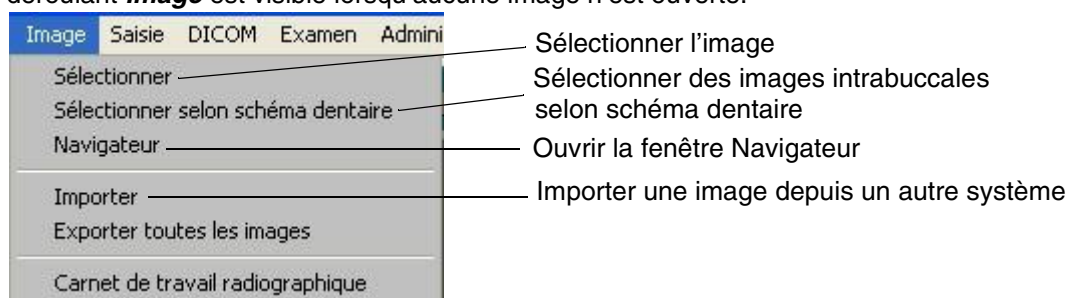

Importer

On peut importer des fichiers TIFF, JPEG et BMP. Pour importer une image depuis un autre système, sélectionner la commande **Importer** dans le menu déroulant **Image**. La fenêtre ci-dessous s'affiche. Sélectionner l'image et le type de fichier et cliquer sur **Ouvrir**. Voir également le chapitre 9.2.8 "Exporter" à la page 149.

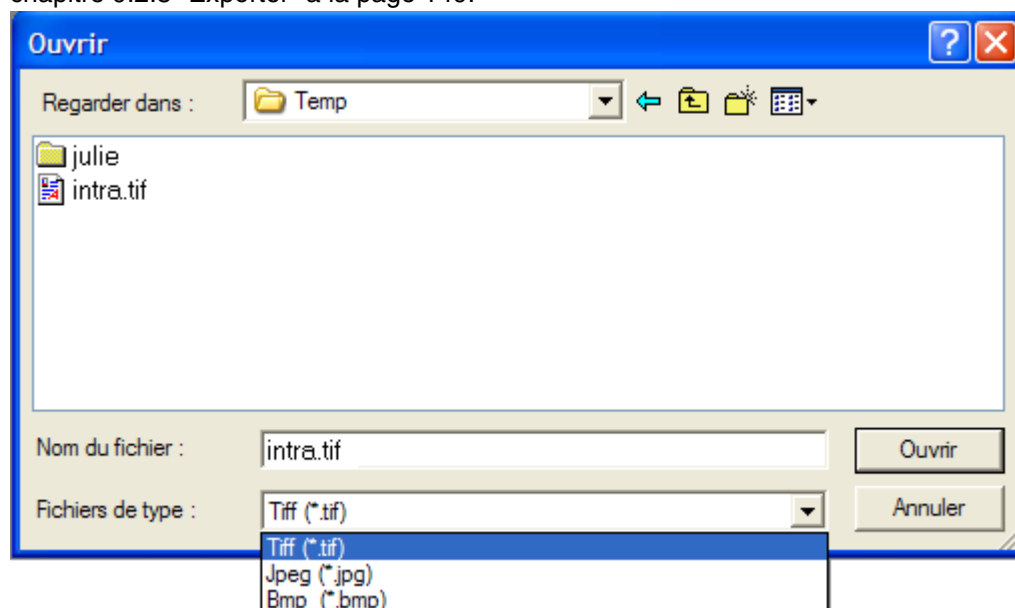

La fenêtre **Paramètres d'images** s'affiche.

Si l'orientation des images prises ailleurs est incorrecte, on peut les faire pivoter pour les amener dans l'orientation voulue dès leur importation à l'aide de la fonction *Rotation* de la fenêtre **Paramètres d'image**.

Le champ *Agrandissement* de la fenêtre Paramètres d'images s'utilise lors de l'importation ou de la numérisation d'images. Si la valeur de l'agrandissement est spécifiée, on peut effectuer des mesures sans devoir étalonner l'image. Il faut également indiquer la taille des pixels.


Spécifier les valeurs désirées des paramètres et cliquer sur **OK**.

Exporter toutes les images

Sélectionner la commande **Exporter toutes les images** dans le menu déroulant **Image** pour exporter toutes les images du patient. Cette commande n'est visible que lorsqu'aucune image n'est ouverte.

Si le répertoire d'exportation par défaut n'a pas été spécifié, le message ci-dessous s'affiche. Se reporter à la section 9.2.6 "Répertoires" à la page 146.

Les images seront exportées dans un répertoire spécifié par le numéro d'identification du patient dans le répertoire d'exportation par défaut.

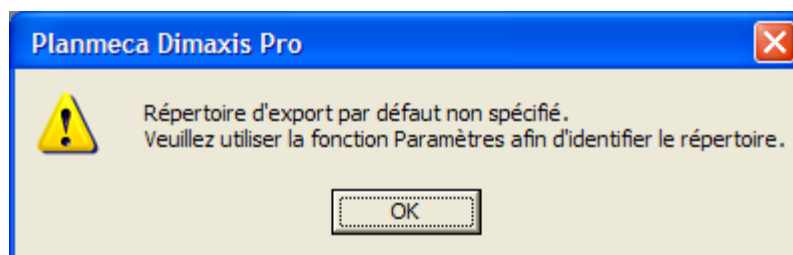


Carnet de travail radiographie

La fonction *Carnet de travail radiographie* permet de réaliser des listes des images prises pendant une certaine période. La période par défaut est d'un mois, mais il est possible de modifier la date de début et la date de fin dans la fenêtre **Carnet de travail radiographique**.

Les listes d'images peuvent être triées par patient ou par date de cliché. Le programme conserve en mémoire le dernier choix sélection effectué (pour chaque utilisateur).




Si nécessaire, modifier la date de début et/ou la date de fin en cliquant sur les flèches dans les champs de date. On peut également introduire une date dans les zones de texte *Date de début/* *Date de fin*.

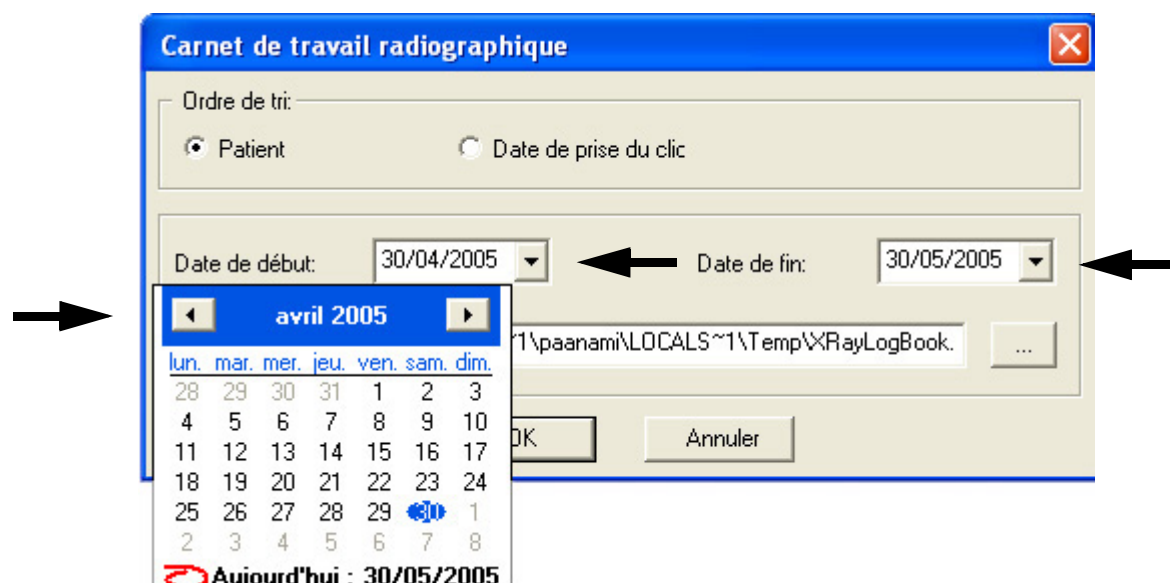


Lorsque l'on clique sur *OK* dans la fenêtre **Carnet de travail radiographique**, la fenêtre **XRayLog-Book.doc - Bloc-notes** contenant le fichier texte s'affiche. On peut imprimer le fichier texte en sélectionnant la commande *Imprimer* dans le menu déroulant *Fichier*.

Le nom de la personne qui a réalisé la radiographie est affiché dans la liste. Toutes les radiographies reprises sous ce nom ont été réalisées par cette personne.

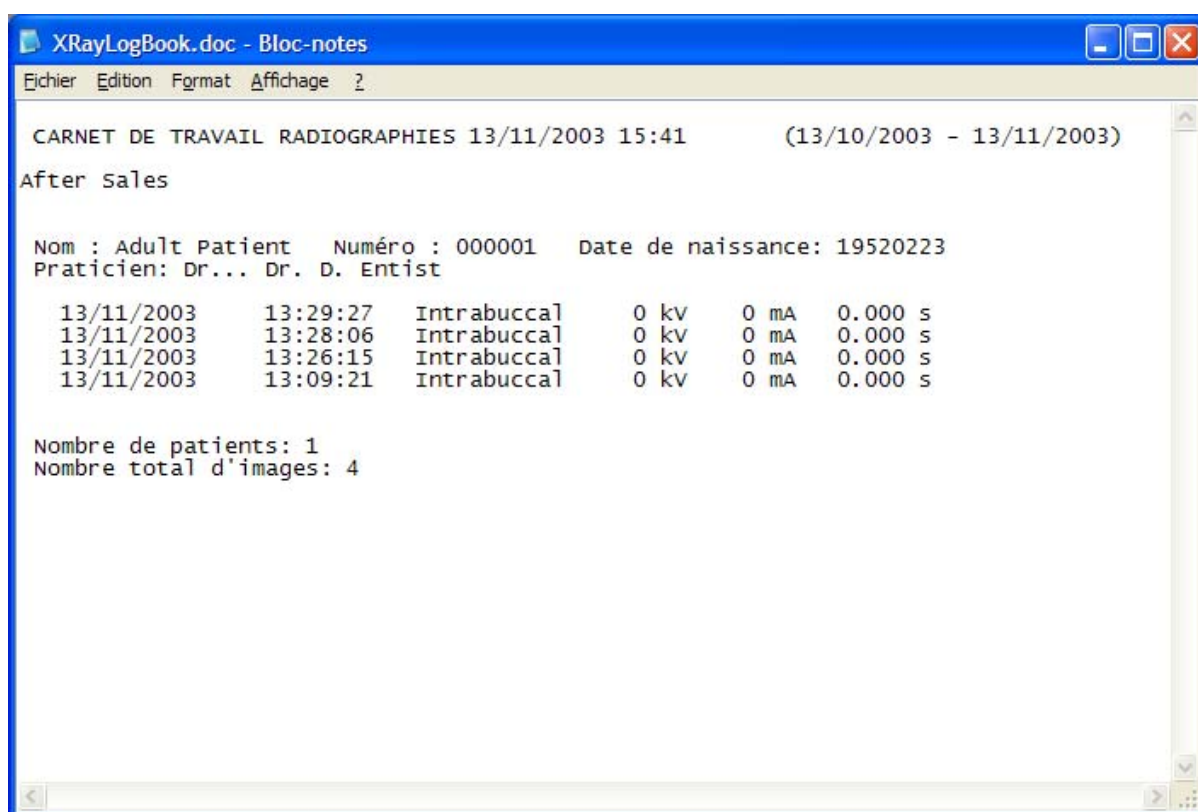


8.3 Menu déroulant Saisie

Le menu déroulant **Saisie** est visible en permanence.

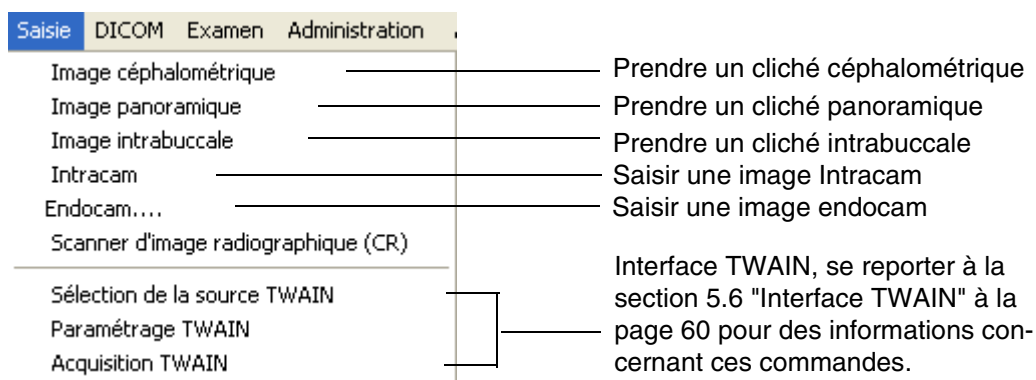

8.4 Menu déroulant Examen

Le menu déroulant **Examen** est visible lorsqu'aucune image n'est ouverte. On peut également ouvrir ce menu avant de sélectionner un patient.

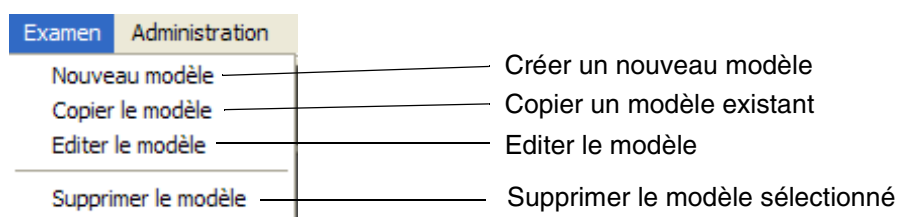


L'utilisation des modèles est décrite à la section 11 "MODÈLES D'EXAMENS (Optionnel aux Etats-Unis uniquement)" à la page 161.

8.5 Menu déroulant Administration

Le menu déroulant **Administration** est visible lorsqu'aucune image n'est ouverte.

L'utilisation des paramètres est décrite à la section 9 "PARAMÈTRES" à la page 127.

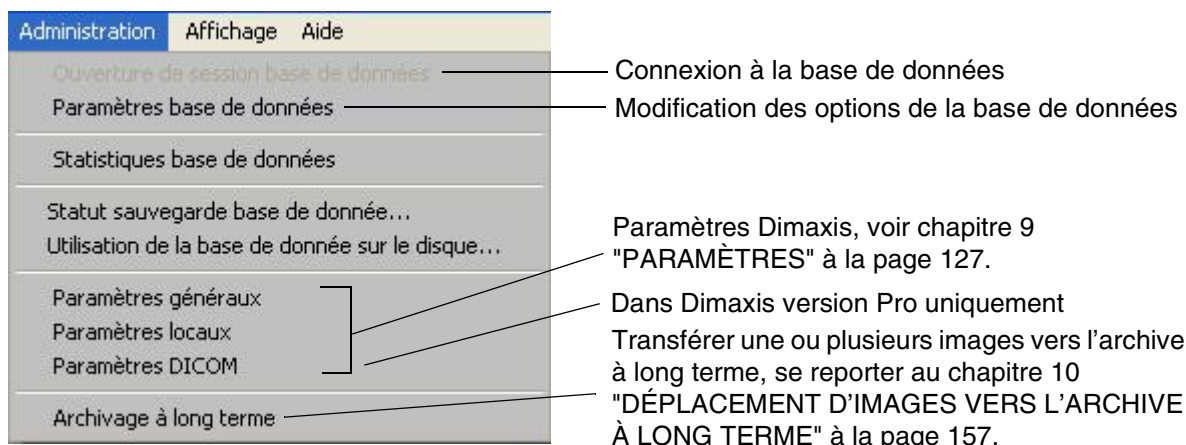

Ouverture de session base de données

La commande **Ouverture de session base de données** du menu déroulant **Administration** est active lorsque l'on n'est pas connecté à la base de données Solid. Utiliser cette commande pour se connecter à la base de données.


Paramétrage base de données

Sélectionner la commande **Paramétrage base de données** dans le menu déroulant **Administration** pour modifier les commandes de démarrage et de fermeture de la base de données.



Ces champs doivent rester vierges, sauf si le logiciel Dimaxis est utilisé sur un ordinateur indépendant et que Solid n'a pas été enregistré en tant que service.


Lorsque l'on clique sur *Code utilisateur*, le message ci-dessous s'affiche.

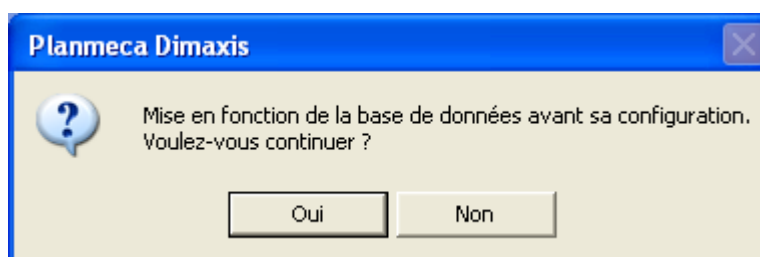

Si l'on clique sur *Oui*, la fenêtre ODBC (Database Connectivity) s'affiche. Dans cette fenêtre, on peut sélectionner la source de données de son choix.

Statistiques base de données

Sélectionner la commande **Statistiques base de données** dans le menu déroulant **Administration** pour afficher les statistiques de la base de données.

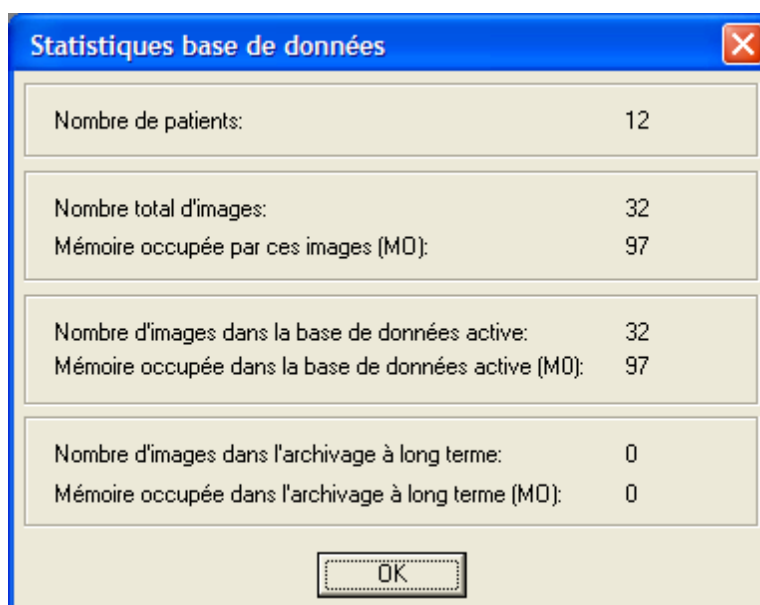

Statut sauvegarde base de donnée

La commande **Statut sauvegarde base de données** fonctionne uniquement lorsque l'on utilise la base de données Solid; d'autres bases de données disposent éventuellement d'outils plus sophistiqués pour effectuer ce type de tâches.


Il faut contrôler régulièrement le statut de sauvegarde de la base de données.

Utilisation de la base de donnée sur le disque

La commande **Utilisation du disque de base de données** fonctionne uniquement lorsque l'on utilise la base de données Solid (Solid 4.1 ou version ultérieure); d'autres bases de données disposent éventuellement d'outils plus sophistiqués pour effectuer ce type de tâches. Par exemple, SQL Server permet de configurer le DBMS de manière à envoyer un courriel à l'administrateur du système si l'espace disque libre est inférieur à une limite prédéterminée.

Il faut contrôler régulièrement l'utilisation du disque de base de données.

8.6 Menu déroulant Affichage

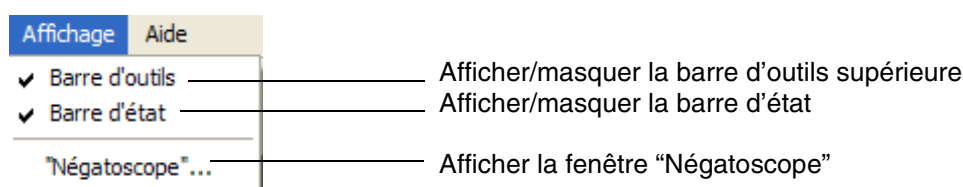

Barre d'outils

La fonction **Barre d'outils** permet d'afficher ou de masquer la barre d'outils supérieure.

Barre d'état


La fonction **Barre d'état** fonction d'afficher ou de masquer la barre d'état au bas de l'écran.

"Négatoscope"

La fonction **"Négatoscope"** affiche un écran blanc. Cette option permet d'examiner des radiographies sur film.

8.7 Menu déroulant Aide


Le menu déroulant **Aide** est visible en permanence.

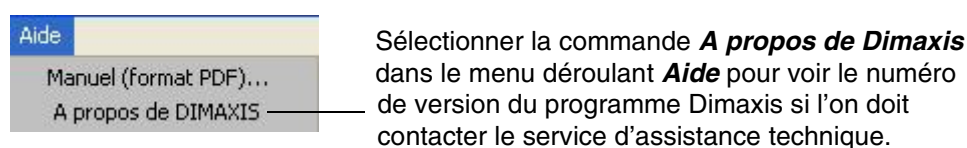

Manuel (format PDF)


La commande **Manuel (format PDF)** du menu déroulant **Aide** ouvre le manuel d'utilisation Dimaxis. Ce manuel est au format PDF; Acrobat Reader doit être installé pour pouvoir l'ouvrir.

Si Acrobat Reader n'est pas installé sur l'ordinateur, le message ci-dessous s'affiche.

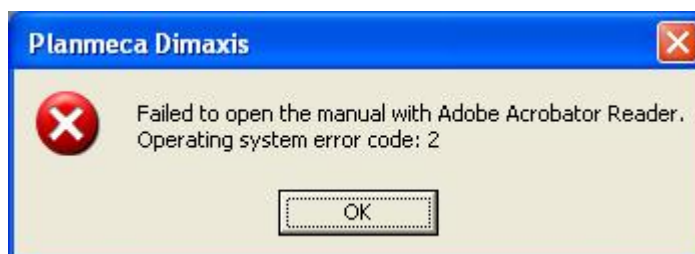

8.8 Menu déroulant Image (une ou plusieurs images ouvertes)

Ce menu déroulant **Image** est visible lorsqu'une image est ouverte.

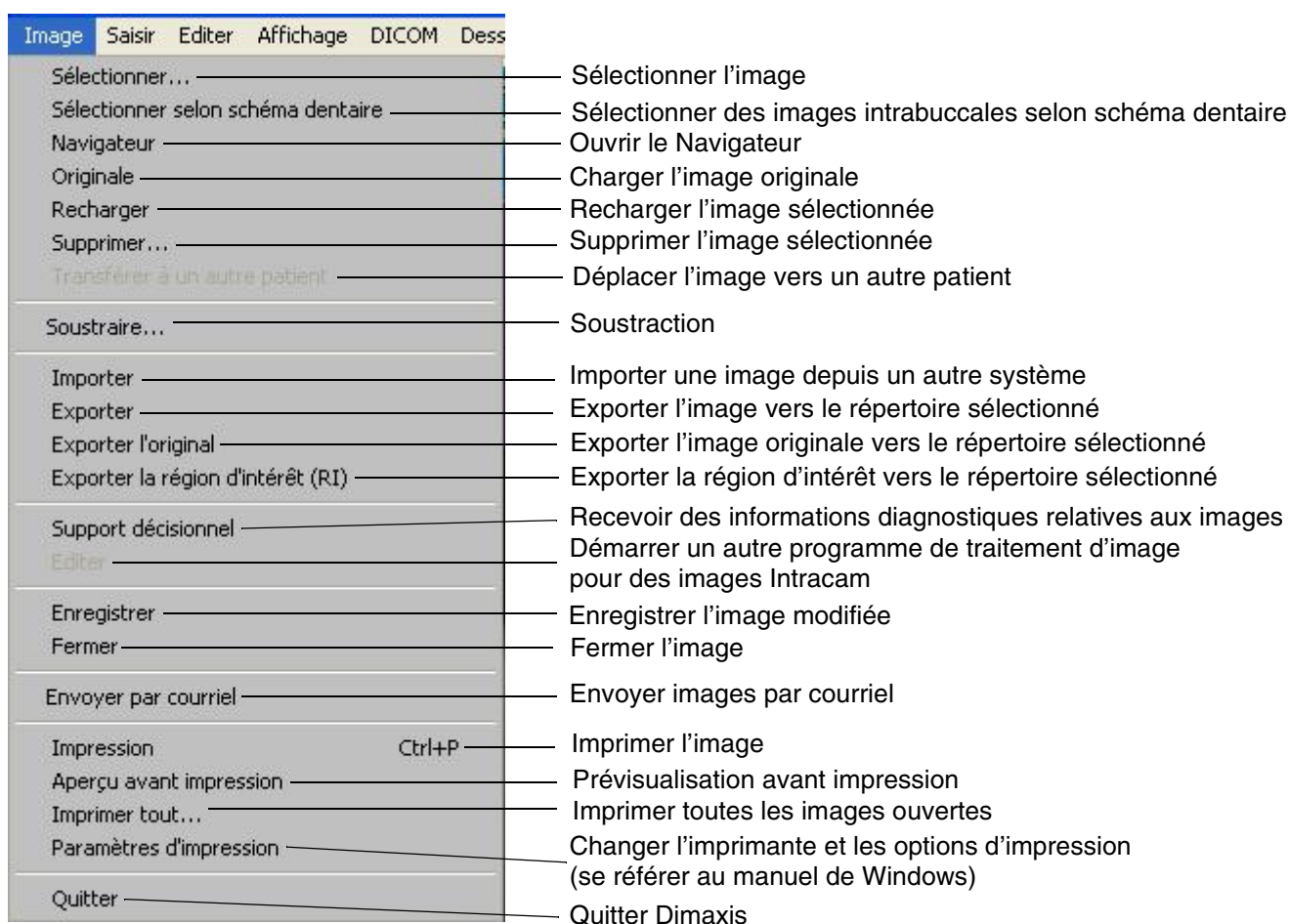

Originale


Si l'on a ouvert une image modifiée ou si l'on a modifié l'image, la commande **Originale** permet de revenir à la version originale de la même image.

Recharger

La fonction **Recharger** est comparable à la fonction Originale mais Recharger revient à la dernière version enregistrée de l'image.

Supprimer

Lorsque l'on sélectionne la commande **Supprimer** dans le menu déroulant **Image**, le message ci-dessous s'affiche. Pour supprimer l'image sélectionnée de la base de données, cliquer sur *Oui*; pour annuler l'action, cliquer sur *Non*.

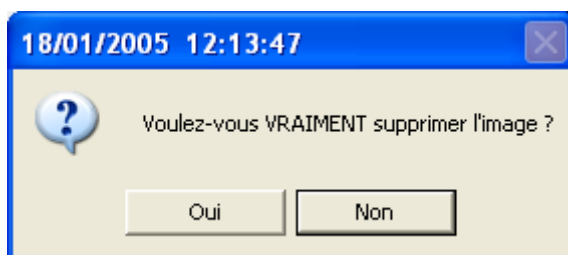


Pour éviter la suppression accidentelle d'images, la commande *Supprimer* n'est accessible que lorsqu'une seule image est ouverte. Avant la suppression de l'image, celle-ci est copiée dans le dossier Temp, avec le fichier image et le fichier d'informations patient (nom de l'image, par exemple _DEL_00001_50.TIF).

Transférer à un autre patient


REMARQUE *Il n'est pas possible de sélectionner cette commande si l'image a été manipulée ou si plusieurs images sont ouvertes.*

La commande **Transférer à un autre patient** permet de déplacer une image d'un patient à un autre. Si, pour une raison quelconque, on a oublié de changer de patient dans Dimaxis avant la prise d'un nouveau cliché, on peut sélectionner cette commande pour déplacer l'image vers le patient correspondant.

La fenêtre **Sélectionner le patient** s'affiche. Sélectionner ou ajouter le patient auquel on souhaite attribuer l'image et cliquer sur *OK*.

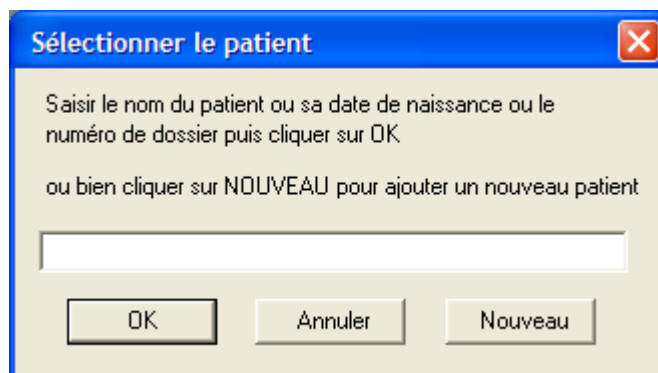


Sélectionner le patient dans la liste qui s'affiche et cliquer sur *OK*.

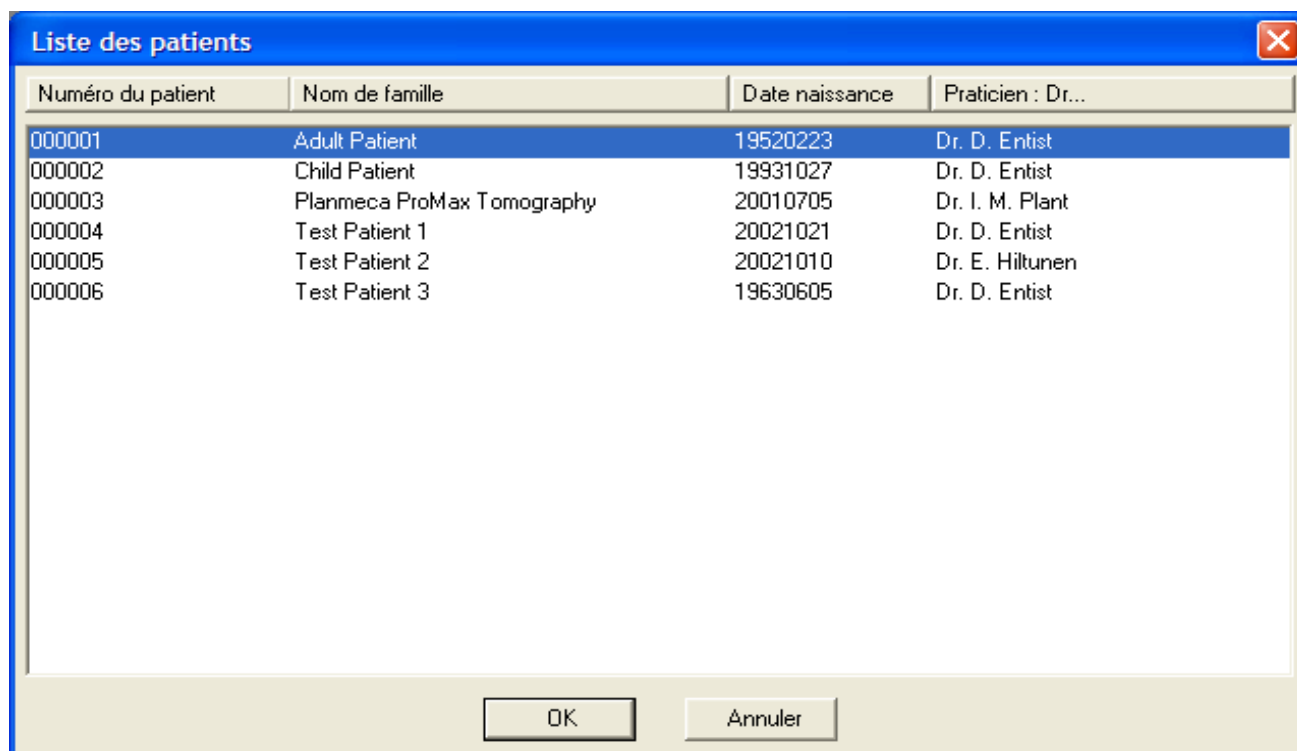

Numéro du patient	Nom de famille	Date naissance	Praticien : Dr...
000001	Adult Patient	19520223	Dr. D. Entist
000002	Child Patient	19931027	Dr. D. Entist
000003	Planmeca ProMax Tomography	20010705	Dr. I. M. Plant
000004	Test Patient 1	20021021	Dr. D. Entist
000005	Test Patient 2	20021010	Dr. E. Hiltunen
000006	Test Patient 3	19630605	Dr. D. Entist

OK Annuler

On est invité à confirmer cette action en cliquant sur *Oui*. Pour annuler l'action, cliquer sur *Non*.

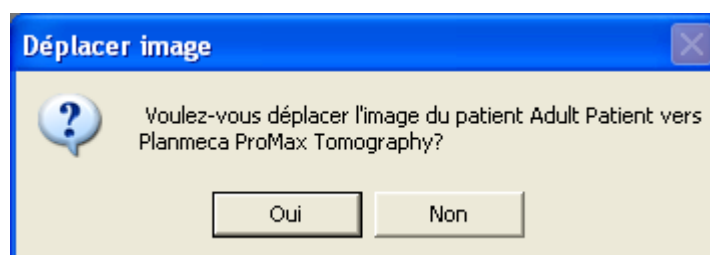

Déplacer image

? Voulez-vous déplacer l'image du patient Adult Patient vers Planmeca ProMax Tomography?

Oui Non

Soustraire (optionnel)

La soustraction est une méthode scientifiquement éprouvée pour évaluer des différences minimales sur des radiographies successives (avant/après). La soustraction numérique est une méthode couramment utilisée dans le domaine médical. Elle nécessite la superposition de deux radiographies pour détecter une modification. Le logiciel Dimaxis réalise cela en se basant sur des points de contrôle définis par l'utilisateur. Les points de contrôle doivent être choisis de manière à entourer complètement la région d'intérêt. La sélection des points de référence (ou points de repère) est essentielle, elle affecte l'exactitude de la méthode.

On peut recourir à la soustraction pour détecter des lésions de petite taille, évaluer des modifications parodontales et divers autres problèmes.

Il existe un paramétrage spécifique de l'utilisateur (voir 9.2.10 "Soustraire" à la page 151) qui permet de décider si l'utilisateur souhaite que le logiciel Dimaxis optimise les points de contrôle spécifiés avant d'appliquer la soustraction. L'optimisation améliore généralement le résultat de la soustraction mais, si le contraste à proximité des points de contrôle est insuffisant, l'algorithme risque d'être incapable d'effectuer l'optimisation. En outre, le calcul de l'optimisation prend du temps.

L'utilisation de la fonction de soustraction est commandée par le fichier DLC.


REMARQUE *Pour corriger des différences au niveau des angles de projection, des points de contrôle anatomiquement identiques sont indispensables pour permettre un alignement géométrique correct.*

Utilisation de l'outil de soustraction Dimaxis

1. Ouvrir les deux radiographies à évaluer dans Dimaxis.
2. Cliquer sur le bouton *Points de contrôle pour soustraction* de la barre d'outils de droite ou sélectionner la commande **Points de contrôle pour soustraction** dans le menu déroulant **Dessin** et cliquer sur l'écran pour ajouter quatre points de contrôle aux deux images. Ajouter les points dans le sens des aiguilles d'une montre, d'abord sur une image, puis sur l'autre.



Bouton *Points de contrôle pour soustraction*

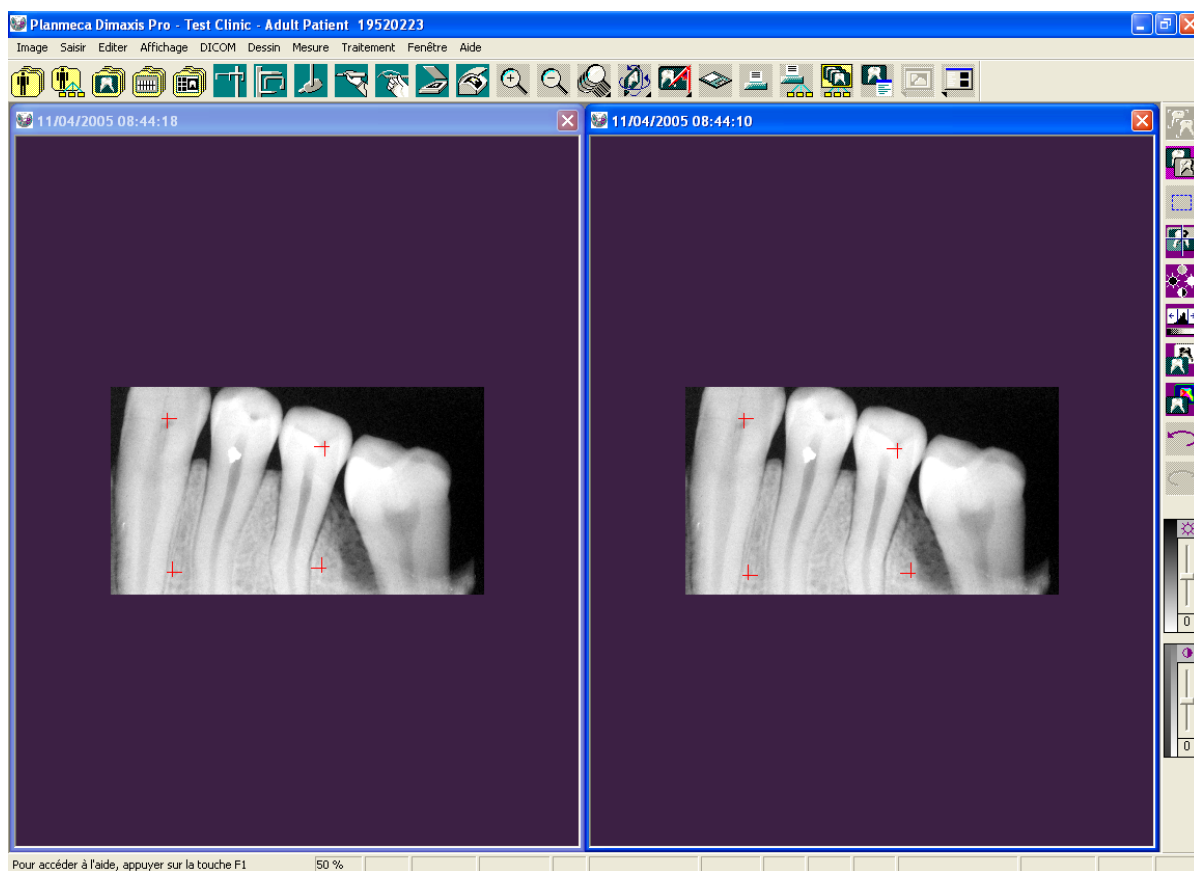


Si nécessaire, on peut ajuster l'emplacement d'un point de contrôle: en cliquant sur ce point, maintenir le bouton de la souris enfoncé et amener le point à l'emplacement souhaité.

3. Cliquer sur le bouton *Soustraire* de la barre d'outils de droite ou sélectionner la commande **Soustraire** dans le menu déroulant **Image**.



Bouton *Soustraire*

4. Dimaxis affiche automatiquement l'image soustraite à des fins de diagnostic.

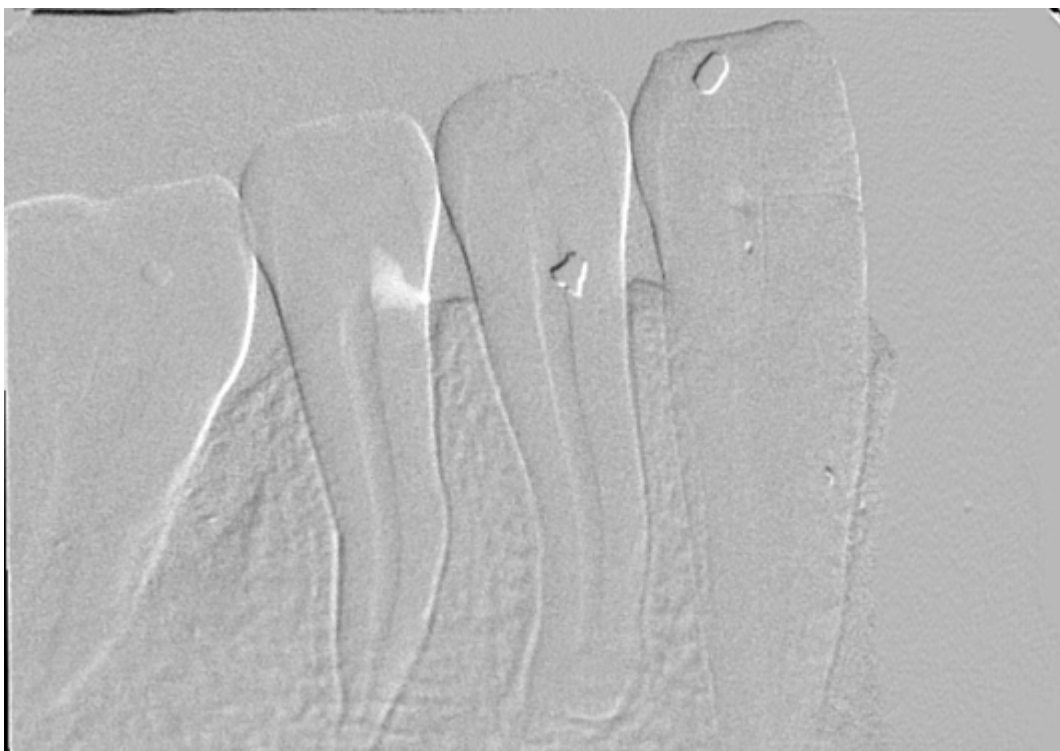

Importer

Cette commande importe un ou plusieurs fichiers depuis un autre système.

Exporter

Cette commande exporte une image vers le répertoire sélectionné. On peut également cliquer sur le bouton *Exporter* de la barre d'outils supérieure.



Bouton *Exporter*

Exporter l'original

Cette commande exporte l'image originale vers le répertoire sélectionné. Le paramètre *Créer fichiers d'exportation 8 bits* de la fenêtre **Paramètres généraux et utilisateur/Exportation** (voir 9.2.8 "Exporter" à la page 149) est ignoré. On notera qu'il n'est pas possible de modifier le format d'image.

Exporter la région d'intérêt (RI)

Cette commande exporte la région d'intérêt (RI) vers le répertoire sélectionné.


Support décisionnel

Il est nécessaire d'acquérir une licence distincte pour activer la fonction d'aide à la décision. La commande **Support décisionnel** active une fonction distincte permettant de recevoir des informations diagnostiques relatives aux images. On peut également cliquer sur le bouton *Support décisionnel* de la barre d'outils supérieure. La fonction d'aide à la décision concerne exclusivement les images intrabuccales et panoramiques et, dans le cas des images panoramiques, uniquement lorsqu'une région d'intérêt a été sélectionnée.



Bouton *Support décisionnel*

Si la fonction d'aide à la décision n'est pas installée, le message ci-dessous s'affiche.

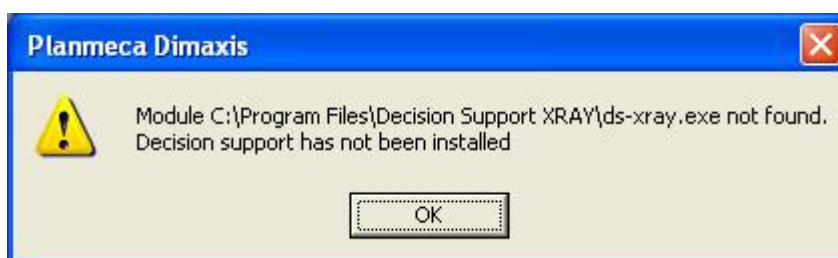

Editer

Cette commande démarre un autre programme de traitement d'image (par exemple Adobe Photoshop) permettant de manipuler des images en couleurs. On peut également cliquer sur le bouton *Editer* de la barre d'outils supérieure.




Bouton *Editer*

Enregistrer

La fonction **Enregistrer** enregistre les modifications apportées à l'image. L'image originale demeure également dans l'archive et on peut l'ouvrir au moyen de la commande **Originale**.

Si l'on a apporté des modifications à l'image et que l'on sélectionne la commande *Originale* dans le menu déroulant *Image*, le message ci-dessous s'affiche. Pour ouvrir la version originale de la même image, cliquer sur *Oui*. Pour annuler l'action, cliquer sur *Non*.

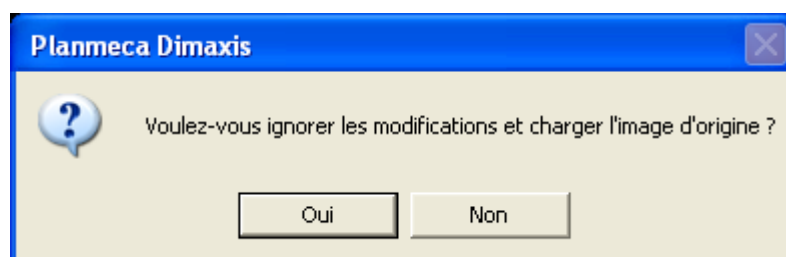

REMARQUE Il n'est possible d'enregistrer qu'une seule version modifiée dans l'archive. Lorsque l'on enregistre une nouvelle version modifiée, celle-ci vient toujours remplacer la version modifiée existante.

Fermer

La fonction **Fermer** ferme l'image.

Envoyer par courriel

Sélectionner la commande **Envoyer par courriel** dans le menu déroulant **Image** pour envoyer directement des images par courriel. Dimaxis ouvre automatiquement la boîte de dialogue d'envoi de courrier électronique de l'application de courrier électronique cliente par défaut.

Impression


Sélectionner la commande **Impression** dans le menu déroulant **Image** ou appuyer sur les touches **Ctrl+P** pour imprimer les images.

Aperçu avant impression

La fonction **Aperçu avant impression** affiche un aperçu avant impression.

8.9 Menu déroulant Editer

Le menu déroulant **Editer** est visible lorsqu'une image est ouverte.

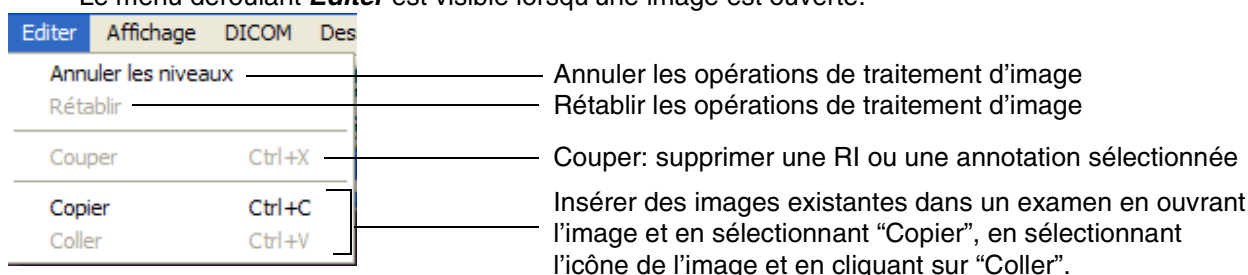

Annuler

Sélectionner cette commande ou cliquer sur le bouton **Annuler** de la barre d'outils supérieure pour annuler les opérations de traitement d'image effectuées, dans l'ordre inverse, en cliquant à plusieurs reprises sur le bouton **Annuler**. On peut également annuler les opérations de traitement d'image réalisées au cours des précédentes sessions.



Bouton *Annuler*

Réitérer

Sélectionner cette commande ou cliquer sur le bouton **Réitérer** de la barre d'outils supérieure pour restaurer les opérations précédemment annulées, dans l'ordre inverse, en cliquant à plusieurs reprises sur le bouton **Réitérer**. La fonction Rétablir n'est plus disponible si l'on a utilisé des fonctions de traitement d'image, ni après que l'on ait enregistré l'image.



Bouton *Réitérer*

Couper

Sélectionner cette commande ou appuyer sur les touches **Ctrl+X** pour couper (= supprimer) une RI ou une annotation sélectionnée.


Copier

On peut utiliser la commande **Copier** (**Ctrl+C**) pour ajouter des images existantes à l'étude. Dans la version 3.3.0 du logiciel Dimaxis, les données d'image sont également copiées dans le presse-papiers, de sorte que l'on peut aisément coller les images dans un autre logiciel (par exemple Word).

Si on a sélectionné une région d'intérêt au sein de l'image, seul le contenu de la région d'intérêt sera copié dans le presse-papiers.

8.10 Menu déroulant Affichage

Le menu déroulant **Affichage** est visible lorsqu'une image est ouverte.

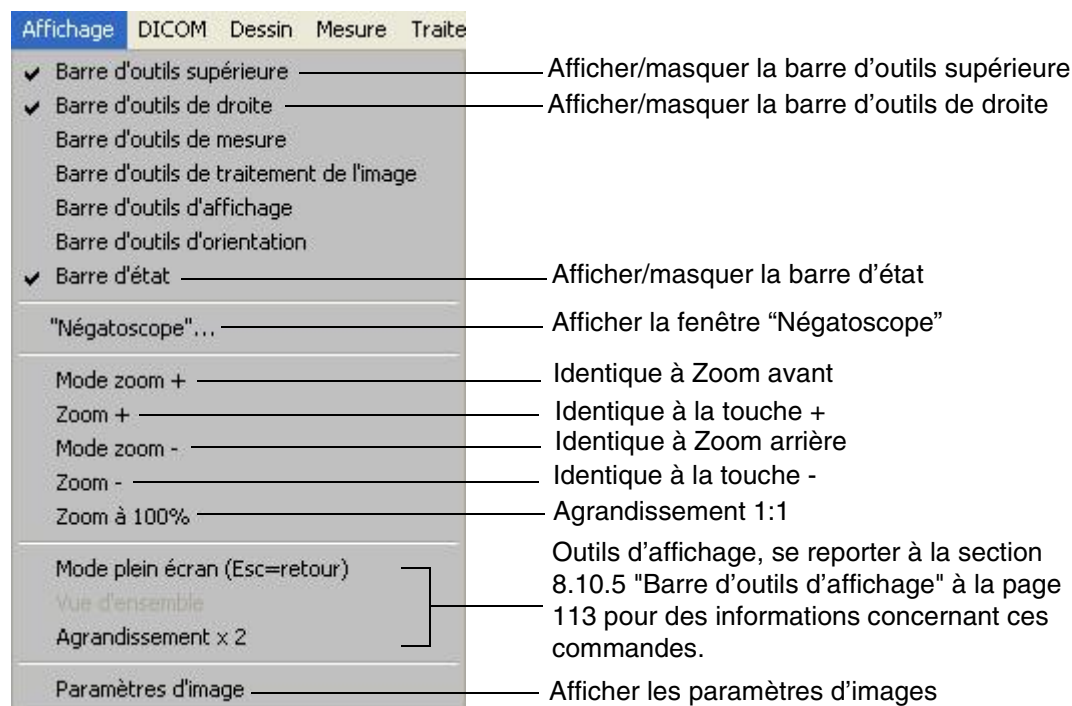

8.10.1 Barre d'outils supérieure


La fonction **Barre d'outils supérieure** permet d'afficher ou de masquer la barre d'outils supérieure.

8.10.2 Barre d'outils à droite

La fonction **Barre d'outils à droite** permet d'afficher ou de masquer la barre d'outils de droite.

8.10.3 Barre d'outils de mesure


Sélectionner la commande **Barre d'outils mesure** dans le menu déroulant **Affichage** pour afficher les outils de mesure et de dessin. On peut également cliquer sur le bouton *Barre d'outils de mesure* de la barre d'outils supérieure. La barre d'outils de mesure s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran. Pour déplacer cette barre d'outils, cliquer sur le cadre de la barre d'outils, le faire glisser jusqu'à l'emplacement souhaité et relâcher le bouton de la souris.

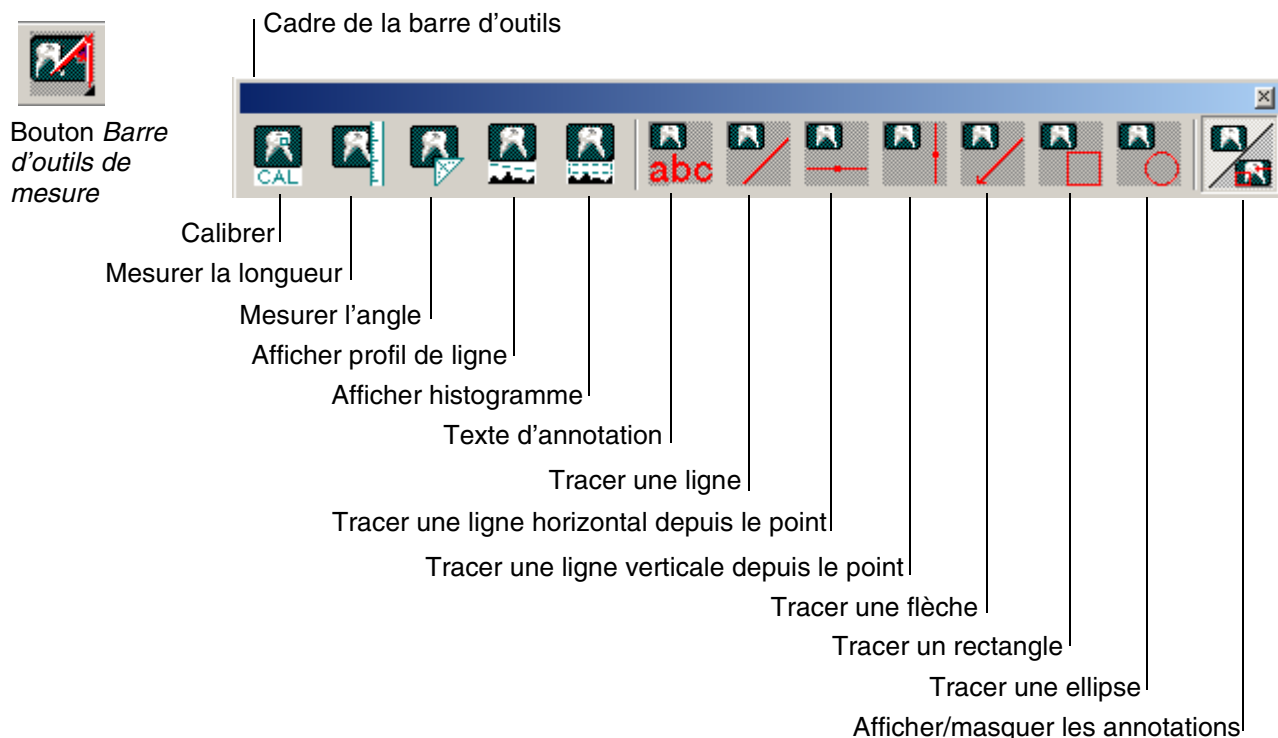

REMARQUE La mesure effectuée disparaît automatiquement lorsque l'on sélectionne une autre fonction, sauf si on a sélectionné "Créer annotation" dans la boîte de dialogue de mesure.


Calibrer

Pour pouvoir mesurer la distance entre deux points sélectionnés, il est nécessaire de définir une distance de référence. Cliquer sur le bouton **CAL** et mesurer la **longueur connue** en cliquant sur le point de départ, relâchant le bouton de la souris bouton et cliquant sur le point de terminaison. La fenêtre **Distance de référence** s'affiche. Introduire la distance, par exemple en centimètres, dans le champ *Distance en...* de la fenêtre **Distance de référence** et cliquer sur **OK**. On notera que l'on peut utiliser les unités de son choix. Après l'étalonnage, toutes les distances de l'image active seront indiquées dans l'unité sélectionnée.

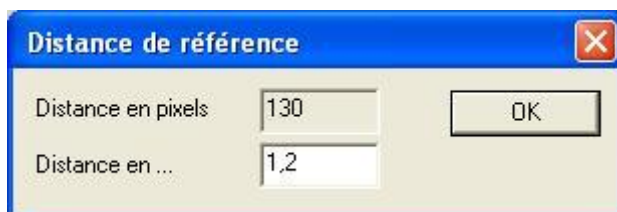


MENUS DÉROULANTS

Il est possible d'effectuer une mesure grossière de la distance avant l'étalonnage de l'image pour la mesure des distances. Dans ce cas, un message d'avertissement s'affiche avant la première mesure (voir ci-dessous).

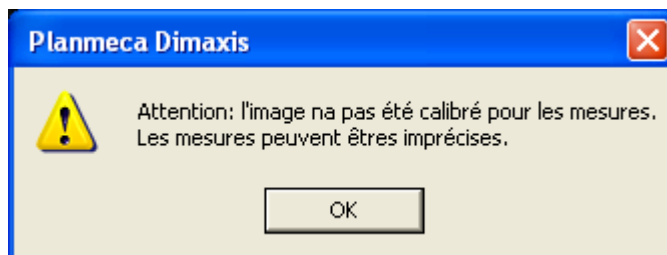

Le logiciel Dimaxis mémorise l'étalonnage après la fermeture de l'image, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de répéter l'étalonnage chaque fois que l'on ouvre l'image.

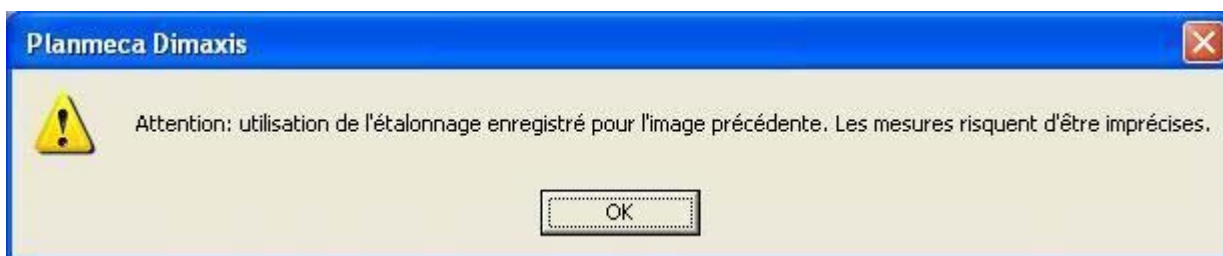

Mesurer la longueur

REMARQUE Il faut définir la distance de référence avant d'utiliser la fonction de mesure de la longueur, se reporter à la section "Calibrer" à la page 105.

Les mesures horizontales des images panoramiques risquent d'être imprécises. C'est pourquoi le logiciel Dimaxis émet un message d'avertissement si la ligne de mesure s'écarte de plus de 6 degrés de la verticale.

Après avoir défini la distance de référence, cliquer sur le bouton *Mesurer la longueur*. La fenêtre **Mesure de distance** s'affiche. Un trajet de distance est constitué de segments de droite consécutifs. Pour tracer les segments de droite, cliquer à l'aide du bouton gauche de la souris sur le point de départ, relâcher le bouton et cliquer à l'aide du bouton gauche de la souris sur le point de terminaison. La longueur et l'angle par rapport à l'axe horizontal de chaque segment sont indiqués dans la fenêtre **Mesure de distance**.

Le trajet de distance et la longueur totale sont affichés sur l'image après la mesure si l'on a sélectionné l'option *Ajout d'annotation*.

La longueur et l'angle de la ligne en cours de traçage, ainsi que la longueur totale du trajet, sont affichés dans les champs *Distance*, *Angle* et *Longueur* de la fenêtre **Mesure de distance**.

Pour terminer le trajet de distance, cliquer à l'aide du bouton droit de la souris ou cliquer sur le bouton *Nouveau* de la fenêtre **Mesure de distance**. Pour terminer le trajet de distance et fermer la fenêtre, cliquer sur *OK*; pour annuler la mesure, cliquer sur *Annuler*.

Chemin	Distance	Angle
1 - 2	2.34	78.00
2 - 3	4.43	18.00
3 - 4	2.08	89.00
4 - 5	2.20	39.00
5 - 6	4.65	11.00

Distance: 1.74 Angle: 103

Longueur: 15.70 ☒ Ajout d'annotation


Mesurer les angles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, par rapport à 3 heures

Nouveau OK Annuler

Mesurer l'angle


Cliquer sur le point de départ, relâcher le bouton de la souris et cliquer sur le point central et le point de terminaison pour mesurer l'angle. L'angle s'affiche dans la fenêtre **Angle**.

La ligne de mesure et l'angle sont affichés sur l'image après la mesure si l'on a sélectionné l'option *Ajout d'annotation*. Si l'on n'a pas sélectionné l'option *Ajout d'annotation*, la ligne de mesure disparaît lorsque l'on effectue une nouvelle mesure.

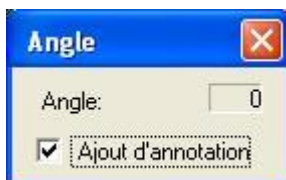

Afficher profil de ligne

La fenêtre **Profil de ligne** affiche le profil d'intensité entre deux points sélectionnés sur la ligne tracée. Cliquer à l'aide du bouton gauche de la souris sur le point de départ, relâcher le bouton et cliquer sur le point de terminaison pour afficher le profil d'intensité entre les points sélectionnés. La fenêtre **Profil de ligne** s'affiche et reste à l'écran jusqu'à ce qu'on la ferme ou que l'on ferme l'image.

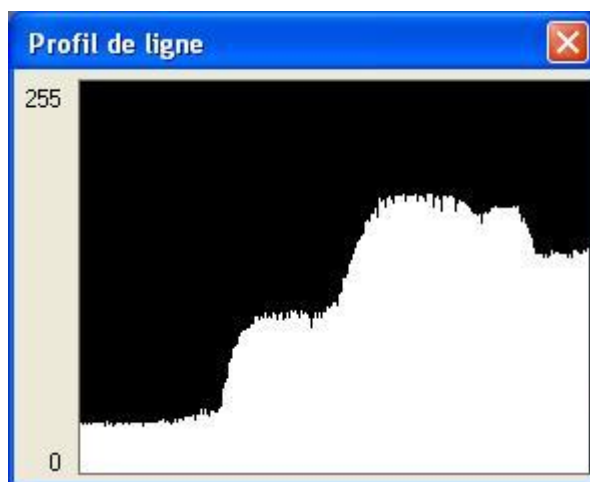


Afficher histogramme

Un histogramme est une représentation graphique de la distribution de l'intensité au sein de l'image ou de la région d'intérêt (RI). La fenêtre **Histogramme** reste à l'écran jusqu'à ce qu'on la ferme ou que l'on ferme l'image.

Les valeurs numériques au bas de la boîte de dialogue Histogramme affichent des informations statistiques sur les valeurs de niveaux de gris des pixels. *Nombre de pixels* représente le nombre total de pixels utilisés pour calculer l'histogramme. *Moyenne* est la valeur moyenne de la luminosité. *Déviatiion standard* (*Déviatiion std*) représente le degré de variation des valeurs. *Médiane* indique la valeur moyenne de la plage de valeurs des niveaux de gris.

Pour afficher les informations relatives à un point particulier de l'histogramme, placer le point à cet endroit. Pour afficher les informations relatives à une plage de valeurs, se déplacer dans l'histogramme pour mettre cette plage en surbrillance.

Les valeurs dans la partie inférieure droite de la boîte de dialogue changent pour afficher le niveau de gris (*Niveaux de gris*) du point (de 0 à 255), le nombre total de pixels à ce niveau (*Comptage*) et le pourcentage de pixels à ce niveau ou au-dessous de ce niveau (*Centile*).

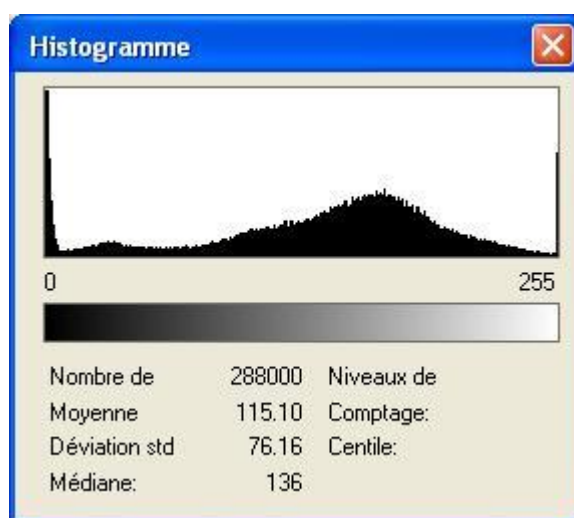

Tracé de figures


Cliquer sur le bouton correspondant à l'outil souhaité, puis cliquer à l'aide du bouton gauche de la souris à l'endroit du point de départ de l'objet, relâcher le bouton de la souris et cliquer à l'aide du bouton gauche de la souris à l'endroit du point de terminaison. L'outil est automatiquement désélectionné après utilisation, si l'on sélectionne un autre outil ou une autre commande ou si l'on appuie sur la touche **ESC**.

Texte d'annotation

Cliquer sur le bouton *Texte d'annotation*, puis sur l'emplacement où l'on veut insérer du texte dans l'image. La boîte de dialogue **Ajout d'annotation** s'affiche. Introduire le texte de l'annotation et cliquer sur **OK**. On peut modifier ultérieurement le texte en cliquant deux fois sur le texte dans l'image.



Bouton
Texte d'annotation

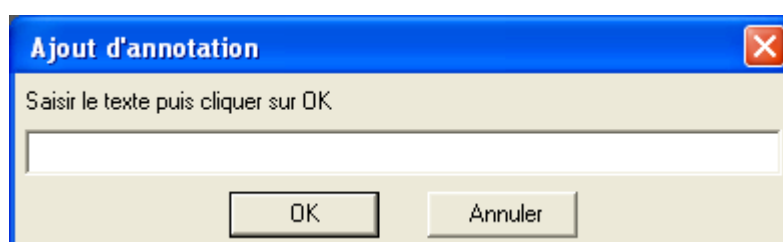

Afficher/masquer les annotations

Cliquer sur le bouton *Afficher/masquer les annotations* pour afficher ou masquer les annotations placées sur l'image.




Bouton
Afficher/masquer les annotations

8.10.4 Barre d'outils de traitement de l'image

Sélectionner la commande **Barre d'outils de traitement de l'image** dans le menu déroulant **Affichage** pour afficher les outils de filtrage. On peut également cliquer sur le bouton *Barre d'outils de traitement de l'image* de la barre d'outils de droite. La barre d'outils de traitement d'image s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran. Pour déplacer cette barre d'outils, cliquer sur le cadre de la barre d'outils, la faire glisser jusqu'à l'emplacement souhaité et relâcher le bouton de la souris.



Bouton *Barre d'outils de traitement de l'image*

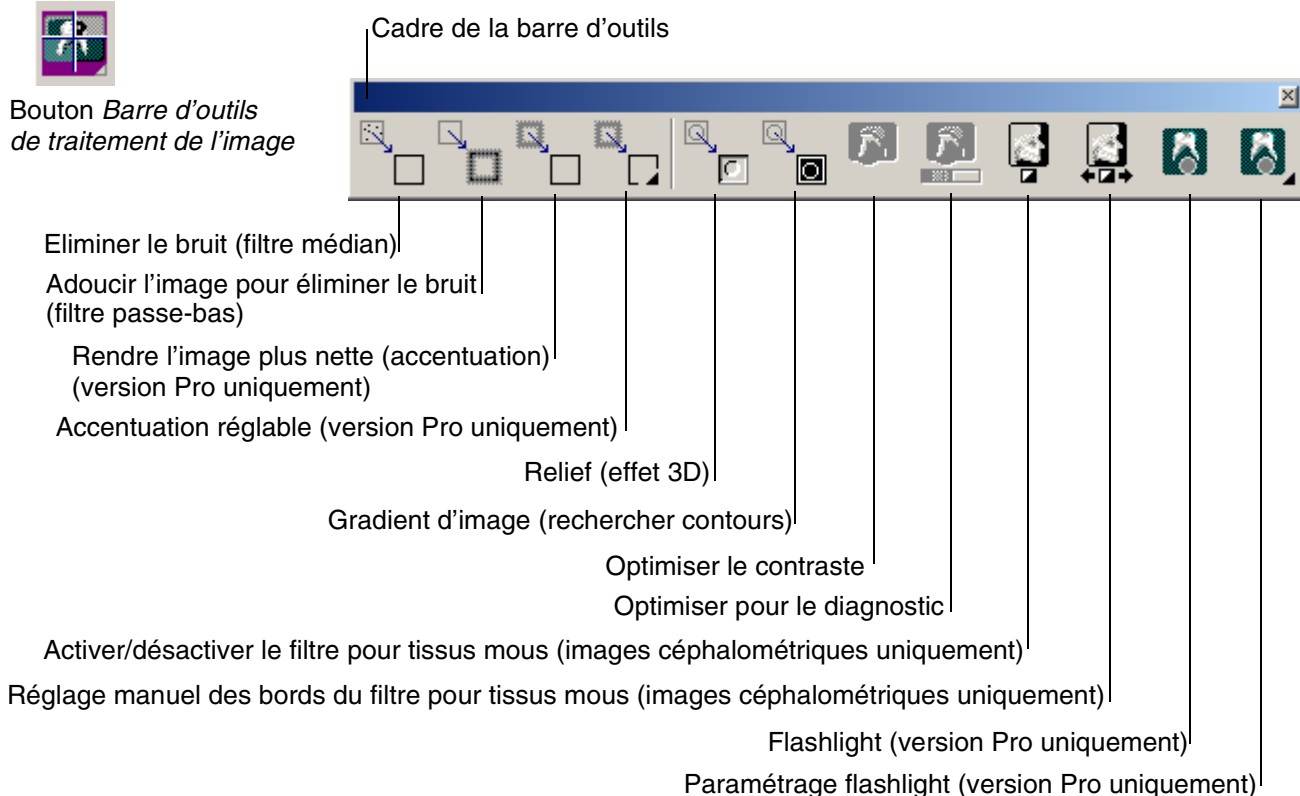

On peut utiliser les filtres pour améliorer la qualité de l'image et pour mettre en évidence les propriétés souhaitées. Néanmoins, l'utilisation de filtres peut entraîner la perte de certaines informations d'image et donc affecter la valeur diagnostique de l'image. On peut recharger l'image originale depuis la base de données.

Si la barre d'outils de traitement d'image était ouverte lorsque l'on a fermé la dernière image, cette barre d'outils est automatiquement ouverte lorsque l'on ouvre l'image suivante.

Accentuation (version Pro uniquement)

Le filtre de netteté permet d'augmenter la netteté de l'image en accentuant les hautes fréquences. Néanmoins, le bruit de l'image augmente en même temps.

Accentuation réglable (version Pro uniquement)


Il est possible de sélectionner une accentuation par défaut ou une accentuation réglable. Cliquer sur le bouton **Accentuation réglable** pour ouvrir la fenêtre **Filtre d'accentuation**, qui permet de définir le rayon du filtre et le facteur d'échelle de l'image. Le rayon du filtre peut varier de 1 à 9, le facteur d'échelle de 115 à 300. Déplacer le curseur du facteur d'échelle vers la droite augmente le filtrage.

Cliquer sur le bouton *Défauts* rétablit les valeurs par défaut du logiciel Dimaxis pour le filtre.

La fenêtre **Filtre d'accentuation** permet également de définir si l'on veut enregistrer les valeurs ajustées en tant que valeurs par défaut spécifiques de l'utilisateur.



Bouton
Accentuation réglable

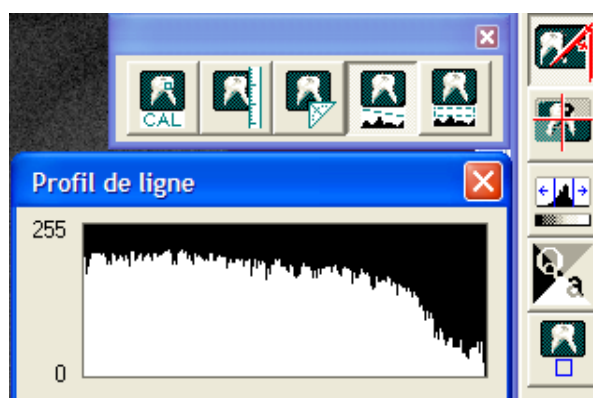

Equilibrage

La fonction **Equilibrage** redistribue les valeurs de la luminosité des pixels d'image au sein d'une image de telle sorte qu'ils représentent de manière plus régulière la plage complète des niveaux de luminosité.

Filtre pour tissus mous activé (images céphalométriques uniquement)

Cliquer sur le bouton **Filtre tissu mou activé** ou sélectionner la commande **Filtre tissu mou activé** dans le menu déroulant **Traitement** (se reporter à la section 8.13 "Menu déroulant Traitement" à la page 120) pour activer/désactiver la fonction de filtre pour tissus mous automatique pour les images céphalométriques. Une coche dans le menu indique que la fonction est activée.

Réglage du filtre pour tissus mous (images céphalométriques uniquement)


Si le fonctionnement automatique du filtre pour tissus mous ne fournit pas des résultats satisfaisants, cliquer sur le bouton **Réglage filtre tissus mous** ou sélectionner la commande **Régler le filtre tissu mou** dans le menu déroulant **Traitement** (se reporter à la section 8.13 "Menu déroulant Traitement" à la page 120) pour régler manuellement la position des bords du filtre pour tissus mous. Le curseur se transforme en symbole de filtre pour tissus mous et deux lignes vertes (indiquant la position des bords) apparaissent sur l'image. Positionner le symbole du filtre pour tissus mous sur le bord que l'on veut déplacer et le faire glisser à l'aide de la souris jusqu'à son nouvel emplacement. L'image est automatiquement refiltrée.

L'intensité du filtre pour tissus mous pour les images céphalométriques est réglable. La valeur par défaut peut être configurée en se conformant aux instructions figurant à la section 9.1.5 "Céphalométrie" à la page 134 et le filtrage peut également être ajusté pour chaque image à l'aide de la commande **Réglage filtre tissus mous**. Déplacer le curseur vers le haut éclaircit la zone filtrée et le déplacer vers le bas assombrit l'image.

REMARQUE *L'évaluation des tissus mous était auparavant une fonction mécaniquement intégrée dans le céphalostat. Dans le système de céphalostat numérique Dimax3, il s'agit d'une fonction logicielle.*


Flashlight (version Pro uniquement)

La fonction Flashlight permet à l'utilisateur d'effectuer des opérations temporaires d'accentuation ou de traitement de l'image. On peut visualiser les différentes opérations dans la fenêtre *Paramétrage flashlight* (voir page suivante).

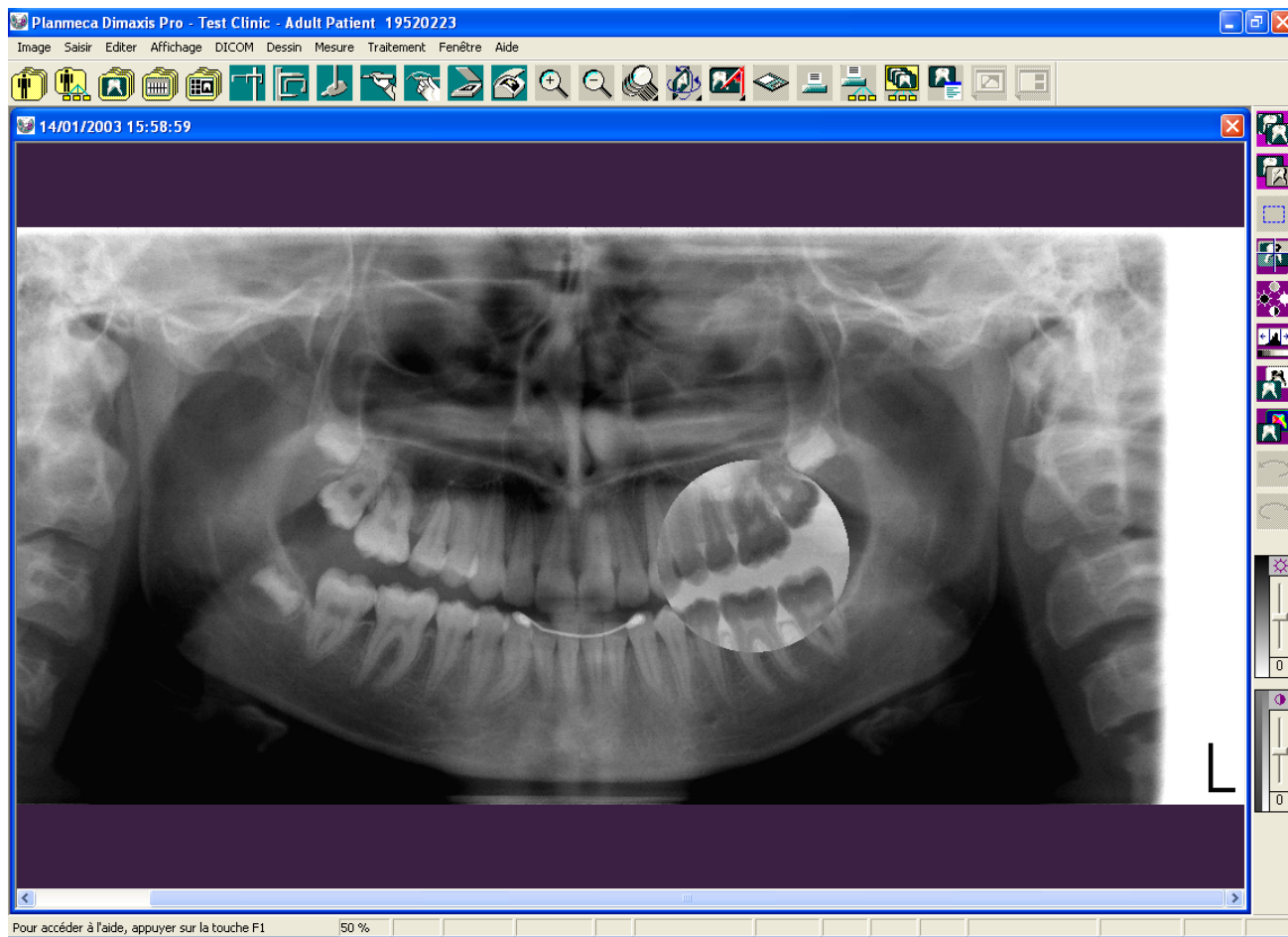

Paramétrage flashlight (version Pro uniquement)

Cette fenêtre permet de choisir la commande pour le flash. Elle permet également de définir la forme de la fenêtre (circulaire ou rectangulaire).

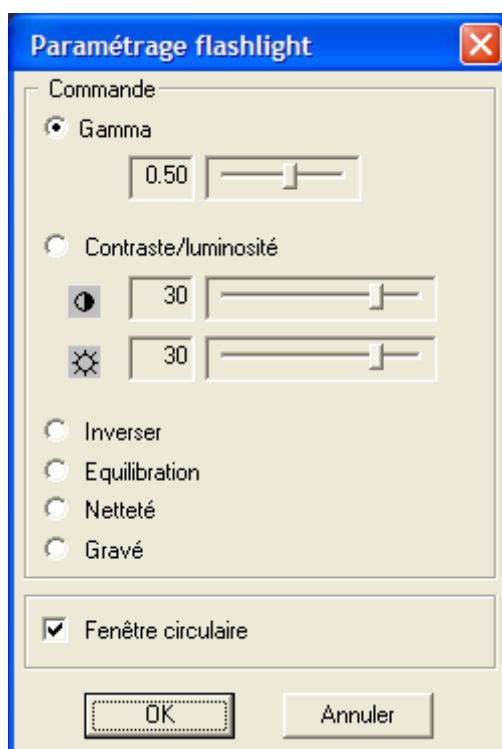

Si l'on clique sur *Netteté*, le message ci-dessous s'affiche.



8.10.5 Barre d'outils d'affichage

Sélectionner la commande **Barre d'outils d'affichage** dans le menu déroulant **Affichage** pour afficher les outils d'affichage. On peut également cliquer sur le bouton *Barre d'outils de visualisation* de la barre d'outils supérieure.



Bouton
Barre d'outils de visualisation

Mode plein écran
Afficher Vue d'ensemble de l'image
Agrandissement 2x

Mode plein écran


Cliquer sur le bouton *Mode plein écran* pour passer en mode affichage plein écran.

Agrandir ou réduire l'image au moyen des touches plus (+) et moins (-) et se déplacer vers le haut et vers le bas au moyen des touches fléchées ou des touches page précédente/page suivante. Revenir au mode d'affichage normal en appuyant sur la touche **Echap** ou cliquant sur le bouton *Vue normale* au bord inférieure de l'écran.

Fenêtre Vue d'ensemble

La fenêtre ***Vue d'ensemble*** affiche la totalité de l'image et la partie agrandie est indiquée par un rectangle vert. On peut déplacer la partie agrandie en déplaçant ce rectangle vert.

La fenêtre ***Vue d'ensemble*** n'est pas affichée si l'ensemble de l'image apparaît à l'écran.

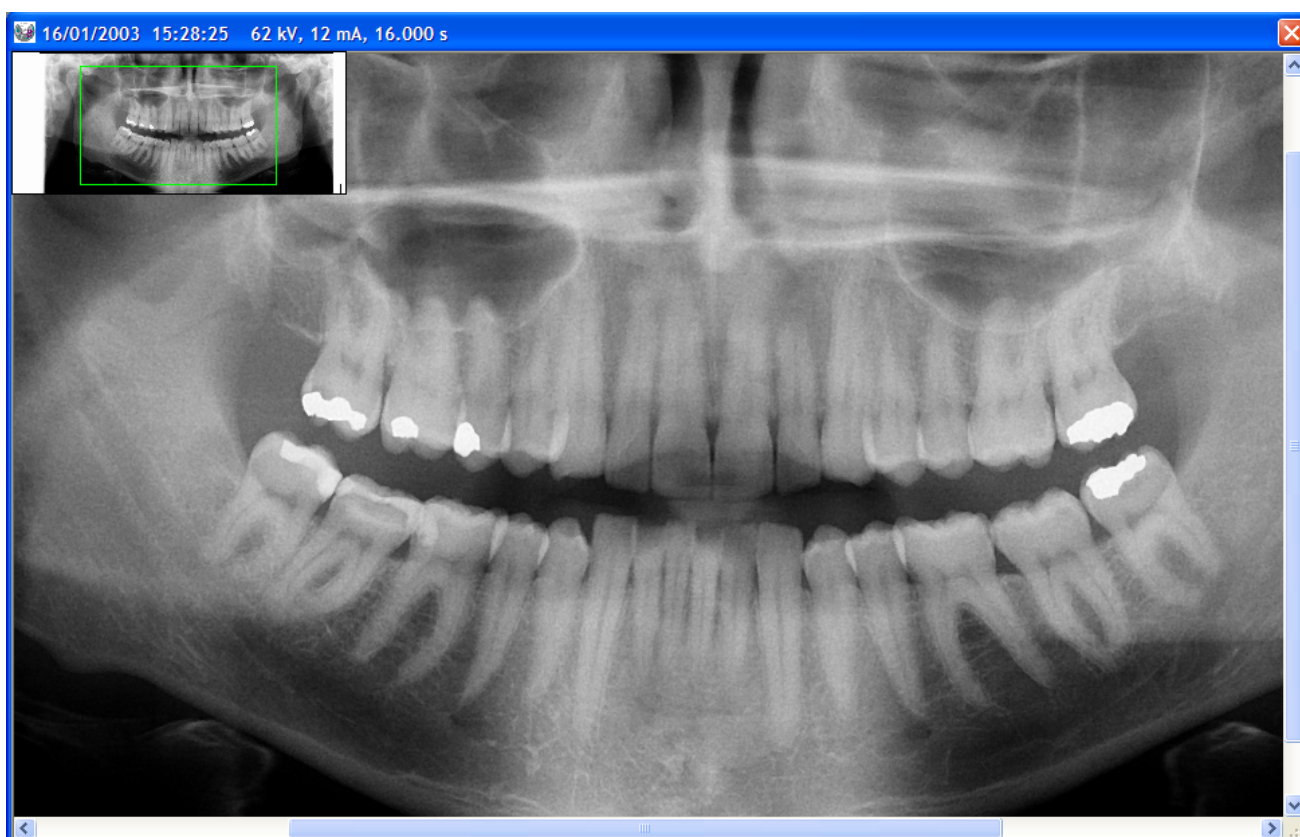


Fermer la fenêtre *Vue d'ensemble* en cliquant à nouveau sur le bouton *Vue d'ensemble* de la barre d'outils supérieure ou en sélectionnant à nouveau la commande ***Vue d'ensemble*** dans le menu déroulant ***Affichage***.

La section 9.1.4 "Image panoramique" à la page 133 permet de déterminer si l'on souhaite ouvrir la fenêtre *Vue d'ensemble* lors de l'ouverture d'une image panoramique ou céphalométrique.

Agrandissement 2x


L'outil *Agrandissement 2x* ouvre une barre d'outils d'agrandissement distincte (voir ci-dessous). La partie de l'image qui se trouve sous le curseur apparaît agrandie. Pour déplacer la barre d'outils d'agrandissement, il suffit de la faire glisser à l'aide de la souris dans n'importe quelle direction.

Fermer l'outil *Agrandissement 2x* en cliquant à nouveau sur le bouton *Agrandissement 2x* de la barre d'outils supérieure ou en sélectionnant à nouveau la commande **Agrandissement 2x** du menu déroulant **Affichage**.

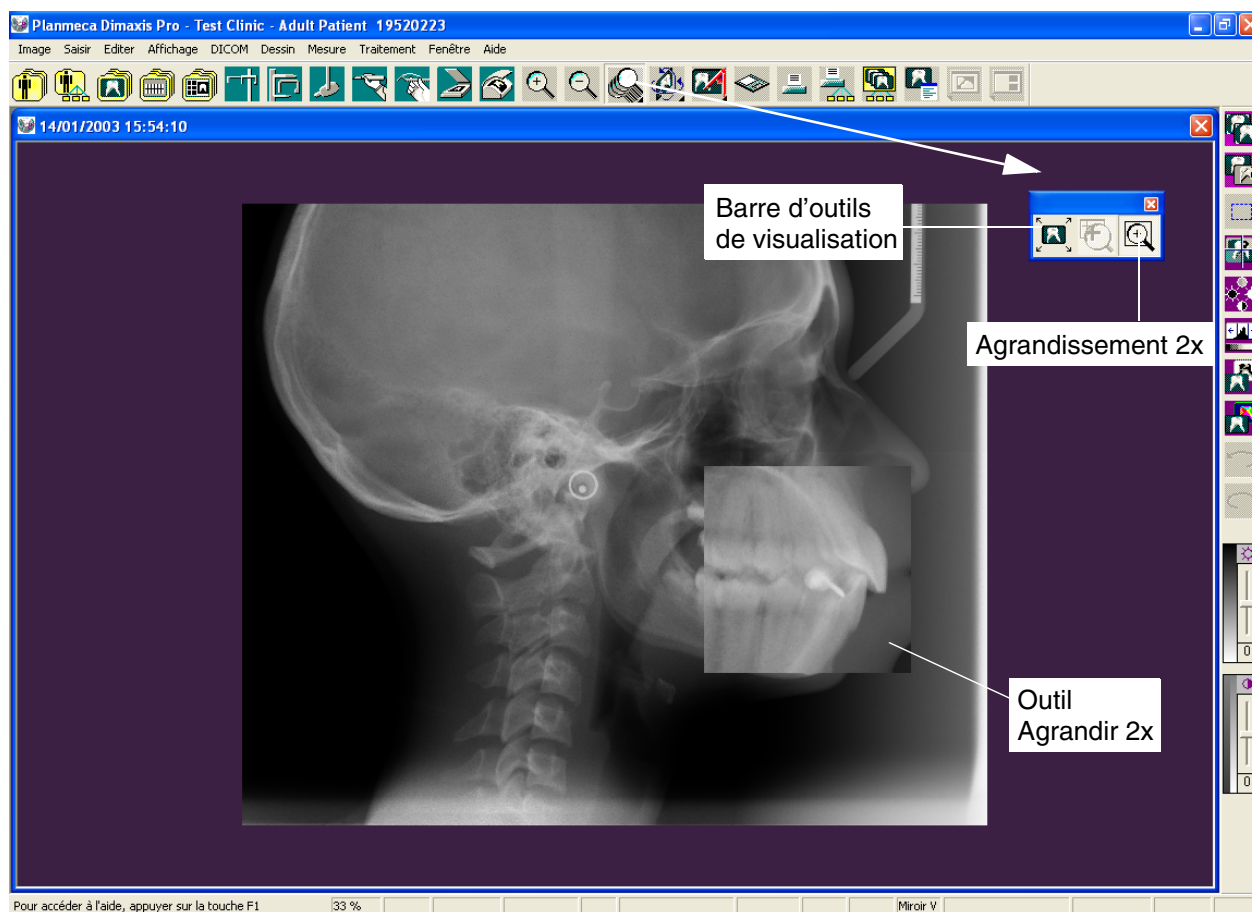

8.10.6 Barre d'outils d'orientation

Sélectionner la commande **Barre d'outils d'orientation** dans le menu déroulant **Affichage** pour afficher les outils de rotation. On peut également cliquer sur le bouton *Barre d'outils d'orientation* de la barre d'outils de droite. L'outil Miroir vertical fait pivoter l'image de 180° autour de son axe vertical, tandis que l'outil Miroir horizontal la fait pivoter de 180° autour de son axe horizontal. Les outils de rotation font pivoter l'image de 90° autour de son centre dans le sens des aiguilles d'une montre ou en sens inverse des aiguilles d'une montre.

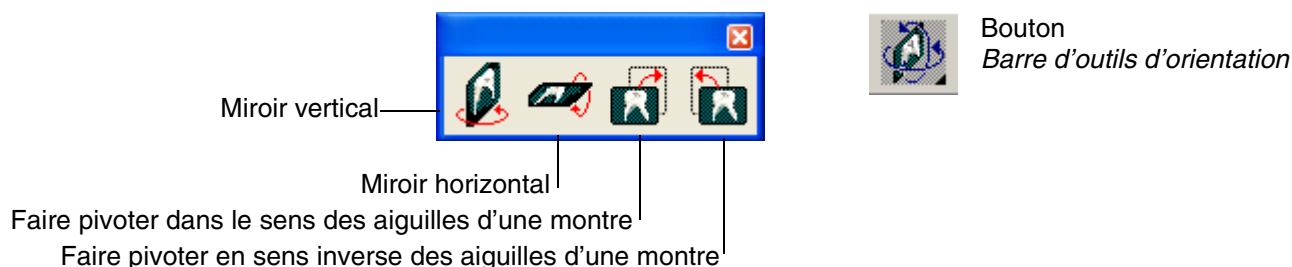

REMARQUE Les fonctions de rotation concernent uniquement les images importées ou numérisées.

REMARQUE L'orientation des clichés intraoraux doit être définie dans la fenêtre *Cliché intrabuccal* ou *Paramètres image intrabuccale*. Les fonctions de rotation sont désactivées lorsque l'orientation de l'image a déjà été définie.

REMARQUE On peut définir la rotation (ou l'orientation) uniquement pour les images non modifiées.

8.10.7 Mode Zoom avant

Cette fonction est identique au bouton *Zoom avant*. Le bouton *Zoom avant* se trouve dans la barre d'outils supérieure. Sélectionner cette commande, puis cliquer sur la zone de l'image à agrandir. On peut répéter l'agrandissement en cliquant à nouveau sur l'image. Maintenir la touche **ALT** enfoncée et cliquer sur l'image pour la réduire. On peut également réduire l'image en cliquant sur le bouton droit de la souris.




8.10.8 Agrandissement

La fonction **Zoom avant** agrandit l'image de la même manière que la touche + du clavier.

8.10.9 Mode Zoom arrière

Cette fonction est identique au bouton *Zoom arrière*. Le bouton *Zoom arrière* se trouve dans la barre d'outils supérieure. Sélectionner cette commande, puis cliquer sur la zone de l'image à réduire. On peut répéter la réduction en cliquant à nouveau sur l'image. Maintenir la touche **ALT** enfoncée et cliquer sur l'image pour l'agrandir. On peut également agrandir l'image en cliquant sur le bouton droit de la souris.

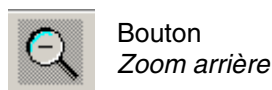

8.10.10 Réduction

La fonction **Zoom arrière** réduit l'image de la même manière que la touche - du clavier.

8.10.11 Zoom à 100%


La fonction **Zoom à 100%** affiche l'image dans à une dimension telle qu'un pixel de l'image corresponde à un pixel à l'écran, c'est-à-dire que l'agrandissement est de 1:1. On notera que l'affichage 1:1 (100%) dépend de la résolution de l'écran et de l'image et non pas de la dimension réelle de l'image.

8.10.12 Paramètres d'image

La fonction **Paramètres d'image** affiche les paramètres de l'image ouverte. On peut également ouvrir la même fenêtre **Paramètres d'image** depuis la fenêtre **Sélectionner l'image** en cliquant sur le bouton *Paramètres*.

8.11 Menu déroulant Dessin


Le menu déroulant **Dessin** est visible lorsqu'une image est ouverte.

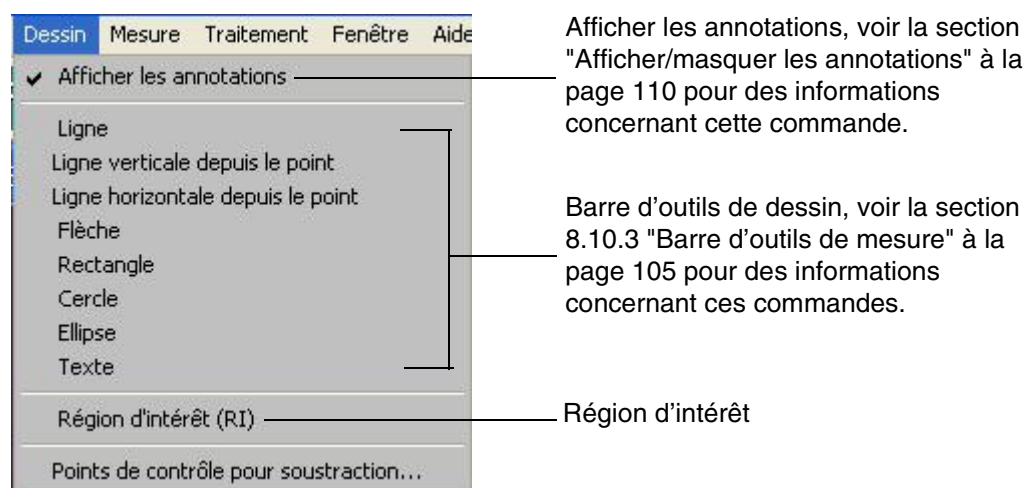


Région d'intérêt (RI)

Sélectionner la commande **Région d'intérêt (RI)** dans le menu déroulant **Dessin** pour modifier une partie d'une image. On peut également cliquer sur le bouton **Région d'intérêt (RI)** de la barre d'outils de droite, puis cliquer à l'aide du bouton gauche de la souris sur le point de départ, le relâcher et cliquer à l'aide du bouton gauche de la souris sur le point de terminaison. La région d'intérêt est délimitée par des lignes bleues ou blanches lorsque cette région est sélectionnée. Les opérations effectuées seront alors appliquées uniquement dans cette région.

On peut tracer plusieurs régions d'intérêt sur l'image, ainsi que les déplacer sur l'image.

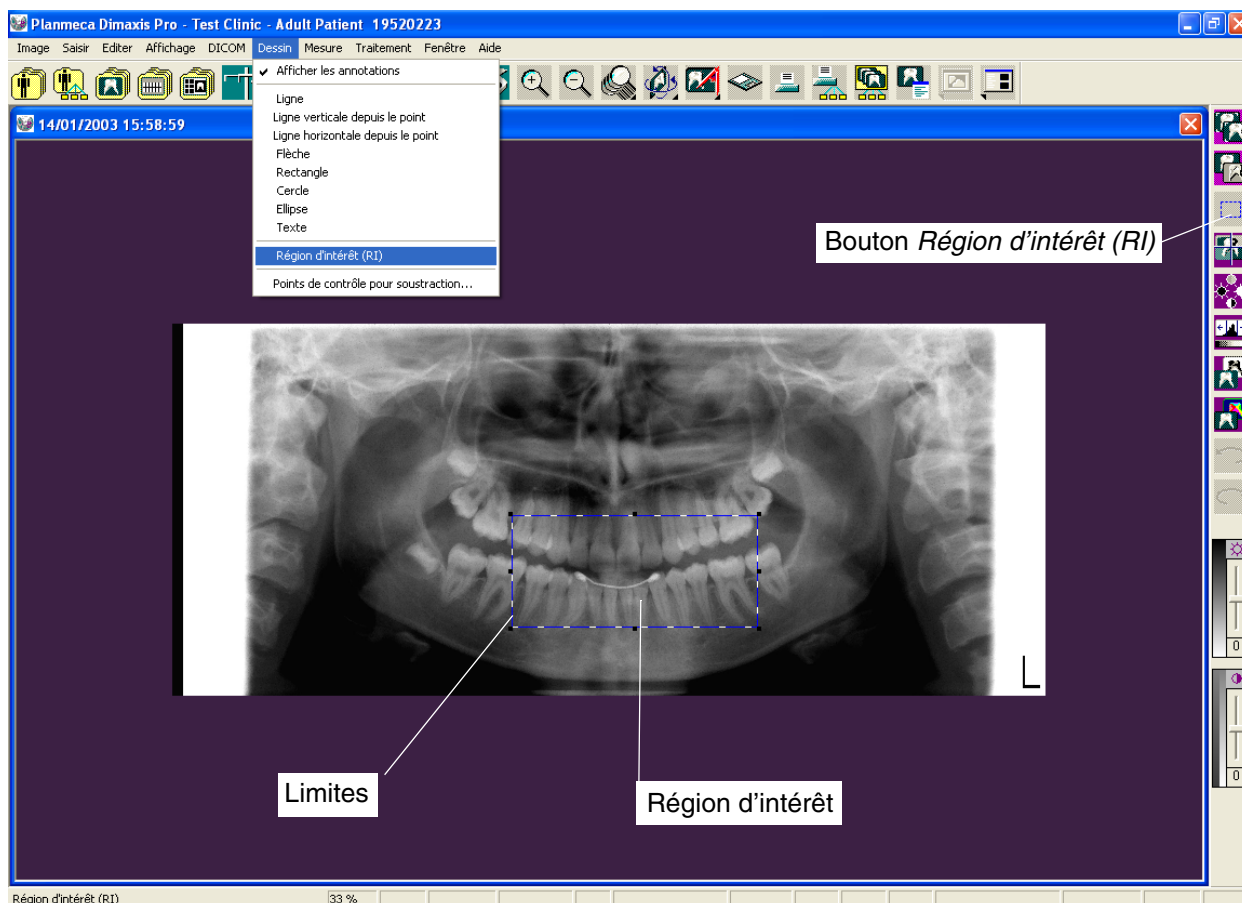


Pour supprimer la région d'intérêt, la sélectionner en cliquant à l'intérieur de ses limites, puis appuyer sur la touche **SUPPR** du clavier (ou **Ctrl+X**). Le message ci-dessous s'affiche. Cliquer sur **Oui** pour supprimer la région d'intérêt ou sur **Non** pour annuler l'action.

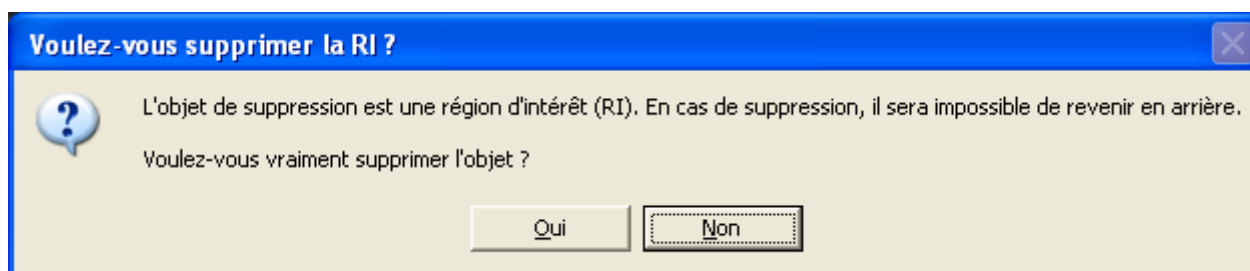

8.12 Menu déroulant Mesure

Le menu déroulant **Mesure** est visible lorsqu'une image est ouverte.

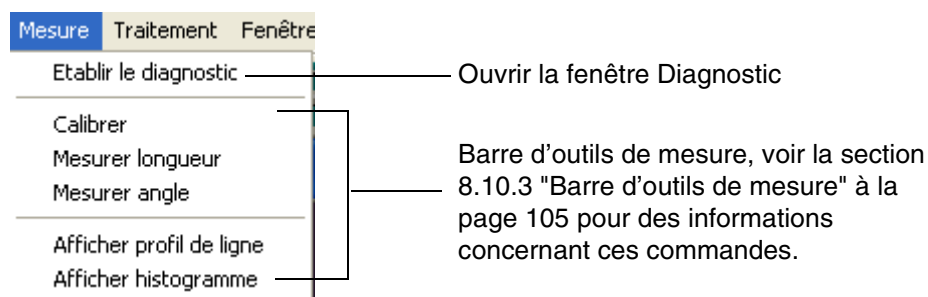

Fenêtre Diagnostic

Sélectionner la commande **Etablir le diagnostic** dans le menu déroulant **Mesure** pour taper un texte de diagnostic dans la zone de texte qui apparaît. On peut également cliquer sur le bouton *Diagnostic* de la barre d'outils supérieure. Cliquer sur **OK** pour enregistrer le texte.



Bouton
Diagnostic




Le bouton *Diagnostic* reste sélectionné dans la barre d'outils supérieure si une image a été enregistrée avec un diagnostic.

Le diagnostic est imprimé en même temps que l'image lors de l'impression d'images individuelles si l'on a sélectionné l'option "Détailé" dans la page à onglet Paramètres généraux et utilisateur/Impri-mante (se reporter à la section 9.2.1 "Imprimante" à la page 137).

8.13 Menu déroulant Traitement

Le menu déroulant **Traitement** est visible lorsqu'une image est ouverte.

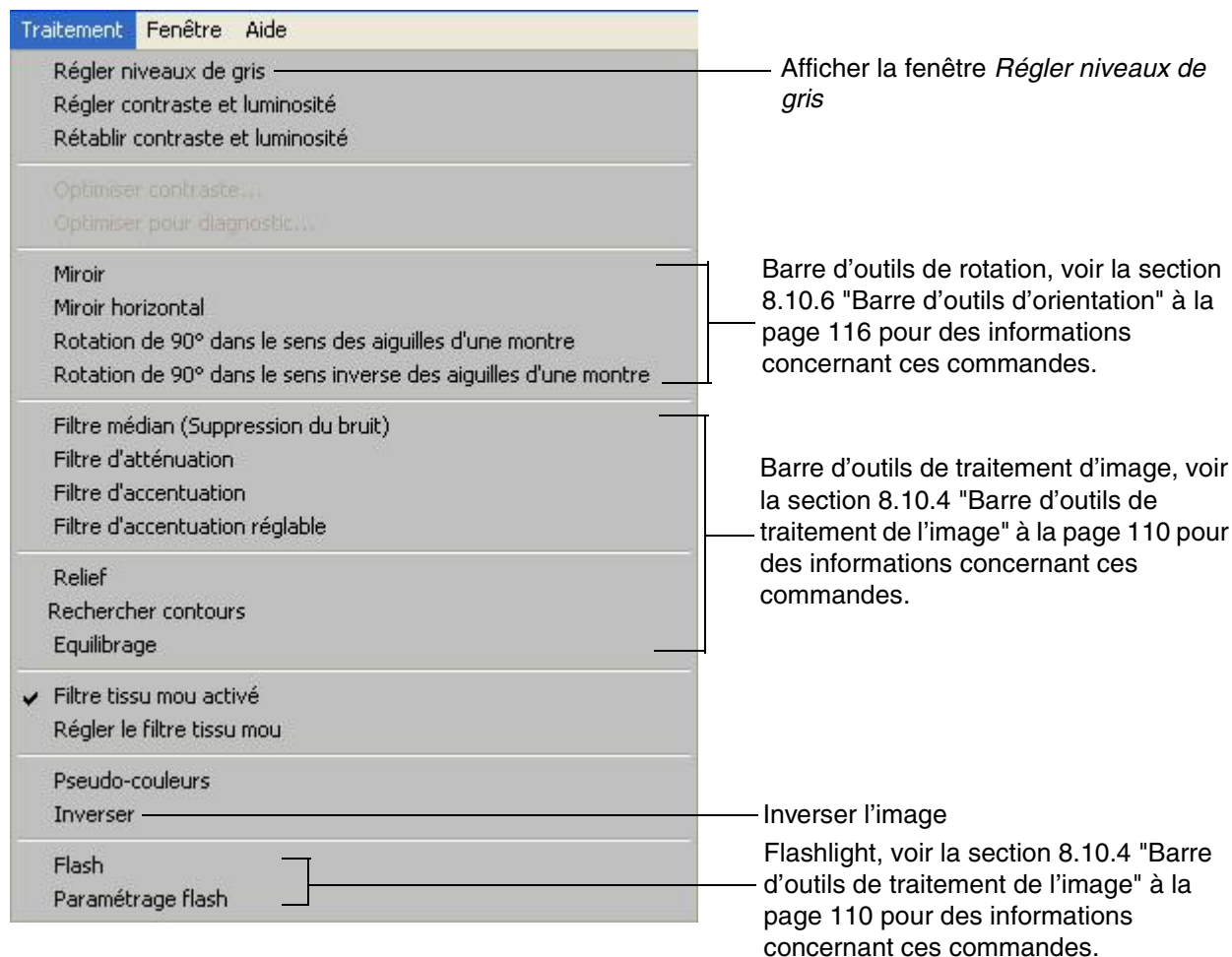


Réglage des niveaux

Lors de la prise d'un nouveau cliché, la fonction *Réglage des niveaux* est automatiquement effectuée sur l'image, sauf spécification contraire (voir chapitre 9 "PARAMÈTRES" à la page 127). Si ce réglage n'est pas satisfaisant, on peut effectuer le réglage manuellement en sélectionnant la commande **Régler niveaux de gris** dans le menu déroulant **Traitement** ou en cliquant sur le bouton *Réglage des niveaux* de la barre d'outils de droite.


Faible (noir)/élevé (blanc): tonalités d'image à éliminer aux extrémités de l'histogrammes en vue d'augmenter dans une mesure raisonnable le contraste. Les valeurs des tonalités moyennes affectent la courbe gamma de l'image. En ajustant la valeur de gamma, on obtient une image qui se rapproche davantage d'une image radiographique conventionnelle.



Bouton *Réglage des niveaux*

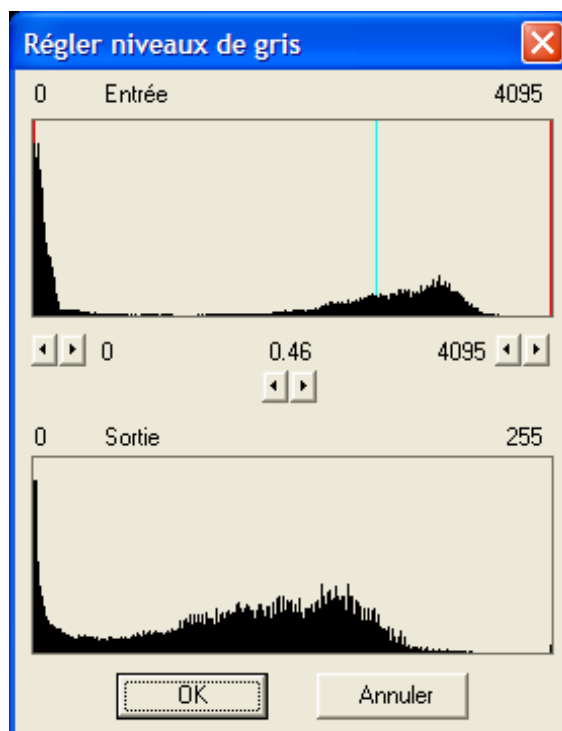

Si la fonction *Régler niveaux de gris* a déjà été appliquée à l'image, le message ci-dessous s'affiche. Pour annuler le précédent réglage des niveaux, cliquer sur *Oui*; pour le conserver, cliquer sur *Non*.

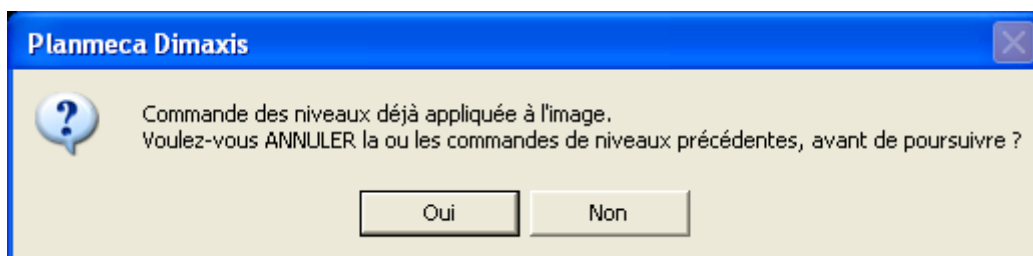

Réglage du contraste et de la luminosité

Sélectionner la commande **Régler contraste et luminosité** dans le menu déroulant **Traitement**. On peut ainsi régler le contraste et la luminosité de l'image à l'aide de la souris. Cliquer sur le bouton gauche de la souris et le maintenir enfoncé. En déplaçant la souris verticalement, on peut régler le contraste de l'image. En déplaçant la souris horizontalement, on peut régler la luminosité de l'image.

Le bouton *Contraste/luminosité* de la barre d'outils de droite fonctionne de la même manière que la commande de menu **Régler contraste et luminosité**.



Bouton *Contraste/luminosité*

On peut également cliquer sur le bouton **Luminosité** de la barre d'outils de droite pour effectuer des réglages simples de la plage de tonalités de l'image (voir page suivante). Déplacer le curseur pour régler la luminosité de l'image. Son déplacement vers le haut augmente le niveau et son déplacement vers le bas le diminue. Le nombre affiché sous le curseur indique la valeur de la luminosité. Les valeurs peuvent varier de -50 à +50.

Cliquer sur le bouton **Contraste** de la barre d'outils de droite pour effectuer des réglages simples de la plage de tonalités de l'image. Déplacer le curseur pour régler le contraste de l'image. Son déplacement vers le haut augmente le niveau et son déplacement vers le bas le diminue. Le nombre affiché sous le curseur indique la valeur du contraste. Les valeurs peuvent varier de -50 à +50.



Bouton *Luminosité*




Bouton *Contraste*

Rétablir le contraste et la luminosité

Sélectionner la commande **Rétablir contraste et luminosité** dans le menu déroulant **Traitement** pour ramener à zéro les valeurs du contraste et de la luminosité.

Optimiser contraste

La commande **Optimiser contraste** peut s'utiliser uniquement sur une image non modifiée (utiliser la commande *Annuler* si nécessaire).

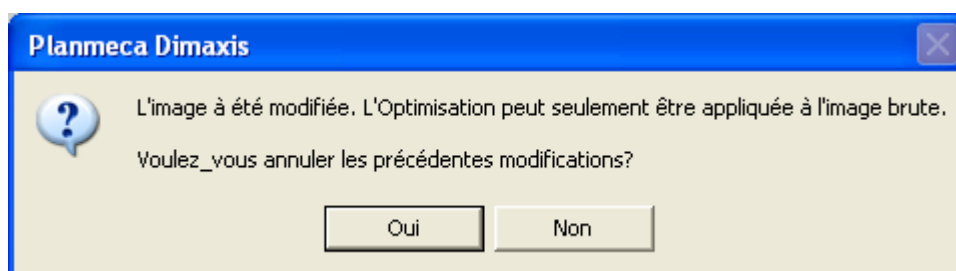

Après avoir sélectionné la commande **Optimiser contraste** dans le menu déroulant **Traitement**, cliquer sur la zone à optimiser. Cette option optimise l'image pour le type de diagnostic à effectuer (par exemple pour le canal radiculaire).

Description

Le rôle de cette fonction est d'optimiser le contraste de l'ensemble d'une image. Cette fonction permet de donner aux radiographies numériques l'aspect de radiographies sur film. Lorsque l'on visionne un film dentaire conventionnel sur un négatoscope, le système visuel humain perçoit des différences équivalentes dans l'épaisseur de l'objet comme des différences pratiquement équivalentes de l'intensité lumineuse.

La fonction **Optimiser contraste** utilise deux algorithmes pour recalculer les données d'image. Le premier est un algorithme dit de correction de gamma qui fait que des différences équivalentes dans l'épaisseur de l'objet seront affichées sur l'écran de l'ordinateur comme des différences équivalentes de luminosité. Comme la réponse du système visuel humain vis-à-vis des intensités lumineuses est non linéaire, le second algorithme tient compte de cette réponse. Le résultat final est que des différences équivalentes dans l'épaisseur de l'objet seront perçues comme des différences équivalentes de luminosité.

Cette dernière affirmation n'est tout à fait vraie que pour un objet homogène. Dans le cas d'un objet réel composé de différents tissus dotés de pouvoirs d'atténuation des rayons X variables, le résultat sera une sorte de moyenne pondérée. Par conséquent, le résultat réel est que des différences équivalentes dans l'épaisseur de l'objet seront perçues comme des différences à peu près équivalentes de luminosité.

REMARQUE *La fonction d'optimisation du contraste n'est utilisable qu'avec des images 16 bits.*

Application

Sélectionner la commande **Optimiser contraste** dans le menu déroulant **Traitement**. Amener ensuite le curseur sur un point de référence de l'image et cliquer à l'aide du bouton gauche de la souris. L'image est instantanément recalculée.

REMARQUE *Le choix du point de référence est important pour un résultat optimal.*

Le point de référence doit être sélectionné dans la zone la plus claire de la radiographie, mais **PAS** dans une obturation.

Normalement, le point de référence idéal doit être pris dans l'émail non friable de la dent qui apparaît la plus claire. Dans certains cas, d'autres zones de la radiographie peuvent toutefois s'avérer plus lumineuses que l'émail, par exemple l'os compact. On choisit alors le point de référence dans cette zone.

Optimiser pour Diagnostic

Description

Cette fonction utilise les mêmes algorithmes que la fonction **Optimiser contraste** avec un recalcul supplémentaire des données d'image qui déplace la luminosité moyenne dans une région d'intérêt vers la moyenne de la plage de luminosité de l'écran de l'ordinateur. Ceci parce que la perception est optimale dans le milieu de la plage de luminosité.

Lorsque l'on utilise cette fonction, une région d'intérêt sélectionnée sera optimisée à des fins de diagnostic.

REMARQUE *Il est important de savoir que des zones autres que la région d'intérêt risquent d'être détruites en termes de qualité diagnostique de l'image. En effet, il n'est jamais possible d'optimiser une radiographie simultanément pour toutes les régions et l'ensemble de la plage de luminosité. Pour des tâches de diagnostic multiple, il est nécessaire de recalculer la radiographie pour les différentes régions d'intérêt.*

REMARQUE *La fonction d'optimisation pour le diagnostic n'est utilisable qu'avec des images 16 bits.*

Application

Sélectionner la commande **Optimiser pour diagnostic** dans le menu déroulant **Traitement**. Amener ensuite le curseur sur un point de référence de l'image et cliquer à l'aide du bouton gauche de la souris. L'image est instantanément recalculée.

Le point de référence doit se trouver dans une région d'intérêt.

Pour un **diagnostic de caries**, choisir le point de référence dans l'émail non friable, en dehors de toute lésion suspecte.

Pour tout type de **diagnostic portant sur les structures osseuses**, périapical ou parodontal, choisir le point de référence dans l'os non friable au sein d'une région d'intérêt mais en dehors de toute lésion suspecte.


Pour **évaluer l'obturation radiculaire** ou pour **identifier les limes pour canaux radiculaires**, choisir le point de référence dans l'obturation ou dans la lime à proximité de l'apex.

Pour les **autres tâches diagnostiques**, respecter le principe ci-dessus lors du choix du point de référence.

Pseudo-couleurs

Sélectionner la commande **Pseudo-couleurs** dans le menu déroulant **Traitement** pour faire passer la palette de couleurs d'une échelle de gris à un affichage en couleurs et pour ouvrir la fenêtre **Pseudo-couleurs**. On peut également cliquer sur le bouton *Pseudocouleurs* de la barre d'outils de droite. Dans cette fenêtre, on peut sélectionner le type de couleurs. L'option *Objet noir* affiche une palette de couleurs basée sur les différentes couleurs émises par un radiateur à corps noir lorsqu'il est chauffé (du noir aux rouge, orange, jaune et blanc). L'option *Spectre* affiche une palette de couleurs basée sur les couleurs produites lorsqu'une lumière blanche passe au travers d'un prisme (du violet, bleu et vert au jaune, à l'orange et au rouge). On peut régler les pseudo-couleurs en déplaçant les curseurs qui se trouvent à côté de chacune des fenêtres.

Bouton
Pseudo-couleurs

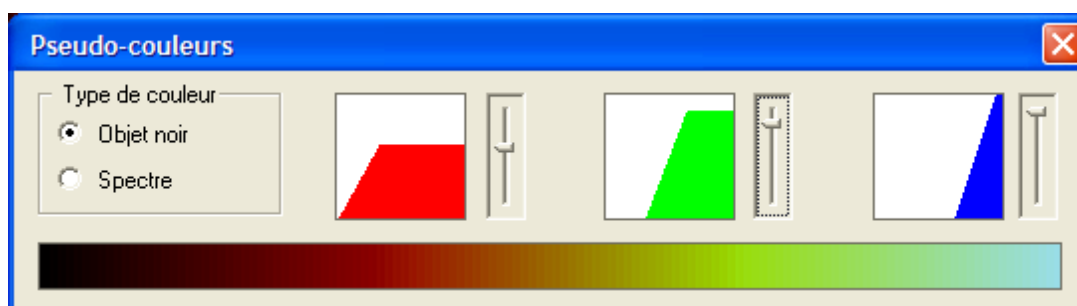

Inversion de l'image (image en négatif)


Sélectionner la commande **Inverser** dans le menu déroulant **Traitement** pour rendre claires les parties sombres de l'image et vice versa. On peut également cliquer sur le bouton *Inversion* de la barre d'outils de droite.



Bouton
Inversion

8.14 Menu déroulant Fenêtre

Le menu déroulant **Fenêtre** est visible lorsqu'une image est ouverte. Les commande **Réorganiser** permettent de disposer la série de fenêtres actuellement ouvertes de la manière sélectionnée à l'écran.

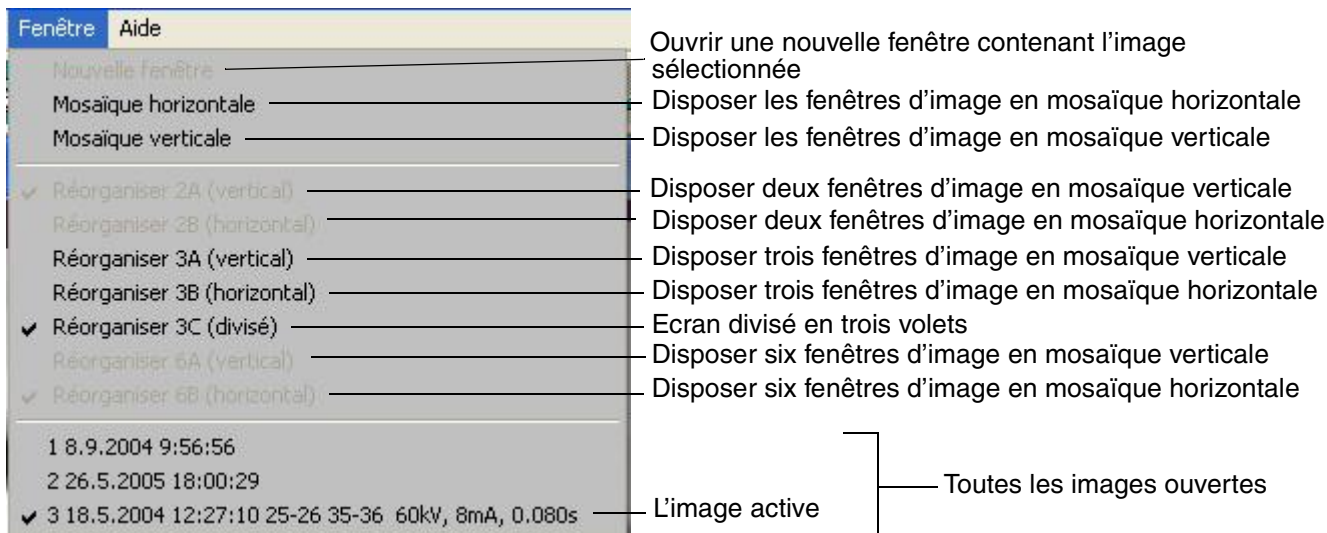

Nouvelle fenêtre

La commande **Nouvelle fenêtre** ouvre une nouvelle fenêtre contenant l'image sélectionnée.

Ranger horizontalement

La commande **Ranger horizontalement** dispose les fenêtres d'image les unes au-dessus des autres.

Ranger verticalement

La commande **Ranger verticalement** dispose les fenêtres d'image côte à côte.

Réorganiser 2A (vertical)

La commande **Réorganiser 2A (vertical)** dispose deux fenêtres d'image côte à côte.

Réorganiser 2B (horizontal)

La commande **Réorganiser 2B (horizontal)** dispose deux fenêtres d'image l'une au-dessus de l'autre.

Réorganiser 3A (vertical)

La commande **Réorganiser 3A (vertical)** dispose trois fenêtres d'image côte à côte.

Réorganiser 3B (horizontal)

La commande **Réorganiser 3B (horizontal)** dispose trois fenêtres d'image l'une au-dessus de l'autre.

Réorganiser 3C (divisé)

La commande **Réorganiser 3C (divisé)** divise l'écran en trois volets (deux fenêtres de même taille côte à côte et une fenêtre plus grande en dessous des deux autres).

Réorganiser 6A (vertical)

La commande **Réorganiser 6A (vertical)** affiche six fenêtres d'image au format 3 x 2 (deux rangées de trois fenêtres côte à côte).

Réorganiser 6B (horizontal)

La commande **Réorganiser 6B (horizontal)** six fenêtres d'image au format 2 x 3 (trois rangées de deux fenêtres côte à côte).

REMARQUE *Les options cochées dans ce menu sont conservées en mémoire et sont utilisées automatiquement. Par exemple, si trois images sont ouvertes et que l'on ferme une fenêtre, les deux images restantes seront affichées conformément à l'option cochée dans le cas de deux images ouvertes.*

9 PARAMÈTRES

Sélectionner l'une des commandes **Paramètres généraux**, **Paramètres locaux** ou **Paramètres DICOM** dans le menu déroulant **Administration** pour vérifier ou modifier les paramètres du programme Dimaxis. Le menu déroulant **Administration** est disponible lorsqu'aucune image n'est ouverte.


Sélectionner les paramètres à vérifier ou à modifier dans les pages à onglets accessibles depuis la partie supérieure des fenêtres **Paramètres généraux**, **Paramètres généraux et utilisateur** et **Paramètres DICOM**.

REMARQUE Il est possible d'empêcher les utilisateurs de modifier les paramètres du logiciel Dimaxis, de procéder à l'archivage à long terme et de modifier les modèles d'examens. Pour cela, il suffit d'ajouter les lignes suivantes au fichier Dimaxis.ini (1=autorisé, 0=non autorisé):

[PERMISSIONS]

Admin=1

DeletelImage=1

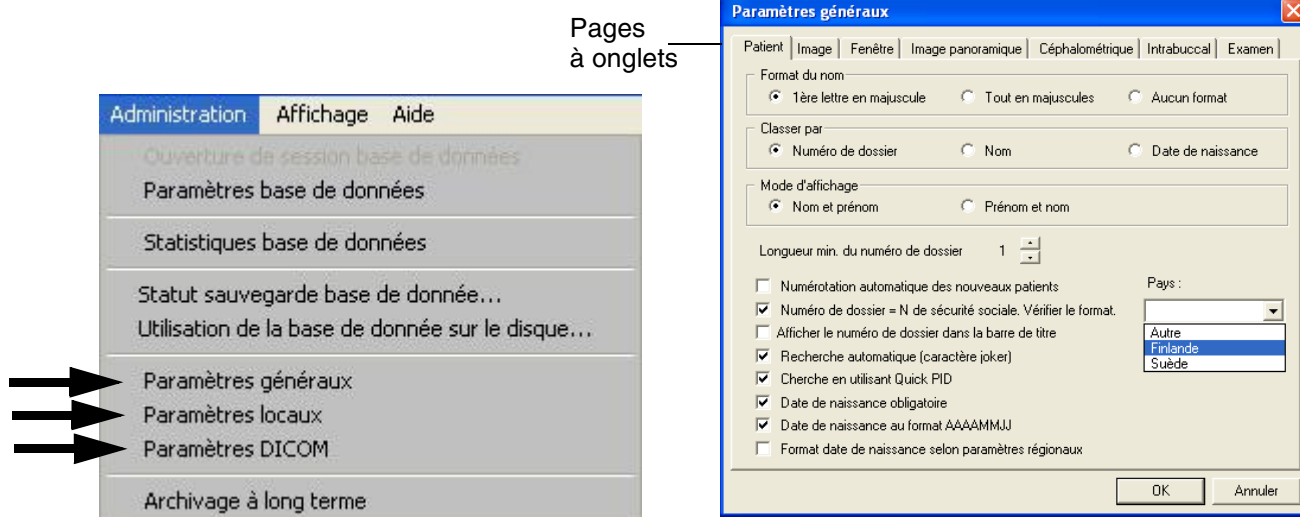

9.1 Paramètres généraux

9.1.1 Patient

La page à onglet **Patient** permet de modifier le format de nom, l'ordre de tri, l'ordre d'affichage des noms à l'écran, la longueur minimale du numéro d'identification patient et les propriétés de la numérotation des patients (voir page suivante).

La *Longueur min. du numéro de dossier* peut être modifiée en cliquant sur les touches fléchées. Si l'utilisateur introduit un numéro plus court que la longueur minimale, des zéros seront ajoutés à la gauche de ce numéro.

Si l'on a sélectionné l'option *Numérotation automatique des nouveaux patients* et qu'on laisse le champ *Numéro de dossier* vide, Dimaxis attribue automatiquement au nouveau patient le prochain numéro d'identification patient disponible.

Si l'on a sélectionné *Numéro de dossier = N de sécurité sociale. Vérifier le format.*, il est nécessaire de sélectionner le pays pour permettre la vérification du numéro de sécurité sociale. Les choix possibles sont *Finlande* et *Suède*. Si cette option est sélectionnée, Dimaxis contrôle l'exactitude du numéro de sécurité sociale lors de la création d'un nouveau patient.


Si l'option *Afficher le numéro de dossier dans la barre de titre* est sélectionnée, le numéro du patient s'affiche dans la barre de titre de la fenêtre principale.

Si l'on a sélectionné l'option *Recherche automatique (caractère joker)*, il suffit d'indiquer le début du nom du patient pour sélectionner un patient.

Il est possible de rechercher rapidement un patient en utilisant un raccourci d'identification patient (l'option *Chercher en utilisant Quick PID*) comprenant l'initiale du nom du patient suivie des quatre derniers chiffres de son numéro d'identification ou de son numéro de sécurité sociale (par exemple "R1234").

Si l'on a sélectionné l'option *Date de naissance obligatoire*, il sera obligatoire d'indiquer la date de naissance lors de la création d'un nouveau patient.

Si l'on a sélectionné l'option *Date de naissance au format AAAAMMJJ*, la date de naissance du patient sera enregistrée au format AAAAMMJJ. La sélection de l'option *Date de naissance au format AAAAMMJJ* permet de sélectionner ou de désélectionner l'option *Format date de naissance selon paramètres régionaux*.

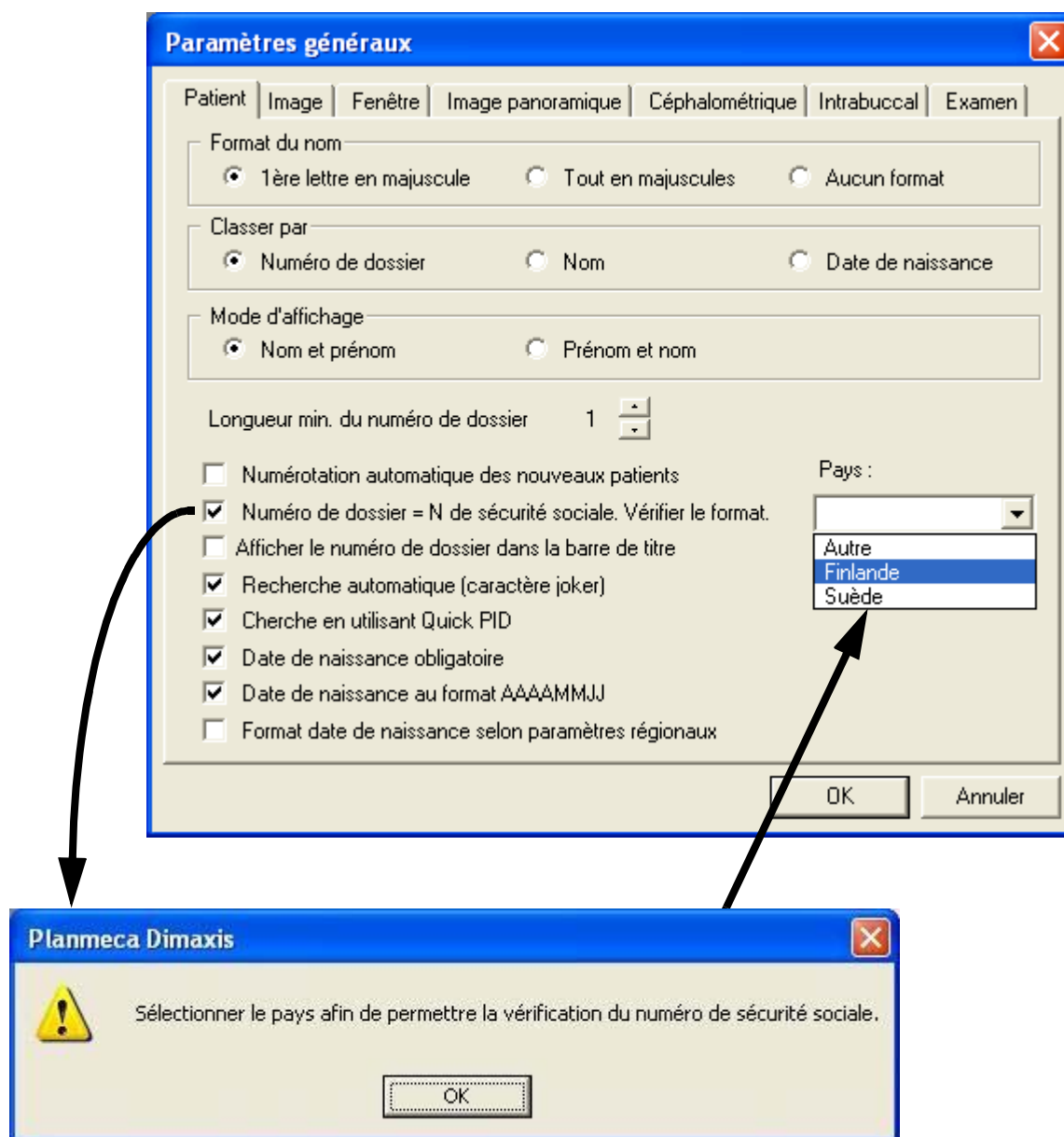

9.1.2 Image

La page à onglet **Image** permet de sélectionner différents formats d'image pour les images panoramiques, céphalométriques, intrabuccales et Intracam. Le format "Tagged Image File Format" (TIFF) est un format d'image bitmap. Le format "Joint Photographic Experts Groupe" (JPEG) utilise un schéma de compression qui réduit efficacement la taille du fichier en identifiant et en supprimant les données supplémentaires non essentielles à l'affichage de l'image. BMP est le format d'image bitmap standard de Windows. Voir également **REMARQUE IMPORTANTE** à la section 1.5 "Archivage" à la page 3.

On peut également choisir la *Méthode de sélection de l'image par défaut*. Cette sélection détermine quelle fenêtre sera ouverte après la sélection d'un patient.

Les options possibles sont:

<i>Sans</i>	Aucune fenêtre de sélection d'image ne s'ouvre.
<i>Standard</i>	La fenêtre Sélectionner l'image s'ouvre.
<i>Dents</i>	La fenêtre Dents s'ouvre.
<i>Navigateur</i>	La fenêtre Navigateur s'ouvre.


Si l'on a choisi l'option *Navigateur*, on doit spécifier les numéros des dents et définir l'alignement.


Si l'on a sélectionné l'option *Les images peuvent être supprimées qu'après un certain délai (heures)*, on peut définir la durée de la période (en heures) pendant laquelle les images peuvent être supprimées (p.ex. 24 ou 48 heures).

Si l'on coche l'option *Ouvrir les images en mode Agrandissement*, les images s'ouvrent en mode Agrandissement.

Le paramètre *Avertir lorsque le nombre d'images dépasse* permet de spécifier une valeur seuil pour le nombre d'images dans la base de données. Dimaxis génère un avertissement lorsque le nombre d'images dans la base de données se rapproche de la valeur spécifiée. La limite par défaut est de 20000. Si l'on indique une valeur de 0 dans ce champ, Dimaxis ne génère aucun avertissement concernant le nombre d'images.

Le dernier paramètre, *Intervalle (jours) d'affichage de l'image de test du moniteur*, permet de configurer le logiciel Dimaxis de manière à afficher au démarrage une image de test du moniteur chaque fois que le nombre de jours spécifié s'est écoulé (voir page suivante). La valeur 0 signifie que l'image de test ne s'affichera jamais automatiquement.

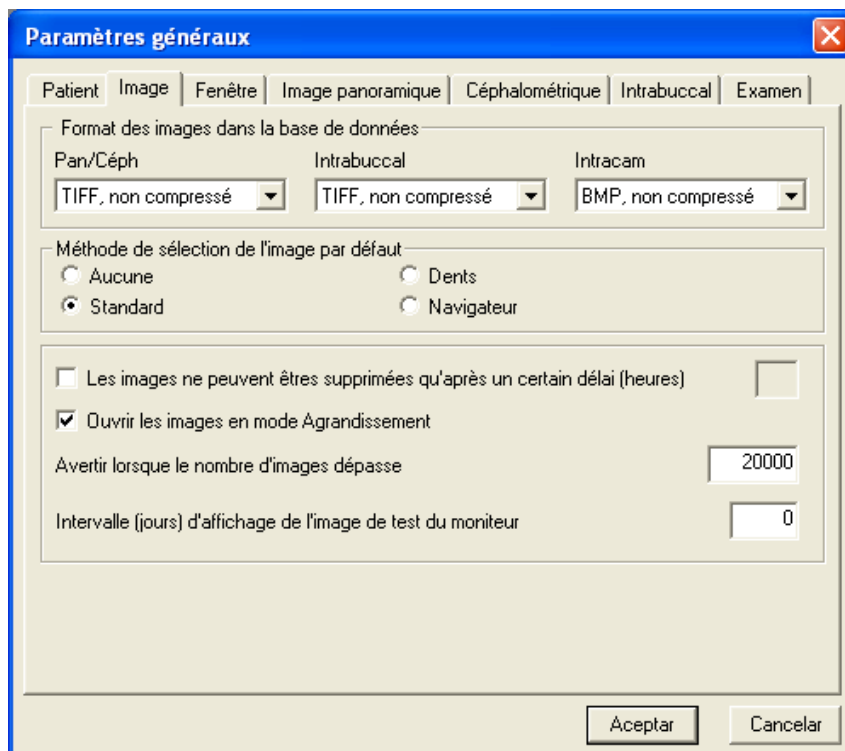

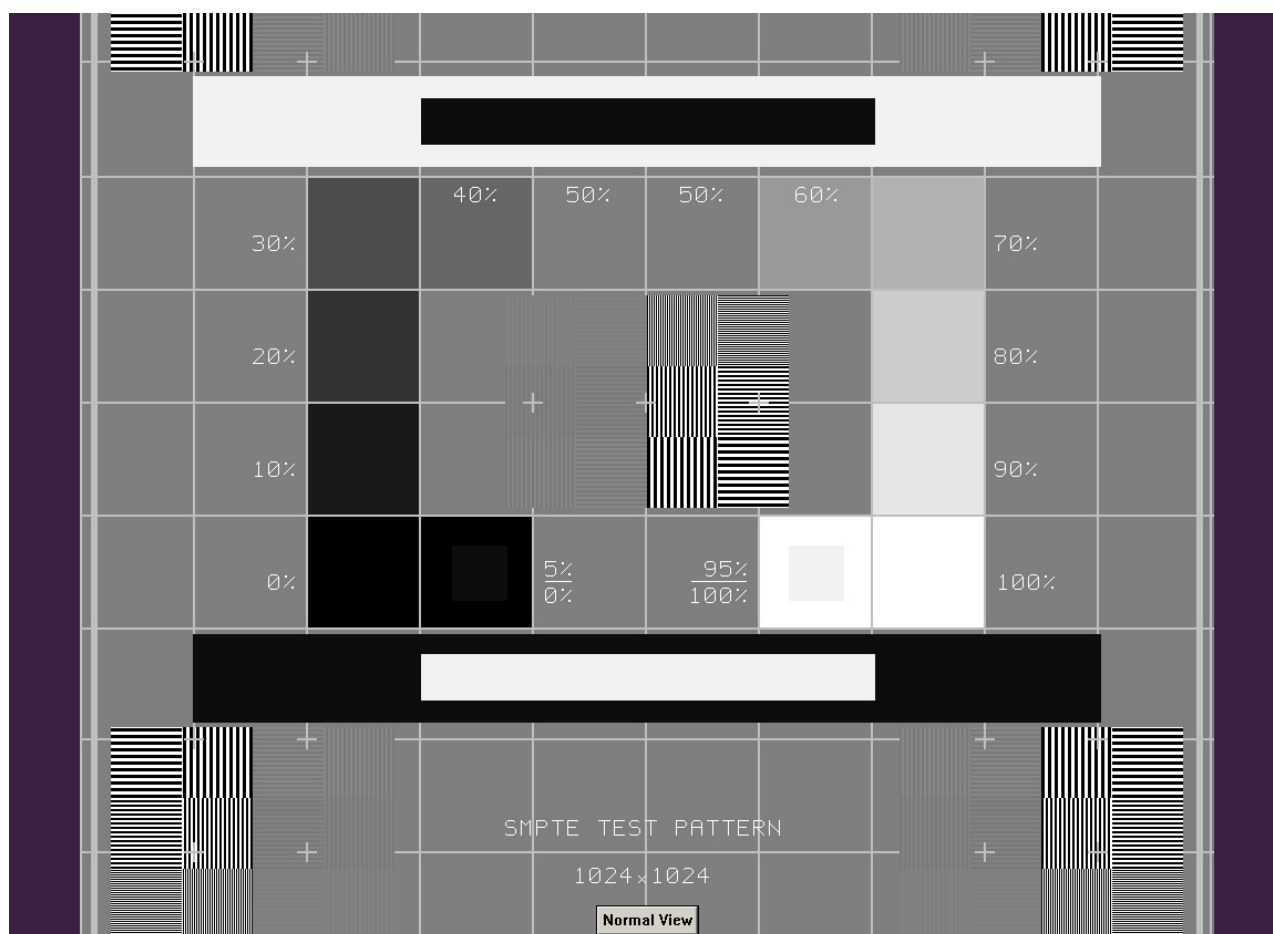

L'image de test est spécifiée par la Society of Motion Picture and Television Engineers (www.smpte.org) et est conforme à la norme SMPTE Recommended Practise RP 133-1991 - Specifications for Medical Diagnostic Imaging Test Pattern for Television Monitors and Hard-Copy Recording Cameras. Cette image doit être utilisée pour le réglage du moniteur et les contrôles de qualité:

- Avant d'entamer chaque journée de travail: La zone à 5% de gris à l'intérieur de la zone à 0% et la zone à 95% de gris à l'intérieur de la zone à 100% doivent être visibles. Si elles ne le sont pas, régler la luminosité et le contraste du moniteur.
- Une fois par mois: Le quadrillage au niveau des coins et au centre doit être visible, les lignes verticales et horizontales doivent former des carrés parfaitement réguliers et le fond gris homogène ne peut pas être coloré.

9.1.3 Fenêtre


Si l'option *Dimaxis toujours en avant-plan* est sélectionnée, la fenêtre Dimaxis sera toujours affichée au premier plan. Si l'option *Mémoriser la position de la fenêtre en quittant* est sélectionnée, la position et la taille de la fenêtre Dimaxis seront enregistrées en mémoire lorsque l'on ouvre à nouveau le programme.

Si l'on a sélectionné la disposition automatique en mosaïque des fenêtres d'image, le programme divisera l'écran en plusieurs parties égales lorsque plusieurs images seront ouvertes.

L'option *Placer l'image la plus récente à gauche* permet de définir l'ordre d'affichage des images à l'écran. Ceci est particulièrement important pour les images interproximales.

La page à onglet **Fenêtre** permet de modifier la couleur de fond des images radiographiques et Intracam. Pour spécifier une couleur personnalisée, sélectionner *Personnalisée*. Cliquer sur *Définir les couleurs personnalisées* dans la fenêtre **Couleurs** pour définir une couleur personnalisée.

Il est conseillé d'utiliser la couleur de fond par défaut, le violet, dans la fenêtre **Navigateur**. Se reporter à la section 4.4 "Navigateur" à la page 38.

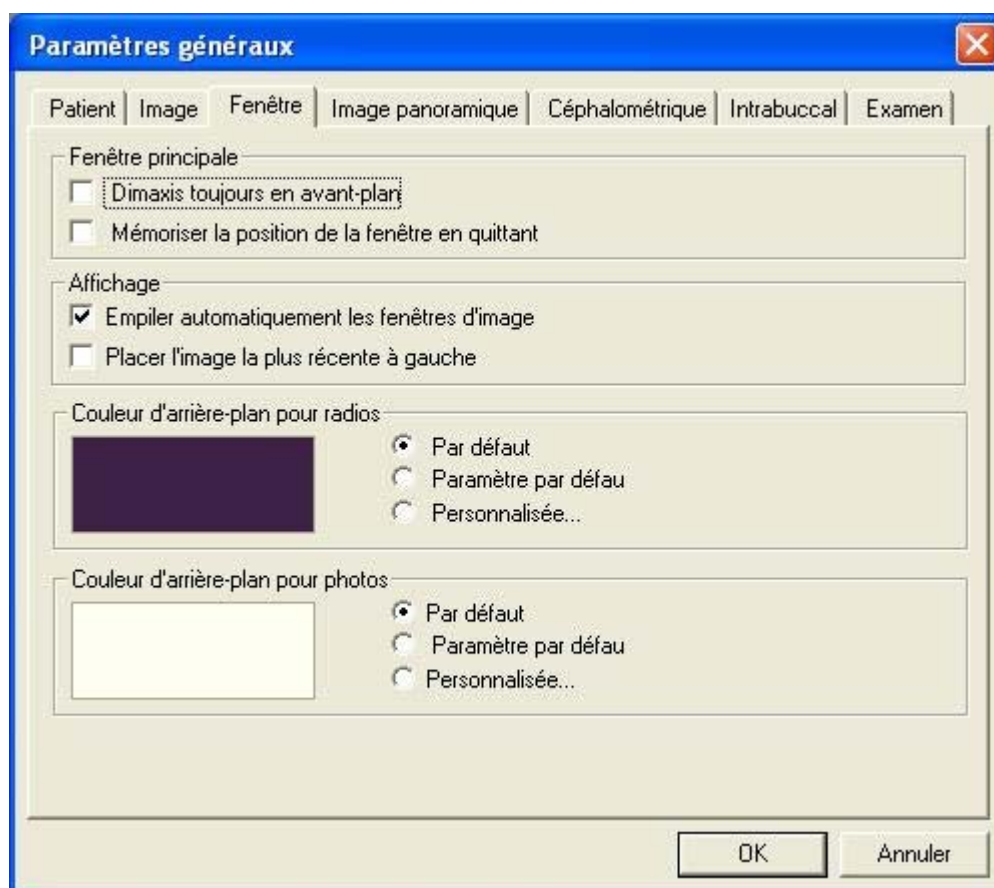

9.1.4 Image panoramique

La page à onglet **Image panoramique** permet de sélectionner le mode de résolution pour les images panoramiques. Sélectionner l'option *Améliorée* (taille des pixels: 0,099 mm) ou *Elevée* (taille des pixels: 0,066 mm) pour augmenter la résolution des images à exposer. On notera que la taille de l'image est beaucoup plus importante et que la manipulation de l'image est plus lente qu'en mode normal (taille des pixels: 0,132 mm).

L'option *Bits par pixel* permet de déterminer si l'on souhaite prendre des images 8 bits. On notera que la meilleure plage de contraste dynamique possible contraste est obtenue en utilisant 12 bits par pixel, mais que les images auront une taille double de celle des images 8 bits.


Les *Paramètres de niveaux automatiques* pour les images panoramiques se règlent dans cette fenêtre. Lors de la prise d'un nouveau cliché, l'ajustement des niveaux est effectué automatiquement sur l'image. Si cet ajustement n'est pas satisfaisant, on peut l'annuler en cliquant sur le bouton *Annuler* et effectuer l'ajustement manuellement, se reporter à la section "Réglage des niveaux" à la page 121. Si, pour une raison quelconque, l'ajustement automatique des niveaux génère systématiquement des résultats non satisfaisants, on peut régler ces paramètres. *Noir* (faible)/*blanc* (élevé): pourcentage des tonalités d'image à éliminer aux extrémités de l'histogrammes en vue d'augmenter dans une mesure raisonnable le contraste. Les valeurs des *Tons moyens* affectent la courbe gamma de l'image. En ajustant la valeur de gamma, on obtient une image qui se rapproche davantage d'une image radiographique conventionnelle.

Si l'on souhaite utiliser le *Filtre automatique*, on peut sélectionner l'option correspondante dans cette fenêtre. Si l'une des options (*Accentuation/Médian*) est sélectionnée, le filtre correspondant sera automatiquement utilisé sur les images ouvertes (uniquement sur les images qui n'ont pas été enregistrées à l'aide de la commande Image->Enregistrer).

L'option *Exposition* permet de déterminer si l'on souhaite autoriser le rejet d'images lors de la prise des clichés.

L'option *Vue d'ensemble* permet de déterminer si l'on souhaite ouvrir la fenêtre **Vue d'ensemble** lors de l'ouverture d'une image.

Sélectionner l'une des options *Ajuster à la taille de l'écran*, *100%* ou *50%* pour déterminer l'agrandissement initial.

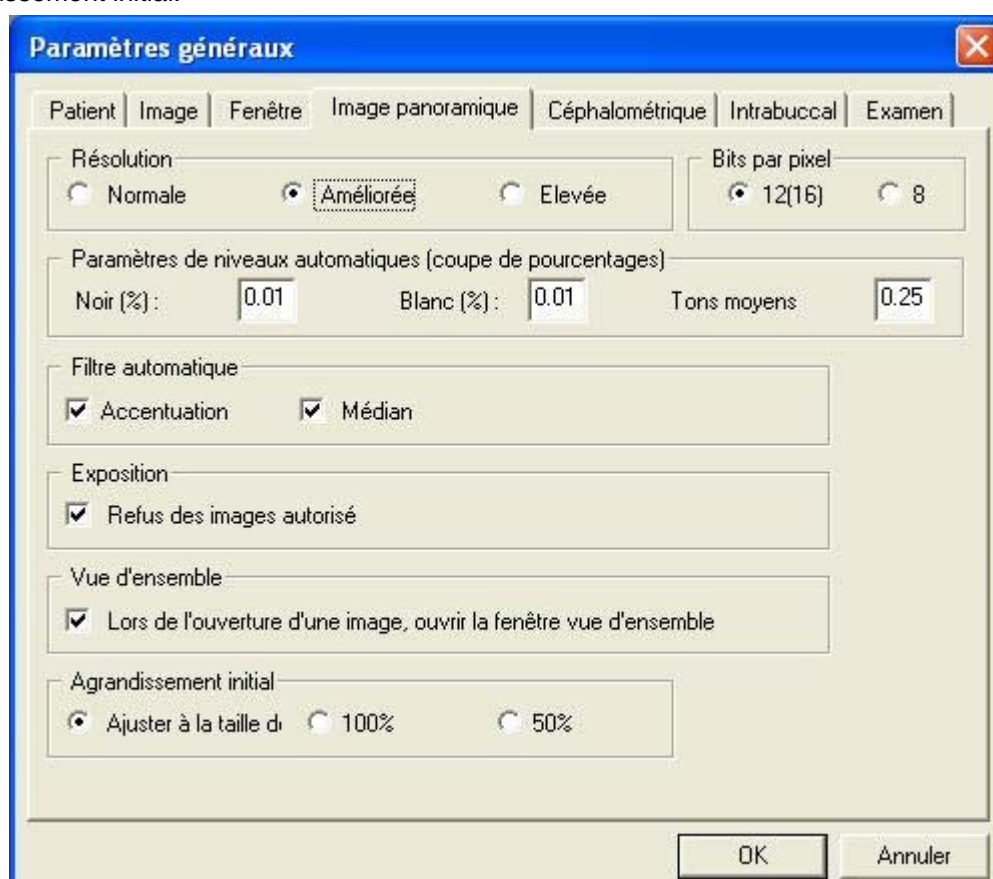


9.1.5 Céphalométrie

La page à onglet **Céphalométrie** permet de sélectionner le mode de résolution des images céphalométriques. Sélectionner *Optimisée* (taille des pixels: 0,099 mm) pour augmenter la résolution des images à exposer. On notera que la taille de l'image est beaucoup plus importante et que la manipulation de l'image est plus lente qu'en mode normal (taille des pixels: 0,132 mm).

Les *Paramètres niveaux automatiques* pour les images céphalométriques se règlent dans cette fenêtre. Lors de la prise d'un nouveau cliché, l'ajustement des niveaux est effectué automatiquement sur l'image. Si cet ajustement n'est pas satisfaisant, on peut l'annuler en cliquant sur le bouton *Annuler* et effectuer l'ajustement manuellement, se reporter à la section "Réglage des niveaux" à la page 121. Si, pour une raison quelconque, l'ajustement automatique des niveaux génère systématiquement des résultats non satisfaisants, on peut régler ces paramètres. *Noir* (faible)/*blanc* (élevé): pourcentage des tonalités d'image à éliminer aux extrémités de l'histogrammes en vue d'augmenter dans une mesure raisonnable le contraste. Les valeurs des *Tons moyens* affectent la courbe gamma de l'image. En ajustant la valeur de gamma, on obtient une image qui se rapproche davantage d'une image radiographique conventionnelle.

Si l'on souhaite utiliser le *Filtre automatique*, on peut sélectionner l'option correspondante dans cette fenêtre. Si l'une des options (*Accentuation/Median*) est sélectionnée, le filtre correspondant sera automatiquement utilisé sur les images ouvertes (uniquement sur les images qui n'ont pas été enregistrées à l'aide de la commande Image->Enregistrer).

On peut régler l'intensité par défaut du filtre pour tissus mous pour les images céphalométriques dans cette fenêtre.

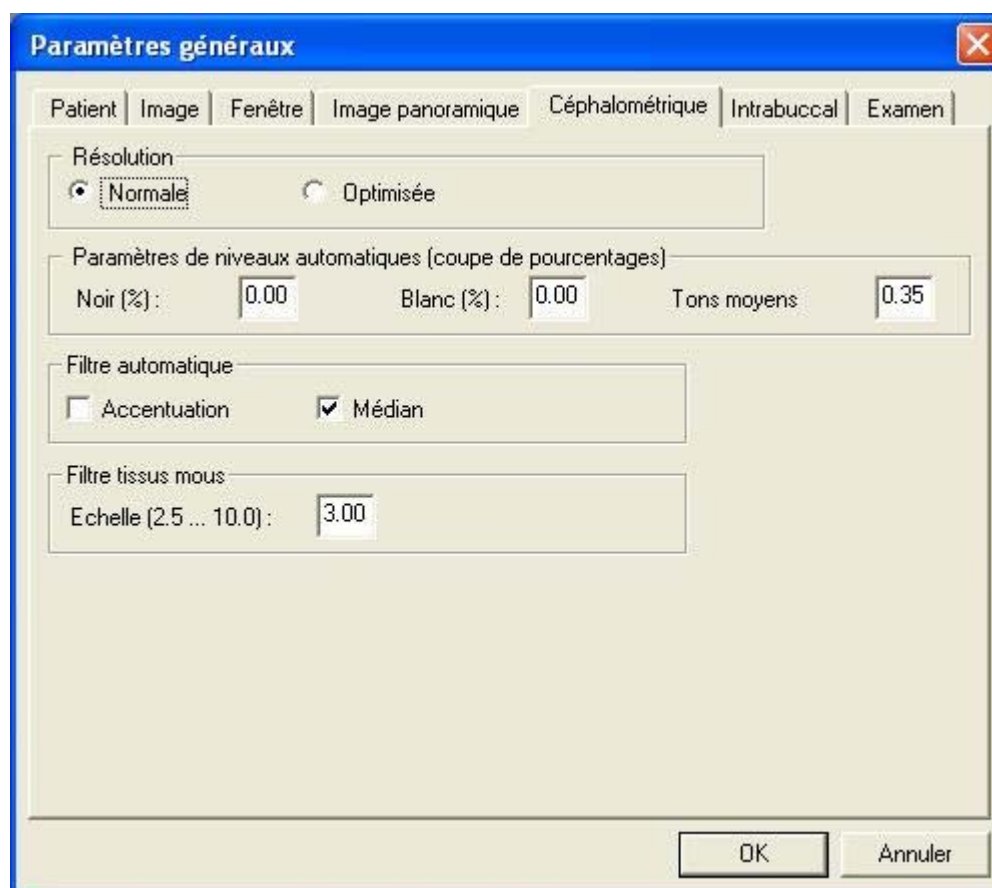

9.1.6 Intrabuccal

La page à onglet **Intrabuccal** permet de sélectionner le mode de résolution pour les images intrabuccales. Sélectionner *Elevée* (taille des pixels: 0,019 mm) pour augmenter la résolution des images à exposer. On notera que la taille de l'image est beaucoup plus importante et que la manipulation de l'image est plus lente qu'en mode normal (taille des pixels: 0,038 mm).

L'option *Bits par pixel* permet de déterminer si l'on souhaite prendre des images 8 bits. On notera que la meilleure plage de contraste dynamique possible contraste est obtenue en utilisant 12 bits par pixel, mais que les images auront une taille double de celle des images 8 bits.

Lors de la prise d'un nouveau image intrabuccale, l'ajustement des niveaux (Niveaux automatiques) peut être effectué automatiquement sur l'image. Se reporter à la section "Réglage des niveaux" à la page 121. On peut annuler l'ajustement après ouverture de l'image en cliquant sur le bouton *Annuler* ou en sélectionnant la commande **Annuler niveaux** dans le menu déroulant **Editer**.

La sélection du *Dents* (FDI/ISO ou ADA) utilisé dans les fenêtres **Dents** et **Navigateur** s'effectue dans cette fenêtre.

Les *Paramètres de niveaux automatiques* qui seront utilisés pour l'ajustement des niveaux sur les images intrabuccales sont définis dans cette fenêtre. Se reporter à la page précédente pour plus d'informations sur ces paramètres.

Si l'on souhaite utiliser le *Filtre automatique*, on peut sélectionner l'option correspondante dans cette fenêtre. Si l'une des options (*Accentuation/Médian*) est sélectionnée, le filtre correspondant sera automatiquement utilisé sur les images ouvertes (uniquement sur les images qui n'ont pas été enregistrées à l'aide de la commande Image->Enregistrer).

Sélectionner l'une des options *Ajuster à la taille de l'écran*, 100% ou 50% pour déterminer l'agrandissement initial.

The screenshot shows the 'Paramètres généraux' dialog box with the 'Intrabuccal' tab selected. The dialog has several sections for configuring image acquisition parameters:

- Resolution:** Radio buttons for 'Normale' (selected) and 'Elevée'.
- Bits par pixel:** Radio buttons for '12[16]' (selected) and '8'.
- Réglage:** Radio buttons for 'Aucun' and 'Niveaux automatiques' (selected).
- Dents:** Radio buttons for 'FDI / ISO' (selected) and 'ADA'.
- Paramètres de niveaux automatiques (coupe de pourcentages):** Input fields for 'Noir (%)' (1.00), 'Blanc (%)' (1.00), and 'Tons moyens' (1.00).
- Filtre automatique:** Checkboxes for 'Accentuation' and 'Médian' (both unchecked).
- Numéro de dent obligatoire:** A checked checkbox.
- Agrandissement initial:** Radio buttons for 'Taille de l'image' (selected), '100%', and '50%'.

At the bottom right, there are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

Si l'option *Numéro de dent obligatoire* est sélectionnée, il ne sera pas possible de quitter la fenêtre **Cliché intrabuccal** sans avoir indiqué les numéros des dents et le message ci-dessous s'affichera.




9.1.7 Examen (Optionnel aux Etats-Unis uniquement)

La page à onglet **Examen** permet de spécifier si l'on souhaite utiliser des examens pour les clichés intraoraux. Si cette option est désactivée, le fait de cliquer sur le bouton *Image intrabuccale* de la barre d'outils supérieure ou la sélection de la commande *Image intrabuccale* dans le menu déroulant **Saisir** n'ouvre pas la fenêtre **Sélectionner un examen**. Voir la section 5.3 "Prise d'un image intrabuccale" à la page 51.

Si l'option *Afficher la fenêtre de commentaire lors de la création de nouveaux examens* n'est pas sélectionnée, aucune invite à introduire un commentaire concernant cet examen ne s'affichera lors de la création d'un nouvel examen.

Cette page à onglet permet également de spécifier si l'on souhaite afficher les images d'un examen à une résolution supérieure.

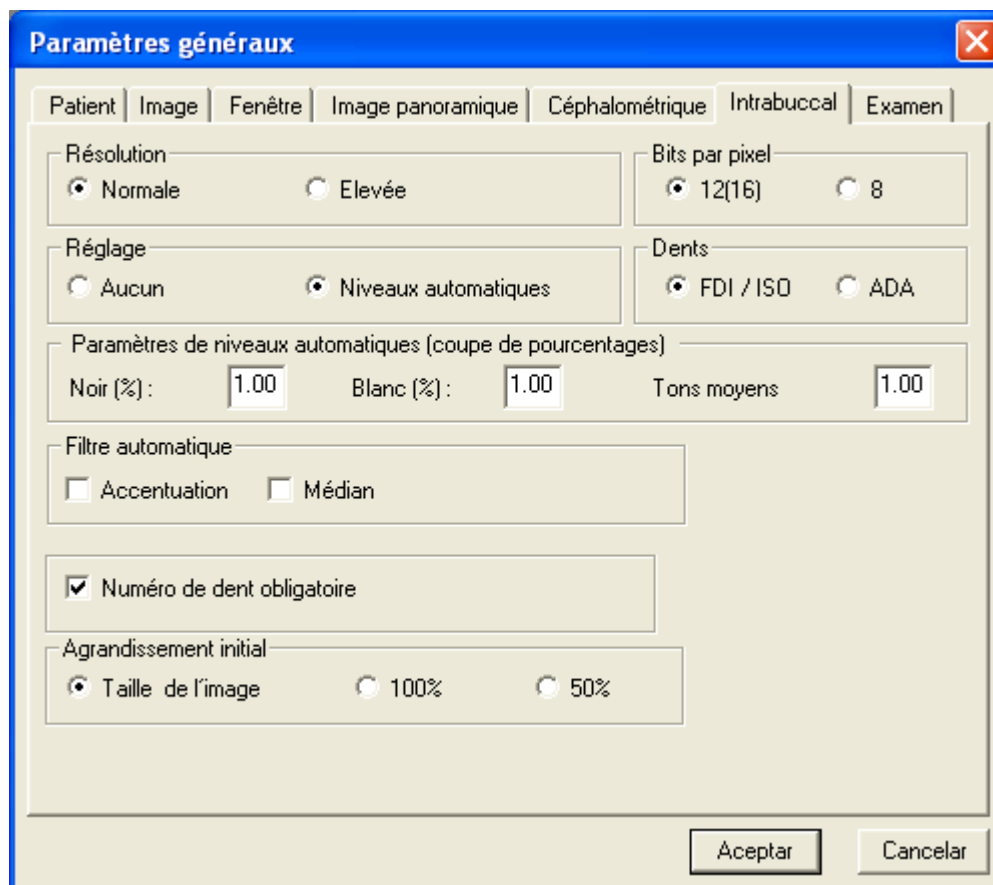

9.2 Paramètres généraux et utilisateur

9.2.1 Imprimante

La page à onglet **Imprimante** permet de sélectionner une imprimante par défaut pour le programme Dimaxis. On notera que l'imprimante par défaut pour le programme Dimaxis peut être différente de l'imprimante par défaut de Windows.

REMARQUE Avec le système d'exploitation Microsoft Windows ME l'imprimante doit être explicitement définie pour permettre l'impression.

La taille des images imprimées peut être réglée au moyen des *Facteurs d'agrandissement*. Introduire un nouveau facteur d'échelle ou régler la valeur en cliquant sur les touches fléchées. Pour restaurer les facteurs d'échelle par défaut, cliquer sur le bouton *Par défaut*.

On notera que la taille des images panoramiques et céphalométriques ne peut être ajustée que lorsque ces images sont imprimées en tant que parties d'un examen.


Cette fenêtre permet également de définir les marges (en centimètres) pour l'impression des images. Ce paramètre affecte l'impression des images individuelles, celle des examens et la fonction **Imprimer tout**.

Pour visualiser la taille de l'image à imprimer, ouvrir l'image et sélectionner la commande **Aperçu avant impression** dans le menu déroulant **Image**. On notera que si l'on imprime simultanément plusieurs images d'un examen, celles-ci sont ajustées pour être imprimées sur une même page indépendamment des facteurs d'échelle sélectionnés ici.

La page à onglet **Imprimante** permet également de configurer la couleur d'arrière-plan (*Blanc* ou *noir*) des images imprimées. (Le fond noir n'est recommandé qu'avec une imprimante utilisant des films.)

Si la taille de l'image est supérieure à celle de la zone d'impression, on peut sélectionner l'une des options *Conserver l'agrandissement* ou *Ajuster à la page* dans cette fenêtre pour réduire la taille de l'image. Ce paramètre affecte l'impression des images individuelles, celle des examens et la fonction **Imprimer tout** (mais non l'impression DICOM).

En outre, on peut définir ici le format des informations relatives au patient (voir la page suivante).

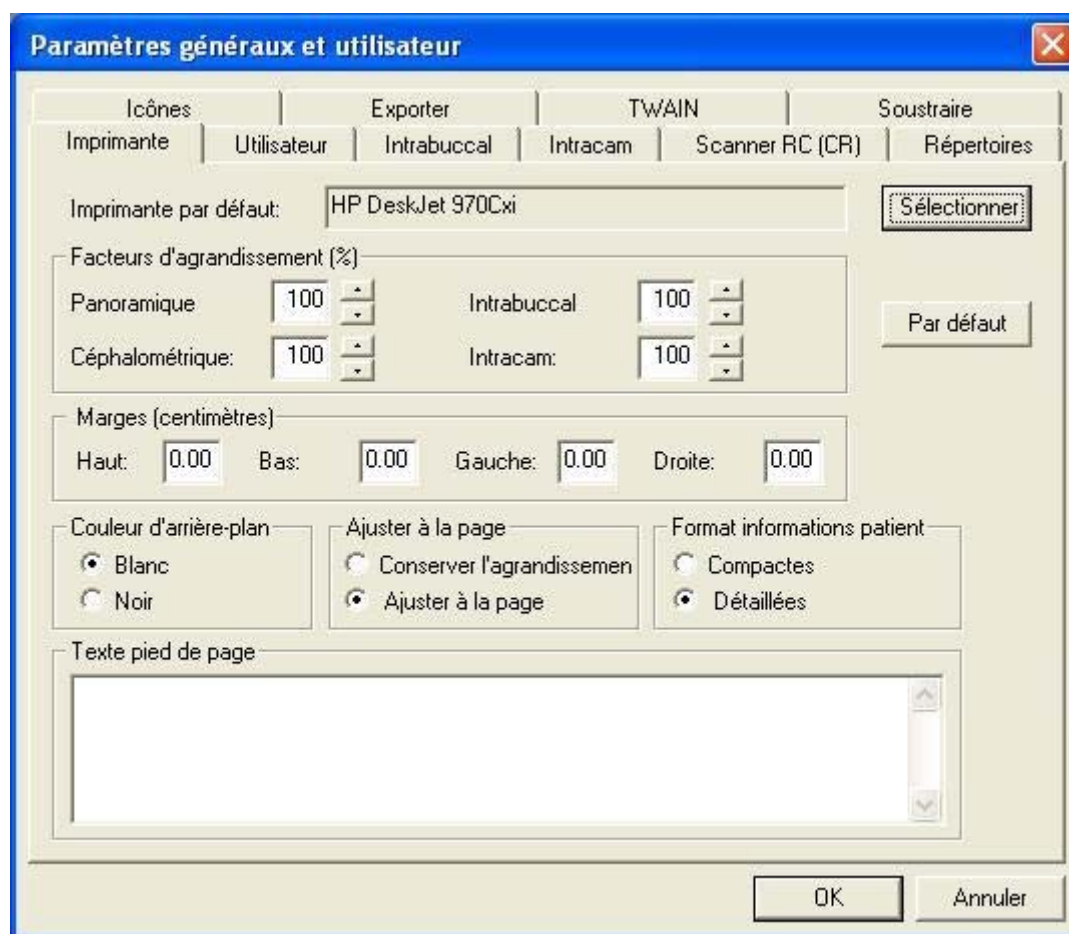


REMARQUE Les réglages de l'imprimante s'appliquent uniquement au poste de travail local.

Si l'on a sélectionné l'option *Compactes*, les informations relatives au patient apparaîtront sous forme abrégée lors de l'impression de l'image (voir ci-dessous).




Si l'on a sélectionné l'option *Détaillées*, on peut écrire un *Texte pied de page*. Le texte de pied de page peut inclure, par exemple, le nom du cabinet dentaire. L'option *Détaillées* affiche les informations avec des en-têtes ("Nom du patient", "Numéro du patient", etc.).

En outre, si l'on a sélectionné l'option *Détaillées*, il est possible d'imprimer l'image avec un diagnostic (se reporter à la section "Fenêtre Diagnostic" à la page 119 pour plus d'informations).

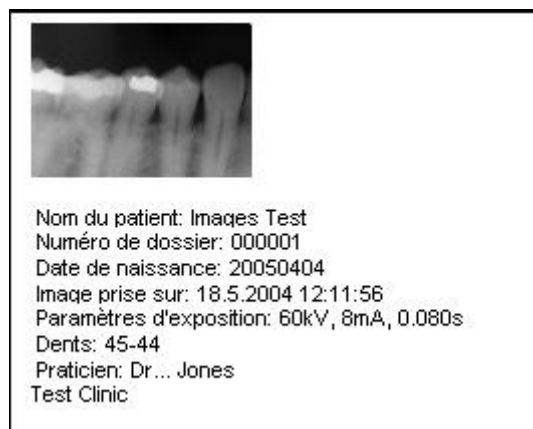

9.2.2 Utilisateur


La page à onglet **Utilisateur** permet de définir un opérateur par défaut pour les modes panoramique et intrabuccal et un dentiste par défaut.

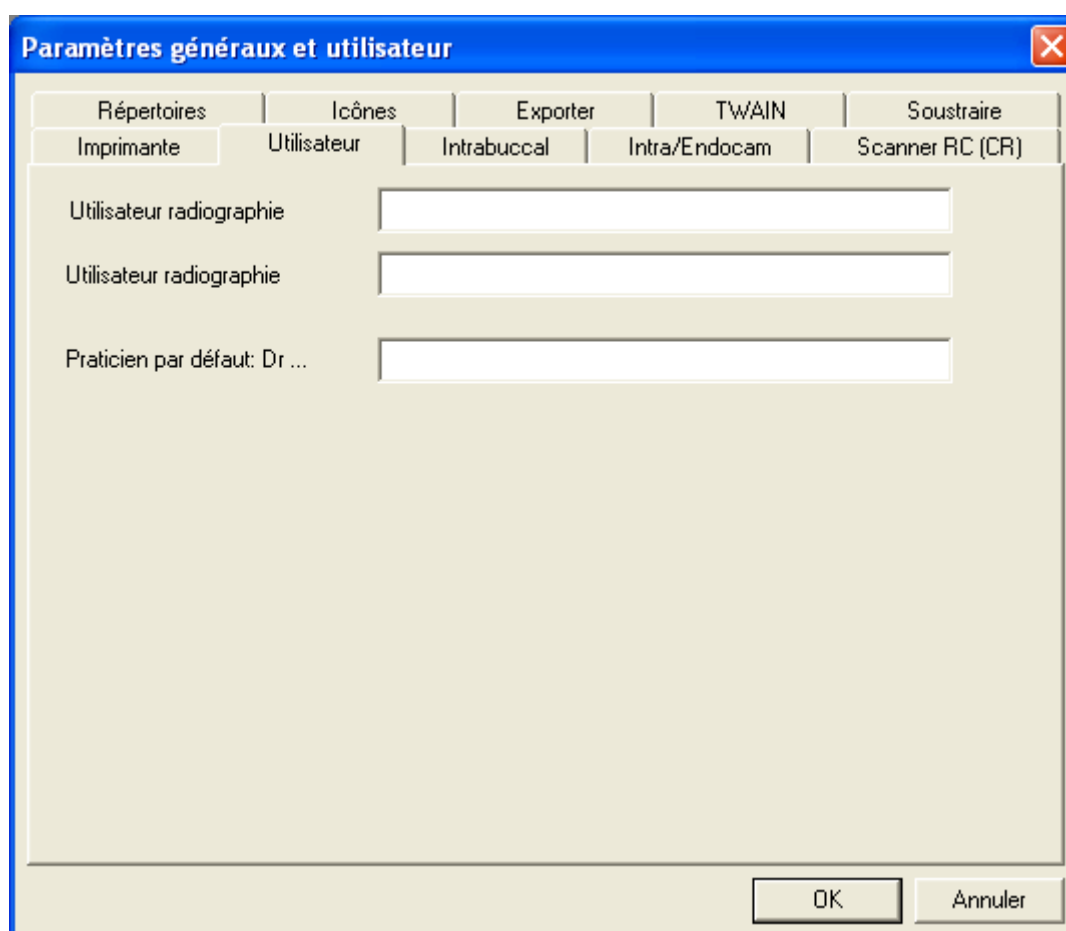

9.2.3 Intrabuccal

Si la fonction *Toujours prêt pour l'exposition* est activée dans la fenêtre **Intrabuccal**, il est possible de réaliser des images Dixi sans devoir cliquer sur l'icône d'exposition du logiciel Dimaxis. Dans ce cas, comme toujours, il n'est possible de réaliser des images que si la DEL "Ready" (Prêt) est allumée sur le boîtier de commande Dixi. Les images ne feront pas automatiquement partie des études si l'on utilise l'option *Toujours prêt pour l'exposition*.


Si la fonction *Utiliser le clavier Intra* est activée, le clavier Intra s'affiche dans la fenêtre **Intrabuccal**.

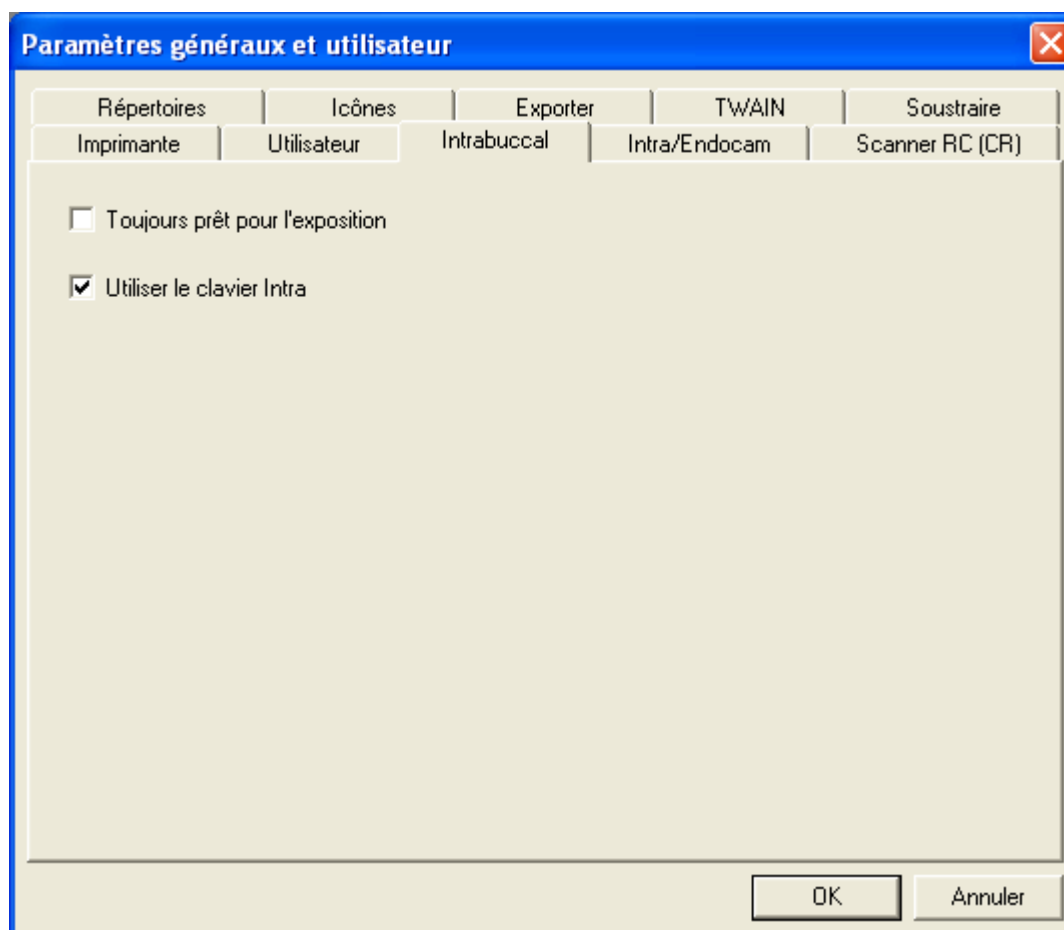

9.2.4 Intra/Endocam

La page à onglet **Intra/Endocam** permet de sélectionner le port de communication (1 ou 2) auquel est connectée la pédale de commande pour le gel et l'enregistrement d'images Intracam et Endocam. Sélectionner 9 s'il n'y a pas de pédale de commande installée.


On peut également spécifier un programme d'édition externe (Photoshop ou tout autre programme de traitement d'image).

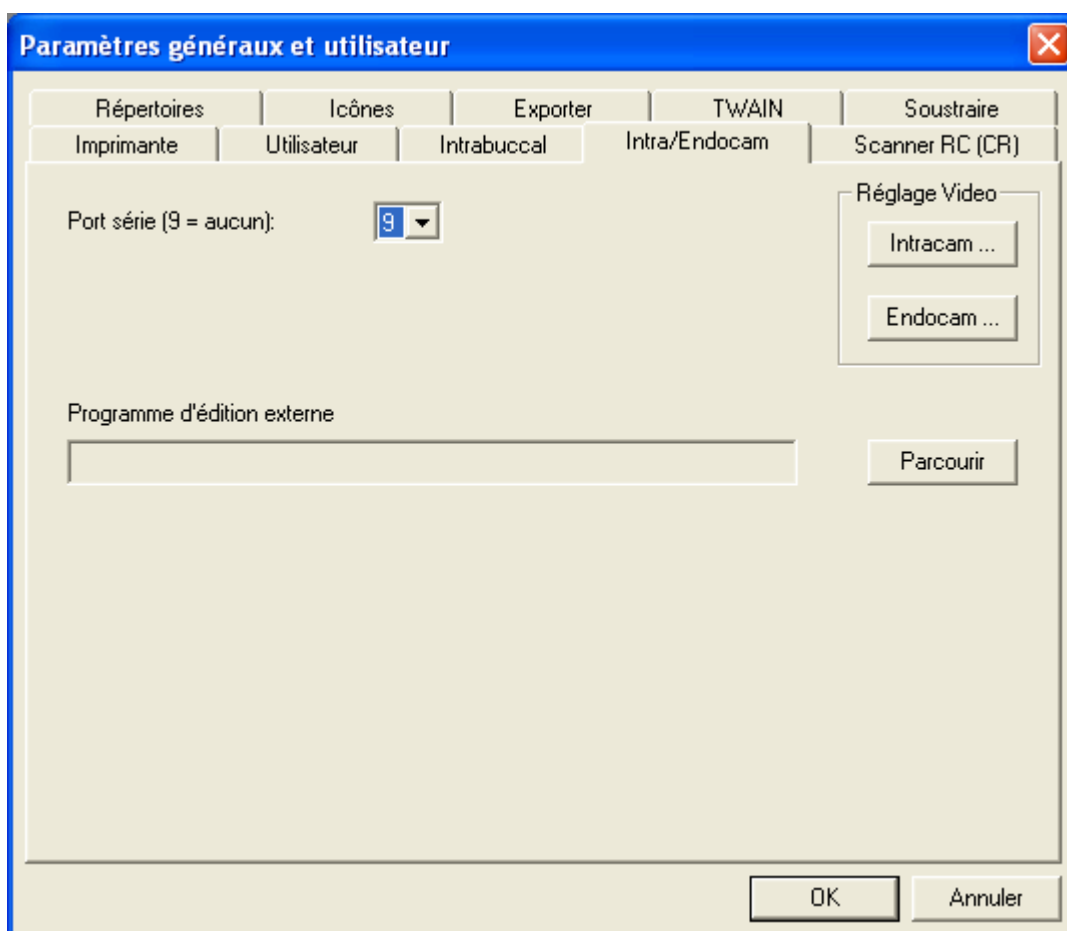


REMARQUE Les réglages Intracam s'appliquent uniquement au poste de travail local.

PARAMÈTRES


Cliquer sur le bouton *Réglage Vidéo* -> *Intracam* pour ajuster l'image Intracam. La fenêtre **Réglages vidéo** s'affiche.

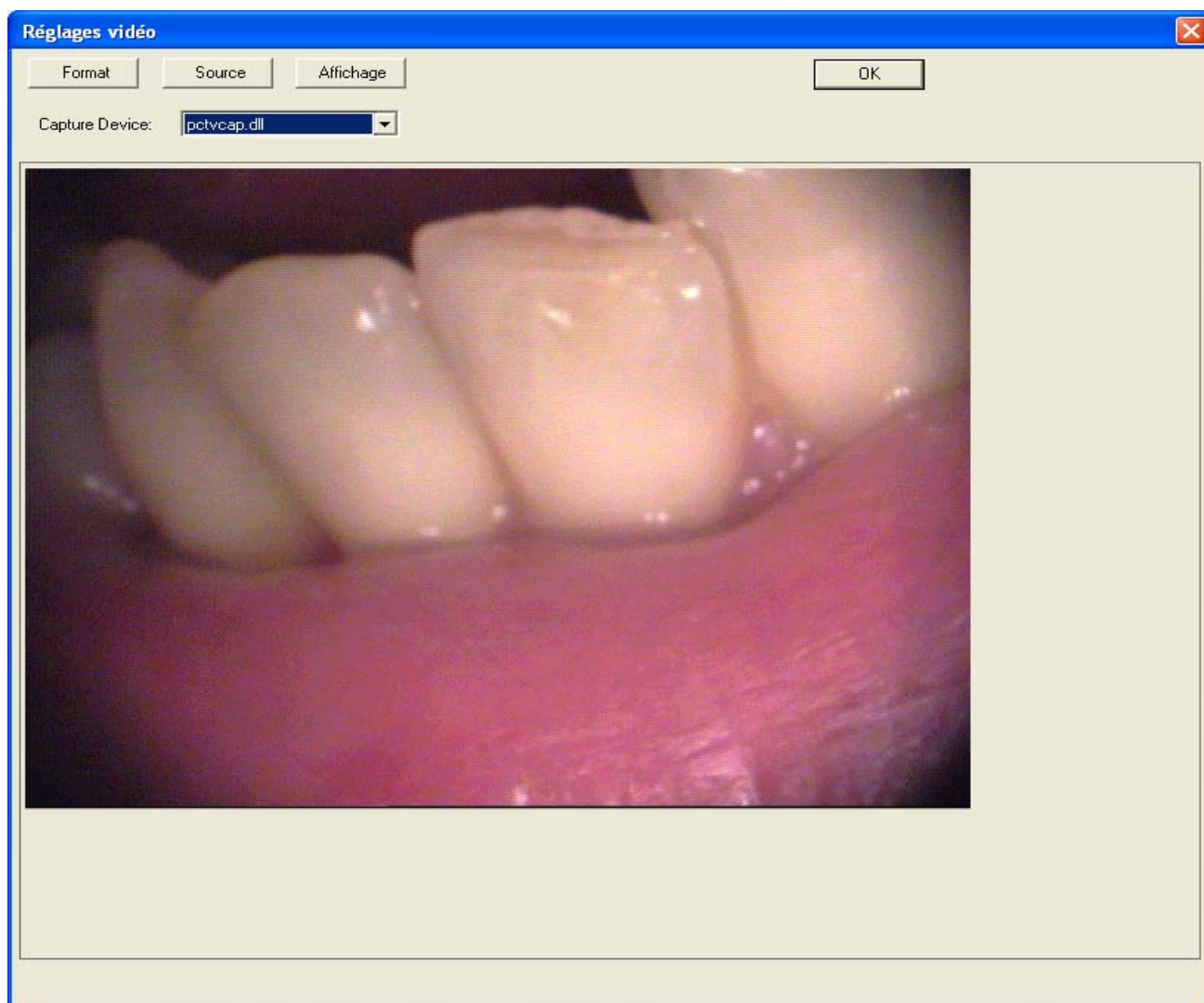


Si la carte vidéo ou le pilote vidéo ne sont pas installés ou si le pilote n'est pas correctement configuré, la fenêtre **Réglages vidéo** ne s'affiche pas. Le message ci-dessous s'affiche à sa place.

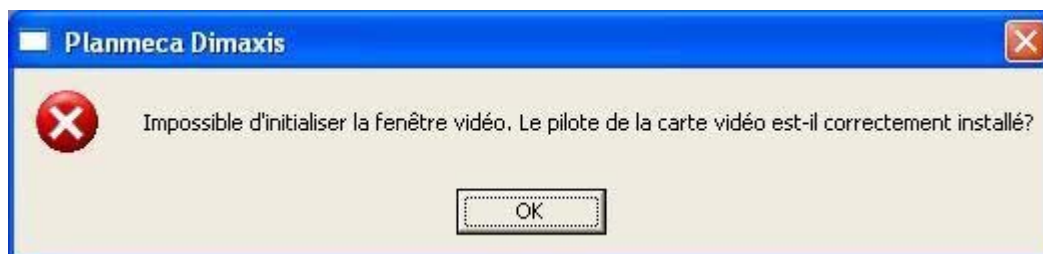

Cliquer sur le bouton *Réglage Vidéo* -> *Endocam* pour ajuster l'image Endocam. La fenêtre **Réglages vidéo** s'affiche.

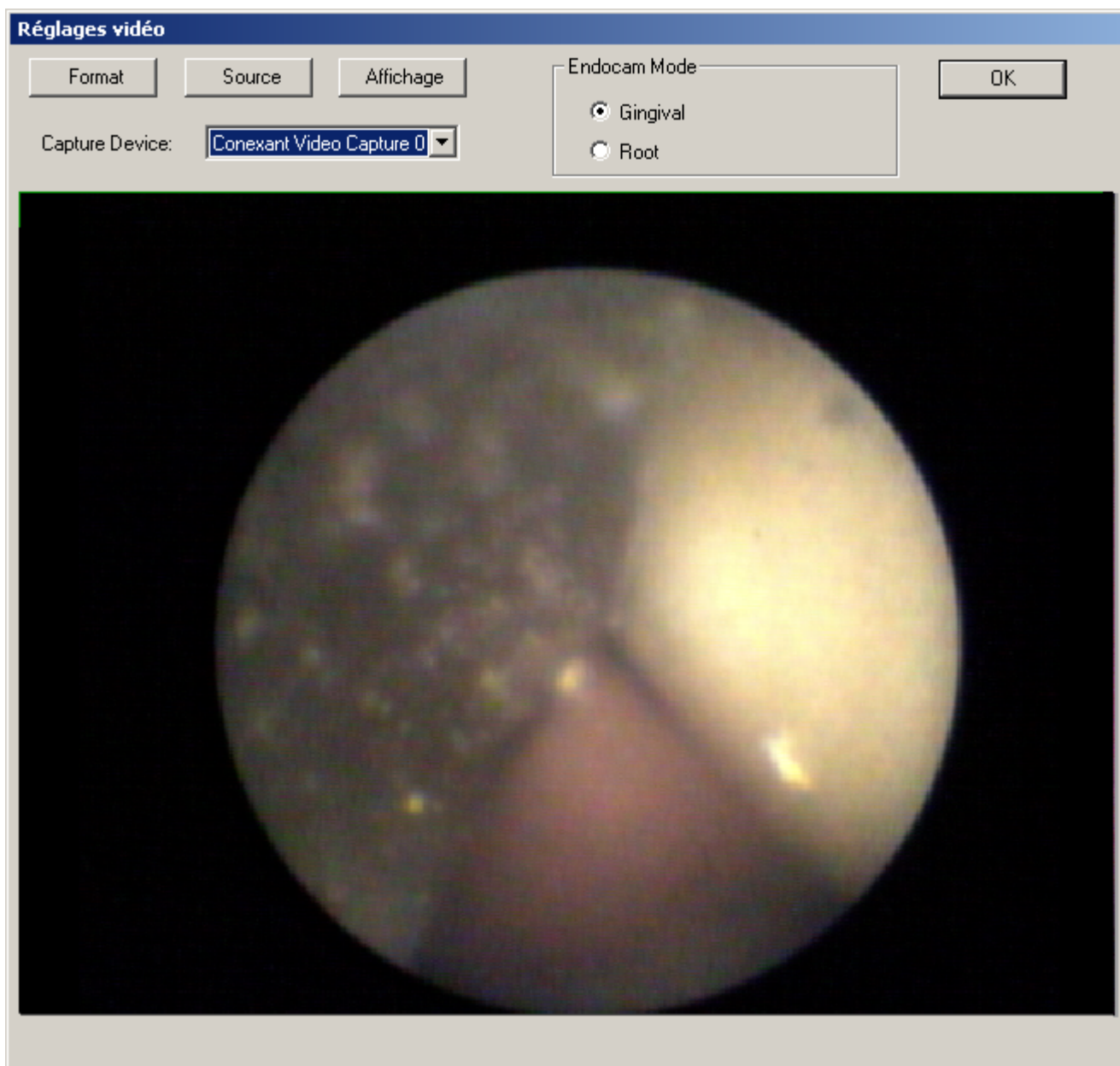


Si la carte vidéo ou le pilote vidéo ne sont pas installés ou si le pilote n'est pas correctement configuré, la fenêtre **Réglages vidéo** ne s'affiche pas. Le message ci-dessous s'affiche à sa place.

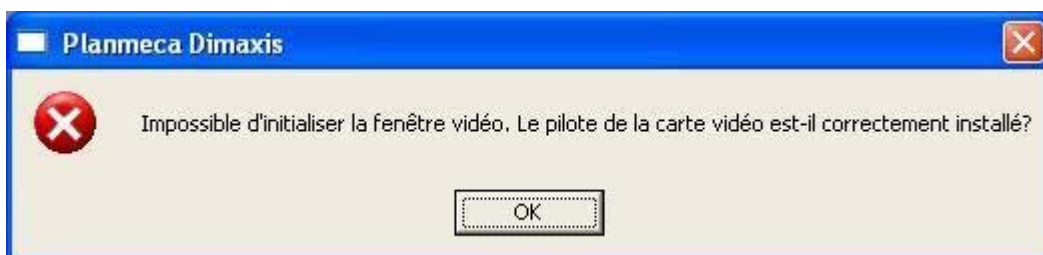


REMARQUE Les fenêtres de réglage vidéo varient selon la carte vidéo utilisée. Les fenêtres *Video Format* (Format vidéo), *Video Source* (Source vidéo) et *Video Display* (Affichage vidéo) illustrées ici sont proposées à titre d'exemple.


Cliquer sur le bouton *Format* pour afficher la fenêtre **Video Format (Format vidéo)**. Cette fenêtre permet d'ajuster les dimensions et le format d'image des images Intracam.

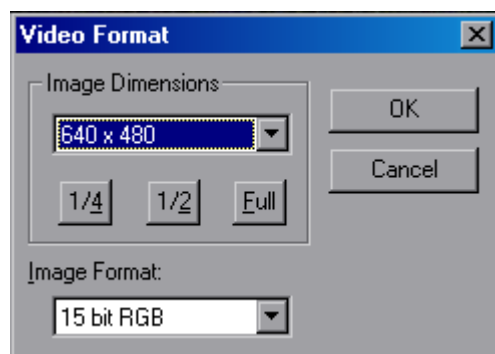

Cliquer sur le bouton *Source* pour afficher la fenêtre **Video Source (Source vidéo)**. Cette fenêtre permet de sélectionner le type de signal vidéo et la norme de télédiffusion en couleurs.

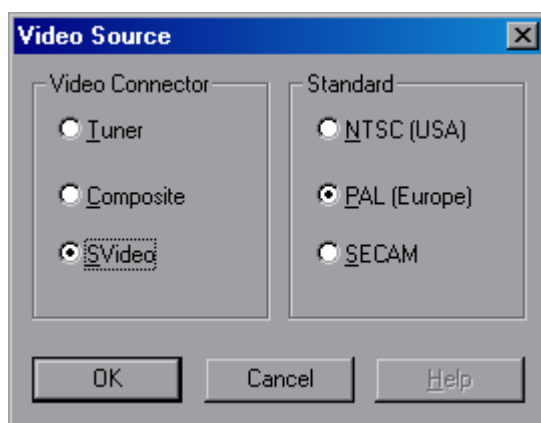


Cliquer sur le bouton *Affichage* pour afficher la fenêtre **Video Display (Affichage vidéo)**. Cette fenêtre permet de régler les paramètres de couleur, etc. des images. On notera que toutes les cartes vidéo ne proposent pas cette boîte de dialogue.

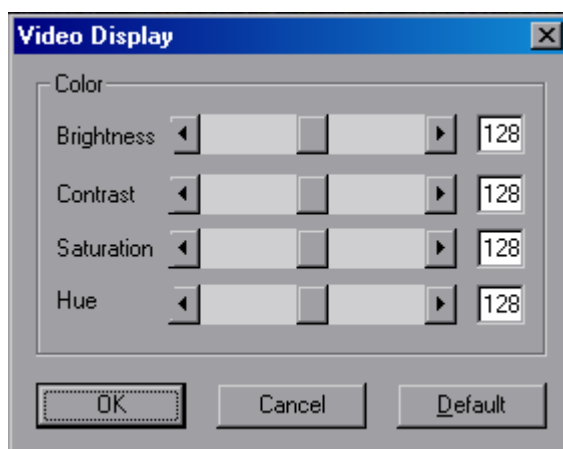

Normalement, il n'y a qu'un seul périphérique de saisie vidéo disponible. S'il y a plusieurs accessoires, on peut en sélectionner un dans la liste *Dispositif*.

9.2.5 Scanner RC (CR) (version Pro uniquement)

La page à onglet **Scanner RC (CR)** permet de sélectionner le type de scanner.

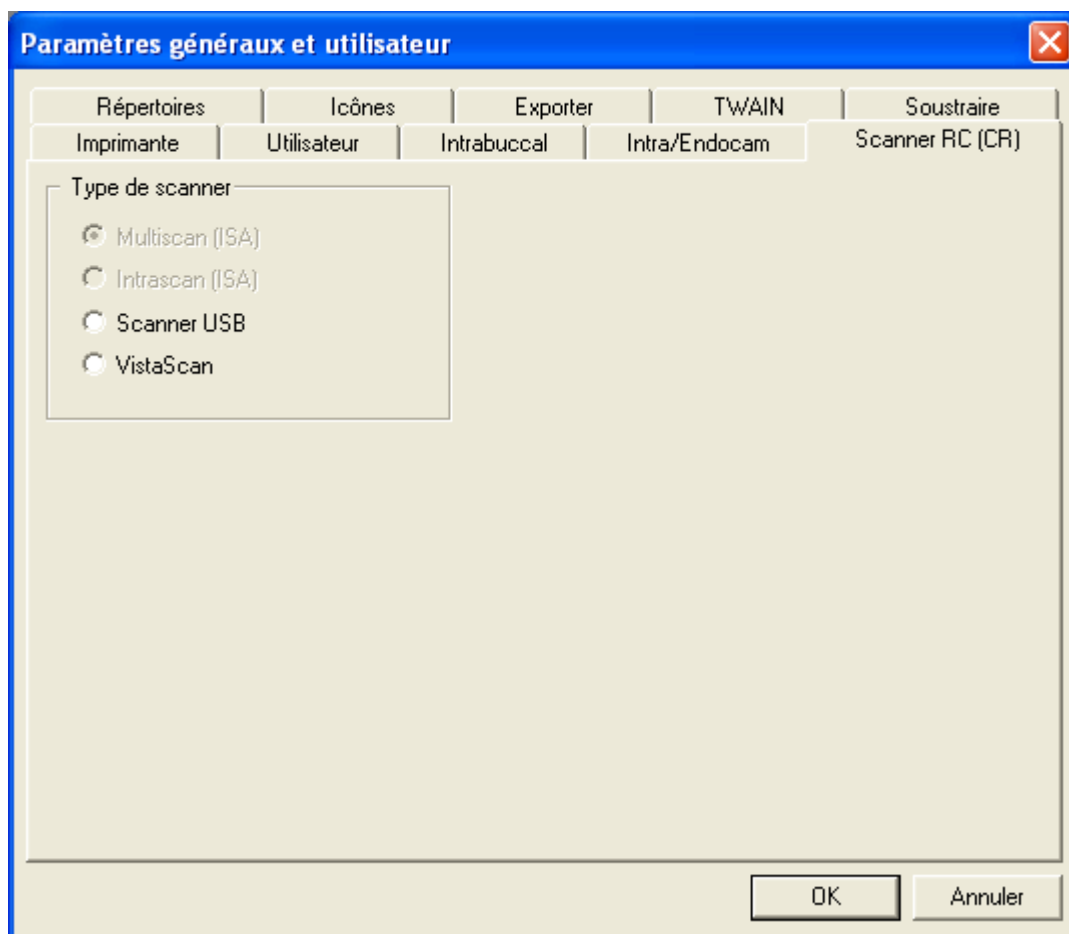

REMARQUE Les réglages du scanner s'appliquent uniquement au poste de travail local.

9.2.6 Répertoires

Les répertoires racine d'exportation, d'importation et d'archivage à long terme sont définis dans la page à onglet **Répertoires**. On notera que le répertoire racine d'archivage à long terme doit être spécifié pour pouvoir déplacer des images vers l'archive à long terme. Se reporter à la section 10 "DÉPLACEMENT D'IMAGES VERS L'ARCHIVE À LONG TERME" à la page 157 pour plus d'informations.


Les nouvelles images sont enregistrées dans un répertoire temporaire avant d'être enregistrées dans la base de données.

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Paramètres généraux et utilisateur" with a close button (X) in the top right corner. The dialog has a tabbed interface with the following tabs: Imprimante, Utilisateur, Intra/Endocam, Scanner RC (CR), and Répertoires. The "Répertoires" tab is currently selected. Below the tabs, there are five sub-sections: "Répertoires", "Icônes", "Exporter", "TWAIN", and "Soustraire". The "Répertoires" sub-section contains four rows, each with a label, a text input field, and a "Parcourir" button. The labels and their corresponding values are: "Répertoire d'exportation par" (empty), "Répertoire d'importation par" (empty), "Archivage à long terme" (C:\TEMP\), and "Répertoire temporaire" (C:\TEMP\). At the bottom right of the dialog are "OK" and "Annuler" buttons.


Label	Value	Action
Répertoire d'exportation par		Parcourir
Répertoire d'importation par		Parcourir
Archivage à long terme	C:\TEMP\	Parcourir
Répertoire temporaire	C:\TEMP\	Parcourir

REMARQUE Les définitions des répertoires s'appliquent uniquement au poste de travail local.

Utiliser le bouton *Parcourir* de la page à onglet **Répertoires** pour localiser le répertoire.

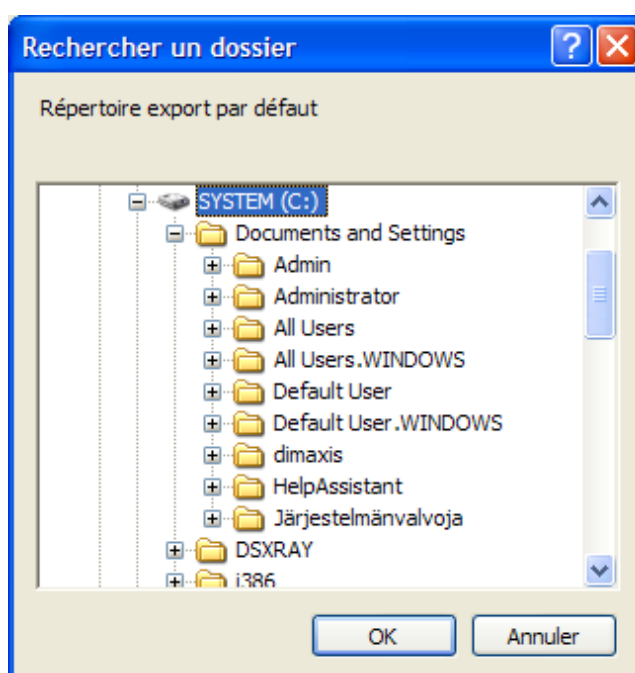


Un message d'erreur s'affiche s'il est impossible d'écrire dans le répertoire temporaire. Dimaxis vérifie ce point lors du démarrage. Ce problème peut survenir par exemple si le répertoire temporaire spécifié se trouve sur un lecteur réseau qui n'existe plus.

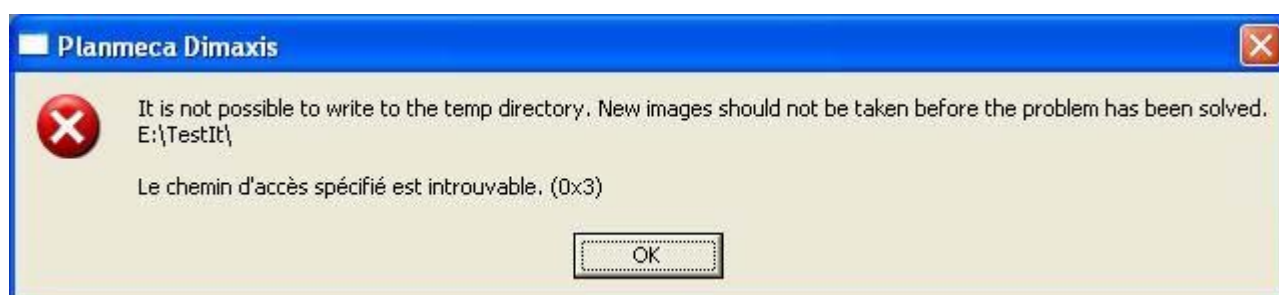

9.2.7 Icônes (version Pro uniquement)

La page à onglet **Icônes** permet de sélectionner les boutons que l'on ne souhaite pas faire apparaître dans les barres d'outils en les décochant.

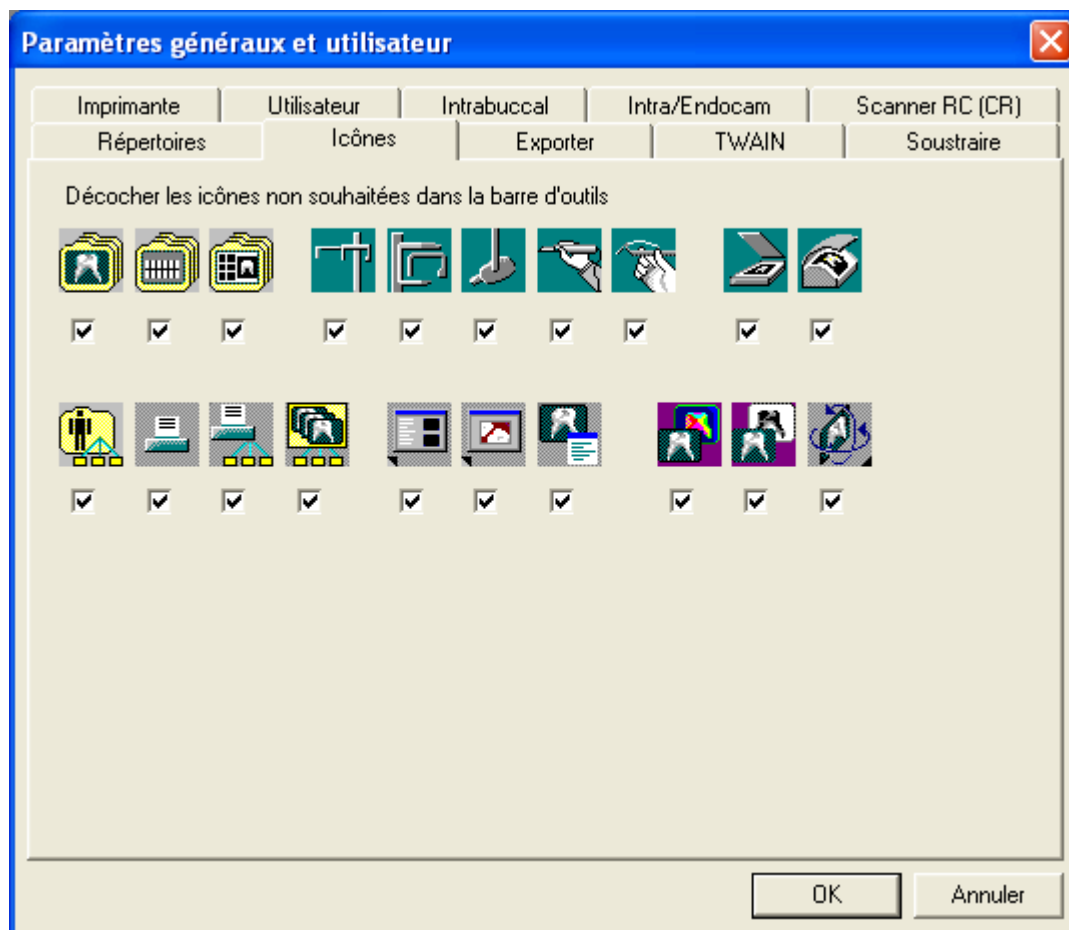


9.2.8 Exporter

La page à onglet **Exporter** permet de définir si l'on souhaite créer des fichiers d'exportation au format 8 bits. Dimaxis utilise en interne des images 16 bits, sauf si le paramètre *Bits par pixel* pour les images panoramiques ou intrabuccales a été réglé sur 8 bits. De nombreux autres systèmes ne sont capables de lire que les images 8 bits.


Cette fenêtre permet également de spécifier si l'on souhaite créer un fichier pour les informations patient et les informations d'image (paramètres d'images, etc.). Voir également le chapitre "Importer" à la page 90.

L'option *Graver annotations et informations patient dans le fichier d'exportation* permet de faire apparaître les informations patient et les annotations sous l'image exportée de la même manière que lors de l'impression d'une image.

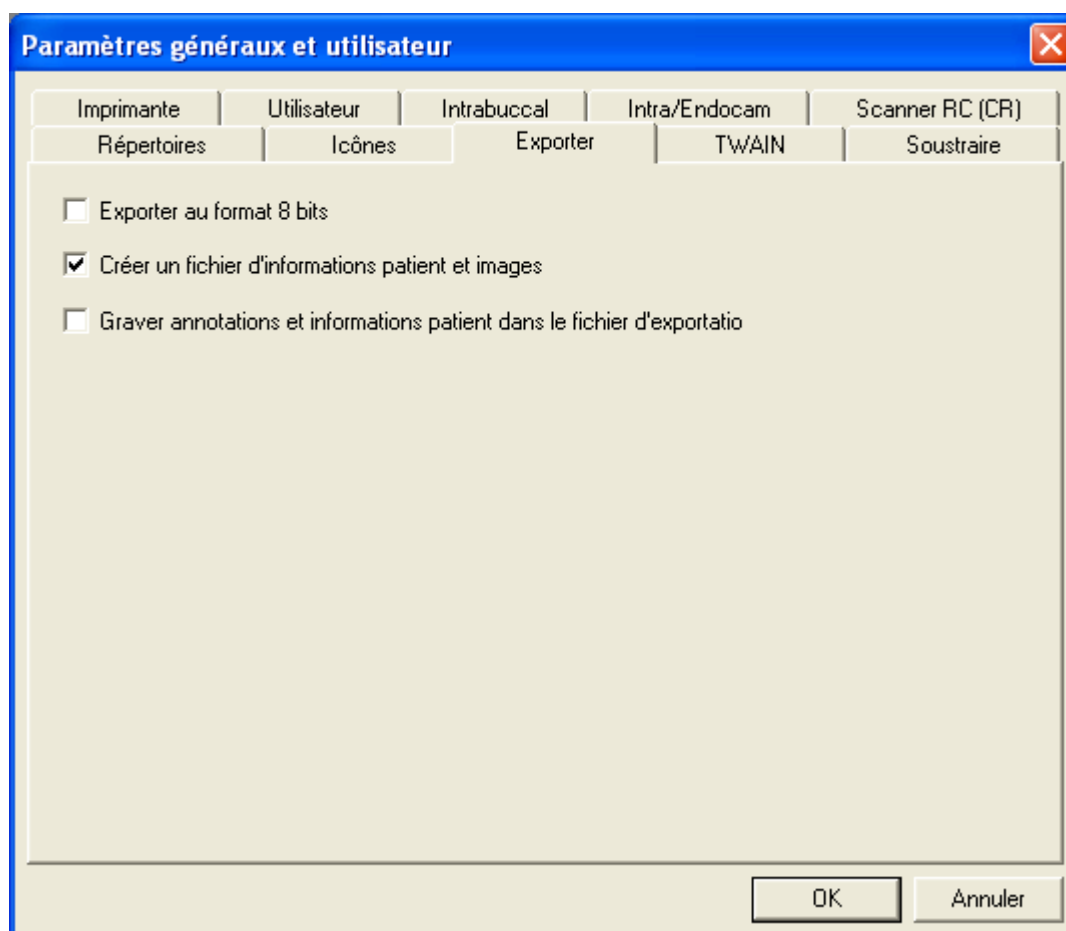


9.2.9 TWAIN

La page à onglet **TWAIN** permet de spécifier si on souhaite utiliser le mécanisme de *transfert de fichier* lors de l'acquisition d'images en provenance d'une source TWAIN. Dans les versions 3.2.4 à 3.3.2 du logiciel Dimaxis, le mécanisme de transfert de fichier est utilisé (lorsqu'il est disponible) pour permettre la saisie des images 16 bits. Le problème est que certaines sources de données TWAIN, même si elles se prétendent compatibles avec le transfert de fichier, ne le sont pas nécessairement.

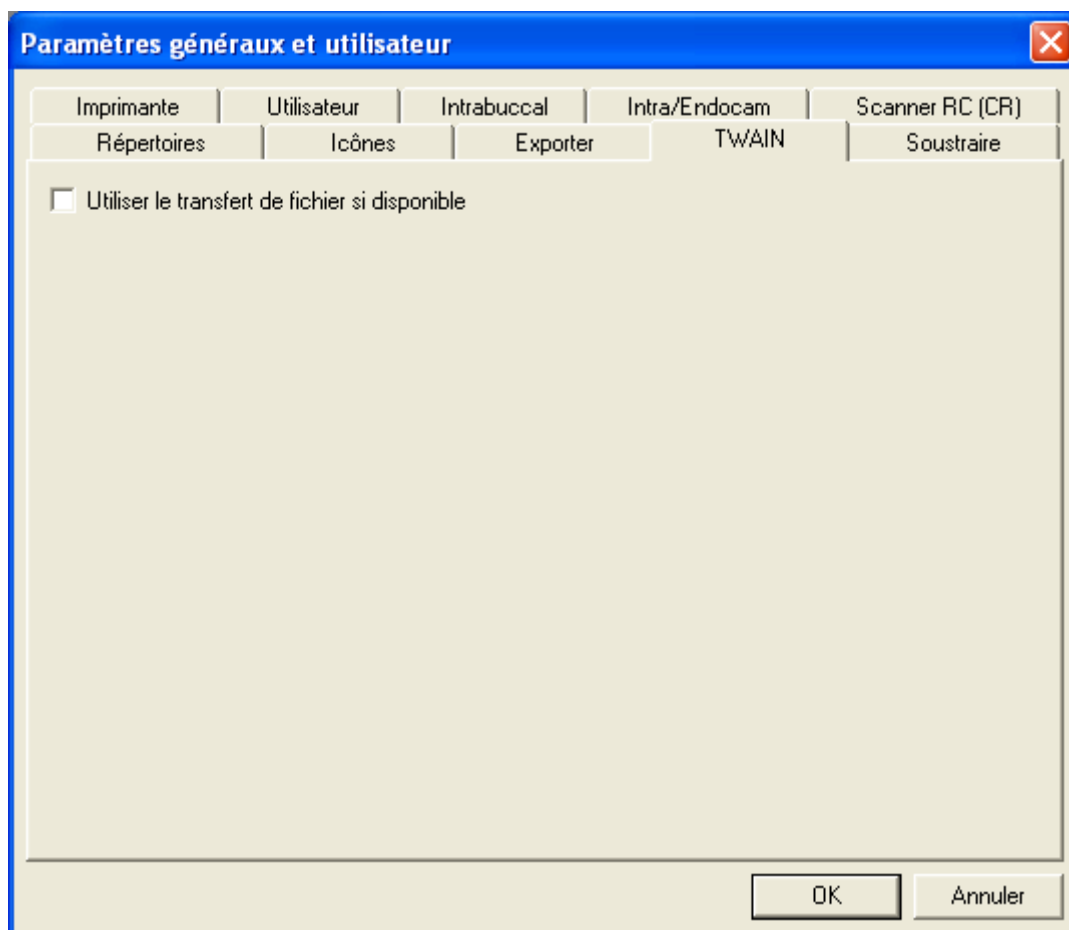

9.2.10 Soustraire

La page à onglet **Soustraire** propose un paramétrage spécifique de l'utilisateur qui permet de décider si l'utilisateur souhaite que le logiciel Dimaxis optimise les points de contrôle spécifiés avant d'appliquer la soustraction. L'optimisation améliore généralement le résultat de la soustraction mais, si le contraste à proximité des points de contrôle est insuffisant, l'algorithme risque d'être incapable d'effectuer l'optimisation. En outre, le calcul de l'optimisation prend du temps.

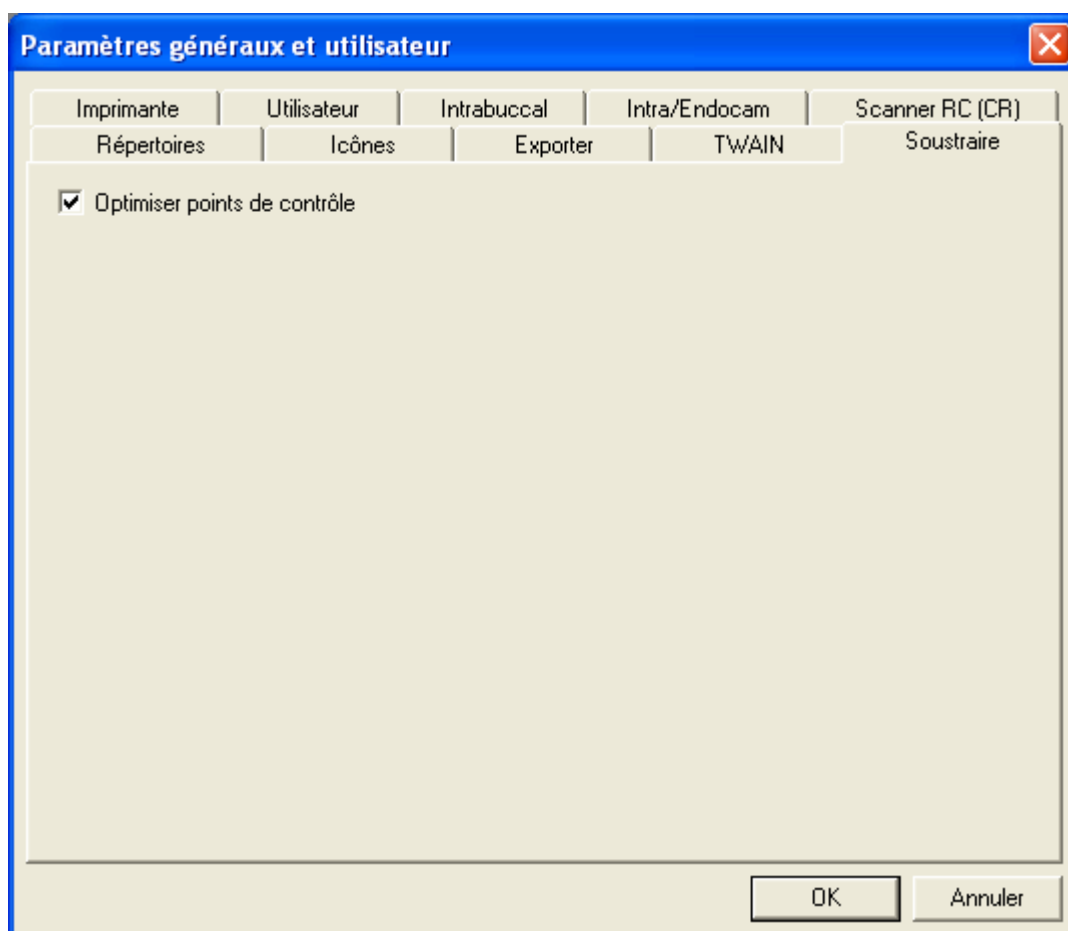

9.3 Paramètres DICOM (version Pro uniquement)


9.3.1 Applications

La norme DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) est une norme de communication des images médicales et des informations qui leur sont associées.

La page à onglet **Applications** permet de sélectionner la destination par défaut (application de stockage) des images à transmettre en cliquant sur le bouton *Sélectionner* supérieur.

On peut sélectionner une imprimante DICOM par défaut en cliquant sur le bouton *Sélectionner* correspondant. On peut sélectionner une liste de travail par défaut en cliquant sur le bouton *Sélectionner* correspondant. On peut sélectionner une application Q/R AE par défaut en cliquant sur le bouton *Sélectionner* inférieur. Dans tous les cas, la fenêtre **Sélectionner DICOM AE distant** s'affiche.

A partir de la version 4.0.0 du logiciel Dimaxis, il est possible de configurer les applications DICOM directement depuis Dimaxis. Les informations sont enregistrées dans la base de données Dimaxis. Auparavant, cette tâche devait s'effectuer en éditant un fichier de configuration distinct. Pour plus d'information, se reporter au manuel d'installation Dimaxis Pro/Classic.

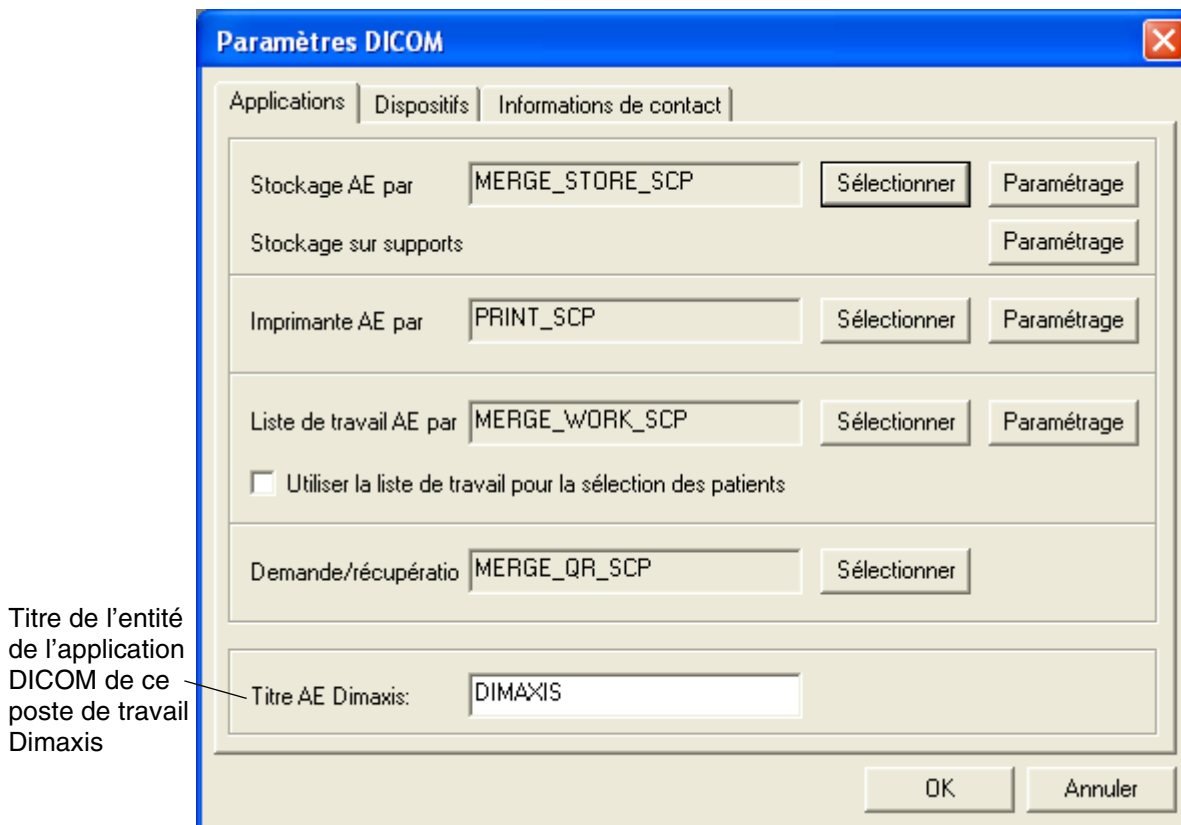


S'il y a plusieurs postes de travail Dimaxis au sein du réseau, ces postes de travail doivent avoir des titres AE différents, par exemple DIMAXIS_1, DIMAXIS_2, etc.

En sélectionnant Q/R AE par défaut, on peut sélectionner ou désélectionner l'option *Utiliser la liste de travail pour la sélection des patients*. Si l'on a sélectionné une liste de travail, c'est la fenêtre *Liste de travail* (au lieu de la fenêtre *Sélectionner le patient*) qui s'ouvrira lors du démarrage du programme.

REMARQUE Les réglages des paramètres Applications s'appliquent uniquement au poste de travail local.

Sélectionner l'application de stockage/imprimante/liste de travail/application Q/R et cliquer sur **OK**. Ce paramètre s'applique uniquement au poste de travail local.

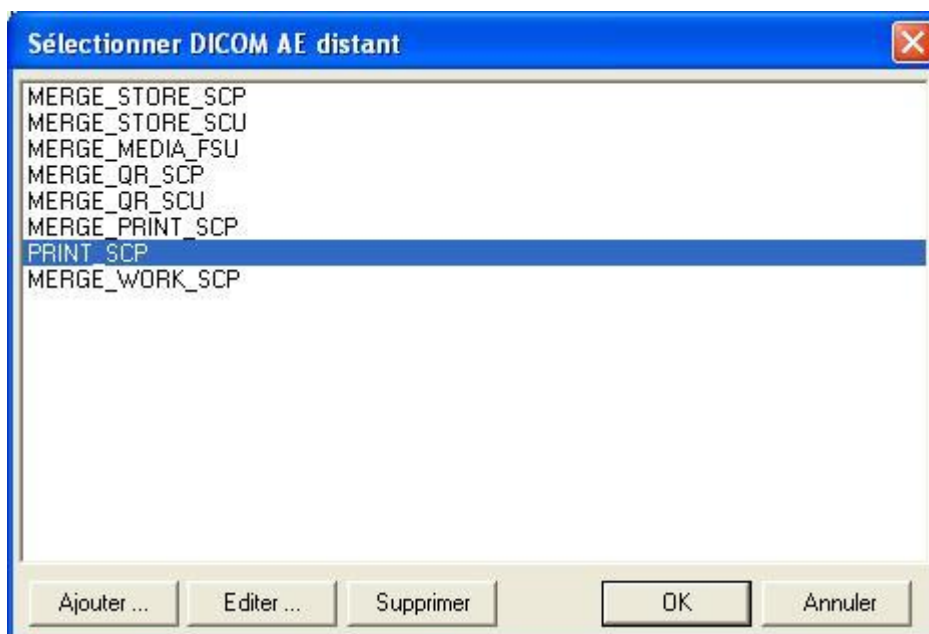

La commande *Editer* permet d'éditer uniquement les AE qui ont été ajoutées à l'aide de la commande *Ajouter*.




Cliquer sur le bouton *Paramétrage* supérieur de la fenêtre **Applications** pour vérifier ou modifier les paramètres relatifs à l'application de stockage DICOM. La fenêtre **Paramétrage stockage DICOM** s'affiche.

Cliquer sur le bouton *Paramétrage* correspondant de la page à onglet **Applications** pour vérifier ou modifier les paramètres relatifs au support de stockage DICOM. La fenêtre **Paramétrage stockage DICOM** s'affiche.

Cette fenêtre permet de définir de quelle manière ou sous quelle forme les données des pixels d'image seront transmises. L'option *Envoyer image brute* signifie que l'image transmise sera l'image non traitée. *Envoyer image retouchée* signifie que l'image transmise sera une image traitée. *Image brute + Centre et largeur de la fenêtre* signifie que les paramètres d'optimisation linéaire du contraste seront transmis séparément des données d'image. *Image brute + Table LUT (avec gamma)* signifie qu'un tableau de consultation de l'optimisation non linéaire du contraste sera transmis. La correction gamma sera appliquée au LUT.

On peut également spécifier la classement SOP de stockage (classe de paire service-objet). Si l'option *Stockage image saisie secondaire* est sélectionnée, les images seront transmises en tant qu'objets de saisie secondaire. La plupart des produits DICOM PACS et DICOM Workstation ne prennent en charge que cette option. Si l'une des options *Stockage radiographique numérique* est sélectionnée, les images seront transmises en tant qu'objets image dentaire tel que défini dans le supplément 32 de la norme DICOM.

L'option *Engagement stockage* permet de spécifier si l'on souhaite utiliser la classe Engagement stockage. La classe de service Storage commitment définit une classe de service au niveau de l'application qui facilite cette obligation de stockage. Voir la norme DICOM pour plus de détails.

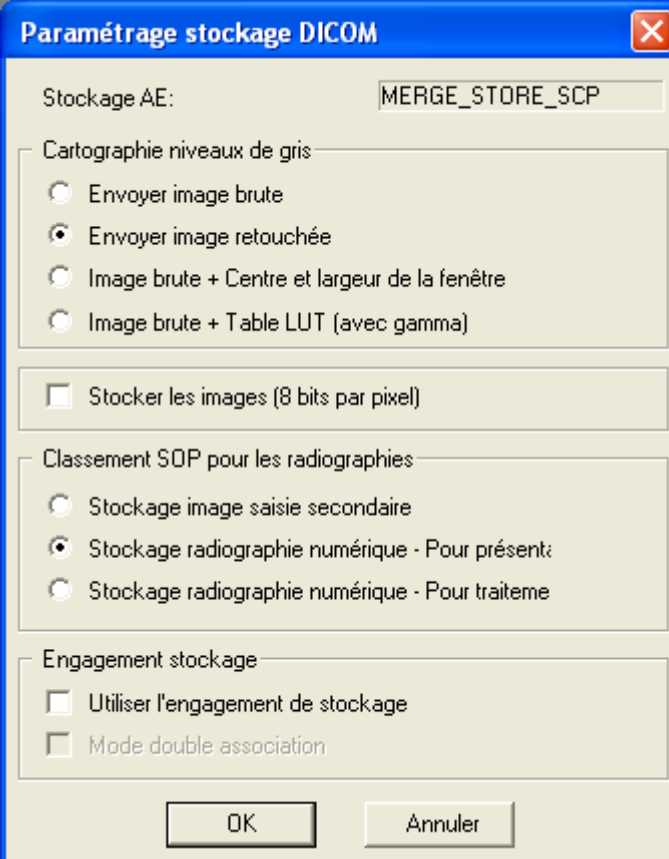

The dialog box titled "Paramétrage stockage DICOM" has a blue title bar with a close button. It contains the following fields and options:


- Stockage AE: MERGE_STORE_SCP
- Cartographie niveaux de gris:
 - ☐ Envoyer image brute
 - ☒ Envoyer image retouchée
 - ☐ Image brute + Centre et largeur de la fenêtre
 - ☐ Image brute + Table LUT (avec gamma)
- ☐ Stocker les images (8 bits par pixel)
- Classement SOP pour les radiographies:
 - ☐ Stockage image saisie secondaire
 - ☒ Stockage radiographie numérique - Pour présent
 - ☐ Stockage radiographie numérique - Pour traitement
- Engagement stockage:
 - ☐ Utiliser l'engagement de stockage
 - ☐ Mode double association

Buttons: OK, Annuler

REMARQUE Les paramètres "Paramétrage stockage DICOM" sont globaux. Ils dépendent néanmoins du mode de stockage AE sélectionné.

Cliquer sur le bouton *Paramétrage* correspondant de la page à onglet **Applications** pour vérifier ou modifier les paramètres relatifs à l'application d'impression DICOM. La fenêtre **Configuration imprimante DICOM** s'affiche. Se reporter à la page 72 (chapitre 7 - DICOM) pour des informations sur cette fenêtre et son contenu.

Cliquer sur le bouton *Paramétrage* inférieur de la page à onglet **Applications** pour vérifier ou modifier les paramètres relatifs à la modalité Liste de travail DICOM. Le message ci-dessous s'affiche.

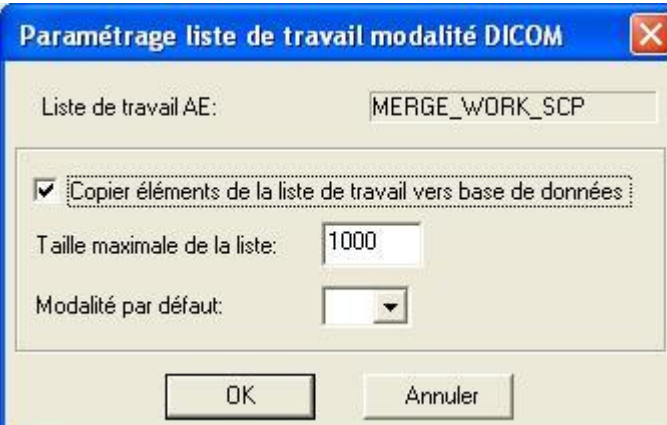

The dialog box titled "Paramétrage liste de travail modalité DICOM" has a blue title bar with a close button. It contains the following fields and options:

- Liste de travail AE: MERGE_WORK_SCP
- ☒ Copier éléments de la liste de travail vers base de données
- Taille maximale de la liste: 1000
- Modalité par défaut: [dropdown menu]

Buttons: OK, Annuler

9.3.2 Dispositifs

La page à onglet **Dispositifs** permet d'indiquer le nom, le modèle et le numéro de série du poste de travail (panoramique/céphalométrique et intrabuccal).


The screenshot shows a Windows-style dialog box titled 'Paramètres DICOM'. It has three tabs: 'Applications', 'Dispositifs' (which is selected), and 'Informations de contact'. The 'Dispositifs' tab contains a table with three columns: 'Nom du poste', 'Modèle', and 'N° de'. There are two rows of input fields. The first row is labeled 'Panoramique/Céph.' and the second row is labeled 'Intrabuccal'. At the bottom right of the dialog are 'OK' and 'Annuler' buttons.

	Nom du poste	Modèle	N° de
Panoramique/Céph.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Intrabuccal	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

REMARQUE Le paramétrage des périphériques s'applique uniquement au poste de travail local.

9.3.3 Informations de contact

La page à onglet **Informations de contact** permet d'indiquer le nom et l'adresse de l'établissement hospitalier et le nom du service.

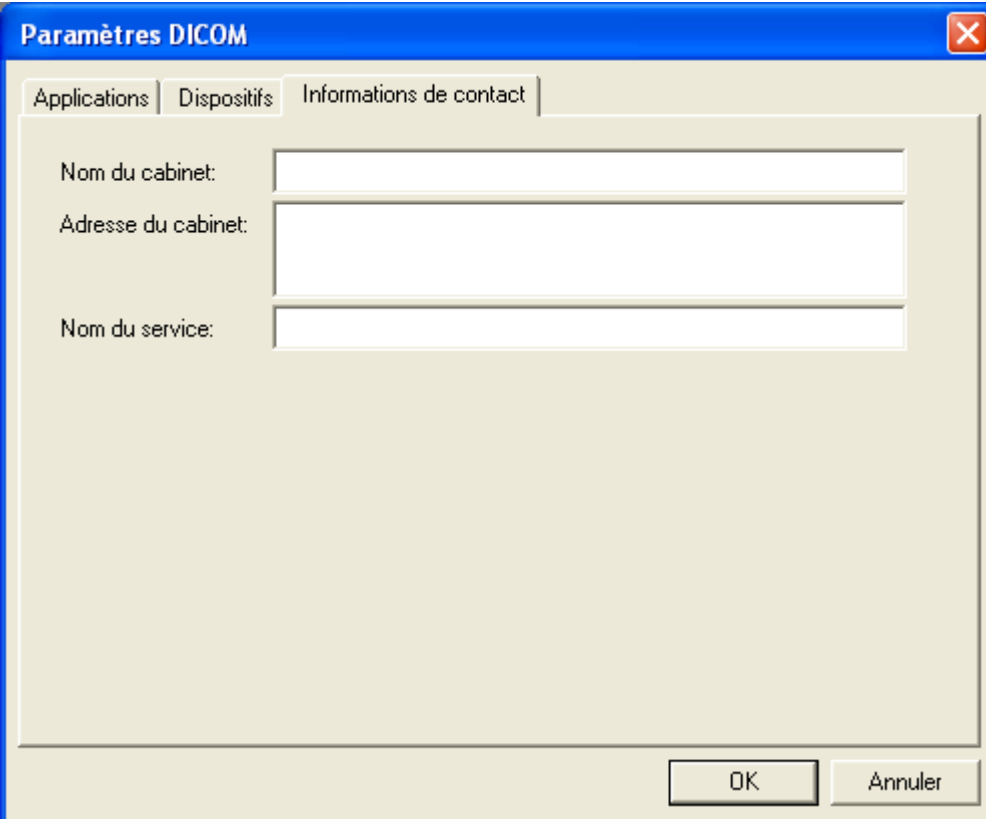

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Paramètres DICOM". It has three tabs: "Applications", "Dispositifs", and "Informations de contact", with the last one being the active tab. The dialog contains three text input fields: "Nom du cabinet:", "Adresse du cabinet:", and "Nom du service:". At the bottom right, there are two buttons: "OK" and "Annuler".


REMARQUE *Le paramétrage des informations de contact s'applique uniquement au poste de travail local, car les différents postes de travail peuvent se trouver dans des services différents et avoir des adresses différentes.*

10 DÉPLACEMENT D'IMAGES VERS L'ARCHIVE À LONG TERME

REMARQUE Il est possible d'interdire aux utilisateurs de procéder à l'archivage à long terme. Voir page 127 pour plus de détails.


Après la prise d'un cliché et lorsque celui-ci a été accepté, l'image est enregistrée dans la base de données qui se trouve sur l'ordinateur local ou sur le serveur. En raison du caractère limité de l'espace disponible sur le disque dur du micro-ordinateur ou du serveur, le système doit être doté d'un accessoire externe pouvant servir d'archive à long terme, par exemple un lecteur DVD.

Pour déplacer une image vers l'archive à long terme, sélectionner la commande **Archivage à long terme** dans le menu déroulant **Administration** qui est visible lorsqu'aucune image n'est ouverte.

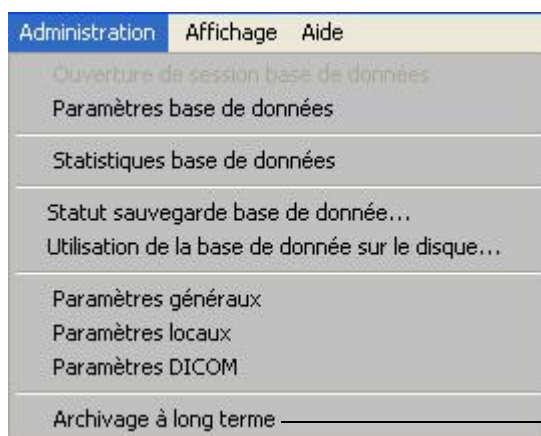


Déplacer des images vers l'archive à long terme

Le répertoire racine d'archivage à long terme doit être spécifié pour pouvoir déplacer des images. Si ce répertoire n'a pas été spécifié, le message ci-dessous s'affiche.

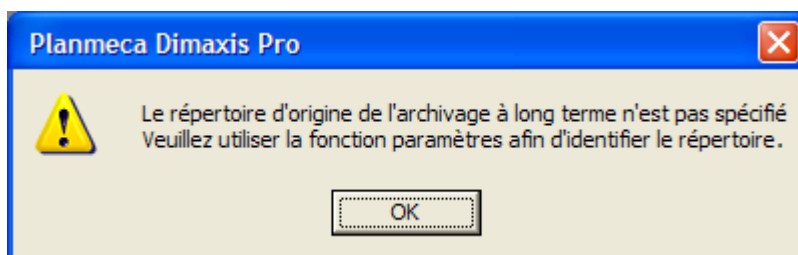


DÉPLACEMENT D'IMAGES VERS L'ARCHIVE À LONG TERME

Pour spécifier le répertoire racine d'archivage à long terme, commencer par sélectionner la commande **Paramètres locaux** dans le menu déroulant **Administration**, puis choisir la page à onglet **Répertoires**. Cliquer sur le bouton *Parcourir* pour localiser le répertoire racine d'archivage à long terme.

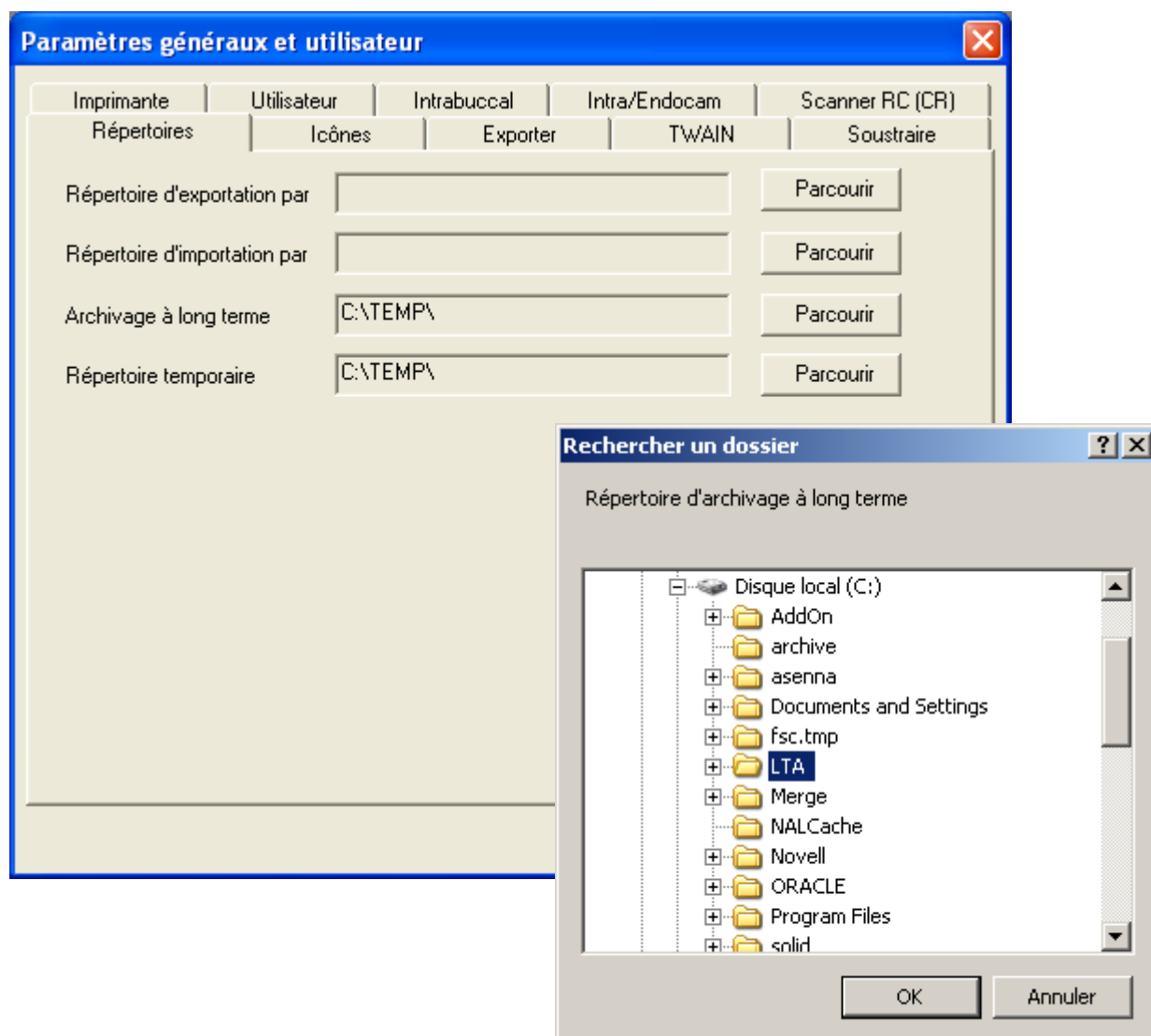

Indiquer la date demandée dans la fenêtre qui s'affiche et cliquer sur OK. **Toutes les images qui ont été prises avant la date indiquée sont transférées vers l'archive à long terme.** On peut également choisir de déplacer uniquement les images du patient actif en sélectionnant l'option correspondante et en cliquant sur OK.

Certaines images d'un patient peuvent se trouver dans l'archive à long terme alors que d'autres sont dans la base de données active. On peut prendre de nouvelles images même lorsque certaines des images se trouvent dans l'archive à long terme. On peut restaurer les images une à une. (Avec les versions du logiciel Dimaxis antérieures à la version 4.0.0, toutes les images devaient se trouver soit dans l'archive à long terme soit dans la base de données active.)

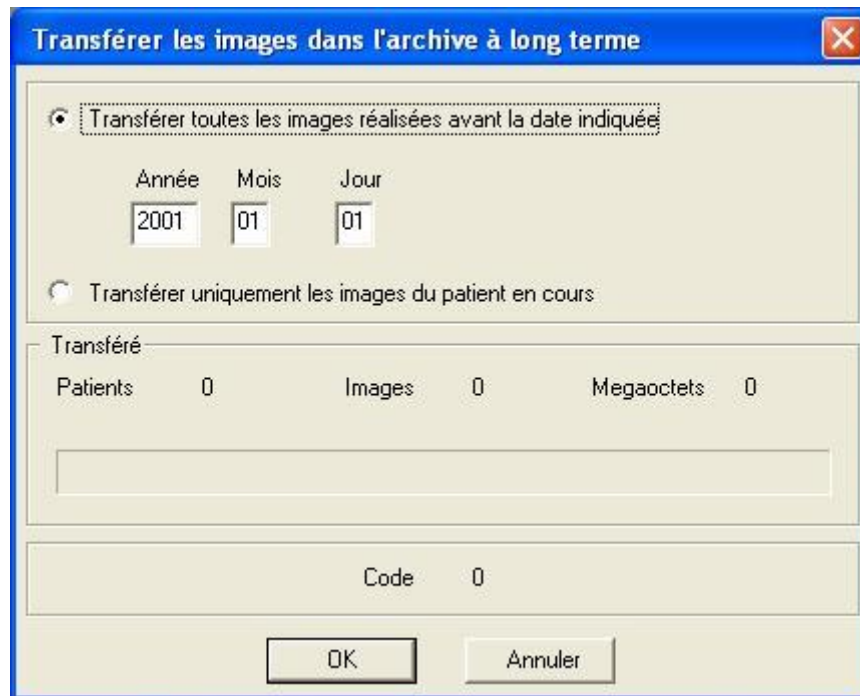

REMARQUE Il est nécessaire d'effectuer une sauvegarde de la base de données Solid après avoir transféré des images vers l'archive à long terme.

Si le support d'archivage est protégé en écriture ou n'est pas installé, le message ci-dessous s'affiche.




Si le programme ne trouve aucun patient ou s'il n'y a pas d'images pour le patient actif, le message ci-dessous s'affiche. Cliquer sur **OK** pour revenir à la fenêtre **Transférer les images dans l'archive à long terme**.



DÉPLACEMENT D'IMAGES VERS L'ARCHIVE À LONG TERME

Si le programme trouve des patients répondant au critère, le message ci-dessous s'affiche. Continuer en cliquant sur *Oui* ou annuler l'action en cliquant sur *Non*.

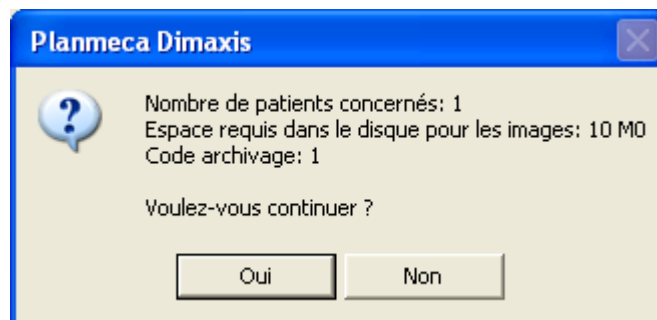

Après le déplacement des images, le message ci-dessous s'affiche. Cliquer sur *OK*.



REMARQUE IMPORTANT: Si l'on utilise un support amovible comme archive à long terme, indiquer le numéro d'identification de l'archive sur l'étiquette du support.

REMARQUE Le support amovible n'est pas sûr, il faut donc également effectuer une sauvegarde du support amovible pour garantir la sécurité des données.


11 MODÈLES D'EXAMENS (Optionnel aux Etats-Unis uniquement)

11.1 Création/Edition de modèles d'examens


REMARQUE Il est possible d'empêcher les utilisateurs de modifier les modèles d'examens. Voir page 127 pour plus de détails.

On peut créer de nouveaux modèles et modifier les modèles existants grâce à l'éditeur de modèle d'examen.


Le menu déroulant **Examen** est visible lorsqu'aucune image n'est ouverte. On peut également ouvrir ce menu avant de sélectionner un patient.

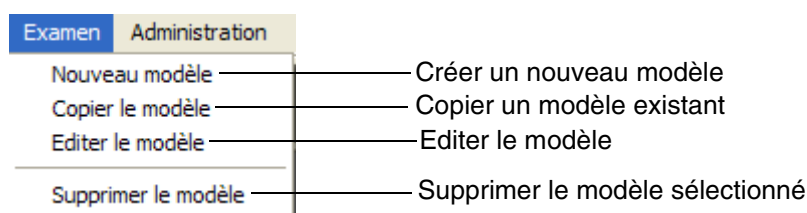

Pour créer un nouveau modèle, sélectionner **Nouveau modèle** dans le menu déroulant **Examen**. La fenêtre **Nouveau modèle d'examen** s'affiche. Indiquer le nom du nouvel examen et cliquer sur **Créer**. La fenêtre **Editeur de modèles d'examen** illustrée à la page 163 s'affiche.

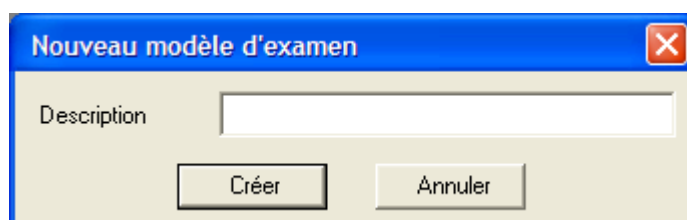


Pour copier un modèle existant, sélectionner **Copier le modèle**. La fenêtre **Sélectionner le modèle d'examen à copier** s'affiche. Sélectionner le modèle de son choix et cliquer sur **OK**.

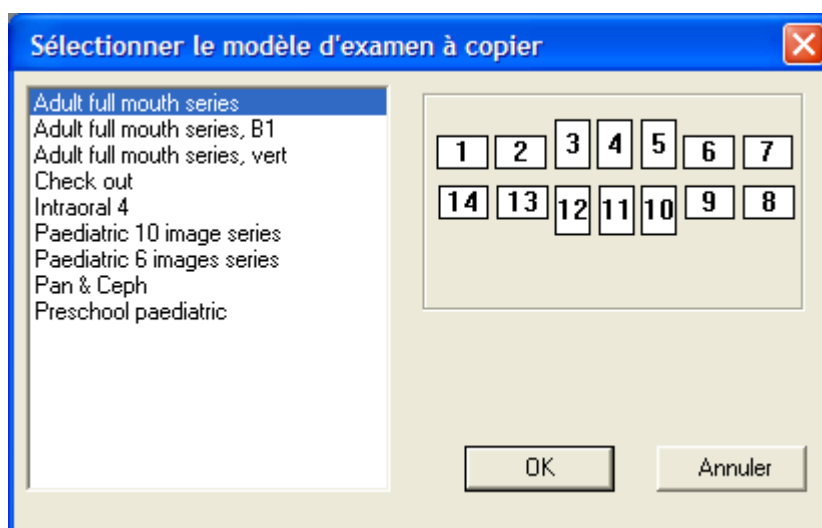

MODÈLES D'EXAMENS (Optionnel aux Etats-Unis uniquement)


La fenêtre **Nouveau modèle d'examen** s'affiche. Indiquer le nom du nouvel examen et cliquer sur **Créer**.

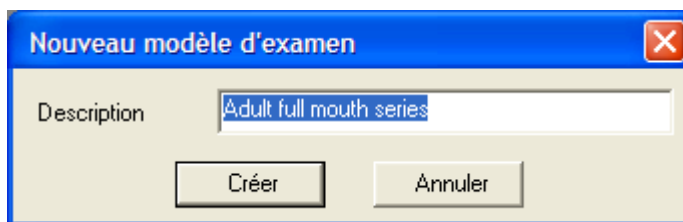


Si l'on a omis de modifier le nom du modèle, le message ci-dessous s'affiche.



Pour modifier un modèle existant, sélectionner **Editer le modèle** dans le menu déroulant **Examen**. La fenêtre **Sélectionner un modèle d'examen** s'affiche. Sélectionner le modèle de son choix et cliquer sur **OK**.

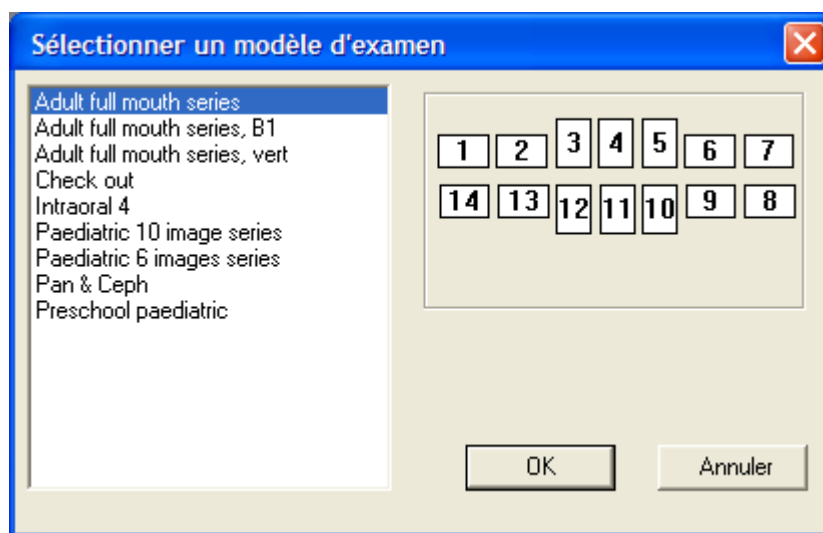


La fenêtre **Editeur de modèles d'examen** s'affiche.

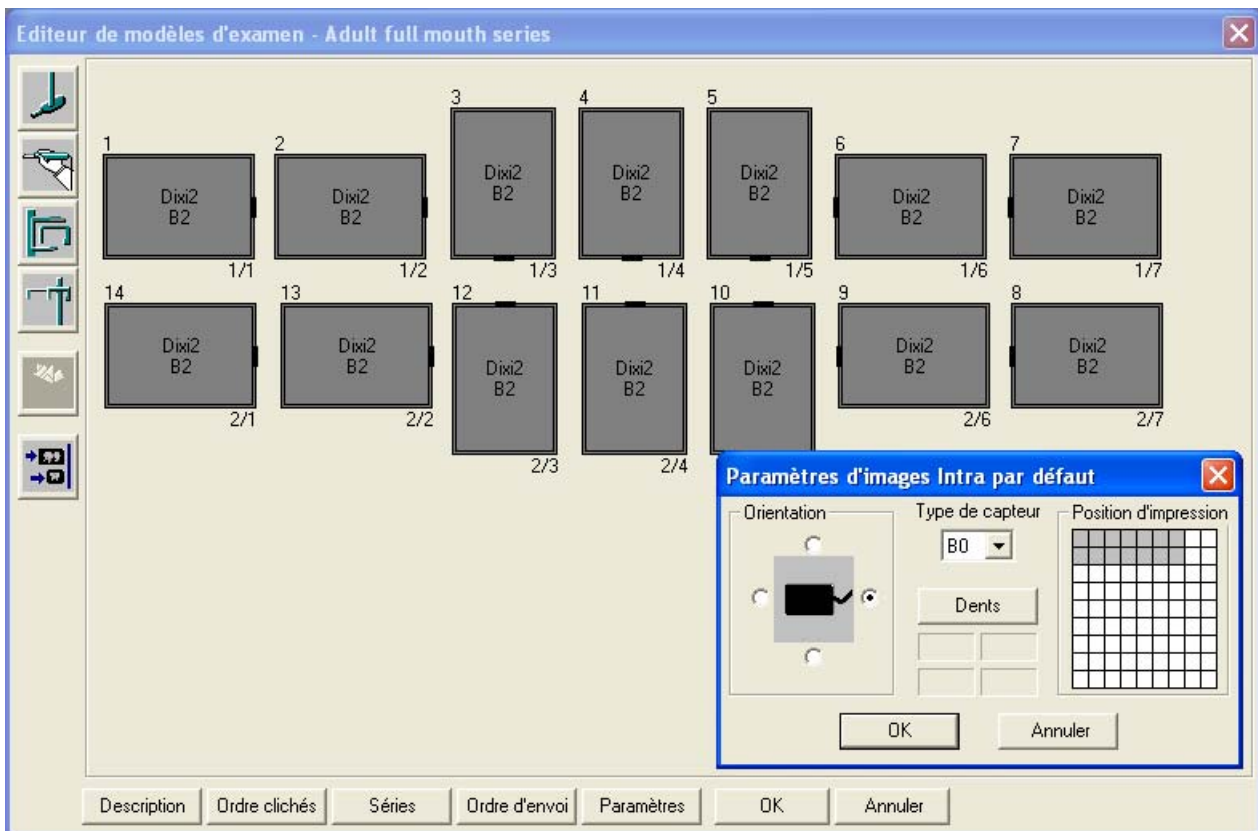

Modifier le modèle conformément aux instructions figurant dans cette section et cliquer sur **OK** pour enregistrer et fermer la fenêtre lorsque le modèle est terminé.


11.1.1 Ajout de miniatures des images

Sélectionner le type d'image en cliquant sur l'icône correspondante du côté gauche de la fenêtre. Lorsque l'on sélectionne une image Intracam, panoramique ou céphalométrique, une miniature de cette image apparaît sur le modèle. Amener la miniature à l'emplacement souhaité avant de sélectionner une nouvelle image.

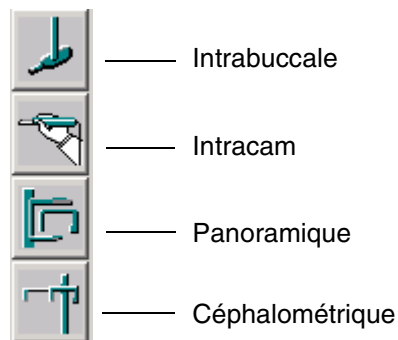


MODÈLES D'EXAMENS (Optionnel aux Etats-Unis uniquement)

Lorsque l'on sélectionne une image intrabuccale, la fenêtre **Paramètres d'images Intra par défaut** s'affiche. Sélectionner l'orientation du capteur et le type de capteur.

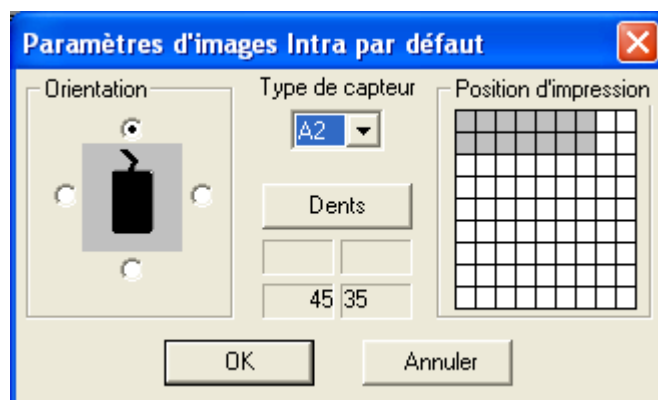


Sélectionner la position d'impression de l'image à l'aide de la grille de la fenêtre **Paramètres d'images Intra par défaut**. La position d'impression détermine la position de l'image par rapport aux autres images lors de l'impression de plusieurs images sur une même page. Se reporter à la section 11.1.8 "Modification des paramètres des miniatures d'images" à la page 169 pour plus d'informations sur la sélection de la position d'impression.

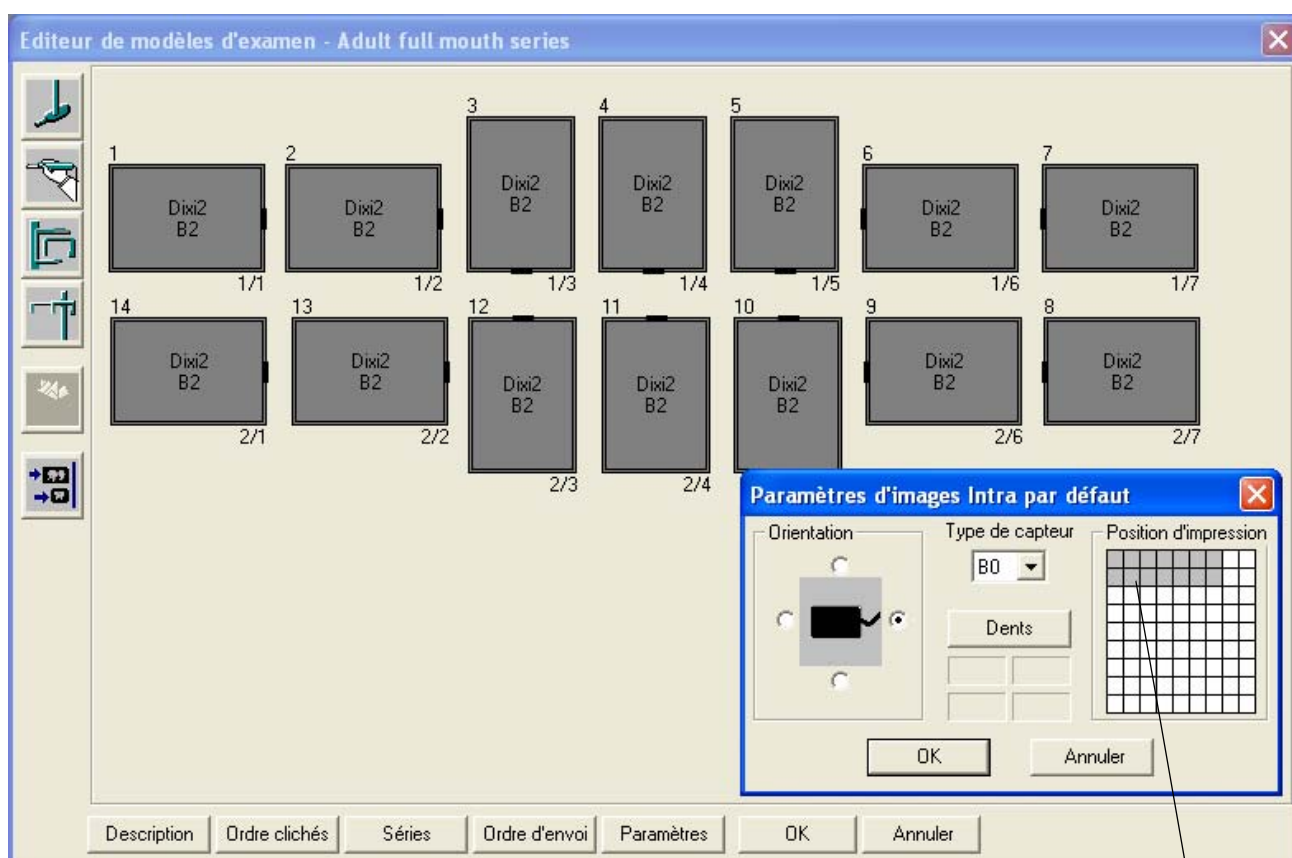

Position
d'impression

Cliquer sur le bouton *Dents* et sélectionner les dents à exposer dans la fenêtre qui s'affiche. Revenir à la fenêtre **Paramètres d'images Intra par défaut** en cliquant sur *OK*.

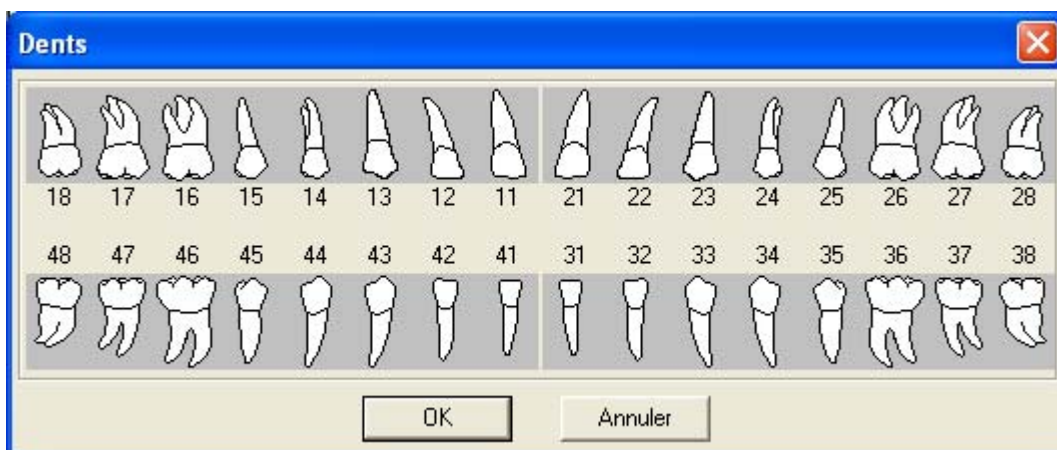

Cliquer sur *OK* dans la fenêtre **Paramètres d'images Intra par défaut** pour faire apparaître la miniature de l'image dans le modèle. Amener la miniature à l'emplacement souhaité avant de sélectionner une nouvelle image.

11.1.2 Suppression des miniatures des images

On peut supprimer une miniature d'une image à l'aide du bouton *Supprimer* qui se trouve du côté gauche de la fenêtre après avoir activé cette miniature en cliquant dessus avec la souris. On notera qu'il n'est possible de supprimer qu'une seule miniature à la fois. On notera également qu'il n'est pas possible de supprimer une miniature d'un modèle qui est en cours d'utilisation pour un examen.



Supprimer


11.1.3 Alignement d'images

Pour aligner les images du modèle les unes par rapport aux autres, sélectionner les images de son choix. On peut sélectionner plusieurs images en maintenant la touche **Ctrl** enfoncée et en cliquant à l'aide du bouton gauche de la souris ou en cliquant simplement à l'aide du bouton droit de la souris. Cliquer sur le bouton *Aligner* pour afficher la fenêtre **Aligner les images**.




Aligner

On peut aligner les images soit sur une ligne horizontale (haut, bas, centre vertical), soit sur une ligne verticale (bord gauche, bord droit, centre horizontal).

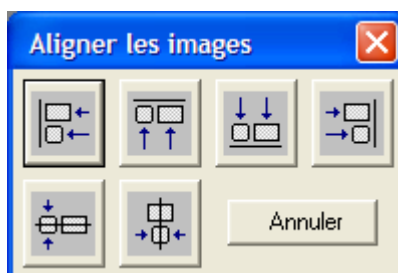


11.1.4 Modification de la description

Pour modifier la description (le nom) du modèle, cliquer sur le bouton *Description*. La fenêtre **Mise à jour description modèle d'examen** s'affiche.

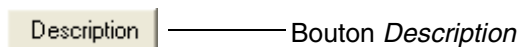


Introduire la description du modèle et cliquer sur *OK*.

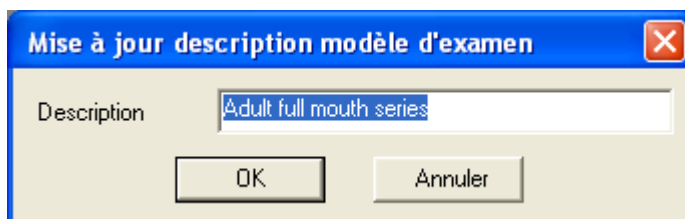

11.1.5 Sélection de l'ordre de prise des clichés



Pour sélectionner l'ordre de prise des clichés pour les images intrabuccales, cliquer sur le bouton *Ordre d'exportation*, puis cliquer sur les miniatures des images dans l'ordre souhaité pour la prise des clichés. Le numéro d'ordre de prise du cliché s'affiche dans le coin supérieur gauche de la miniature.

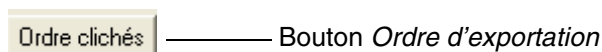

11.1.6 Sélection de séries d'images DICOM


Par défaut, les images en provenance de différentes modalités appartiennent à des séries différentes.

Cliquer sur le bouton *Séries* pour afficher la fenêtre **Sélection de la série**.

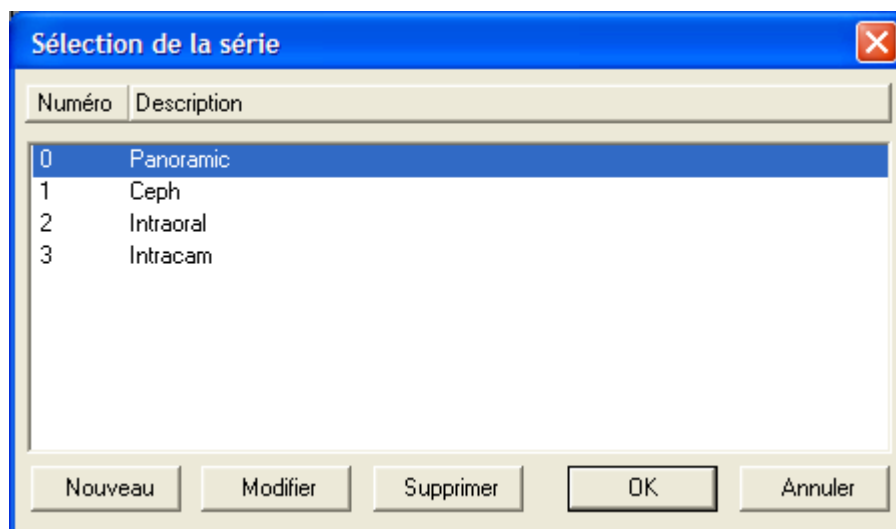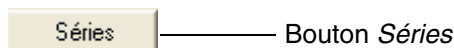


Pour assigner des miniatures d'images à une série d'images DICOM, sélectionner la série de son choix dans la liste et cliquer sur **OK**. On peut également ajouter de nouvelles séries à la liste, supprimer des séries existantes et modifier les descriptions des séries.


Le message ci-dessous s'affiche. Cliquer sur **OK** et cliquer sur les miniatures d'images de son choix. Le numéro de la série s'affiche dans le coin supérieur droit de la miniature. Pour réassigner la miniature à sa série par défaut, sélectionner la série par défaut de la miniature dans la liste (par exemple sélectionner **Panoramique** pour une miniature panoramique), puis cliquer sur la miniature.

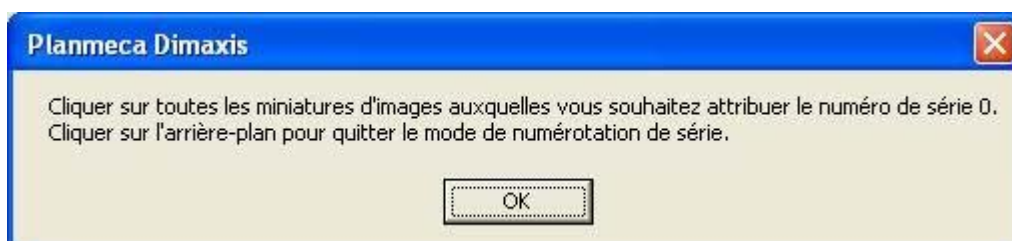


Pour ajouter une nouvelle série, cliquer sur le bouton **Nouveau**. La fenêtre **Nouvelle série** s'affiche. Indiquer le numéro de la série et sa description et cliquer sur **OK**. On notera que les numéros 0 à 9 sont réservés aux séries par défaut et ne peuvent pas être utilisés.

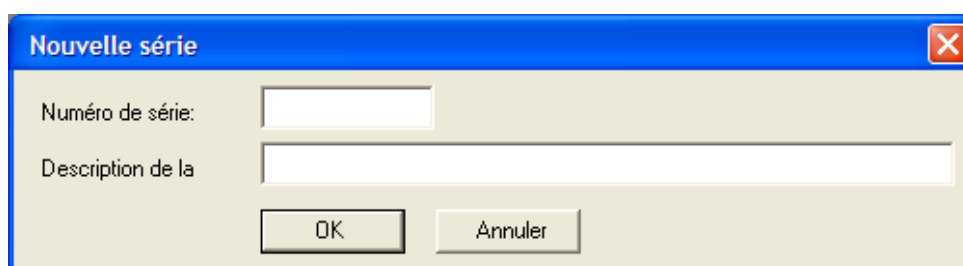


Pour modifier la description d'une série, sélectionner la série de son choix et cliquer sur le bouton **Modifier**. La fenêtre **Modification de la description de la série** s'affiche. Modifier la description et cliquer sur **OK**.

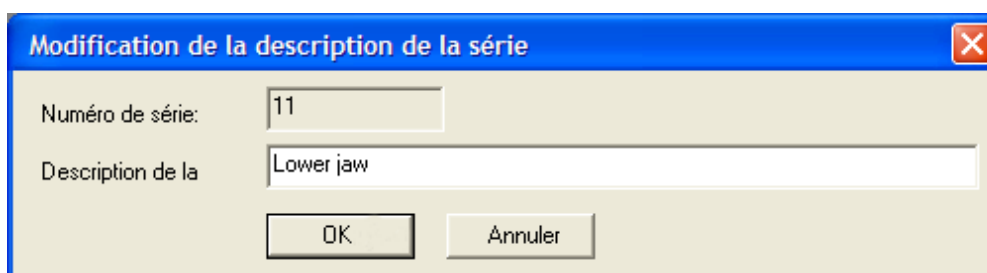


Si l'on tente de modifier les séries numéros 0 à 9, le message ci-dessous s'affiche. Cliquer sur **OK**.

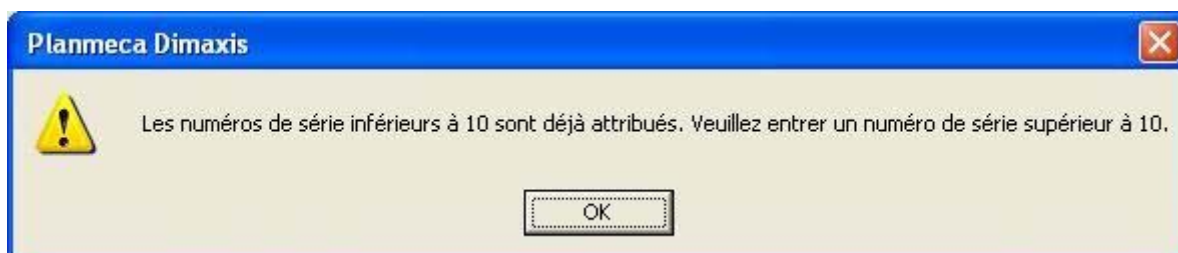


Si l'on a modifié le modèle et que l'on souhaite annuler les modifications, le message ci-dessous s'affiche.

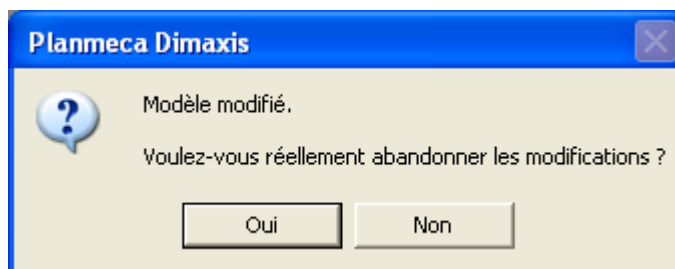

Pour supprimer une série, sélectionner la série de son choix et cliquer sur le bouton *Supprimer*. Le message ci-dessous s'affiche. Cliquer sur *Oui* pour supprimer la série ou cliquer sur *Non* pour revenir à la fenêtre **Sélection de la série**.

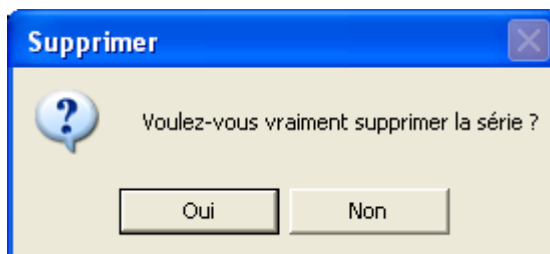


Si l'on tente de supprimer les séries numéros 0 à 9, le message ci-dessous s'affiche. Cliquer sur *OK*.

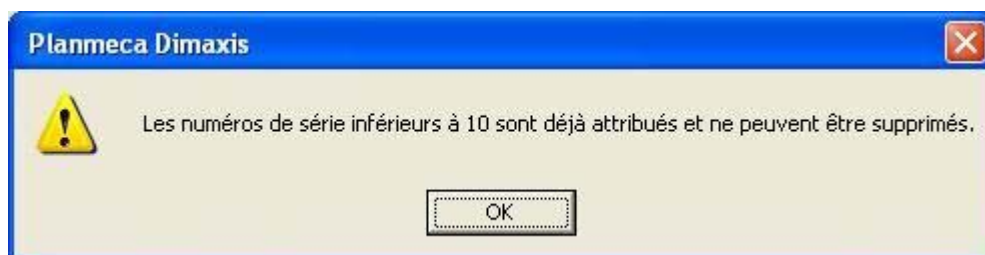

11.1.7 Modification de l'ordre d'envoi DICOM

Par défaut, les images sont transmises à l'application DICOM AE par ordre de saisie. Pour modifier l'ordre d'envoi, cliquer sur le bouton *Ordre d'envoi*, puis cliquer sur les miniatures des images dans l'ordre souhaité. Le numéro d'ordre d'envoi DICOM, accompagné du texte (DICOM), s'affiche sous la miniature.

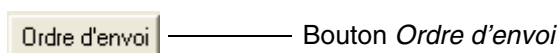


11.1.8 Modification des paramètres des miniatures d'images

Pour modifier les paramètres des miniatures d'images, sélectionner une miniature d'image et cliquer sur le bouton *Paramètres* ou cliquer deux fois sur une miniature d'image.

Paramètres

Bouton *Paramètres*

Les paramètres des images intrabuccales sont affichés dans la fenêtre **Paramètres d'images Intra par défaut**. Cette fenêtre permet de modifier le schéma dentaire, l'orientation du capteur et le type de capteur. On peut également sélectionner la position d'impression de l'image à l'aide de la grille de cette fenêtre. La position d'impression détermine la position de l'image par rapport aux autres images lors de l'impression de plusieurs images sur une même page. La position de l'image active est indiquée par un carré noir et les positions sélectionnées pour les autres images par des carrés gris. La position d'impression est également indiquée par des numéros de rangée et de colonne dans le coin inférieur droit de la miniature.

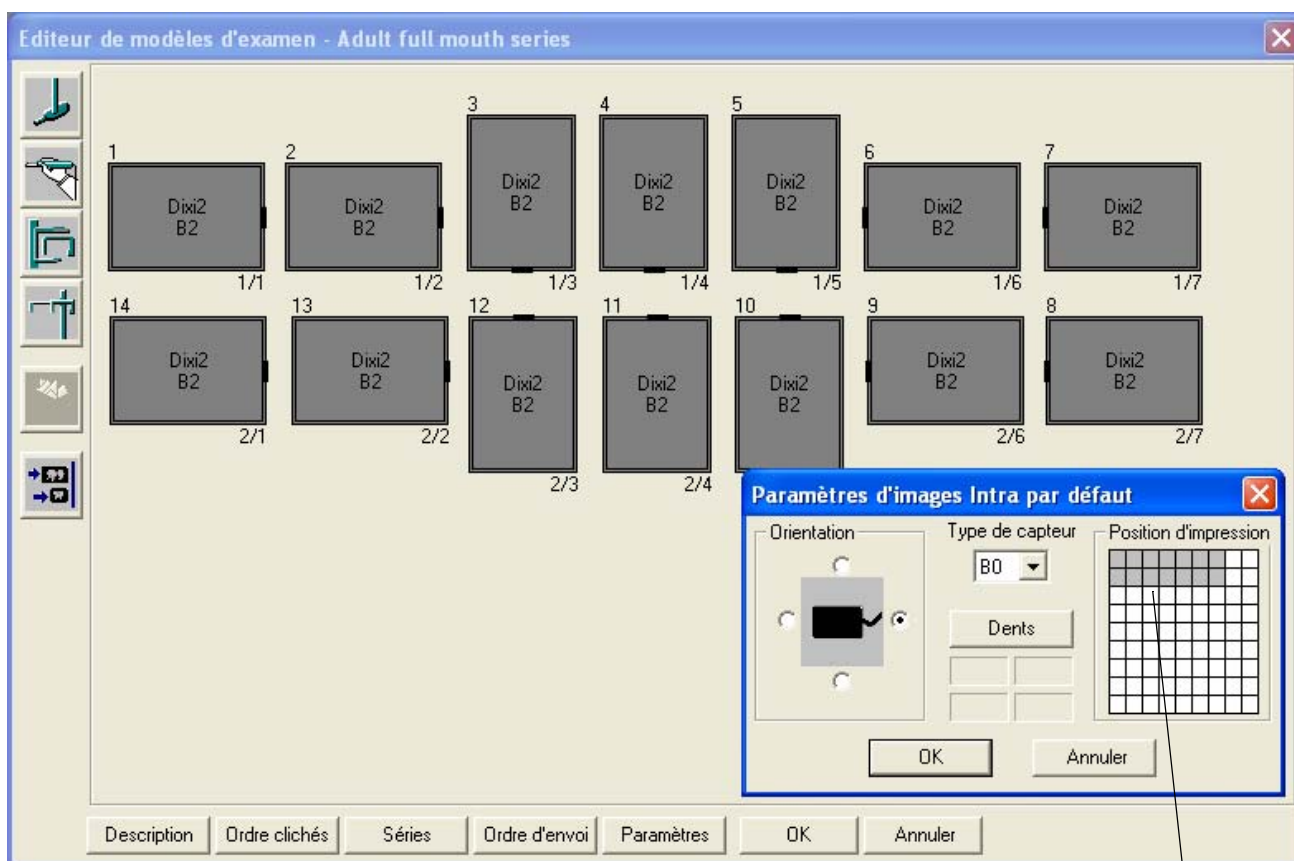


Position d'impression

REMARQUE On notera que l'ordre d'impression sélectionné est utilisé uniquement si la position d'impression a été spécifiée pour toutes les images à imprimer.

MODÈLES D'EXAMENS (Optionnel aux Etats-Unis uniquement)


Si l'on sélectionne une miniature d'une image panoramique, céphalométrique ou Intracam et que l'on clique sur le bouton *Paramètres*, la fenêtre **Position d'impression** s'affiche. On peut sélectionner la position d'impression de l'image à l'aide de la grille de cette fenêtre.

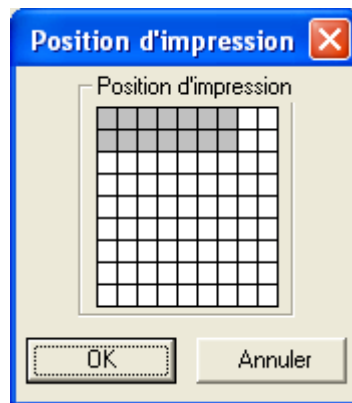


REMARQUE On notera que l'ordre d'impression sélectionné est utilisé uniquement si la position d'impression a été spécifiée pour toutes les images à imprimer.

11.2 Suppression d'un modèle d'examen


Pour supprimer un modèle d'examen, sélectionner **Supprimer le modèle** dans le menu déroulant **Examen**. La fenêtre **Sélectionner le modèle d'examen à supprimer** s'affiche.

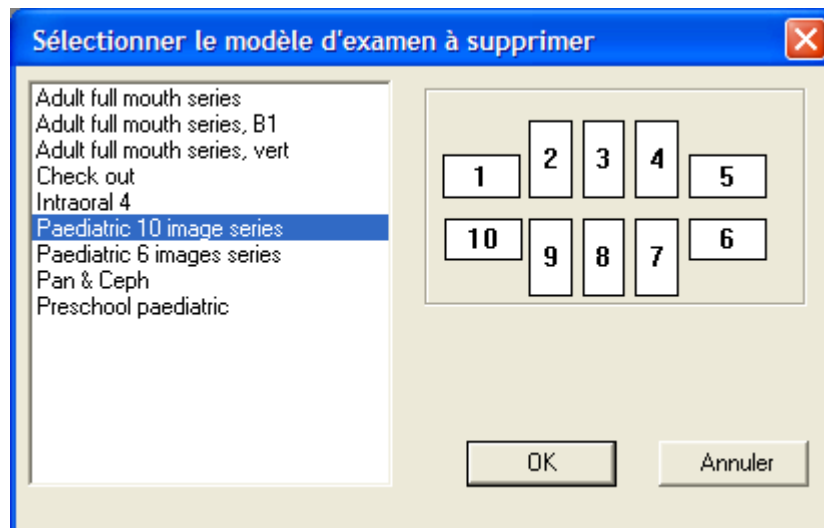

Sélectionner l'examen à supprimer et cliquer sur **OK**. Le message ci-dessous s'affiche. Cliquer sur **Oui** pour supprimer le modèle ou sur **Non** pour annuler l'action.

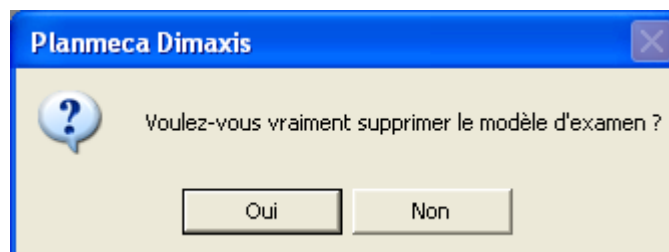

Si l'on tente de supprimer un modèle qui est utilisé pour un examen, le message ci-dessous s'affiche.

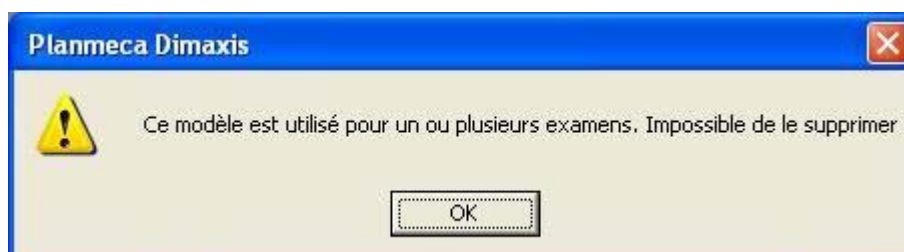

ANNEXE A: PMBRIDGE

PmBridge est une manière simple pour les éditeurs de logiciels d'établir des passerelles entre leur logiciel de gestion de clientèle et Planmeca Dimaxis.

Dans ce modèle d'intégration, Dimaxis prend en charge toutes les opérations de manipulation et d'affichage d'images, ainsi que les interactions avec l'utilisateur en rapport avec ces opérations. Toutes les opérations et interactions qui concernent les données des patients et la gestion du cabinet (y compris la sélection des patients) seront traitées par le logiciel de gestion de clientèle. Ce système permet aux éditeurs de logiciels de gestion de clientèle de créer facilement et rapidement un lien ou une passerelle de ce type avec le logiciel Dimaxis.

La documentation PmBridge à l'usage des développeurs de logiciels se trouve sur le CD Dimaxis (dans le dossier "Support").

ANNEXE B: VDDS

La passerelle VDDS Bridge permet une intégration totale avec la plupart des logiciels de gestion de clientèle allemands. L'application d'interface VDDS Bridge est disponible sur les CD d'installation Planmeca Dimaxis Pro. Voir le manuel d'installation Dimaxis Pro/Classic pour plus de détails.

ANNEXE C: PASSERELLE DICOM PLANMECA (version Pro uniquement)

La passerelle DICOM Planmeca est un programme qui automatise certaines fonctions DICOM. Le programme d'installation Dimaxis installe le programme par défaut en tant que service. Un fichier journal "PmDcmGw_log.txt" est créé dans le dossier du programme Dimaxis lors du démarrage du service. La passerelle peut être configurée au moyen du programme "DICOM Gateway Configure" pour envoyer automatiquement les nouvelles images à l'archive DICOM ou pour copier des listes de travail dans la base de données Dimaxis.

The screenshot shows the "Planmeca DICOM Gateway Configuration" dialog box with the following settings:


- Storage:**
 - ☒ Store new images automatically to DICOM Archive
 - Interval between checking for new images (Minutes): 5
 - Delay before storing new images (Minutes): 5
- Delete Stored (Sent) Images:**
 - ☐ Delete sent images from local database
 - Delay before deleting images from local database (Days): 14
- Modality Worklist:**
 - ☐ Cache Modality Worklist to local database
 - ☐ Delete old Worklist entries from local database
 - ☐ Use configured Application Entity Titles in Worklist Query
 - Interval between checking for new Worklist entries (Minutes): 5
- Worklist Query by Modality:**
 - ☐ IO (Intraoral) ☐ PX (Panoramic) ☐ DX (Cephalostatic)
- Image Prefetching:**
 - ☐ Prefetch images (based on Worklist and Query/Retrieve)
 - Interval between checking for images to be prefetched (Minutes): 60
- Email:**
 - ☒ Send Email if an error occurs
 - Mail Server IP or Name Address: mail.company.com
 - Recipient Mail Address (Req.): administrator@company.com
 - Recipient Name (Required): Administrator
- Database:**
 - ☒ Solid ☐ SQL Server ☐ Other

Buttons: OK, Cancel

ANNEXE D: NAME CONVERTER

L'application NameConverter.exe est un nouvel utilitaire de conversion des noms de patients dans un format unifié (première lettre en majuscules ou tout en majuscules).

Lorsque des données patient sont reçues en provenance de différentes sources (par exemple différents systèmes de gestion de clientèle), les noms risquent d'être formatés de différentes manières dans la base de données.

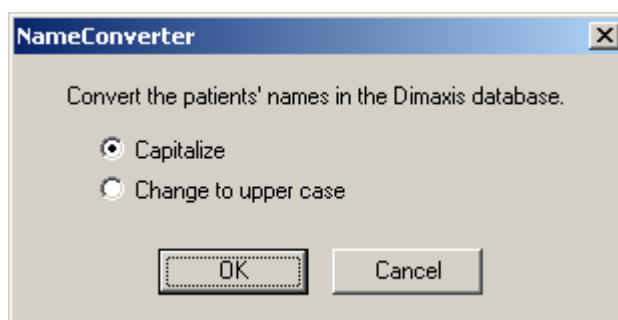

ANNEXE E: LOGICIEL DE TEST POUR SOLID

Le logiciel TestSolid.exe est un nouvel utilitaire de vérification du bon état de la base de données Solid. Cette application ferme la base de données, exécute la commande "solfe -x textblocks" et affiche le rapport de test dans une boîte de dialogue. Cette vérification doit être effectuée régulièrement.

Si la fonction *Clear the log file* (*Effacer le fichier journal*) est activée, le fichier est enregistré sous un autre nom et le rapport de cette vérification ne sera plus réaffiché ultérieurement.

Aucune instance de Dimaxis ne peut être ouverte lors de l'exécution de ce programme.



www.planmeca.com